

Sensori InLab®



Sensori InLab®

pH

ORP

Conducibilità

Concentrazione di ioni

Ossigeno disciolto

Massima accuratezza

Sensori affidabili per risultati sicuri

METTLER TOLEDO

Sensori InLab® per le vostre applicazioni

La produzione di sensori di alta qualità con prestazioni straordinarie non richiede solo abilità tecniche ed esperienza, ma anche una profonda comprensione delle diverse applicazioni e dei requisiti specifici del cliente. Grazie a tutte le nozioni raccolte negli ultimi decenni, oggi METTLER TOLEDO può offrire un portafoglio completo di sensori in grado di supportare qualsiasi applicazione.

Prestazioni affidabili



Le misure devono essere rapide, accurate e riproducibili. Tecnologie comprovate e affidabili abbinate a processi di produzione all'avanguardia garantiscono le massime prestazioni per ogni sensore InLab, fornendo risultati affidabili in qualsiasi momento.

Facilità d'uso




Tutti i sensori InLab sono forniti già pronti all'uso. Assieme al sensore riceverete tutto ciò di cui avete bisogno per la vostra misura. I sensori specifici per applicazione, il riconoscimento automatico dei sensori con Intelligent Sensor Management (ISM) e il cappuccio umettante salvagoccia semplificheranno le vostre operazioni.

Progettati per durare nel tempo



Il design innovativo e i materiali di alta qualità rendono i sensori InLab molto resistenti anche nelle applicazioni più difficili. Il portafoglio ad alta versatilità garantisce un sensore su misura per ogni applicazione, una combinazione che estende notevolmente la durata dei prodotti.



|| Per noi la qualità è molto più di una promessa. Per garantirla, testiamo ogni singolo sensore. Solo i sensori idonei ricevono un certificato di qualità individuale e sono pronti per la spedizione. ||

L'accuratezza è una nostra tradizione dal 1948.

Tecnologia dei sensori InLab®

Affidabilità comprovata

Ogni applicazione richiede un tipo di sensore elettrochimico diverso. Ecco perché solo la giusta combinazione di materiali di alta qualità, tecnologie comprovate e affidabili e forma della membrana rendono un sensore perfettamente adatto a un'applicazione specifica.

Membrana di vetro

La membrana è la parte del sensore per la misura del pH. La sua forma e la composizione del vetro sono ottimizzate per garantire i migliori risultati per le diverse applicazioni.

HA: vetro ad alto contenuto alcalino con basso errore alcalino, per valori di pH alti ed elevate temperature.

U: vetro universale per applicazioni standard e piccole membrane.

A41: vetro molto robusto, particolarmente resistente a prodotti chimici difficili e adatto ad alte temperature.

LoT: vetro per basse temperature con bassa resistenza. Adatto a campioni a bassa temperatura o basse concentrazioni di ioni.

HF: vetro resistente all'acido fluoridrico, per campioni con una concentrazione di acido fino a 1 g/L.

Cappuccio umettante

Pronto all'uso in qualsiasi momento, facile da usare e salvagocchia. Perfetto per mantenere idratata la membrana in vetro.

Sonda di temperatura

Compensazione di temperatura inclusa. Il valore di pH dipende dalla temperatura. Pertanto, essa dev'essere misurata per ogni valore di pH.

Diaframma

Il diaframma è il collegamento tra l'elettrolita di riferimento e il campione.

Diaframmi in ceramica


Per tutte le applicazioni.

Diaframmi smerigliati

Per risultati rapidi, ideali con campioni sporchi.

Diaframmi aperti

Per una facile pulizia e una misura senza ostruzioni.

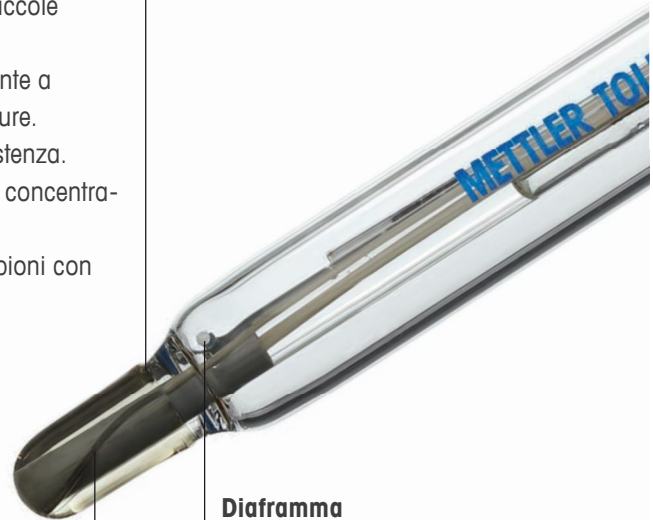

SafeLock™

Per sensori ricaricabili: facile da aprire per una misura, chiusura perfetta per conservazione e trasporto.

Elettrolita di riferimento

Gli elettroliti liquidi sono generalmente utilizzati per applicazioni generali e forniscono risultati rapidi. Gli elettroliti polimerici o in gel richiedono una manutenzione minima.

Materiale shaft

La robustezza del sensore dipende dal materiale dello shaft, ecco perché bisogna scegliere quello giusto. Il vetro è molto resistente agli agenti chimici e consente misure ad alte temperature. Se invece occorre resistenza meccanica, è la plastica il materiale più adatto.

Sistema di riferimento

Fornisce un potenziale stabile con il quale confrontare il potenziale dipendente dal pH.

ARGENTHAL™ con trappola di ioni argento

Per elettrolita senza ioni argento. Nessuna ostruzione del diaframma dovuta a campioni contenenti solfuro o proteine oppure soluzioni tampone TRIS.

SteadyForce™

L'elettrolita pressurizzato (3 bar) garantisce un corretto flusso di elettroliti anche in campioni viscosi e garantisce risultati altamente riproducibili.

ISM

Intelligent Sensor Management

Ogni sensore con ISM offre dati sicuri e prestazioni affidabili.

Efficiente e sicuro

I dati di taratura e l'ID del sensore sono trasferiti automaticamente al misuratore.

Sempre aggiornato

I nuovi dati di taratura sono memorizzati nel sensore.

Certificato di backup garantito

La taratura di fabbrica iniziale è memorizzata nel sensore.

Cronologia delle tarature

Le ultime cinque tarature sono memorizzate nel sensore.

Facile monitoraggio

La temperatura massima a cui il sensore è stato esposto è monitorata automaticamente.

Per saperne di più sul portafoglio di sensori InLab e sui vari aspetti tecnologici:

► www.mt.com/electrode-guide

Il tempo è prezioso

Sensori per risultati rapidi

Gli elettrodi a riempimento liquido sono strumenti essenziali per garantire misure di pH affidabili in laboratorio. Per matrici di campioni più complesse, come le emulsioni o i mezzi biologici, si consigliano elettrodi con diaframma smerigliato.



Routine

Routine Pro

Routine Pro-ISM

Max Pro-ISM

Science

Science Pro-ISM

Versatile Pro

L'elettroplaccatura è una tecnica molto conosciuta, utilizzata per placcare i metalli e aggiungere le proprietà desiderate. In questo processo sono necessari acidi e basi forti e il robusto vetro HA del Routine Pro-ISM InLab è l'ideale: copre l'intero intervallo di pH con un errore alcalino estremamente basso.



pH

InLab®	Routine	Routine Pro	Routine Pro-ISM	Max Pro-ISM	Science	Science Pro-ISM	Versatile Pro
Codice	51343050	51343054	51344055	30248830	51343070	51344072	51343031
Intervallo di pH	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 12	Da 0 a 12	Da 0 a 14
Sonda di temperatura		NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ		NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ
Tipo di membrana in vetro	HA	HA	HA	HA	A41	A41	U
Resistenza della membrana (25 °C)	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 250 MΩ
Tipo di diaframma	Ceramica	Ceramica	Ceramica	Manicotto in vetro non mobile	Manicotto in vetro mobile	Manicotto in vetro mobile	Ceramica
Ponte elettrolitico						3 mol/L KCl	
Cavo e connessioni	S7	MultiPin™	MultiPin™	MultiPin™	S7	MultiPin™	cavo da 1,2 m; BNC / RCA
Materiale shaft	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro	Polisulfone
Lunghezza dello shaft	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	170 mm	120 mm
InLab® Routine Pt1000	Il sensore InLab® Routine Pro è disponibile anche con una sonda di temperatura Pt1000: Codice 51343056						
Specifiche comuni	Tipo di elettrodo: combinazione pH / sistema di riferimento: ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺ / elettrolita di riferimento: 3 mol/L KCl Intervallo di temperatura: da 0 a 100 °C / diametro dello shaft: 12 mm / Conservazione: Soluzione di conservazione InLab® (Codice 3011142)						

Sempre pronti

Sensori senza manutenzione

Ideali per attività impegnative. Lo shaft PEEK altamente resistente e il diaframma aperto rendono il sensore InLab Expert robusto e facile da maneggiare. Il suo elettrolita solido di riferimento non richiede ricarica ed è sempre pronto all'uso. Se si desiderano le massime prestazioni, il sensore InLab Power è la prima scelta.



Expert

Expert Pro-ISM

Expert-DIN

Power

Power Pro-ISM

Easy

Il sensore InLab Power-Pro-ISM è semplicemente geniale. Il sistema di riferimento SteadyForce™ è in sovrappressione. Ciò garantisce la massima riproducibilità delle misure di pH anche in campioni impegnativi come le dispersioni polimeriche utilizzate nella produzione della plastica.



pH

InLab®	Expert	Expert Pro-ISM	Expert DIN	Power	Power Pro-ISM	Easy
Codice	51343100	30014096	51343103	51343110	51344211	51343010
Codice versione non ISM		51343101				
Intervallo di pH	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 12	Da 0 a 12	Da 0 a 14
Intervallo di temperatura	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 130 °C	Da 0 a 130 °C	Da 0 a 80 °C
Sonda di temperatura		NTC 30 kΩ	Pt1000		NTC 30 kΩ	
Tipo di membrana in vetro	U	U	U	A41	A41	U
Resistenza della membrana (25 °C)	< 250 MΩ	< 250 MΩ	< 250 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 250 MΩ
Tipo di diaframma	Diaframmi aperti	Diaframmi aperti	Diaframmi aperti	Ceramica	Ceramica	Ceramica
Sistema di riferimento	ARGENTHAL™ con trappola Ag+	ARGENTHAL™ con trappola Ag+	ARGENTHAL™ con trappola Ag+	SteadyForce™	SteadyForce™	ARGENTHAL™ con trappola Ag+
Elettrolita di riferimento	Polimero XEROLYT®	Polimero XEROLYT®	Polimero XEROLYT®	Gel DPA	Gel DPA	Gel
Cavo e connessioni	S7	Cavo da 1,2 m; BNC / RCA (Cinch)	Cavo da 1,2 m; DIN 19262 / 4 mm	S7	MultiPin™	S7
Materiale shaft	PEEK	PEEK	PEEK	Vetro	Vetro	Polisulfone
Lunghezza dello shaft	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	170 mm	120 mm
Diámetro dello shaft	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
InLab® Expert NTC30	Il sensore InLab® Expert Pro è disponibile anche con un connettore MultiPin™: Codice 51343104					
InLab® Expert Pt1000	Il sensore InLab® Expert Pro è disponibile anche con un connettore MultiPin™ e una sonda di temperatura Pt1000: Codice 51343105					
InLab® Easy BNC	Il sensore InLab® Easy è disponibile anche con un cavo da 1,2 m (BNC): Codice 51343011					
Specifiche comuni	Tipo di elettrodo: combinazione pH / diametro shaft 12 mm / conservazione: Soluzione di conservazione InLab® (Codice 30111142)					

Niente è impossibile Sensori per volumi ridotti

L'analisi di un campione è una sfida tanto più complessa quanto più il materiale è raro o limitato. Lo shaft stretto dei sensori di pH si adatta a quasi tutti i contenitori e consente di misurare il volume dei campioni a bassi intervalli μL .



Il sensore InLab Ultra-Micro-ISM consente misure di pH di campioni con volume fino a 15 µL. L'ideale per i laboratori che lavorano con campioni costosi e preziosi.



pH

InLab®	Ultra-Micro-ISM	Micro	Micro Pro-ISM	Semi-Micro	Nano	NMR	Flex-Micro
Codice	30244732	51343160	51344163	51343165	30092990	59904572	51343164
Intervallo di pH	Da 1 a 11	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 12	Da 1 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14
Intervallo di temperatura	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 80 °C
Sonda di temperatura			NTC 30 kΩ				
Tipo di membrana in vetro	LoT	U	U	A41	U	U	U
Resistenza della membrana (25°C)	< 700 MΩ	< 1000 MΩ	< 300 MΩ	< 600 MΩ	< 1000 MΩ	< 1000 MΩ	< 600 MΩ
Tipo di diaframma	Ceramica	Ceramica	Ceramica	Diaframma aperto	Ceramica	Ceramica	PTFE poroso
Sistema di riferimento	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	Ag/AgCl	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺
Elettrolita di riferimento	FRISCOLYT-B®	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	Polimero XE-ROLYT®EXTRA	3 mol/L KCl AgCl saturo	3 mol/L KCl	Gel
Cavo e connessioni	MultiPin™	S7	MultiPin™	S7	Cavo da 1,0 m, BNC	S7	Cavo da 1,0 m, BNC
Materiale shaft	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro	Acciaio	Vetro	Resina epossidica
Lunghezza dello shaft	40 mm	60 mm	130 mm	100 mm	30 mm	200 mm	180 mm
Diametro dello shaft	3 mm	3 mm	5 mm	6 mm	1,7 mm	3 mm	6 mm
Volume minimo dei campioni	15 µL	45 µL	100 µL	100 µL	5 µL	45 µL	500 µL
Specifiche comuni	Tipo di elettrodo: combinazione pH / conservazione: Soluzione di conservazione InLab® (Codice 30111142)						

Accetta la sfida

Sensori per campioni solidi e viscosi

La misura dei campioni solidi o semi-solidi è impegnativa e richiede sensori robusti, che garantiscono un adeguato flusso di elettroliti e sono semplici da pulire. I sensori con queste proprietà sono spesso richiesti per applicazioni alimentari o cosmetiche.



Il valore di pH è un indicatore della maturazione della frutta. Grazie all'elettrodo per campioni solidi InLab Solids, è possibile misurare dove conta: direttamente nella frutta. Le fragole hanno un sapore migliore con un pH di 3.5.



pH

InLab®	Solids	Solids Pro-ISM	Viscous	Viscous Pro-ISM	Dairy	Surface	Surface Pro-ISM
Codice	51343153	51344155	51343150	51343151	59904591	51343157	30249570
Intervallo di pH	Da 1 a 11	Da 1 a 11	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 12	Da 1 a 11	Da 1 a 11
Intervallo di temperatura	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 130 °C	Da 0 a 130 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 50 °C	Da 0 a 50 °C
Sonda di temperatura		NTC 30 kΩ		NTC 30 kΩ			NTC 30 kΩ
Tipo di membrana in vetro	LoT	LoT	HA	HA	A41	Lotto	Lotto
Resistenza della membrana (25 °C)	< 250 MΩ	< 250 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 800 MΩ	< 800 MΩ
Tipo di diaframma	Diaframma aperto	Diaframma aperto	Ceramica	Ceramica	Ceramica tripla	Anello ceramico	Anello ceramico
Sistema di riferimento	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	SteadyForce™	SteadyForce™	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺
Elettrolita di riferimento	Polimero XE-ROLYT®EXTRA	Polimero XE-ROLYT®EXTRA	FRYSCOLYT-C®	FRYSCOLYT-C®	FRYSCOLYT-B®	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl
Cavo e connessioni	S7	MultiPin™	S7	MultiPin™	S7	S7	MultiPin™
Lunghezza dello shaft	25 mm	25 mm	40 mm	40 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Diametro dello shaft	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Specifiche comuni	Tipo di elettrodo: combinazione pH / materiale shaft: Vetro / conservazione: Soluzione di conservazione InLab® (Codice 30111142)						

Prestazioni eccezionali

Basse temperature e forza ionica

Una speciale membrana in vetro e una grande superficie sono caratteristiche tipiche per sensori adatti alla misura di campioni a basse temperature o con basse concentrazioni di ioni. Una delle principali aree di applicazione è la misura dell'acqua pura a vari livelli di purezza.



Pure

Pure Pro-ISM

Cool

Cool Pro-ISM

Water Go

Hydrofluoric

L'acqua pura è un ingrediente fondamentale in ogni processo di produzione farmaceutico. Il sensore InLab Pure Pro-ISM si distingue per il suo elevato rendimento in campioni a forza ionica ridotta.



pH

InLab®	Pure	Pure Pro-ISM	Cool	Cool Pro-ISM	Water Go	Hydrofluoric
Codice	30248112	51344172	51343174	30247850	30253098	51343176
Intervallo di pH	Da 1 a 11	Da 1 a 11	Da 1 a 11	Da 1 a 11	Da 1 a 11	Da 1 a 11
Intervallo di temperatura	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 80 °C	Da -30 a 80 °C	Da -30 a 80 °C	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 100 °C
Sonda di temperatura		NTC 30 kΩ		NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	
Tipo di membrana in vetro	LoT	LoT	LoT	LoT	LoTto	HF
Resistenza della membrana (25 °C)	< 50 MΩ	< 50 MΩ	< 50 MΩ	< 50 MΩ	< 150 MΩ	< 100 MΩ
Tipo di diaframma	Manicotto in vetro non mobile	Manicotto in vetro non mobile	Manicotto in vetro non mobile	Manicotto in vetro non mobile	PTFE poroso	Ceramica
Elettrolita di riferimento	FRYSCOLYT-B®	3 mol/L KCl	FRYSCOLYT-B®	FRYSCOLYT-B®	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl
Ponte elettrolitico		1 mol KCl				
Cavo e connessioni	S7	MultiPin™	S7	MultiPin™	Cavo da 1,8 m; BNC / RCA (Cinch)	S7
Materiale shaft	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro	Polisulfone	Vetro
Lunghezza shaft	120 mm	170 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Specifiche comuni	Tipo di elettrodo: combinazione pH / sistema di riferimento: ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺ / diametro shaft: 12 mm Conservazione: Soluzione di conservazione InLab® (Codice 30111142)					

Per raggiungere nuove profondità Sensori lunghi

Maggiore è la profondità del contenitore, più difficile sarà raggiungere il campione. I sensori con shaft particolarmente lunghi e robusti sono necessari per un'adeguata misura di pH in qualsiasi contenitore profondo e stretto.



Reach 225

Reach Pro-225

Reach Pt1000-225

Reach 425

Reach Pro-425

Reach Pt1000-425

Semi-Micro-L

Dalla lavagna alle reazioni durante gli esperimenti, fino alla formulazione finale. I sensori InLab Reach extra-lunghi sono un valido aiuto durante l'intero processo di scale-up nella produzione pilota.



pH

InLab®	Reach 225	Reach Pro-225	Reach Pt1000-225	Reach 425	Reach Pro-425	Reach Pt1000-425	Semi-Micro-L
Codice	30244733	30248826	30248828	30248120	51343061	51343062	51343161
Intervallo di pH	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14	Da 0 a 14
Intervallo di temperatura	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C
Sonda di temperatura		NTC 30 kΩ	Pt1000		NTC 30 kΩ	Pt1000	
Tipo di membrana in vetro	HA	HA	HA	HA	HA	HA	U
Resistenza della membrana (25 °C)	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 600 MΩ	< 300 MΩ
Cavo e connessioni	S7	MultiPin™	MultiPin™	S7	MultiPin™	MultiPin™	S7
Lunghezza dello shaft	225 mm	225 mm	225 mm	425 mm	425 mm	425 mm	230 mm
Diametro dello shaft	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	6 mm
Specifiche comuni	Tipo di elettrodo: combinazione pH / Tipo di diaframma: Elettrolita di riferimento / ceramica: Materiale shaft 3 mol/L KCl: Vetro Conservazione: Soluzione di conservazione InLab® (Codice 30111142)						

Infinite possibilità

Sensori speciali

Le applicazioni speciali richiedono tecnologie speciali. Il sensore digitale InLab Smart Pro-ISM fornisce utili funzioni di diagnostica per una maggiore operatività del sistema. Il sensore InLab Flow, assieme alla Flow-through cell 611, è la soluzione migliore per le misure in linea.



Smart Pro-ISM



Flow



Flow-through cell 611

InLab®	Smart Pro-ISM	Flow	Flow-through cell 611
Codice	30027775	59902917	59904354
Tipo di elettrodo	Combinazione pH digitale	Combinazione pH	Flow-through cell per InLab® Flow
Intervallo di pH	Da 0 a 14	Da 0 a 11	
Intervallo di temperatura	Da 0 a 130 °C	Da 0 a 80 °C	
Sonda di temperatura	NTC 30 kΩ		
Tipo di membrana in vetro	HA	U	
Resistenza della membrana (25 °C)	< 600 MΩ	< 250 MΩ	
Tipo di diaframma	Ceramica	Doppia ceramica	
Sistema di riferimento	SteadyForce™	SteadyForce™	
Elettrolita di riferimento	Gel DPA	Gel DPA	
Cavo e connessioni	K8SD	S7	
Materiale shaft	Vetro	Vetro	
Lunghezza shaft	120 mm	40 mm	
Diametro dello shaft	12 mm	7 mm	
Specifiche comuni	Conservazione: Soluzione di conservazione InLab® (Codice 30111142)		

Un valido aiuto

Semicelle pH ed elettrodi di riferimento

In alcuni casi si consiglia di utilizzare una semicella di pH separata e un elettrodo di riferimento al posto di un sensore di pH combinato. Le semicelle di pH sono consigliate per le applicazioni nelle quali la durata dell'elettrodo pH sia significativamente inferiore a quella dell'elettrodo di riferimento, generalmente in campioni particolarmente difficili e aggressivi.



InLab®	Mono	Mono Plus	Reference	Reference Plus	Reference Flow
Codice	51343195	51343196	51343190	51343191	51343192
Tipo di elettrodo	Semicella pH	Semicella pH	Elettrodo di riferimento	Elettrodo di riferimento	Elettrodo di riferimento
Intervallo di pH	Da 0 a 14	Da 0 a 12			
Intervallo di temperatura	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 130 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 60 °C	Da 0 a 130 °C
Tipo di membrana in vetro	HA	A41 con pareti spesse			
Resistenza della membrana (25 °C)	< 600 MΩ	< 700 MΩ			
Tipo di diaframma			Ceramica	Manicotto PTFE mobile	Ceramica tripla
Sistema di riferimento			ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺	ARGENTHAL™ con trappola Ag ⁺
Elettrolita di riferimento			3 mol/L KCl	Gel	3 mol/L KCl
Ponte elettrolitico				3 mol/L KCl	
Conservazione	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl			
Specifiche comuni	Materiale shaft: Vetro / cavo e connessioni: Lunghezza dello shaft / S7: 120 mm / diametro dello shaft: 12 mm Conservazione: Soluzione di conservazione InLab® (Codice 3011142)				

Elevato potenziale

Elettrodi ORP

I sensori che misurano l'ORP (potenziale di riduzione dell'ossidazione) devono affrontare sfide simili a quelle dei sensori di pH. Pertanto, la corretta combinazione di sistema di riferimento, diaframma e forma sono fondamentali per misure ORP di successo.



Il pane soffice con una superficie croccante richiede un processo di cottura ben controllato. Il sensore InLab Redox consente ai produttori di controllare il processo di fermentazione dell'impasto dei prodotti da forno in modo semplice ed efficiente.



ORP

InLab®	Redox	Redox-L	Redox Flow	Redox Micro	Redox Au	Redox Ag
Codice	51343200	51343202	51343201	51343203	51343204	51343205
Tipo di elettrodo	ORP combinato	ORP combinato	ORP combinato	ORP combinato	ORP combinato	ORP combinato
Intervallo di temperatura	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C
Tipo di diaframma	Ceramica	Ceramica	Manicotto PTFE mobile	Ceramica	Ceramica	Ceramica
Elettrolita di riferimento	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	3 mol/L KNO ₃
Lunghezza dello shaft	120 mm	170 mm	120 mm	100 mm	120 mm	120 mm
Diametro dello shaft	12 mm	12 mm	12 mm	6 mm	12 mm	12 mm
Metallo	Anello in platino	Anello in platino	Anello in platino	Anello in platino	Anello in oro	Anello in argento
Conservazione	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl	1 mol/L KNO ₃
InLab® Redox Pt805	Semicella in metallo con anello in platino: Codice 59904377					
InLab® Redox Ag805	Semicella in metallo con anello in argento: Codice 59904391					
InLab® Redox Ag850	Semicella in metallo con punta in argento e shaft in polipropilene: Codice 59904409					
Specifiche comuni	Sistema di riferimento: ARGENTHAL™ con trappola in Ag ⁺ / Cavo e connessioni: S7 / Materiale shaft: Vetro					

Ioni in movimento

Sonde di conducibilità

I campioni di conducibilità InLab con celle a 2 poli garantiscono la massima accuratezza a bassi livelli di conducibilità. I campioni con celle a 4 poli mostrano un'ampia linearità su un ampio intervallo di conducibilità e sono ideali per campioni con una conducibilità da media a elevata.



L'acqua ultrapura è ampiamente utilizzata per la produzione di microcomponenti elettronici e semiconduttori. La sua purezza deve essere garantita e controllata regolarmente. Questa è esattamente l'applicazione per cui è stato realizzato il sensore InLab 741-ISM.



InLab®	731-ISM	741-ISM	Trace	710	720	751-4 mm	752-6mm
Codice	30014092	30014094	30014097	51302256	51302255	51344030	51344031
Codice versione non ISM	51344020	51344024					
Intervallo di misura	Da 0,01 a 1000 mS/cm	Da 0,001 a 500 µS/cm	Da 0,0001 a 1000 µS/cm	Da 0,01 a 500 mS/cm	Da 0,1 a 500 µS/cm	Da 0,01 a 100 mS/cm	Da 0,01 a 112 mS/cm
Intervallo di temperatura	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C
Sonda di temperatura	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	Pt1000	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ
Cavo e connessioni	Cavo da 1,2 m; Mini-DIN	Cavo da 1,2 m; Mini-DIN	Cavo da 1,2 m; Mini-LTW	Cavo da 1,2 m; Mini-DIN	Cavo da 1,2 m; Mini-DIN	Cavo da 1,2 m; Mini-DIN	Cavo da 1,2 m; Mini-DIN
Materiale shaft	Resina epossidica	Acciaio inossidabile	Titanio	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro
Lunghezza shaft	120 mm	120 mm	67 mm	120 mm	120 mm	120 mm	180 mm
Diametro dello shaft	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	4 mm	6 mm
Costante di cella	0,57 cm ⁻¹	0,105 cm ⁻¹	0,01 cm ⁻¹	0,80 cm ⁻¹	0,06 cm ⁻¹	1,0 cm ⁻¹	1,0 cm ⁻¹
Tipo di cella	4 poli in grafite	2 poli in acciaio	2 poli in titanio	4 poli in platino	2 poli in platino	Cella a 2 poli in platino	2 poli in platino
InLab® 731-2m	Il sensore InLab® 731 è disponibile anche con un cavo da 2 m: Codice 51344022, codice ISM 30014093						
InLab® 741-5m	Il sensore InLab® 741 è disponibile anche con un cavo da 5 m: Codice 51344026						
Kit InLab® Trace & Flow-cell	Kit con InLab® Trace and flow-cell: Codice 30014099						
InLab® 725	Il sensore InLab® 720 è disponibile anche con una costante di cella di 0,1 cm ⁻¹ : Codice 30014160						
Specifiche comuni	Tipo di elettrodi: Cella di conducibilità / Conservazione: secco						

Ovunque misurate

Sensori per applicazioni portatili

I misuratori portatili sono spesso utilizzati in ambienti difficili, ad esempio in aree di processo o aree esterne. I sensori per uso portatile devono essere robusti e impermeabili IP67, pertanto sono dotati di cavi fissi.



Expert Go-ISM

Routine Go-ISM

Solids Go-ISM

738-ISM

742-ISM

605-ISM

OptiOx



Con il sensore InLab Expert Go-ISM, misurare campioni complessi diventa un gioco da ragazzi. Grazie alla giunzione aperta, non c'è niente che può contaminare o falsificare i risultati.



InLab®	pH			Conducibilità		Ossigeno disciolto		
	Expert Go-ISM	Routine Go-ISM	Solids Go-ISM	738-ISM	742-ISM	605-ISM	OptiOx	
Codice	Cavo da 1,8 m	51344102	30248832	51343156	51344110	51344116	51344611	51344621
Versione ISM	Cavo da 5 m	51344103			51344112	51344118	51344612	51344622
	Cavo da 10 m	51344104			51344114		51344613	51344623
Codice	Versione non ISM	Cavo da 1,8 m	51340288		51344120	51344126	51340291	
Intervallo di misura	Da 0 a 14 pH	Da 0 a 14 pH	Da 1 a 11 pH	Da 0,01 a 1000 mS/cm	Da 0,001 a 500 µS/cm	Da 0 a 200%, da 0 a 20 mg/L	Da 0 a 500%, 0...50 mg/L	
Intervallo di temperatura	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 100 °C	Da 0 a 60 °C	Da 0 a 50 °C	
Sonda di temperatura	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	NTC 30 kΩ	NTC 22 kΩ	NTC 30 kΩ	
Membrana in vetro / rilevazione	U	HA	LoT			Polarografica	Optica	
Resistenza della membrana (25°)	< 250 MΩ	< 600 MΩ	< 250 MΩ					
Tipo di diaframma / tipo di cella	Diaframma aperto	Ceramica	Diaframma aperto	4 poli in grafite	2 poli in acciaio			
Elettrolita di riferimento	Polimero XEROLYT®	3 mol/L KCl	Polimero XEROLYT® EXTRA					
Costante di cella				0,57 cm ⁻¹	0,105 cm ⁻¹			
Materiale shaft	PEEK	Vetro	Vetro	Resina epossidica	Acciaio inossidabile	PPS	PC / ABS	
Lunghezza dello shaft	120 mm	120 mm	25 mm	120 mm	120 mm	120 mm	65 mm	
Diametro dello shaft	12 mm	12 mm	6 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm	
Conservazione	Soluzione di conservazione InLab® (Codice 30111142)			All'asciutto	All'asciutto	All'asciutto	All'asciutto	
Connessioni	Cavo fisso: BNC / RCA (Cinch)			Cavo fisso: LTW	Cavo fisso: LTW	Cavo fisso: BNC / RCA	Cavo fisso: Mini-LTW	
Specifiche comuni	IP67							

Prendeteli tutti

Elettrodo ionoselettivo combinato

Più ampia è la varietà degli ioni, più complessa sarà la scelta di elettrodi ionoselettivi (ISE). Lo speciale diaframma Click & Clear™ consente un contatto ottimale della soluzione elettrolitica e del campione. Con le soluzioni dedicate, il campione può essere preparato in modo ottimale per una misura di successo della concentrazione ionica.



sensori perfectION™



perfectION™ comb Na⁺

Misura delle concentrazioni di ioni	perfectION™	Codice elettrodo	Cavo e connessioni	Intervallo di misura	Intervallo di temperatura	Intervallo pH ottimale	Tipo di membrana	Elettrolita di riferimento	Codice membrana Fieldbus	Codice Soluzione ISA
Ag ⁺ /S ²⁻	comb Ag ⁺ /S ²⁻	51344700	1,2 m; BNC	Da 10 ⁻⁷ a 1 mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 2 a 12	Stato solido	Elettrolita per ioni B 51344751		Ag ⁺ : 51344760
		51344800	1,2 m; Lemo	Ag ⁺ : Da 0,01 a 108000 mg/L S ²⁻ : Da 0,003 a 32000 mg/L			S ²⁻ : vedi manuale			
Ca ²⁺	comb Ca ²⁺	51344703	1,2 m; BNC	Da 5 · 10 ⁻⁷ a 1 mol/L	Da 0 a 40 °C	Da 2,5 a 11	Polimero	Ione elettrolita A 51344750	51344850	51344761
		51344803	1,2 m; Lemo	Da 0,02 a 40100 mg/L						
Cl ⁻	comb Cl ⁻	51344706	1,2 m; BNC	Da 5 · 10 ⁻⁵ a 1 mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 2 a 12	Stato solido	Elettrolita per ioni B 51344751		51344760
		51344806	1,2 m; Lemo	Da 1,8 a 35500 mg/L						
CN ⁻	comb CN ⁻	51344709	1,2 m; BNC	Da 8 · 10 ⁻⁶ a 10 ⁻² mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 10 a 14	Stato solido	Elettrolita per ioni B 51344751		10 mol/L NaOH
		51344809	1,2 m; Lemo	Da 0,2 a 260 mg/L						
Cu ²⁺	comb Cu ²⁺	51344712	1,2 m; BNC	Da 10 ⁻⁸ a 0,1 mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 2 a 12	Stato solido	Ione Elettrolita D 51344753		51344760
		51344812	1,2 m; Lemo	Da 6,4 · 10 ⁻⁴ a 6354 mg/L						
F ⁻	comb F ⁻	51344715	1,2 m; BNC	Da 10 ⁻⁶ mol/L a saturo	Da 0 a 80 °C	Da 4,5 a 5,5	Stato solido	Ione elettrolita A 51344750		51344765
		51344815	1,2 m; Lemo	Da 0,02 mg/L a saturo						

Il cloruro di sodio contenuto nel ketchup può essere determinato in modo facile ed efficiente dal punto di vista dei costi con l'elettrodo perfectION™ comb Cl⁻. Il diaframma Click & Clear rende la pulizia del sensore facile e veloce.



Misura delle concentrazioni di ioni	perfectION™	Codice elettrodo	Cavo e connessioni	Intervallo di misura	Intervallo di temperatura	Intervallo pH ottimale	Tipo di membrana	Elettrolita di riferimento	Codice membrana Fieldbus	Codice Soluzione ISA
I ⁻	comb I ⁻	51344718	1,2m; BNC	Da 5 · 10 ⁻⁸ a 1 mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 0 a 12	Stato solido	Ione Elettrolita D		51344760
		51344818	1,2m; Lemo	Da 0,005 a 127000 mg/L				51344753		
K ⁺	comb K ⁺	51344721	1,2m; BNC	Da 10 ⁻⁶ a 1 mol	Da 0 a 40 °C	Da 2,5 a 11	Polimero	Ione Elettrolita E	51344851	51344762
		51344821	1,2m; Lemo	Da 0,04 a 39000 mg/L				51344754		
Na ⁺ ¹⁾	comb Na ⁺	51344724	S7	Da 10 ⁻⁷ a 1 mol/L Da 0,002 a 23000 mg/L	Da 0 a 80 °C	Da 8 a 11	Vetro Na ⁺	3 mol/L KCl 51350072		NH ₄ Cl / NH ₄ OH
NO ₃ ⁻	comb NO ₃ ⁻	51344727	1,2m; BNC	Da 7 · 10 ⁻⁶ a 1 mol/L NO ₃ ⁻	Da 0 a 40 °C	Da 2,5 a 11	Polimero	Ione Elettrolita F	51344852	51344763
		51344827	1,2m; Lemo	Da 0,1 a 14000 mg/L NO ₃ ⁻ come N				51344755		
Pb ²⁺	comb Pb ²⁺	51344730	1,2m; BNC	Da 10 ⁻⁶ a 0,1 mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 4 a 7	Stato solido	Elettrolita per ioni B		5 mol/L NaClO ₄
		51344830	1,2m; Lemo	Da 0,2 a 20700 mg/L				51344751		
Specifiche comuni		Elettrodo ionoselettivo (ISE) con riferimento integrato / Tipo di diaframma: Click & Clear™ / Materiale shaft: Resina epossidica ¹⁾ eccezione: perfectION™ comb Na ⁺ : S7 tappo a vite / diaframma in ceramica / ARGENTHAL™ / Materiale shaft: Vetro								

Comprovate e affidabili

Semicelle ionoselettive

Le semicelle ionoselettive possono essere utilizzate nelle applicazioni in modo molto flessibile. Sono composte da uno shaft universale e un modulo a membrana specifico a ioni che può essere sostituito per misurare diversi tipi di ioni. I moduli a membrana sono disponibili in kit membrana, fra cui la soluzione elettrolitica corretta. Le semicelle richiedono l'uso di un elettrodo di riferimento separato.



Sensori DX

DX223-Na⁺

Misura delle concentrazioni di ioni	Designazione	Codice elettrodo	Intervallo di misura	Intervallo di temperatura	Intervallo pH ottimale	Tipo di membrana	Materiale shaft	Codice kit membrana	Codice elettrolita	Elettrolita per elettrodo di riferimento	Soluzione ISA
Ba ²⁺	DX337-Ba ²⁺	51107674	Da 1 a 4 · 10 ⁻⁷ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 12	Polimero	POM/PVC	51107688	51107892	3 mol/L KCl	1 mol/L Tris ₂ HCl
BF ₄ ⁻	DX287-BF ₄ ⁻	51107676	Da 1 a 3 · 10 ⁻⁷ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 12	Polimero	POM/PVC	51107690	51107890	2 mol/L MgSO ₄	0,5 mol/L MgSO ₄
Br ⁻	DX280-Br ⁻	51340300	Da 1 a 1 · 10 ⁻⁶ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 2 a 13	Stato solido	POM	51340006	51340029	1 mol/L KNO ₃	1 mol/L KNO ₃
Ca ²⁺	DX240-Ca ²⁺	51340600	Da 1 a 1 · 10 ⁻⁶ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 12	Polimero	POM/PVC	51340009	51340032	3 mol/L KCl	3 mol/L KCl
Ca ²⁺	DX312-Ca ²⁺	51107672	Da 1 a 1 · 10 ⁻⁶ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 8	Polimero	POM/PVC	51107686	51107891	1 mol/L KNO ₃	1 mol/L KNO ₃
Cl ⁻	DX235-Cl ⁻	51340400	Da 1 a 2 · 10 ⁻⁵ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 2 a 13	Stato solido	POM	51340007	51340030	1 mol/L KNO ₃	1 mol/L KNO ₃
CN ⁻	DX226-CN ⁻	51107681	Da 1 a 2 · 10 ⁻⁶ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 4 a 13	Stato solido	POM	51107695	51107893	1 mol/L KNO ₃	10 mol/L NaOH
Cu ²⁺	DX264-Cu ²⁺	51107678	Da 1 a 5 · 10 ⁻⁷ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 2 a 8	Stato solido	POM	51107692	51107889	1 mol/L KNO ₃	1 mol/L KNO ₃
F ⁻	DX219-F ⁻	51340500	Da 1 a 5 · 10 ⁻⁷ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 4 a 10	Stato solido	POM	51340008	51340031	3 mol/L KCl	TISAB III

Il fluoruro è un ingrediente essenziale in vari prodotti per l'igiene orale e la sua concentrazione deve essere controllata in modo adeguato. Grazie al DX219-F ciò è possibile senza costosi strumenti analitici.



Misura delle concentrazioni di ioni	Designazione	Codice elettrodo	Intervallo di misura	Intervallo di temperatura	Intervallo pH ottimale	Tipo di membrana	Materiale shaft	Codice kit membrana	Codice elettrolita	Elettrolita per elettrodo di riferimento	Soluzione ISA
I ⁻	DX327-I ⁻	51107680	1 a 2 · 10 ⁻⁸ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 1 a 13	Stato solido	POM	51107694	51107898	1 mol/L KNO ₃	1 mol/L KNO ₃
K ⁺	DX239-K ⁺	51340700	Da 1 a 1 · 10 ⁻⁶ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 12	Polimero	POM/PVC	51340010	51340033	2 mol/L MgSO ₄	0,5 mol/L MgSO ₄
Li ⁺	DX207-Li ⁺	51107673	Da 1 a 1 · 10 ⁻⁶ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 9	Polimero	POM/PVC	51107687	51107881	3 mol/L KCL	0,5 mol/L MgSO ₄
Na ⁺	DX223-Na ⁺	51340263	Da 1 a 1 · 10 ⁻⁷ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 8 a 11	Vetro Na	Vetro			0,1 mol/L NH ₄ Cl	NH ₄ Cl / NH ₄ OH
NH ₄ ⁺	DX218-NH ₄ ⁺	51340900	Da 1 a 4 · 10 ⁻⁷ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 9	Polimero	POM/PVC	51340012	51340035	2 mol/L MgSO ₄	0,5 mol/L MgSO ₄
NO ₃ ⁻	DX262-NO ₃ ⁻	51340800	Da 1 a 3 · 10 ⁻⁵ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 12	Polimero	POM/PVC	51340011	51340034	2 mol/L MgSO ₄	0,5 mol/L MgSO ₄
Pb ²⁺	DX407-Pb ²⁺	51107873	Da 1 a 3 · 10 ⁻⁶ mol/L	Da 0 a 50 °C	Da 2 a 8	Polimero	POM/PVC	51107874	51107875	1 mol/L KNO ₃	1 mol/L KNO ₃
S ²⁻ /Ag ⁺	DX232-S ²⁻	51107675	Da 1 a 1 · 10 ⁻⁸ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 4 a 13	Stato solido	POM	51107689	51107894	1 mol/L KNO ₃	10 mol/L NaOH
SCN ⁻	DX258-SCN ⁻	51107870	Da 1 a 2 · 10 ⁻⁶ mol/L	Da 0 a 80 °C	Da 2 a 10	Stato solido	POM	51107871	51107872	1 mol/L KNO ₃	1 mol/L KNO ₃
Specifiche comuni		Tipo di elettrodi: semicella ionoselettiva; Cavo e connessioni: S7									

Soluzioni straordinarie

Per taratura e manutenzione

L'accuratezza della misura di pH dipende dalle soluzioni tampone utilizzate per la taratura. Le soluzioni tampone METTLER TOLEDO sono riferibili a standard primari e accompagnate da un certificato di controllo qualità che garantisce i valori effettivi e la tracciabilità.



Potete trovare informazioni dettagliate all'indirizzo web

www.mt.com/buffer

	Codice 250 mL	Codice 6 x 250 mL	Codice 30 bustine da 20 mL
Soluzioni tampone tecniche per pH			
2,00	51350002	51350016	30111134
4,01	51350004	51350018	51302069
7,00	51350006	51350020	51302047
9,21	51350008	51350022	51302070
10,00	51350010	51350024	51302079
11,00	51350012	51350026	30111135
Bottiglie arcobaleno I (4.01/7.00/9.21)		30095312	
Bottiglie arcobaleno II (4.01/7.00/10.00)		30095313	
Sacchetti arcobaleno I (4.01/7.00/9.21)			51302068
Sacchetti arcobaleno II (4.01/7.00/10.01)			51302080
Soluzioni tampone per pH NIST/DIN			
4,006	51350052		30111136
6,865	51350054		30111137
9,180	51350056		30111138
10,012	51350058		30111139
Soluzioni tampone per pH certificate			
4,01	51350032	51350042	
7,00	51350034	51350044	
9,21	51350036	51350046	
10,00	51350038	51350048	
Soluzioni tampone Redox (E (Ag/AgCl) a 25 °C)			
220 mV, pH 7 ($U_H = 427$ mV)	51350060	51350062	
468 mV, pH 0,1 ($U_H = 675$ mV)			51350064 (6 x 30 mL)

	Codice 25 mL	Codice 250 mL	Codice 6 x 250 mL
Elettroliti per elettrodi di riferimento			
Soluzione KCl 3 mol/L	51343180	51350072	51350080
Soluzione KCl 3 mol/L, AgCl saturo	51343184	51350074	51350082
FRISCOLYT-B®, per mezzi con composti organici	51343185	51350076	51350084
Soluzione LiCl 1 mol/L in etanolo per mezzi non acquosi	51350088 (6 x 30 mL)		
Soluzioni di manutenzione			
Soluzione di conser- vazione InLab®		30111142	
Pepsina-HCl per la pulizia dei diafram- mi contaminati da proteine		51350100	
Soluzione di fiourea per la pulizia dei dia- frammi contaminati da solfuro di argento		51350102	
Soluzione di riattiva- zione per la rigene- razione di elettrodi in vetro	51350104		
Standard di conducibilità			
	Codice 250 mL	Codice 6 x 250 mL	Codice sacchetti 20 mL
1,3 µS/cm (soluzione di controllo usa e getta)	30090847		
5 µS/cm	30094617		
10 µS/cm	51300169		30111141 (10 x 20 mL)
84 µS/cm	51302153		30111140 (10 x 20 mL)
500 µS/cm	51300170		
1413 µS/cm	51350092	51350096	51302049 (30 x 20 mL)
12,88 mS/cm	51350094	51350098	51302050 (30 x 20 mL)

L'accessorio giusto

Maggiori possibilità



Sensori di temperatura separati

Descrizione	InLab® NTC 30 kΩ	InLab® P11000	NTC 30 kΩ
	Sensore di temperatura da laboratorio in shaft di vetro (120 x 12 mm), con certificato di qualità	Sensore di temperatura da laboratorio in shaft di vetro (120 x 12 mm), con certificato di qualità	Sensore di temperatura da laboratorio in acciaio inox (120 x 3 mm), acciaio 316
Codice	51343310	51343312	51300164
Cavo e connessioni	S7	S7	1,2 m; connettore RCA

Accessori














Accessori	Descrizione	
Accessori per InLab® OptiOx™	Cappuccio di ricambio per OptiOx	51344630
	Contenitore di taratura per OptiOx	51344631
	Custodia protettiva per OptiOx	51344632
	Adattatore BOD per OptiOx	51344633
	Adattatore OptiOx per braccio portaelettrodo uPlace	30246619
Cella a flusso	Cella a flusso per sensori con diametro dello shaft di 12 mm (materiale: vetro)	51302257
Cappucci umettanti	Per elettrodi con diametro dello shaft di 12 mm	30243851
	Per elettrodi con diametro dello shaft di 8 mm e famiglia InLab Solids	51340021
	Per elettrodi con diametro dello shaft di 6 mm	52000442
	Per elettrodi con diametro dello shaft di 3 mm	52000441
SafeLock™ blu	Sistema di chiusura SafeLock per il foro di ricarica degli elettrodi per pH (5 pezzi)	30248827
SafeLock™ bianco	Sistema di chiusura SafeLock per il foro di ricarica degli elettrodi per pH (5 pezzi)	30248829
Adattatore Knick	Adattatore per sensori con diametro dello shaft da 12 mm per l'utilizzo con misuratori portatili Knick	30247853
Adattatore	Manicotto adattatore per NS da 14,5 per sensori con diametro dello shaft di 12 - 15 mm (materiale: PE)	51340024

Plug and Play















Cavi per sensori

I sensori di pH METTLER TOLEDO possono essere facilmente collegati a vari strumenti di altri produttori. Tutto quello che dovete fare è scegliere il cavo adatto.

Risparmiate denaro e salvaguardate l'ambiente. I cavi scollegabili possono essere riutilizzati se il sensore di pH ha raggiunto il termine del suo ciclo di vita.

Collegamento	Lunghezza	Designazione	Connettore	Presca sul misuratore	Codice
	1,2 m 3,0 m 5,0 m	BNC + RCA (Cinch)			30281896 30281897 30281898
	1,8 m	BNC + RCA (Cinch) IP67			30281913
	1,2 m	BNC + 1x4 mm banana			30281899
	1,2 m	DIN + RCA (Cinch)			30281910
	1,2 m	DIN 19262 + 1x4 mm banana			30281911
	1,2 m	Lemo 00 + 2x4 mm banana			30281912



Collegamento	Lunghezza	Designazione	Connettore	Preso sul misuratore	Codice	
S7 	1,2 m 3,0 m 5,0 m	BNC			30281915 30281916 30281917	
	1,2 m	BNC IP67			30281918	
	1,2 m 3,0 m 5,0 m	DIN 19262			30281919 30281920 30281921	
	1,2 m	Lemo 00			30281925	
	3,0 m 5,0 m 10,0 m	nessun connettore			30281926 30281927 30281928	
	Per elettrodi di riferimento	1,2 m	4 mm, a banana			30281922
		1,2 m	2 mm, a banana			30281923
	Per sonde di temperatura	1,2 m	RCA (Cinch)			30281924

Il sensore di pH giusto

La tabella sottostante vi aiuta a trovare il sensore migliore per le vostre applicazioni. Per informazioni più dettagliate sui singoli sensori, fate riferimento alle pagine dedicate della brochure o visitate il sito www.mt.com/electrode-guide.

		InLab®									
Applicazione		Routine	Max	Science	Versatile	Expert	Easy	Power	Nano	Micro	
	Vedere pagina		6 / 7				8 / 9 e 24 / 25			10	
Campioni acquosi	Acqua potabile										
	Acqua dolce di superficie										
	Acqua pura e ultrapura										
	Acque reflue										
	Soluzione altamente salina, acqua di mare										
	Campione freddo (< 5 °C)										
	Campione caldo (> 100 °C)										
Campioni farmaceutici e biologici	Vial e micropiastrella										
	Provetta per RMN										
	Provetta di prova										
	Siero e succo gastrico										
	Soluzione tampone TRIS										
	Campioni micro-biologici										
	Disinfezione										
	Soluzione per fermentazione lieviti										
	Soluzione amido										
Sostanze chimiche e bagni	Acido corrosivo e base										
	Bagno galvanico										
	Campione con acido fluoridrico (< 1 g/L)										
	Solvente organico										
Alimenti	Frutta e verdura										
	Carne e pesce										
	Impasto										
	Latte e panna										
	Burro, yogurt e gelato										
	Formaggi										
Bevande	Bibita analcolica										
	Succo di frutta										
	Birra										
	Vino										
Campioni viscosi	Gel, sapone e shampoo										
	Cosmetici										
	Resina										
Emulsione	Pittura										
	Campione oleoso										
	Colorante e tinta										
	Vernice e colla										
	Solidi sospesi (es. terreno)										
Misure di superficie	Cute e pelle										
	Tessuto e stampa										
	Carta										
	Piastra di agar										
	Campione a goccia										
Grandi recipienti per campioni	Reattore pilota										
	Serbatoio e fusto										
	Acquario										

www.mt.com/electrode-guide

Questa guida interattiva rende ancora più facile la scelta del sensore. In più, potete trovare animazioni sul miglior utilizzo della soluzione tampone, una guida alla risoluzione dei problemi e molto altro ancora.

	Semi-Micro	RMM	Solids	Viscous	Dairy	Surface	Pure	Cool	Water	Hydrofluoric	Reach	Smart	Mono	Mono Plus	Reference	Reference Plus	Reference Flow	
/ 11			12 / 13 e 24 / 25						14 / 15			16 / 17		18		19		

Soluzioni complete



pHmetri

Per saperne di più sui misuratori monocanale e multicanale per il laboratorio e sul campo:

► www.mt.com/pH



Soluzioni tampone e altre soluzioni

Per saperne di più sul nostro portafoglio di soluzioni e soluzioni tampone certificate, visitate il sito:

► www.mt.com/buffersandmore

www.mt.com/pH

Per maggiori informazioni

Mettler-Toledo GmbH, Analytical

Im Langacher 44
8606 Greifensee, Svizzera
Tel. +41 22 567 53 22
Fax +41 22 567 53 23

Soggetto a modifiche tecniche
© 02/2017 Mettler-Toledo GmbH, 30264272B
Marketing pH Lab/MarCom Analytical
GlobalMarCom Svizzera / RT / MA