Pack Bowie-Dick Browne para autoclave




Paquete listo para usar tipo Bowie-Dick para esterilizadores de vapor de agua. Indicador destinado a ser utilizado en ensayos específicos conforme a la norma EN 867-1 clase B y 867-4 y a la norma ISO 11140 clase 2. Modo de empleo : colocar la prueba en el centro de la plataforma superior y realizar un ciclo BD. Abrir el paquete y verificar la hoja : la prueba positiva es azul, cualquier otro color indica fracaso.

- Viraje de color : del amarillo al azul
- De un solo uso
- Dispositivo médico marcado CE
- L x An x Al (mm) : 125 x 125 x 30

Ref.	Descripción	Pruebas/ paquete	€/ paquete
972455	Pack Bowie-Dick Browne para autoclave	20 pruebas	**NC -**

Prueba de Bowie & Dick "Mini-Control Pack"

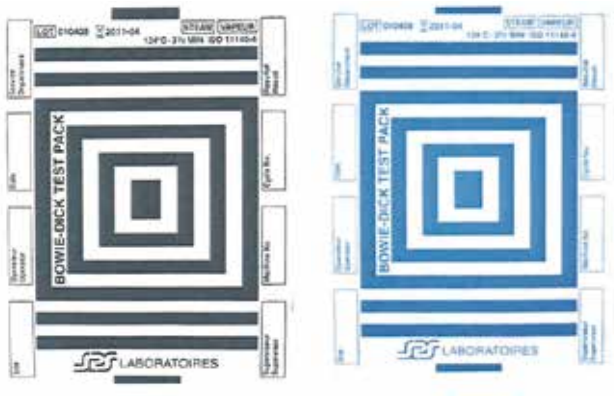

Prueba de penetración del vapor «Mini-Control Pack».

- Tinta sin plomo
- Viraje del azul al negro
- Estabilidad del viraje de varios años
- Normas : EN ISO 11140-1 (clase 2) y EN ISO 11140-4
- Puede utilizarse en esterilizadores grandes o pequeños de tipo b (EN 13060)
- Hojas de papel secante que reproducen las limitaciones de la prueba original de Bowie y Dick
- Condiciones mínimas de exposición : 134 °C, vapor saturado durante 3 minutos 30 seg. o 121 °C vapor saturado durante 15 minutos

Ref.	Descripción	Pruebas/ paquete	€/ paquete
095040	Prueba Mini-control Pack	30 pruebas	**NC -**

Prueba de Bowie & Dick VISA




Para abordar la prueba de penetración de vapor
La hoja prueba se coloca en modo «sándwich» en el interior de 2 capas de laminado, que reproducen el límite de penetración de vapor según EN 11140-4. La supresión del paquete de papel mejora las limitaciones relacionadas con la eliminación de los desechos.

- Tinta sin plomo
- Color del viraje del rosa al verde
- Compacto : facilita el almacenamiento
- Reproducibilidad y estabilidad del viraje después de la esterilización (estable varios años)
- Hoja prueba tipo secante colocada entre dos capas de laminado : supresión del pack de envase papel
- Condiciones mínimas de exposición : 134 °C vapor saturado durante 3 minutos 30 seg, 121 °C vapor saturado durante 15 minutos
- Normas : EN ISO 11140-1 (clase 2) y EN ISO 11140-4

Ref.	Descripción	Pruebas/ paquete	€/ paquete
095096	Prueba Bowie & Dick VISA	120 pruebas	**NC -**

Emulador Prion 134-18 NS

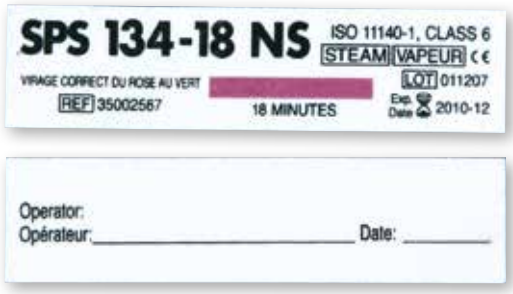

El emulador Prion 134-18 NS es un indicador multiparamétrico de clase 6 (temperatura, tiempo y vapor saturado). Se utiliza para la esterilización por vapor, ciclo Prion 134 °C / 18 minutos.

- Emulador no secuencial de clase 6
- Multiparámetros (tiempo/temperatura/contacto de vapor)
- Diseñado para mejorar el umbral de detección de posibles averías
- Tinta fisicoquímica
- 2 caras laminadas para evitar cualquier riesgo de migración
- Conforme a la norma EN ISO 11140-1

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
095089	Emulador Prion 134-18 NS	250	**NC -**

Indicadores de esterilización por rayos gamma

- Etiquetas adhesivas de 12,5 mm de diámetro
- Almacenar en un lugar fresco y oscuro (entre 2°C y 22°C)
- Exposición › 10 kGy : cambio de color de amarillo a rojo
- 24 meses de vida útil

Ref.	Descripción	Etiquetas/ rollo	€/ rollo
071500	Etiquetas redondas indicadoras de esterilización gamma	5000	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB