

Strips – Bandelettes




- Indicateurs chimiques dont la couleur du carré vire quand il est exposé
- Différents indicateurs chimiques existent en fonction du type de process de stérilisation
- Péremption : 3 ans

Réf.	Process de stérilisation	Type	Avant expo.	Après expo.	Dim. (mm)	Unités/ rouleau	€/ rouleau
633342	OXYDE ETHYLENE	Type 4	Marron / Violet	Vert	19 x 70	250	**NC -**
633317	CHALEUR HUMIDE 121°C 15 min. 134°C 3.5 min.	Type 4	Jaune	Marron foncé / Noir	19 x 64	100	**NC -**
633338	CHALEUR HUMIDE 121°C 16.5 min. 135°C 1.2 min.	Type 5	Rose	Marron foncé / Noir	19 x 64	250	**NC -**
633345	VAPEUR	Type 6	Bleu foncé	Noir	19 x 70	250	**NC -**
633311	CHALEUR SECHE 160°C, 40 min.	Type 4	Bleu	Gris foncé	19 x 70	250	**NC -**
633325	PEROXYDE D'HYDROGENE Vapeur (plasma) ou OZONE	Type 1	Marron	Vert	19 x 70	250	**NC -**
633356	PEROXYDE D'HYDROGENE 2.3mg/L, 50°C, 6 min	Type 4	Rouge	Jaune	19 x 64	250	**NC -**
633346	FORMALDEHYDE	Type 4	Rose	Vert	19 x 70	250	**NC -**

Indicateurs biologiques

Ampoules

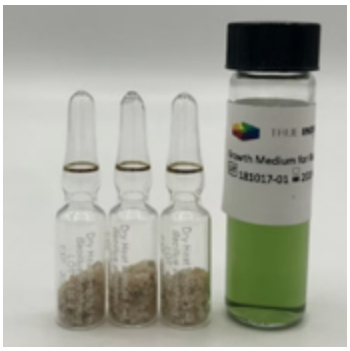

633310



633316

- L'ampoule en verre contenant 1 solution modifiée de TSB avec un indicateur de pH et la souche à la concentration sélectionnées.
- Utilisation : sortir l'ampoule du frigo. La placer dans les endroits les plus critiques. La retirer du stérilisateur après exposition et placer à l'incubateur.
- Volume : 1 mL
- Stockage : +2 et +8 °C
- Certificat via le QRcode placé sur l'emballage

Ref.	Process de stérilisation	Souche	Concentration	Shelf-life	Qté/ carton	€
633316	VAPEUR	*Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953	10^6	24 mois	50	**NC -**
633310	CHALEUR SECHE	*Bacillus atrophaeus* ATCC 9372	10^6		50	**NC -**

SCBIs et MSCBIs



- Ces SCBIs ou MSCBIs -(Mini) Self Contained Biological Indicator- sont composés de :
- 1 flacon et un bouchon en polypropylène
- 1 ampoule en polypropylène compressible contenant un bouillon tryptique à la soja (TSB) modifié avec un indicateur de pH
- 1 support (disque papier) ensemencé avec la lignée cellulaire et la concentration sélectionnées
- Utilisation : après exposition, presser sur le bouchon pour le SCBI ou sur les côtés pour les MSCBI, afin de briser l'ampoule contenant le milieu de culture. Puis placer dans l'incubateur.
- Stockage à température ambiante
- Certificat via le QRcode placé sur l'emballage

Ref.	Process de stérilisation	Type d'indicateur	Souche	Concentration	Shelf-life	Qté/ carton	€
633315	VAPEUR	MSCBI	*Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953	10^6	24 mois	100	**NC -**
633314		SCBI			24 mois	50	**NC -**
633327	OXYDE ETHYLENE	MSCBI	*Bacillus atrophaeus* ATCC 9372		36 mois	100	**NC -**