Qiacard: Qiacard FTA Kit für, Transport, Lagerung Extraktion von Nukleinsäuren

Qiacard FTA ist eine Karte, die mit einer patentierten Chemie imprägniert ist: Wenn eine biologische Probe auf die FTA aufgebracht wird, lysiert diese Chemie die Zellen und denaturiert die Proteine, während die Nukleinsäuren extrahiert und in den Papierfasern geschützt werden.
Die FTA-Karte wird bei Raumtemperatur zum Labor transportiert oder wird für eine spätere Analyse bei Raumtemperatur gelagert.



- Für verschiedene Proben: Blut, Zellkulturen, Mundzellen, Pflanzenmaterial, Bakterien, Plasma
- Lagerung bei Raumtemperatur oder im Gefrierschrank für nicht stabile Proben (RNA)
- Erhältlich mit Farbindikator, der Ablagebereich ändert seine Farbe, um die Lokalisierung der Probe zu erleichtern, empfohlen für farblose Proben
- Nukleinsäuren, die in weniger als 30 Minuten für die nachgelagerte Anwendung bereit sind
- Verhindert das Wachstum von Bakterien und Pilzen
- Schützt Nukleinsäuren vor Umweltdegradation
- Reduziert die Möglichkeit einer Kreuzkontamination zwischen Proben
- Lagerungsdauer von Nukleinsäuren : 17 Jahre

Qiacard FTA

Art. Nr.	Bezeichnung	Max. Probenvolumen (ml) / Kreis	Anzahl der Kreise/ Einheit	VE	CHF/ VE
037067	QIAcard FTA Micro	125	1	25	AA -
036370	QIAcard FTA Micro	125	1	100	AA -
WB120355	QIAcard FTA Mini	125	2	25	AA -
036388	QIAcard FTA Mini	125	2	100	AA -
036745	QIAcard FTA Classic	125	4	25	AA -
036387	QIAcard FTA Classic	125	4	100	AA -
036403	FTA Gen-Karte	75	3	100	AA -

Qiacard FTA mit Indikator

WB120311	QIAcard FTA mikro mit Indikator	125	1	25	AA -
036372	QIAcard FTA mikro mit Indikator	125	1	100	AA -
034987	QIAcard FTA Mini mit Indikator	125	2	25	AA -
036375	QIAcard FTA Mini mit Indikator	125	2	100	AA -
036749	QIAcard FTA Classic mit Indikator	125	4	25	AA -
036360	QIAcard FTA Classic mit Indikator	125	4	100	AA -

Qiacard FTA CloneSaver

- Zur Aufreinigung von Plasmid-DNA und bakterieller DNA
- Mit Farbindikator
- Lagerungszeit der Plasmid-DNA : 4 Jahre

036367	Karte CloneSaver Plasmid und BAC	5	96	5	AA -

Qiacard FTA für Pflanzenproben

036778	QIAcard FTA PlantSaver	-	-	100	AA -

FTA-Elute-Kit

- FTA-Kit für, Transport, Lagerung Extraktion von DNA bei Raumtemperatur
- 12-40 µl pro entnommener Probe

036615	Mikro-Karte FTA Elute	40	4	25	AA -
036820	Mikro-Karte FTA Elute	40	4	100	AA -
610003	QIAcard FTA Elute mikro mit Indikator	40	1	25	AA -
037069	QIAcard FTA Elute mikro mit Indikator	40	1	100	AA -

QIAcard FTA DMPK


- Blut-, Plasma-, Urin- oder Zerebrospinalflüssigkeitsproben
- Die Karten FTA DMPK-A und FTA DMPK-B lysieren Zellen und denaturieren Proteine
- Die DMPK-C FTA-Karte ist nicht mit Chemikalien imprägniert und denaturiert keine Proteine, geeignet für proteinbasierte Biomoleküle und Antikörperstudien
- Nur 10-20 µl der Probe

037164	QIAcard FTA DMPK-A	10 - 20	3	100	AA -
037195	QIAcard FTA DMPK-B	10 - 20	3	100	AA -
037157	QIAcard FTA DMPK-C	10 - 20	3	100	AA -
610006	Rack für 20 QIAcards FTA DMPK	-	-	25	AA -

QIAcard Bloodstain

- Nicht indikative und nicht behandelte FTA-Karte, für die Entnahme, kurzfristige Handhabung von Proben
- Blutproben oder andere Körperflüssigkeiten

036401	QIAcard Bloodstain	125	4	100	AA -

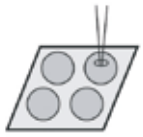

Probe auftragen und trocknen lassen



Schneiden Sie eine Scheibe aus dem Ablagebereich aus



Die Scheibe in ein PCR-Röhrchen legen und dreimal mit dem Reinigungsreagenz waschen - das Reagenz nach jedem Waschvorgang entfernen



Zweimal mit TE-1-Puffer (10 mM Tris, 0,1 mM EDTA, pH 8) waschen und den verwendeten Puffer nach jedem Waschen entfernen



Trocknen Sie die Scheibe im PCR-Röhrchen



PCR-Mix direkt hinzufügen und amplifizieren

Reinigungsreagenzien FTA Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/VE
WB120112	Wasch-Puffer QIAcard FTA 25 ml	1	AA -
036374	Wasch-Puffer QIAcard FTA 500 ml	1	AA -
036368	Tasche versiegelbar für CloneSaver	50	AA -
610004	Multi-Barriere-Tasche transparent 9,5 x 7,6 cm	100	AA -
610005	Multibarriere-Tasche 10,1 x 11,4 cm	100	AA -
036398A	Multibarriere-Tasche 8 x 7 cm	100	AA -
036376A	Multibarriere-Tasche 9 x 15 cm	100	AA -
036399	Trockenmittel (1g)	1000	AA -
WB100032	Tupfer mit Schaumstoffkopf zur oralen Probenentnahme, steril	100	AA -
036396A	Tupfer mit bürstenartigem Ejektorkopf zur oralen Probenentnahme, steril	100	AA -
WB100073	Biopsie-Punch 1 mm	25	AA -
WB100074	Biopsie-Punch 1,2 mm	25	AA -
037223	Biopsie-Punch 2 mm	25	AA -
037227	Biopsie-Punch 3 mm	25	AA -
037171	Biopsie-Punch 6 mm	25	AA -
WB100088	Schneidematte 6,3 x 7,6 cm	1	AA -
036394	Schneidematte 15,2 x 20,3 cm	1	AA -
036415	Kit enthält 4 Biopsie-Stanzen 1,2 mm und 2 Schneidematte	1	AA -
034988	Set bestehend aus 4 Biopsiestanzen 2 mm und 2 Schneidematten	1	AA -
036826	Set bestehend aus 4 Biopsiestanzen 3 mm und 2 Schneidematten	1	AA -
036899	Set bestehend aus 4 Biopsiestanzen 6 mm und 2 Schneidematten	1	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com