MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

MANUEL D'UTILISATION
Chronomètre 2 temps – Précision / Pile lithium – Réf 0335XC



MODE HORLOGE



REGLAGE HEURE/DATE




MODE CHRONO



REGLAGE ALARME



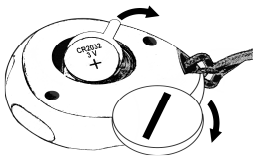

TOURNEZ ¼ TOUR LE CACHE PILE
ENLEVEZ L'ISOLANT
AJUSTEZ LA PILE LITHIUM CR2032

APERCU
- HORLOGE : Heure 12/24h avec Date, Mois et Jour de la semaine
- ALARME : Alarme horaire réglable quotidiennement
- CHRONOMETRE : Chronométrage des temps nets, d'addition, et temps intermédiaires

HORLOGE
Programmer la date et l'heure
- Appuyez 3 fois successivement sur MODE, à partir de l'affichage de l'horloge par défaut, pour basculer entre les différentes fonctions jusqu'au mode de réglage de la date et l'heure.
- Les secondes et la barre pour l'affichage du jour de la semaine clignotent.
- Appuyez sur START/STOP pour remettre les secondes à zéro.
- Appuyez sur SPLIT/RESET pour régler successivement les minutes et les heures. L'affichage correspondant clignote
- Appuyez sur START/STOP pour régler l'heure. Maintenez pour un défilement rapide.

Note : Lors du défilement du chiffre des heures, l'un des symboles A (AM), P (PM) ou H (24h) détermine le format horaire 12/24h.

- Appuyez sur SPLIT/RESET pour régler successivement la date, le mois et le jour de la semaine. L'affichage correspondant clignote.
- Appuyez sur START/STOP pour régler. Maintenez pour un défilement rapide.
- Appuyez sur MODE pour confirmer les réglages.

ALARME
Programmez une heure d'alarme
- Appuyez 2 fois successivement sur MODE, à partir du mode par défaut de l'horloge, pour basculer entre les différentes fonctions jusqu'au mode de réglage de l'alarme.
- Appuyez sur START/STOP pour régler l'heure d'alarme. Maintenez pour un défilement rapide.

Note : Lors du défilement du chiffre des heures, l'un des symboles A (AM), P (PM) ou H (24h) détermine le format horaire 12/24h.

- Appuyez sur SPLIT/RESET pour passer au réglage des minutes d'alarme.
- Appuyez sur START/STOP pour régler les minutes. Maintenez pour un défilement rapide.
- Appuyez sur MODE pour confirmer les réglages.

Activer/Désactiver la fonction d'alarme
- Appuyez sur SPLIT/RESET, à partir de l'affichage par défaut de l'horloge, pour afficher l'heure d'alarme.
- Appuyez simultanément sur SPLIT/RESET et START/STOP pour activer ou désactiver la fonction d'alarme.

Note :
- La fonction d'alarme est activée lorsque l'icône de l'alarme s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran ; et désactivée dans le cas inverse où l'icône disparait.
- Avec la fonction d'alarme activée, une sonnerie retentit tous les jours à l'heure programmée.

Dès que le signal sonore retentit, au choix:
- Appuyez sur START/STOP pour répéter la sonnerie à nouveau après 5 minutes
- Appuyez sur SPLIT/RESET pour arrêter de la sonnerie. Vous l'entendrez de nouveau le lendemain à l'heure programmée.
- Si aucune touche n'est appuyée, la sonnerie s'arrête automatiquement au bout de 59 secondes.

Afficher la date et l'heure
- Appuyez sur MODE jusqu'à ce que l'affichage par défaut de l'horloge apparaisse.
- Le jour de la semaine est indiqué par une barre en haut de l'écran d'affichage en face des symboles SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA.
- Maintenez START/STOP pour afficher la date.
- Maintenez SPLIT/RESET pour afficher l'heure d'alarme.

Activer le bip horaire
- Appuyez sur SPLIT/RESET, à partir de l'affichage par défaut de l'horloge.
- Appuyez simultanément sur SPLIT/RESET et MODE pour activer ou désactiver le bip horaire.

Note :
- La fonction bip horaire est activée lorsque la ligne horizontale des jours de la semaine dans la partie supérieure de l'écran d'affichage est visible ; et désactivée dans le cas inverse où la ligne est invisible.

CHRONOMETRE
Mesurez les temps nets, d'addition et temps intermédiaires
- Appuyez 1 fois sur MODE, à partir du mode par défaut de l'horloge, pour basculer sur la fonction chronomètre.
- Appuyez sur START/STOP pour démarrer/stopper le chronomètre et afficher le temps net et les temps d'addition.
- Appuyez sur SPLIT/RESET, pendant le chronométrage, pour afficher le temps intermédiaire SPLIT à l'écran.
- Appuyez sur SPLIT/RESET, lorsque le chronomètre est stoppé, pour remettre le chronomètre à zéro

Note :
- Le temps intermédiaire SPLIT (temps du 1er arrivé) reste figé tant qu'aucun nouvel appui sur SPLIT/RESET n'est effectué.
- Appuyez à nouveau sur SPLIT/RESET pour relancer le chronomètre et rattraper le temps écoulé depuis le départ.
- Appuyez à nouveau sur SPLIT/RESET pour afficher le nouveau temps intermédiaire SPLIT (temps du 2ème arrivé).
- Répétez si besoin les actions ci-dessus pour afficher les temps de passages intermédiaires successifs.
- Appuyez sur SPLIT/RESET, lorsque le chronomètre est stoppé (STOP) ou figé (SPLIT), pour remettre le chronomètre à zéro.

ENTRETIEN
Maintenez votre instrument en état pour une utilisation durable
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer votre chronomètre.
- Protégez votre chronomètre de la chaleur extrême, des chocs et de l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- Nettoyez le chronomètre à l'aide d'un chiffon humide à l'eau et/ou savon naturel
Attention : non détergeant, industriel ou synthétique
- Enlever la pile et rangez votre chronomètre dans un endroit sec, en cas de non utilisation prolongée.
- Évitez tout contact direct avec des liquides corrosifs, qui peuvent détériorer les joints et les parties en plastique.

REMPLACEMENT DES PILES
Remplacez immédiatement la pile lorsque l'affichage devient faible
- Ouvrez le compartiment à pile en tournant d'un quart de tour.
- Remplacez la pile lithium CR2032 par une pile neuve du même type, en veillant à respecter la polarité +/-.
- Refermez le compartiment en prenant soin de ne pas détériorer le joint d'étanchéité.

Note : Remplacer le joint si celui-ci présente des défauts.
Note : Utilisez de la graisse d'étanchéité à chaque changement de pile pour garantir l'étanchéité du chronomètre.
IMPORTANT : Veillez à déposer les piles et matériel usagés dans un endroit écologiquement approprié.

DONNEES TECHNIQUES
Chronomètre : 24 h – Temps SPLIT
Résolution : 1/100 sec sur 30 mn, 1 sec au-delà
Horloge 12/24h / Calendrier / Alarme
Dimensions (L x H x P) : 66 x 78 x 20 mm / Poids : 50 g
Alimentation : 1 x CR2032 lithium isolée
Consommation : <1 µA par défaut ; 50 µA en mode chrono
Etanche à la pluie et aux projections

Déclaration de conformité CE
Ce produit a été fabriqué avec des matériaux de construction de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE) et à la limitation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

La société IHM – MOINEAU INSTRUMENTS, importateur d'instruments horaires et de mesure, déclare que l'équipement électronique Réf. 0335XC est conforme à la directive CE - 2014/53/UE et autres directives de mise sur le marché français et européen.

ORIGINE
China

DOMINIQUE DUTSCHER SAS