


STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

Désinfectant de Haut Niveau

MODE D'EMPLOI

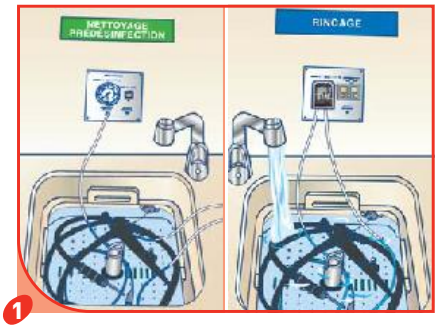

1

Etape de pré-désinfection : Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R, ou ANIOSYME PLA II.
Rincer soigneusement.
Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.



2

Etape de désinfection : verser la solution.
Couvrir le bac.
Temps de contact : 10 min. ou 1 heure selon l'activité recherchée.
Temps de conservation maximum du bain : 7 jours



3

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm).
Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.



4

Essuyer avec un champ à usage unique.
Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

COMPOSITION

STERANIOS 2% est une solution de glutaraldéhyde à 2% (exprimé en matière active à 100%), tamponnée à pH 6 en présence d'un catalyseur d'effets de surface.
STERANIOS 2% NG et STERANIOS 2% ECS contiennent 2 composés qui, en association, limitent l'évaporation du glutaraldéhyde.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage entre +5°C et +35°C.
Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, NF T 72-171 EN 14561	5 minutes
	Helicobacter pylori	10 minutes
Mycobactéries	Mycobacterium tuberculosis (B.K.)	5 minutes
	EN 14348 (M. terrae, M avium) EN 14563 (M. terrae)	10 minutes
Levures / Moisissures	EN 1275	10 minutes
	EN 13624, EN 14562	10 minutes
Virus	HIV-1, HBV, Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV)	5 minutes
	EN 14476	10 minutes
Spores	NF T 72-230	1 heure
	T 72-301 (C.difficile)	30 minutes
	Mycoplasmes urogénitaux	5 minutes

CONDITIONNEMENTS

1. STERANIOS 2% — 4 bidons de 5L.....Réf 382.034
2. STERANIOS 2% NG — 4 bidons de 5L.....Réf 383.034
3. STERANIOS 2% ECS — 4 bidons de 5L.....Réf 710.034



laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

FR0382-130102 - Photos non contractuelles