HYGIÈNE ENVIRONNEMENTALE

WIP'ANIOS EXCEL

Lingettes prêtes à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection

Caractéristiques du produit

- Nettoie et désinfecte en une seule étape
- Solution d'imprégnation: Formulée sans parfum, ni colorant
- Large spectre antimicrobien et temps de contact court
- La formule assure la compatibilité avec une large gamme de matériaux, y compris les polymères (ex. polycarbonate, plexiglas)
- pH: 6
- Lingettes en viscose 100% biodégradable

Propriétés microbiologiques

Efficacité	Temps de contact
Bactéricide actif selon EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Levuricide actif selon EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberculocide actif selon EN 14348*	60 min
Active sur les virus enveloppés selon EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Virucide à spectre limité selon EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* conditions de saleté

Informations sur le conditionnement et les commandes

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
WIP'ANIOS EXCEL (180 x 200 mm)	12 x 50 lingettes	2446424
WIP'ANIOS EXCEL (180 x 200 mm)	6 x 100 lingettes	2446655HH
WIP'ANIOS EXCEL - support mural	1	425185

Zone d'application

Lingettes prêtes à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs; l'essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection; pour les surfaces générales (application biocide).

Mode d'emploi

Lingettes prêtes à l'emploi.

Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette, la désinfection ne pourrait plus être garantie. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses. Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d'hygiène en place. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux.

Durée limite d'utilisation après ouverture basée sur EN 16615 : 3 mois.

Composition

Solution d'imprégnation:
100g de produit contiennent :
0,3g de chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

Stockage

Stockage : entre +5°C et +25°C.


Certificats

Dossier scientifique (efficacité, compatibilité, etc.) disponible sur demande.

Les dispositifs médicaux et biocides sont à utiliser avec précaution

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.

Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre.

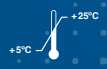

USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

DOMINIQUE DUTSCHER

CE 0459
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB® PROTECTING WHAT'S VITAL™

LABORATOIRES ANIOS An Ecolab Company

© 2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MD-BIO-PT2_FR-1124