HYGIÈNE ENVIRONNEMENTALE

ANIOSPRAY QUICK

Solution désinfectante



Aniospray Quick
1 L



Aniospray Quick
5 L

Données physico-chimiques

- Produit prêt à l'emploi
- Liquide limpide incolore
- Densité à 20°C : environ 0,9
- pH à + 20°C : environ 5,5
- pH à +20°C, Dilution à 1 % (m/m) dans l'eau : environ 6

Propriétés microbiologiques

Efficacité	Temps de contact
Bactéricide selon EN 13727* (30 sec), EN 17387* (1 min)	1 min
Levuricide selon EN 13624*, EN 17387*	30 sec
Fongicide selon EN 13624*, EN 17387*	5 min
Tuberculocide selon EN 14348*	30 sec
Mycobactéricide selon EN 14348*	5 min
Acitf sur les virus enveloppés selon EN 14476*, EN 16777*	30 sec
Efficacité virucide à spectre limité selon EN 14476*, EN 16777* Adenovirus Norovirus (MNV)	5 min 30 sec 5 min

* Conditions de propreté

Information

Produit	Conditionnement	Référence
ANIOSPRAY QUICK	12 flacons de 1L + 4 pulvérisateurs	2084073HD
ANIOSPRAY QUICK	4 bidons de 5L	2084034Z2

Indications

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool; et des surfaces générales (application biocide).

Mode d'emploi

Solution prête à l'emploi.
S'utilise sur des surfaces et dispositifs médicaux préalablement nettoyés.

Pour les sprays :
Pulvériser sur les zones à traiter jusqu'à ce qu'elles soient totalement humectées.

Pour les autres conditionnements :
Mouiller les zones à traiter jusqu'à ce qu'elles soient totalement humectées.

Applicable à tous les conditionnements :
Appliquer en quantité suffisante (+/- 40 ml/m²).
Un mouillage complet de toutes les surfaces à désinfecter est important.
Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec la peau ou les muqueuses.
Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux.

Remarques

Vérifier avant application la compatibilité des zones à traiter avec l'alcool. Les appareils électriques à désinfecter seront hors tension.

Composition

100g contient: 55g d'Ethanol (CAS N° 64-17-5), 0.11g DMPAP, agent dénaturant, parfum.

Conditions de stockage


Stockage : entre +5°C et +25°C.

Certificats

L'ensemble des activités antimicrobiennes d'ANIOSPRAY QUICK est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

Les dispositifs médicaux et biocides sont à utiliser avec précaution

Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif médical doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre.

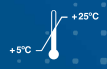

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

DOMINIQUE DUTSCHER

CE 0459
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB® PROTECTING WHAT'S VITAL™

LABORATOIRES ANIOS An Ecolab Company

© 2026 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MD-BIO-PT2-HC-ENHY-A.SPQ-5005-1-FR-0426