


OPASTER'ANIOS


Désinfectant de Haut Niveau

MODE D'EMPLOI

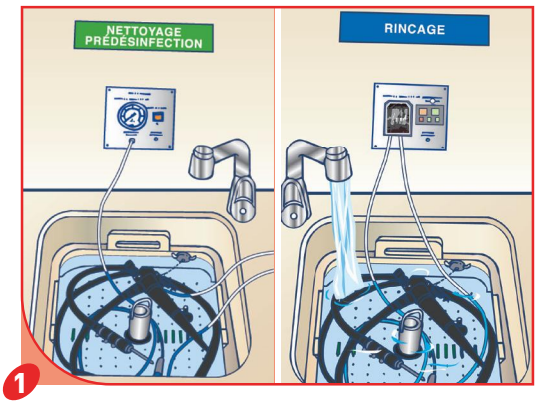


1

Etape de pré-désinfection : Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME X3, ANIOS'CLEAN EXCEL D, ou SALVANIOS Premium. Rincer soigneusement.
Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.

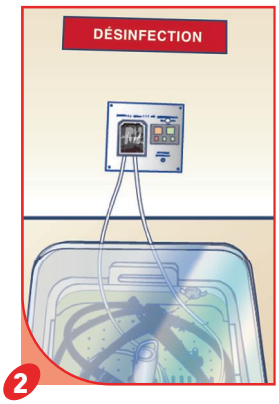


2

Etape de désinfection : verser la solution.
Couvrir le bac.
Temps de contact : 5 min.*
Temps de conservation maximum du bain de trempage : 7 jours.

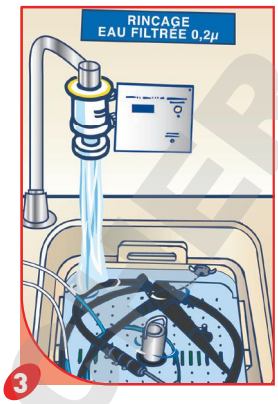

3

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm).
Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.

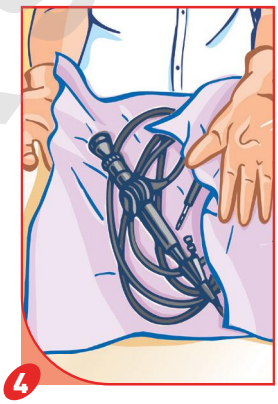

4

Essuyer avec un champ à usage unique.
Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

*Activité sur Clostridium difficile en 30 minutes.

COMPOSITION

Solution d'ortho-Phtalaldéhyde (0.55%) en milieu tamponné, colorant, parfum.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Stockage entre +5°C et +35°C.
Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727+A1, EN 14561	**5 minutes**
Mycobactéries	EN 14348, EN 14563	**5 minutes**
Levures/ Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 14562	**5 minutes**
Virus	EN 14476	**5 minutes**
	PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus	**5 minutes**
Spores de bactéries	Clostridium difficile 027 (EN 14347, EN 13704)	**30 minutes**

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

CONDITIONNEMENTS

1 4 bidons de 5L..... Ref 2504.028
2 Bandelettes de contrôle (boîte de 50)..... Ref 100.110



1 2

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

FR2504-160916-Photos non contractuelles

DOMINIQUE DUTSCHER SAS