


ANIOSYME *X3*


Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

MODE D'EMPLOI

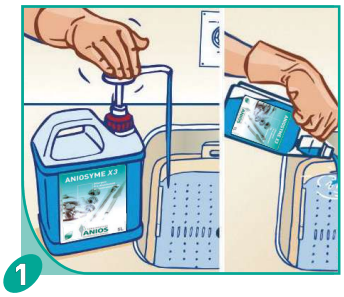


1

Dilution à 0,5 % :
Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

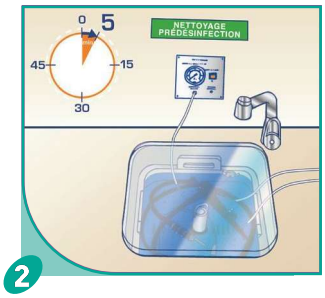


2

Immerger complètement le dispositif médical.
Temps de trempage minimum conseillé : 5 min.
Brosser si nécessaire.
Pour le matériel endoscopique :
Double nettoyage 10 + 5 minutes
Ecouvillonner

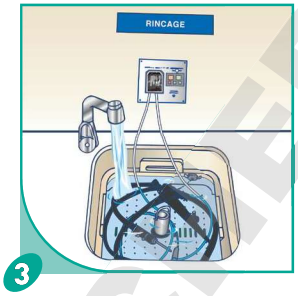

3

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique).
Pour le matériel endoscopique : l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.

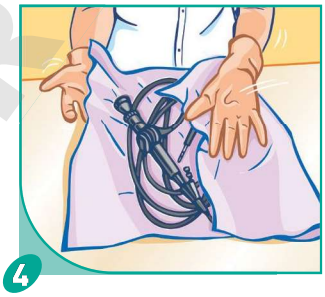

4

Essuyer avec un champ propre.
Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

COMPOSITION

Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 14561 BMR selon EN 13727	**5 min. / 0,5%**
Levures	EN 1275, EN 13624, EN 14562	**5 min. / 0,5%**
Virus	Selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus	**5 min. / 0,5%**

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Stockage : de +5°C à + 35°C.
Dispositif médical de classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENTS

200 doses de 25ml ..... Réf. 2633.097
1 12 flacons de 1 litre avec doseur incorporé..... Réf. 2633.095
2 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 25 ml..... Réf. 2633.036



2 1

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

FR2633-161214-Photos non contractuelles

DOMINIQUE DUTSCHER SAS