

ANIOSGEL 85 *NPC*


Gel désinfectant pour friction hydroalcoolique

MODE D'EMPLOI



Verser la quantité nécessaire

Frotter selon la technique EN 1500. **Ne pas rincer. Ne pas sécher.**

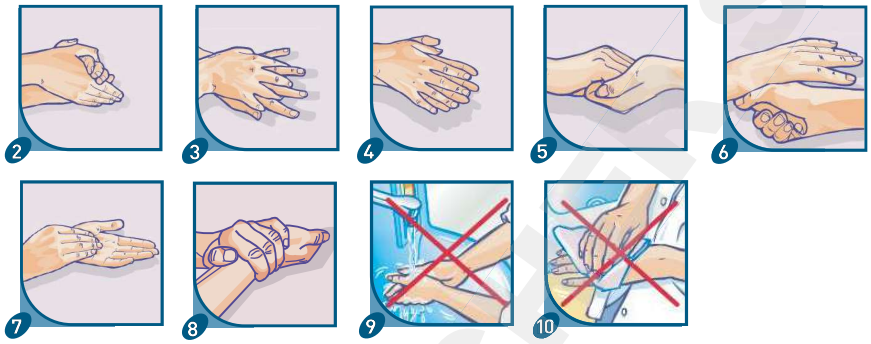

Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes.
Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

COMPOSITION

Ethanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau. Sans parfum ni colorant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +25°C. Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (Groupe 1 - TP 1) - Usage professionnel.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes
Bactéries	EN 1040 : 30 sec Selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 30 sec
Mycobactéries	EN 14348 : 30 sec
Levures/ Moisissures	EN 1275 : 30 sec Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec
Virus	EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A H_5N_1 - H_1N_1, Coronavirus : 30 sec

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande

Protocole	Normes	Conditions
Friction Hygiénique	EN 13727, EN 13624, EN 1500	Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.
Friction Chirurgicale	EN 13727, EN 13624, EN 12791	Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.

CONDITIONNEMENTS

1. 20 flacons de 75 ml ..... Réf. 1644.274
2. 20 flacons de 100 ml ..... Réf. 1644.505
   6 flacons de 300 ml avec pompe vissée (1,5 ml) Réf. 1644.366
3. 6 flacons de 300 ml avec pompe vissée (3 ml) ... Réf. 1644.762
   12 flacons 500 ml pompe vissée (1,5 ml) ..... Réf. 1644.636*
4. 12 flacons 500 ml pompe vissée (3 ml) ..... Réf. 1644.748*
5. 12 flacons carrés 500 ml pour distributeur ..... Réf. 1644.639*
   12 flacons 1L pompe vissée (1,5 ml) ..... Réf. 1644.637*
6. 12 flacons 1L pompe vissée (3 ml) ..... Réf. 1644.763*
7. 12 flacons de 1L airless (1,5 ml)..... Réf. 1644.638*
8. 12 flacons de 1L airless (3 ml)..... Réf. 1644.333*

Support pour flacon 300 ml..... Réf. 425.078
Support pour flacon 500 ml..... Réf. 425.058



* Flacons teintés bleus

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

FR1644-150617- Photos non contractuelles

DOMINIQUE DUTSCHER SAS