

DÉSINFECTANT
DE HAUT NIVEAU

ANIOXYDE 1000 LD et BANDELETTES ANIOXYDE 1000 LD

DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU DU MATÉRIEL THERMOSENSIBLE ET DU MATÉRIEL D'ENDOSCOPIE

- Durée de conservation avant ouverture: 24 mois
- Formule brevetée
- Désinfectant de haut niveau issu du système PHERA®, actif sur les spores de bactéries
- Production extemporanée d'acide peracétique
- Alternative au glutaraldéhyde
- Sans aldéhyde: pas de fixation de protéïne
- Contrôle de l'efficacité du bain avec des bandelettes
- Spectre complet en 5 minutes



LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com


ANIOXYDE 1000 LD

Désinfectant de haut niveau du matériel thermosensible et du matériel d'endoscopie


CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Couleur du bain: rose après activation
- Absence de vapeur d'acide acétique: meilleure tolérance par l'utilisateur
- Utilisation simplifiée: activateur intégré au bidon de 5 L
- Efficacité prouvée à 1000 ppm d'acide peracétique pour un spectre complet*
- Durée d'utilisation du bain de trempage: 14 jours maximum (7 jours pour la France). Vérifier la conformité du bain avec les bandelettes de contrôle
- Large compatibilité vis-à-vis des matérieaux, bacs et paillasses
- Peut être utilisé en présence d'un système d'aspiration des vapeurs
- La solution désinfectante contient de 2000 ppm d'acide peracétique (après activation) à 1000 ppm (concentration limite du seuil detectée par bandelette de contrôle)


MODE D'EMPLOI

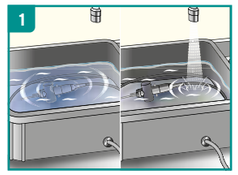


Etape de pré-désinfection: Nettoyer le dispositif médical avec un produit détergent ou pré-désinfectant. Rincer abondamment. Pour le matériel endoscopique: brosser les canaux.

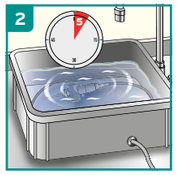

Etape de désinfection: Verser la solution activée (voir la procédure d'activation de la solution sur l'étiquette/protocole). Couvrir le bac. Respecter le temps de contact minimum. Pour le matériel endoscopique: faire circuler la solution à l'intérieur des canaux. Ne pas ajouter d'autre produit dans Anioxyde 1000 LD.

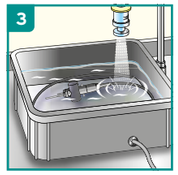

Rincer abondamment avec de l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm) pour éliminer toute trace de produit. Pour le matériel d'endoscopie : rincer les parties internes et externes du dispositif médical.

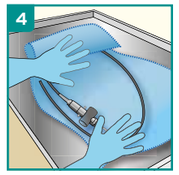

Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITÉ / CONDITIONS	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide - Selon EN 13727/EN 14561, conditions de propreté	5 min
Levuricide - Selon EN 13624/EN 14562, conditions de propreté	5 min
Tuberculocide - Selon EN 14348/EN 14563, conditions de propreté	5 min
Fongicide - Selon EN 13624/EN 14562, conditons de propreté	5 min
Mycobactéricide - Selon EN 14348/EN 14563, conditions de propreté	5 min
Virucide - Selon EN 14476/EN 17111, conditions de propreté	5 min
Actif sur Adenovirus - Selon EN 14476/EN 17111, conditons de propreté	5 min
Actif sur Norovirus - Selon EN 14476/EN 17111, conditons de propreté	5 min
Sporicide (B. subtilis / C. difficile) - Selon EN 17126, conditions de propreté	5 min

INFORMATIONS

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	REFERENCE
Anioxyde 1000 LD	4 bidons de 5 L + activateur intégré	2824.299
Anioxyde 1000 LD	Boîte de 50 bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans l'ANIOXYDE 1000 LD (1000 ppm)	100.120

CE
0459

INDICATION

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux: instrumentation médico-chirurgicale, matériel thermosensible et matériel d'endoscopie.

COMPOSITION

Production extemporanée d'acide peracétique par l'acétylcaprolactam (système PHERA), l'Anioxyde 1000 LD contient 3% de peroxyde d'hydrogène.

MODE D'EMPLOI

Solution à deux composants pour usage professionnel. Prêt à l'emploi après activation. Avant la première utilisation, attendre au moins 30 minutes (temps nécessaire à l'activation du produit). Nettoyer et rincer soigneusement le dispositif médical avant trempage dans ANIOXYDE 1000 LD (solution activée).

Pour bidon de 5 L: Versez la totalité de l'activateur (flacon contenant 38,8 ml) dans le générateur (bidon de 5 L) puis versez la solution produite dans le bain de trempage.

Pour un flacon de 1 L: Versez la totalité de l'activateur (flacon contenant 8,3 ml) dans le générateur (bidon de 1 L) puis versez la solution produite dans le bain de trempage.

Vérifier le taux d'acide peracétique avec une bandelette de contrôle ANIOXYDE 1000 LD au début de la séance, à la reprise d'activité et toutes les 4 heures en cas d'activité consécutive. Conservation maximale du bain de trempage: 14 jours (Sauf en France - 7 jours maximum selon la réglementation française)

1. **Etape de pré-désinfection:** Nettoyer le dispositif médical avec un produit détergent ou pré-désinfectant. Rincer abondamment. Pour le matériel endoscopique: brosser les canaux.
2. **Etape de désinfection:** Verser la solution activée (voir la procédure d'activation de la solution sur l'étiquette/protocole). Couvrir le bac. Respecter le temps de contact minimum. Pour le matériel endoscopique: faire circuler la solution à l'intérieur des canaux. Ne pas ajouter d'autre produit dans Anioxyde 1000 LD.
3. Rincer abondamment avec de l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm) pour éliminer toute trace de produit. Pour le matériel d'endoscopie : rincer les parties internes et externes du dispositif médical.
4. Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage: entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes d'ANIOXYDE 1000 LD est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

BANDELETTES ANIOXYDE 1000 LD

INDICATIONS

50 bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans la solution reconstituée d'ANIOXYDE 1000 LD.

MODE D'EMPLOI

- Tremper la bandelette pendant une seconde, la sortir en la secouant pour éliminer l'excès de liquide
- Lecture après 10 secondes
  Noir uniforme sur toute la plage réactionnelle : CONFORME
  Coloration non uniforme, présence de points blanc, évanescence rapide de la couleur : NON CONFORME
- Ne jamais interpréter un résultat obtenu plus de 15 secondes après trempage
- Pour la fréquence d'utilisation, se reporter au mode d'emploi de l'étiquette de l'ANIOXYDE 1000 LD

CONDITIONS DE STOCKAGE

Refermer le tube après prélèvement d'une bandelette. Conserver à l'abri de l'humidité. Respecter la date limite d'utilisation reprise sur l'étiquette. Se conserve 90 jours après ouverture. Stocker entre +5°C et +25°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eliminer le produit et son récipient en prenant toutes les précautions d'usage. Usage réservé aux professionnels.

CE

LECTURE APRÈS 10 SECONDES:

Conforme
Noir uniforme sur toute la plage réactionnelle



Non conforme
Coloration non uniforme, présence de points blanc, évanescence rapide de la couleur





USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

© 2023 Ecolab. All rights reserved. HC-IR-A.OXY1000LD-5039-2-FR-0623

10048

Lezennes, le 17 janvier 2023

INFORMATION IMPORTANTE UTILISATION BANDELETTES

Bandelettes de contrôle ANIOXYDE 1000 et ANIOXYDE 1000 LD

Dans le cadre de l'arrêt d'ANIOXYDE 1000 et remplacement par ANIOXYDE 1000 LD, nous vous demandons de communiquer l'information ci-dessous à vos utilisateurs

L'usage des bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique d'ANIOXYDE 1000LD sont spécifiques (référence 100.120). Les bandelettes ANIOXYDE 1000 (référence 100194FG) ne conviennent pas pour le contrôle de l'acide peracétique des bains d'ANIOXYDE 1000 LD.

Si vous avez encore en votre possession des bandelettes tests pour ANIOXYDE 1000 (référence 100.194), celles-ci doivent exclusivement être utilisées avec le produit ANIOXYDE 1000.

Elles ne doivent en aucun cas être utilisées avec le produit ANIOXYDE 1000 LD. L'utilisation pouvant conduire à une absence de réaction et entrainer une lecture erronée de l'efficacité du bain.

En résumé :

J'ai du stock de produit	Je peux utiliser	Code bandelettes
ANIOXYDE 1000	Bandelette Anioxyde 1000	100194FG
ANIOXYDE 1000 LD	Bandelette Anioxyde 1000LD **Uniquement**	100120

Nous ajoutons que la coloration du bain d'ANIOXYDE 1000LD est rose, contrairement à ANIOXYDE 1000 (jaune) – Cette différence permet également d'identifier facilement s'il s'agit d'un bain ANIOXYDE 1000LD ou ANIOXYDE 1000.

Enfin les deux produits ne peuvent pas être utilisés ensemble dans un même bain.

Nous vous joignons une affichette informative que vous pouvez imprimer et positionner dans vos services.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire

Bien cordialement

Le service Commercial
Division Healthcare France
Laboratoires ANIOS,
an Ecolab Company

1, rue de l'Espoir 59260 LEZENNES – FRANCE
T. +33 3 20 67 67 67 – F. +33 3 20 67 67 68 – www.anios.com
SIREN N°823 326 061 – S.A.S. au capital de 656 204 591 €

INFORMATION

ANIOXYDE 1000 est remplacé par ANIOXYDE 1000LD

AVANT

ANIOXYDE 1000 & Bandelette ANIOXYDE 1000



MAINTENANT

ANIOXYDE 1000LD & Bandelette ANIOXYDE 1000LD



Même Procédure mais

CE QUI CHANGE

- ⇨ **Couleur de bain : Rose (au lieu de jaune)**
- ⇨ **Bandelette de contrôle <u>dédiée à Anioxyde 1000 LD</u>**
- ⇨ **Durée de stockage : 24 mois (au lieu de 12 mois)**

ATTENTION : ne pas utiliser la bandelette Anioxyde 1000 avec un bain Anioxyde 1000LD

Ne pas mixer les bidons pour un même bain de trempage

En cas de doute ou de question, veuillez vous rapprocher de votre Responsable de service

2024-01- Info Anioxyde 1000LD Dispositif médical classe IIB – Lire les instructions sur l'étiquette