misceo by Dynamic | 250F



FR / Notice d'utilisation et d'entretien
EN / User guide

DESCRIPTION / *DESCRIPTION*



CISAILLEUR 2 LAMES
MIXING 2 BLADES
4000 à 13500 tr/min
4000 to 13500 rpm
PC012 160 mm - 0.4 kg
PC013 190 mm - 0.4 kg



CISAILLEUR 4 LAMES /
MIXING 4 BLADES
4000 à 13500 tr/min
4000 to 13500 rpm
PC022 160 mm - 0.4 kg
PC023 190 mm - 0.4 kg



TURBO AGITATEUR
TURBO AGITATOR BLADE
350 à 1450 tr/min
350 to 1450 rpm
PC018 185 mm - 0.5 kg



TIGE PALE EN U
ANCHOR STIRRER TOOL
500 à 1600 tr/min
500 to 1600 rpm
PC0183 185 mm - 0.5 kg



TIGE HÉLICOÏDALE
SPIRAL STIRRER TOOL
500 à 1600 tr/min
500 to 1600 rpm
PC0182 185 mm - 0.8 kg



ROTOR-STATOR
ROTOR STATOR TOOL
2500 à 13000 tr/min
Entrefer : 0.25 mm
2500 to 13000 rpm
Airgap : 0.25 mm
PC010 160 mm - 0.3 kg
PC011 190 mm - 0.4 kg



TIGE DÉFLOCULEUR
DISSOLVER DISPERSION
TOOL
600 à 1600 tr/min
600 to 1600 rpm
PC0181 185 mm - 0.8 kg



DOUBLE FOUET
DOUBLE WHISK
600 à 2500 tr/min
600 to 2500 rpm
PC021 185 mm - 0.5 kg



KIT OUTILS
COMPLETE SET
C14264



BOITE DE RÉDUCTION
SANS OUTIL POUR KIT
TOOL FREE 1/9 REDUCTION
BOX
350 à 1600 tr/min
350 to 1600 rpm
PC018.0 185 mm - 0.5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / *TECHNICAL FEATURES*



BOL CUTTER 0,8 L
CUTTER BOWL 0,8 L
600 à 2500 tr/min
600 to 2500 rpm
PC020 170 mm - Ø 165 mm - 0.9 kg



STATIF
SUPPORT
SC050 200x285x630 mm - 8 kg



250F
2500 à 13000 tr/min (rotation)
2500 to 13000 rpm (rotation)
4.5-20 m/s (cisaillement/shearing)
PC105 76x70x395 mm - 1 kg

Scannez ici pour retrouver la viscosité maximum de nos outils /
Scan here to find the maximum viscosity of our tools

Température ambiante admissible *Permissible ambient temperature*		5°c - 40°c
Humidité relative admissible *Permissible relative humidity*		80%
Plage de température préconisée de la preparation *Recommended preparation temperature range*		-10°c à 110°c
Tension nominale *Nominal voltage*	VAC	220-240/110-120
Fréquence *Frequency*	Hz	50-60
Puissance consommée *Power consumption*	W	250
Degré de protection selon DIN EN 60529 *Protection to DIN EN 60529*		IPX1
Classe de protection *Protection class*		II
Bruit (sans outil) *Noise level (without tool)*	dB A	60

NOTICE D'UTILISATION

Consignes de sécurité

Pour la protection de l'utilisateur, lire intégralement la notice d'utilisation avant la mise en service et respecter les consignes de sécurité.

Laisser la notice à portée de tous.

Respecter les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les prescriptions pour la prévention des accidents du travail.

Porter les équipements de protection personnels selon la classe de danger du milieu à traiter. Sinon, il y a un risque d'exposition aux dangers suivants :

- Pulvérisation et évaporation de liquides,
- Happement de parties du corps, cheveux, habits et bijoux.

Avant toute utilisation, contrôler l'état de l'appareil et des accessoires. Ne pas utiliser les pièces endommagées.

Seuls des outils autorisés par MISCEO peuvent être utilisés.

Ne mettre en marche que lorsque l'outil est immergé.

Il ne faut jamais utiliser les outils hors d'une formulation car le système d'étanchéité et les paliers sont détruits sans le refroidissement des outils par la matière.

En cas de décentrage ou d'apparition de bruits inhabituels, éteindre immédiatement l'appareil. Remplacer l'outil. S'il y a encore un décentrage et une apparition de bruits inhabituels, renvoyer l'appareil, accompagné d'une description du défaut, pour réparation au revendeur ou au fabricant.

L'appareil comporte un ou plusieurs éléments en mouvement, faire attention lors de son utilisation et de son nettoyage, risque de coupure.

Ne pas couvrir les ouïes d'aération servant au refroidissement du moteur.

Ne traiter aucune substance combustible et inflammable.

Ne pas utiliser l'appareil dans les atmosphères explosives, avec des matières dangereuses et sous l'eau.

Ne traiter des substances pathogènes que dans des récipients fermés et sous une hotte d'aspiration adaptée. En cas de questions, contacter MISCEO.

Il peut se produire des décharges électrostatiques entre le milieu et l'arbre de dispersion qui constituent un risque direct.

Ne traiter que des milieux pour lesquels l'apport d'énergie pendant l'opération ne pose pas problème. Cela vaut aussi pour les autres apports d'énergie, comme la radiation lumineuse par ex..

Veuillez noter qu'il faut éviter de se trouver trop près de l'appareil pendant le dosage de poudre. La poudre peut être soufflée par des tourbillonnements de l'air de l'entraînement.

Avant toute manipulation de l'appareil, vérifier qu'il est débranché.

Il n'est possible de couper l'alimentation de l'appareil en courant électrique qu'en débranchant la prise de courant ou la prise secteur de l'appareil.

L'indication de tension de la plaque d'identification doit correspondre avec la tension du réseau.

La prise de courant utilisée pour le branchement sur secteur doit être facile d'accès.

Après une coupure de l'alimentation électrique, l'appareil ne redémarre pas seul.

Éviter les coups sur l'appareil et les accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Application

L'appareil offre une puissance suffisante pour exploiter efficacement les principales techniques de dispersion et mélange en laboratoire. Associé à un outil compatible, il fonctionne en mode continu comme disperseur ou mélangeur pour traiter les liquides de viscosités variées.

ROTOR STATOR
Fort cisaillement / faible viscosité

Cet accessoire permet de :

- Homogénéiser
- Emulsifier
- Disperser des poudres, et des pigments dans un liquide
- Réduire la taille des particules à quelques microns

TIGE CISAILLEUR 2 LAMES

Cet accessoire permet de :

- Broyer
- Mélanger
- Dissoudre

TIGE CISAILLEUR 4 LAMES

Cet accessoire permet de:

- Broyer
- Mélanger
- Dissoudre

TURBO AGITATEUR
Faible cisaillement / faible à moyenne viscosité

Cet accessoire permet de:

- Mélanger
- Agiter
- Mettre en suspension
- Hydrater

BOL CUTTER

Cet accessoire permet de :

- Broyer
- Microniser de végétaux (dans le but d'une extraction)
- Couper

OUTIL FOUET

Cet accessoire permet de :

- Mélanger
- Fouetter
- Foisonner

TIGE PALE EN U
Vitesse faible à moyenne / moyenne à forte viscosité

Cet accessoire permet de :

- Mélanger
- Répartir
- Agiter
- Maintenir en mouvement

NOTICE D'UTILISATION

TIGE DEFLOCULEUR
Vitesse moyenne à haute / viscosité faible à élevée

Cet accessoire permet de :

- Fragmenter
- Disperser des particules
- Dissoudre des poudres
- Hydrater

TIGE HÉLICOÏDALE
Vitesse moyenne à haute / viscosité faible à élevée

Cet accessoire permet de :

- Mélanger de manière homogène
- Répartir uniformément

Fonctionnement

DÉMONTAGE DE L'OUTIL

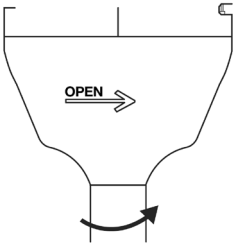


fig. 1) Démontage de l'accessoire.

Débrancher l'appareil.

Visser l'accessoire dans le sens de la flèche inscrite sur l'accessoire (fig. n°1).

MONTAGE DE L'OUTIL

Débrancher l'appareil.

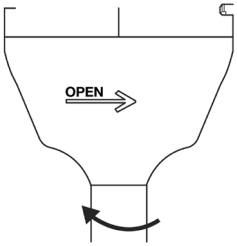


fig. 2) Montage de l'accessoire.

Choisir l'outil correspondant à la préparation à réaliser.

Visser l'accessoire dans le sens inverse de la flèche inscrite sur l'accessoire jusqu'à la butée (fig. n°2).

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

Tenir compte des conditions ambiantes listées dans les données techniques.

Brancher la prise de l'appareil sur le secteur.

Au branchement de l'appareil sur l'alimentation du réseau, aucune LED n'indique que l'appareil est sous tension.

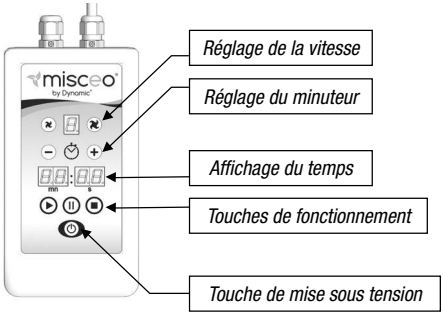


fig. 3) Description du boîtier de commande.



fig. 4) Bouton de mise sous tension.



fig. 5) Etat d'affichage à la mise sous tension.

En appuyant sur la touche de mise sous tension (voir fig. n°4), l'affichage du réglage de la vitesse indique '1' et l'affichage du temps indique « 00 : 00 ».

FONCTIONNEMENT EN CHRONOMÈTRE

MISE EN MARCHE



L'affichage du temps défile par palier de 1 seconde.
L'appareil s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.

MISE EN PAUSE



L'appareil s'arrête.
L'affichage du temps clignote.



L'appareil se remet en marche.

ARRÊT DE L'APPAREIL



L' affichage du temps clignote alternativement entre « STOP » et la valeur du temps de fonctionnement.

La remise en route de l'appareil n'est plus possible.

Il n'est plus possible de faire un réglage de vitesse.



L' affichage du temps indique « 00 : 00 » et la vitesse est réglée à la vitesse 1 (fig. n°5).

FONCTIONNEMENT EN MINUTEUR

Ce mode de fonctionnement est possible uniquement si l'affichage du temps indique « 00 :00 » et que l'appareil est à l'arrêt.

RÉGLAGE DU TEMPS



Régler le temps en appuyant sur les touches « + » et « - ».

Un appui court : le palier de réglage est de 1 seconde.

Un appui long : le palier de réglage est de 5 secondes.

Un appui très long : le palier de réglage est de 30 secondes.

Réglage maximal : 20 minutes

MISE EN MARCHE



NOTICE D'UTILISATION

L'affichage du temps défile par palier de 1 seconde.

MISE EN PAUSE



L'appareil s'arrête.
L'affichage du temps clignote.



Il est possible de modifier le réglage du temps en appuyant sur les touches « + » et « - ».

Réglage maximal : 20 minutes



Remise en marche de l'appareil.

L'affichage du défilement du temps reprend.

ARRÊT DE L'APPAREIL



L'appareil s'arrête.

L'affichage du temps clignote alternativement entre « STOP » et la valeur du temps de fonctionnement.

La remise en route de l'appareil n'est plus possible.


Il n'est plus possible de faire un réglage de temps ou de vitesse.



L' affichage du temps indique « 00 : 00 » et la vitesse est réglée à la vitesse 1 (fig. n°5).

RÉGLAGE DE LA VITESSE

DIMINUTION DE LA VITESSE

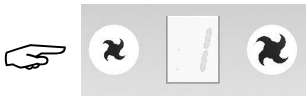


La vitesse peut être diminuée en appuyant sur la touche avec la petite hélice.

A chaque appui, la vitesse diminue d'un cran.

Vitesse mini : 1

AUGMENTATION DE LA VITESSE

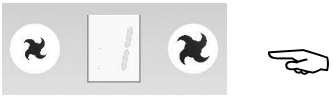

La vitesse peut être augmentée en appuyant sur la touche avec la grande hélice.

A chaque appui, la vitesse augmente d'un cran.

Vitesse maxi : 8

FONCTIONNEMENT DU STATIF

SERRAGE DU BLOC-MOTEUR

1. Écarter les doigts de la pince grâce à la molette
2. Mettre en place le bloc-moteur dans la pince
3. Resserrer les doigts de la pince

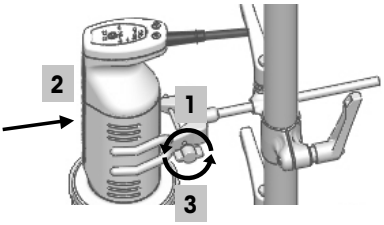


fig. 6) Mise en place du bloc-moteur.

SERRAGE DU RÉCIPIENT / BECHER

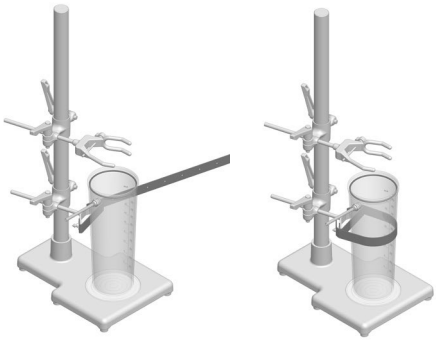


fig. 7) Mise en place du récipient.

1. Positionner le récipient à l'intérieur du vé.
2. Utiliser la sangle pour serrer le récipient.

RÉGLAGE EN HAUTEUR

1. Desserrer la noix de serrage grâce au bouton vertical.
2. Régler à la hauteur voulue.
3. Resserrer la noix de serrage.

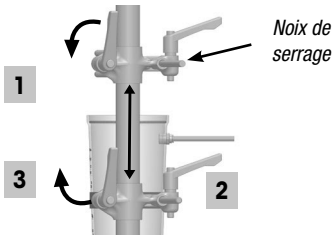


fig. 8) Réglage de la hauteur.

RÉGLAGE EN PROFONDEUR

1. Desserrer la noix de serrage grâce au bouton horizontal.
2. Régler à la profondeur voulue.
3. Resserrer la noix de serrage.

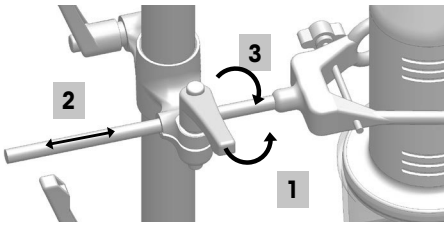


fig. 9) Réglage de la profondeur.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour éviter l'entrée d'air accidentelle dans le milieu en raison d'importantes turbulences dues à la rotation, l'appareil peut être placé de manière légèrement décentrée dans le becher/ récipient.

La protection de l'utilisateur n'est plus garantie si l'appareil est utilisé avec un accessoire n'ayant pas été fourni ou conseillé par le fabricant ou si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux prescriptions du fabricant ou si l'appareil ou le circuit imprimé sont modifiés par un tiers.

Entretien et nettoyage

ENTRETIEN

Le bloc-moteur est soumis à l'usure. Les charbons moteurs et l'accouplement peuvent s'user avec le temps.

Il est souhaitable de vérifier périodiquement :

- Le bon état du cordon d'alimentation (les fils de cuivre du cordon ne doivent pas être apparents).
- L'affûtage des outils.
- L'étanchéité du tube de plongée.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

NETTOYAGE

Il est recommandé de porter des gants de protection pour le nettoyage.

Débrancher la prise secteur pour le nettoyage.

Le nettoyage de l'appareil peut s'effectuer avec une éponge ou un chiffon légèrement humide.

Lors du nettoyage, éviter toute infiltration d'humidité dans l'appareil.

Avant d'employer une autre méthode de nettoyage ou décontamination autre, l'utilisateur est tenu de s'informer auprès de MISCEO.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez indiquer:

- Le type de l'appareil
- Le numéro de fabrication (voir la plaque d'identification)
- Le numéro de position et la désignation de la pièce de rechange

Pour retrouver notre catalogue de pièces détachées aller sur notre site internet :

https://www.misceo-cosmetics.com/fr/

Puis aller sur la page « notre catalogue » et cliquez ensuite sur télécharger.

Raccordement électrique


Cet appareil de classe II (double isolation) est alimenté en courant alternatif monophasé et ne nécessite pas de prise de terre.

Le moteur de type universel est antiparasite.

L'installation devra être protégée par un disjoncteur différentiel et un fusible de calibre 10 A.

Prévoir une prise de courant 10/16 A monophasée normalisée.

Vérifier la concordance entre la tension du réseau électrique et la valeur indiquée sur la plaque caractéristique de l'appareil.

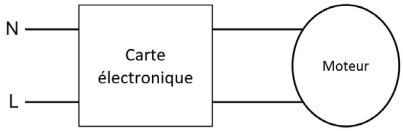

Garantie / Déclaration de conformité Service après-vente

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux réglementations 2004/108/CE, 2006/42/CE et 2011/65/EU.

GARANTIE

En conformité avec les conditions de vente et de livraison de MISCEO, la garantie sur cet appareil est de 12 mois. En cas de problème entrant dans le cadre de la garantie, veuillez contacter MISCEO. Vous pouvez également envoyer directement l'appareil accompagné du bon de livraison et un descriptif de votre réclamation a notre usine. Les frais de transport restent alors à votre charge.

misceo by DYNAMIC FRANCE S.A.S.

518 rue Léo Baekeland

85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex - FRANCE

Tél. : +33 (0)2 51 63 02 72

contact@misceo-cosmetics.com

www.misceo-cosmetics.com

La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure et n'est pas valable en cas de défauts dus à une utilisation non conforme, à un soin et un entretien insuffisants, allant à l'encontre des recommandations du présent mode d'emploi.

RÉPARATION

Seules les personnes spécialisées sont autorisées à ouvrir l'appareil.

En cas de réparation n'envoyer que des appareils nettoyés et exempts de matières nocives pour la santé. Utiliser un emballage de transport adapté.

Renvoyer l'appareil à l'adresse suivante :

misceo by DYNAMIC FRANCE S.A.S.
518 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 51 63 02 72
contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com

Safety instructions

Read the operating instructions in full before starting up and follow the safety instructions.

Keep the operating instructions in a place where they can be accessed by everyone.

Follow the safety instructions, guidelines, occupational health and safety and accident prevention regulations.

Wear your personal protective equipment in accordance with the hazard category of the media to be processed. Otherwise there is a risk from:

- Splashing and evaporation of liquids
- Body parts, hair, clothing and jewellery getting caught.

Check the appliance and accessories beforehand for damage each time you use them. Do not use damaged components.

Only elements approved by MISCEO may be used.

Never operate the appliance without being immersed in liquid.

The tools must never be used outside of a formulation because the sealing system and bearings are destroyed without the tools being cooled by the material.

In the event of unbalance or unusual noises, switch off the appliance immediately. Replace the dispersing element. If there is no difference after the change of the dispersing tool, return it to the dealer or the manufacturer along with a description of the fault.

Warning, this product includes moving parts. Take care when using it and when cleaning it as there is a risk of cuts.

Do not cover the ventilation slots on the block-motor in order to ensure adequate cooling of the motor.

Do not process any flammable or combustible materials.

Do not operate the appliance in explosive atmospheres, with hazardous substances or under water.

Process pathogenic materials only in closed vessels under a suitable extractor hood. Please contact MISCEO if you have any questions.

There may be electrostatic discharges between the medium and the dispersing instrument shaft which could pose a direct danger.

Only process media that will not react dangerously to the extra energy produced through processing. This also applies to any extra energy produced in other ways, e.g. through light irradiation.

Please note that you should avoid standing too close to the device during powder dosing. The powder may be blown away by air turbulence from the drive.

Before handling the device, check that it is unplugged.

The appliance can only be disconnected from the mains supply by pulling out the mains plug or the connector plug.

The voltage stated on the type plate must correspond to the mains voltage.

The socket for the mains cord must be easily accessible.

The appliance does not start up again automatically following a cut in the power supply.

Protect the appliance and accessories from bumps and impacts.

This appliance may be used by children at least 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or without experience or knowledge if they are correctly supervised or if they have been given instructions on how to use the appliance safely, and if they correctly understand the risks involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and care by the user must not be performed by unsupervised children.

Application

The device offers sufficient power to effectively use the main dispersion and mixing techniques in the laboratory. When combined with a compatible tool, it operates in continuous mode as a disperser or mixer to process liquids of varying viscosities.

ROTOR-STATOR
High shear / low viscosity

This tool is used to :

- Homogenize
- Emulsify
- Disperse powders and pigments in a liquid
- Particle size reduction

MIXING 2 BLADES TOOL

This tool is used to:

- Cut
- Mix
- Dissolve

MIXING 4 BLADES TOOL

This tool is used to:

- Grind
- Mix
- Dissolve

TURBO AGITATOR BLADE
Low shear / low to medium viscosity

This tool is used to:

- Mix
- Stir
- Suspend
- Hydrate

CUTTER BOWL

This tool is used to:

- Grind
- Micronize plants (in the object of extraction)
- Cut

WHISKS TOOL

This tool is used to:

- Mix
- Even distribution
- Stir
- Whip

DISSOLVER DISPERSION TOOL
Medium high speed / low to high viscosity

This tool is used to:

- Fragment
- Disperse particles
- Dissolve powders
- Hydrate

SPIRAL STIRRER TOOL
Low to medium speed / medium to high viscosity

This tool is used to:

- Mix homogeneously
- Distribute evenly

ANCHOR STIRRER
Low to medium speed / medium to high viscosity

This tool is used to:

- Mix
- Stir
- Distribute

Operation

DISMANTLING OF THE TOOL

Once the appliance unplugged, unscrew the tool following the direction of the arrow on the tool (fig. n°1).

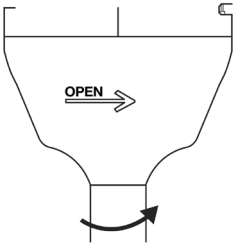


fig. 1) Dismantling of the tool.

MOUNTING OF THE TOOL

Once the appliance unplugged, choose the appropriate tool for the use.

Screw the tool in the reverse direction of the arrow written on the tool (fig. n°2).

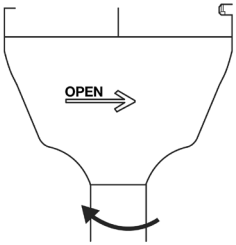


fig. 2) Mounting of the tool.

STARTING-UP

Take into account the ambient conditions listed in the technical data.

Plug the appliance into an electrical wall socket.

When the appliance is plugged in and turned on there is no LED indicating on that the appliance is on.

By pressing the power button (see Fig. 5), the speed setting display indicates '1' and the time display indicates '00: 00'.

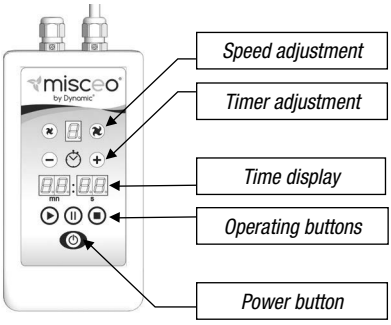


fig. 3) Command unit.



fig. 4) Power button.



fig. 5) Display state at power on.

CHRONOMETER OPERATION

STARTING



The time display scrolls in steps of 1 second.

The appliance automatically switches off after 20mn.

PAUSING



The appliance stops.

The time display is flashing.



The appliance is restarting.

STOPPING THE APPLIANCE



The time display flashes alternately between «STOP» and the value of the operating time.

You cannot restart the appliance any more.

You cannot regulate the speed any more.



The speed setting display indicates '1' and the time display indicates '00: 00'.

TIMER OPERATION

You can use the timer only when the time display indicates «00:00» and when the appliance is stopped.

TIME SETTING



Adjust the time by pressing the buttons « + » and « - ».

One short press: the adjustment step is 1 second.

One long press: the adjustment step is 5 seconds.

One very long press: the adjustment step is 30 seconds.

Maximum time setting: 20mn.

STARTING



The time display scrolls in steps of 1 second.

PAUSING



The appliance stops.

The time display is flashing.



You can adjust the time by pressing the buttons « + » and « - ».

Maximum time setting: 20mn.



The appliance is restarting.

The time display is restarting.

STOPPING THE APPLIANCE



The time display flashes alternately between «STOP» and the value of the operating time.

You cannot restart the appliance any more.


You cannot regulate the timer and the speed any more.



The speed setting display indicates '1' and the time display indicates '00: 00' (fig. n°5).

SPEED SETTING

DECREASING SPEED

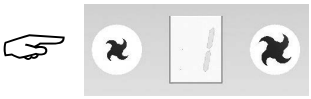

You can decrease the speed by pressing the button with the small propeller.

The speed is decreasing by step of 1 for each pressing.

Minimum speed setting : 1.

INCREASING SPEED



You can increase the speed by pressing the button with the big propeller.

The speed is increasing by step of 1 for each pressing.

Maximum speed setting: 8.

OPERATION WITH SUPPORT

CLAMPING OF THE APPLIANCE

1. Spread the fingers of the clamp with the knob.
2. Fit the appliance in the clamp.
3. Tighten the fingers of the clamp.

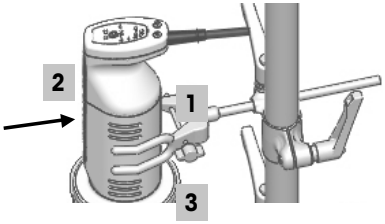


fig. 6) Fitting of the appliance

CLAMPING OF THE CONTAINER / BEAKER

1. Fit the bowl into the V-shaped hold.
2. Fasten the bowl with the belt.

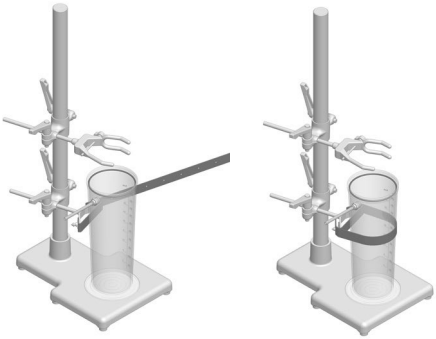


fig. 7) Fitting of the bowl

HEIGHT ADJUSTMENT

1. Release the bosshead with the vertical knob.
2. Adjust to the chosen height.
3. Tighten the bosshead.

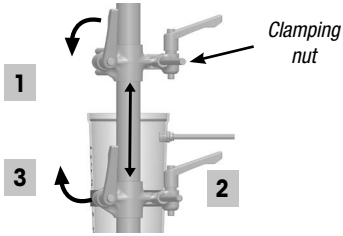


fig. 8) Height adjustment

DEPTH ADJUSTMENT

1. Release the bosshead with the horizontal knob.
2. Adjust to the chosen depth.
3. Tighten the bosshead.

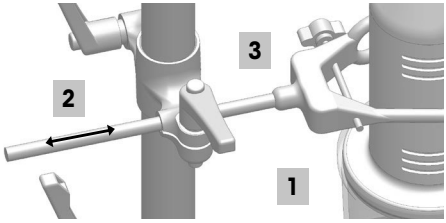


fig. 9) Depth adjustment

PRECAUTIONS OF USE

To avoid unintentional ingress of air into the medium due to excessively turbulent rotation, the whole unit can be placed a little off centre in the stirring vessel.

The safety of the user cannot be guaranteed if the appliance is operated with accessories that are not supplied or recommended by the manufacturer or if the appliance is operated improperly contrary to the manufacturer's specifications or if the appliance or the printed circuit board are modified by third parties.

Maintenance and cleaning

MAINTENANCE

The drive unit is not immune from wear. The motor brushes and the coupling can wear out over time.

It is preferable to regularly check:

- That the power cable is in good condition (the copper wires in the cable should not be visible).
- That the tube is watertight.
- That the blades are sharp.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or people of similar qualification to avoid danger.

CLEANING

Wear protective gloves when cleaning the appliances.

For cleaning disconnect the main plug.

The appliance can be cleaned using a sponge or a slightly damp cloth.

Do not allow moisture to get into the appliance when cleaning.

Please consult with MISCEO before using any cleaning or decontamination methods, other than those recommended here.

SPARE PARTS ORDER

When ordering spare parts, please give:

- Machine type
- Manufacturing number, see type plate
- Item and designation of the spare part

To view our spare parts catalogue, visit our website : https://www.misceo-cosmetics.com/fr/ Then go to the 'Our catalogue' page and click on 'Download'.


Electric requirements

The appliance of a class 2 category (double insulation) powered by a single phase alternating current and does not require a "u" ground plug.

The installation must be protected by a ground fault circuit breaker and a 10 A caliber fuse.

Use a standard 10/16 A single phased socket.

Check that the electricity supply voltage and the value on the appliance specifications plate are compatible.

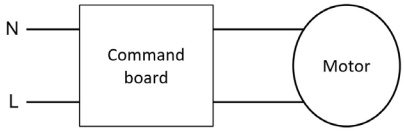

Warranty / Declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product corresponds to the regulations 2004/108/EC, 2006/42/EC and 2011/65/EU and conforms with the standard IEC 60235-1.

WARRANTY

The warranty does not cover worn out parts, nor does it apply to faults resulting from improper use, insufficient care or maintenance not carried out in accordance with the instructions in this operating manual. In accordance with MISCEO warranty conditions, the warranty period is 12 months. For claims under the warranty please contact MISCEO. You may also send the machine direct to our factory, enclosing the delivery invoice and giving reasons for the claim. You will be liable for freight costs.

misceo by DYNAMIC FRANCE S.A.S.
518 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 51 63 02 72
contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com

REPAIR

The appliance may only be opened by experts.

In case of repair, the appliance has to be cleaned and free from any materials which may constitute a health hazard.


If you require servicing, return the appliance in its original packaging. Use a suitable transport packaging.

Send the appliance to the address below:


misceo by DYNAMIC FRANCE S.A.S.
518 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 51 63 02 72
contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com

PROCÉDURES DÉMONTAGE / ENTRETIEN & NETTOYAGE
ASSEMBLY / MAINTENANCE AND CLEANING PROCEDURES

TIGE HÉLICOÏDALE / SPIRAL STIRRER TOOL

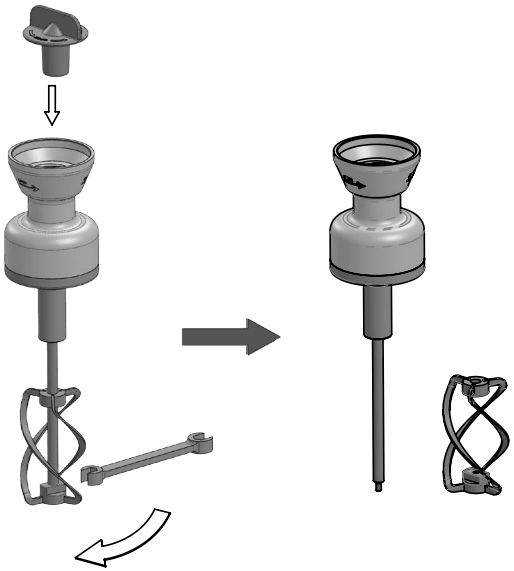


TIGE PALE U / ANCHOR STIRRER TOOL

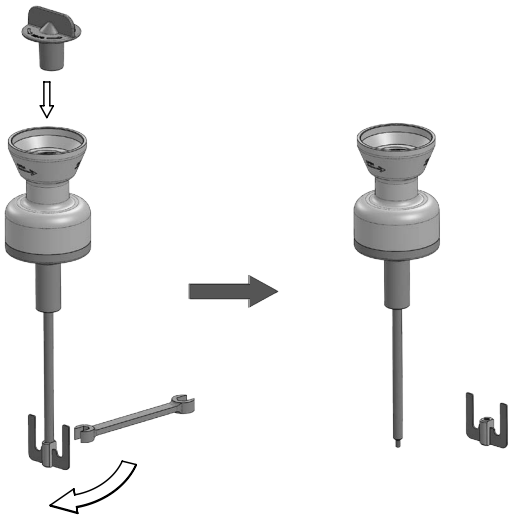


PROCÉDURES DÉMONTAGE / ENTRETIEN & NETTOYAGE
ASSEMBLY / MAINTENANCE AND CLEANING PROCEDURES

TURBO AGITATEUR / TURBO AGITATOR BLADE

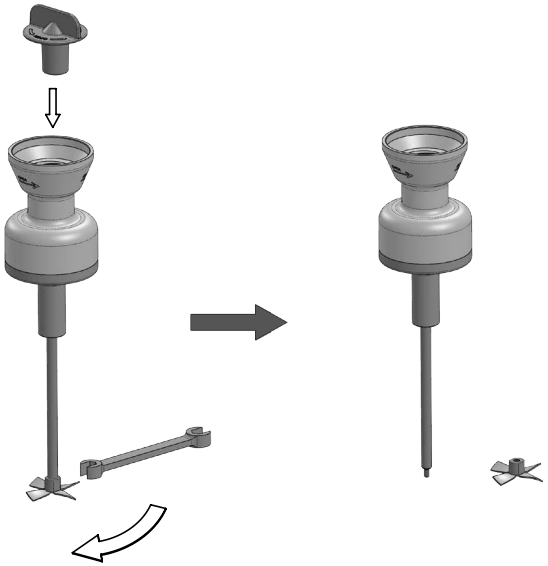


CISAILLEUR 2 OU 4 LAMES / MIXING 2 OR 4 BLADES

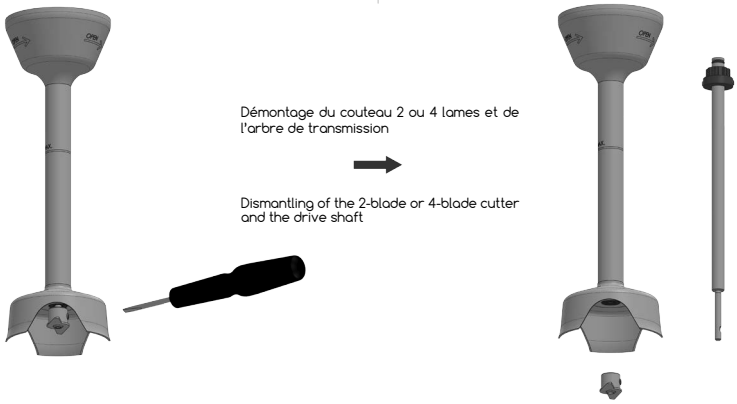


PROCÉDURES DÉMONTAGE / ENTRETIEN & NETTOYAGE
ASSEMBLY / MAINTENANCE AND CLEANING PROCEDURES

ROTOR-STATOR / ROTOR STATOR TOOL

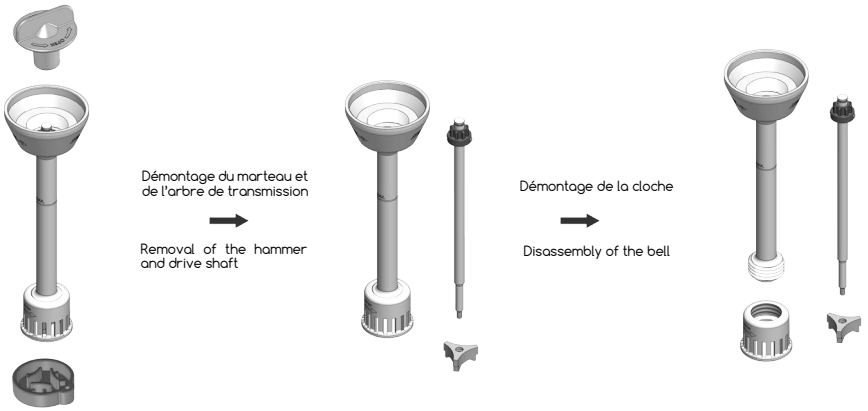

TIGE DÉFLOCULEUR / DISSOLVER DISPERSION TOOL

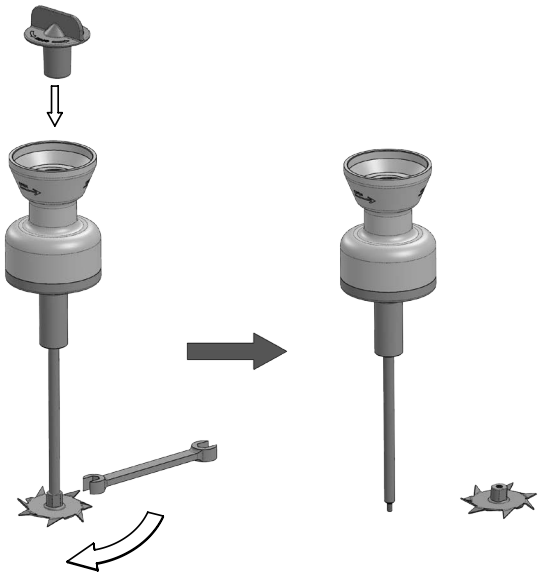

misceo
by Dynamic

518 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 51 63 02 72
e-mail : contact@misceo-cosmetics.com

www.misceo-cosmetics.com

