MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 3823T
Compteur de table 3 lignes d'affichage - Compteur / 3 décompteurs – Horloge

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fig. 1


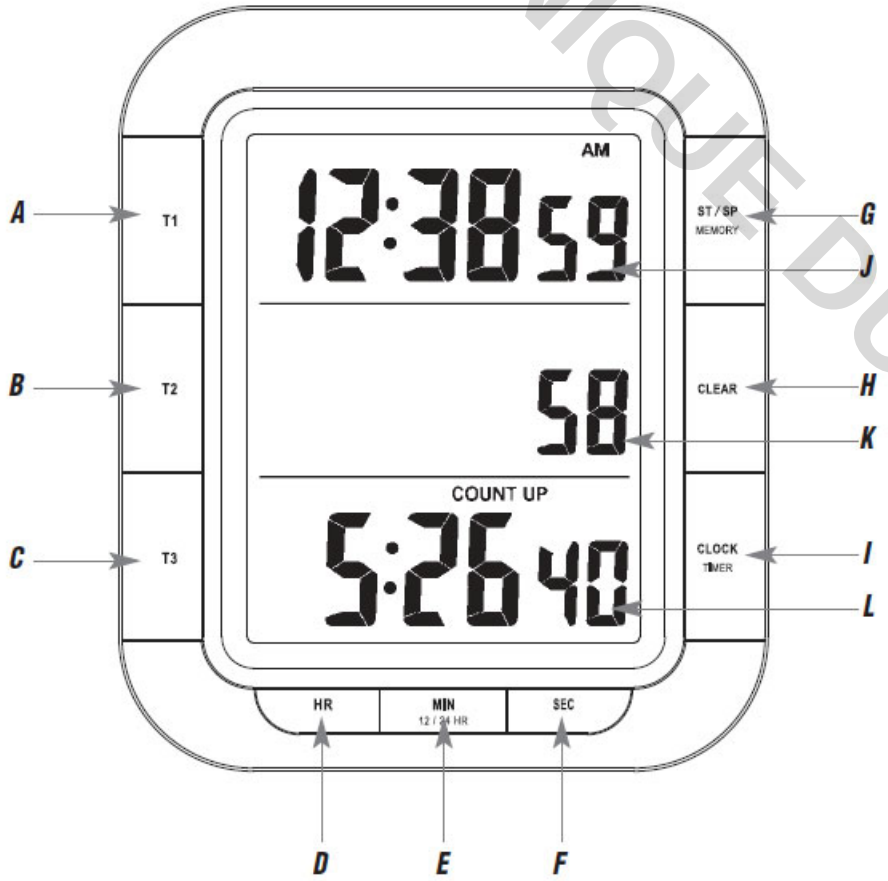



Fig. 2

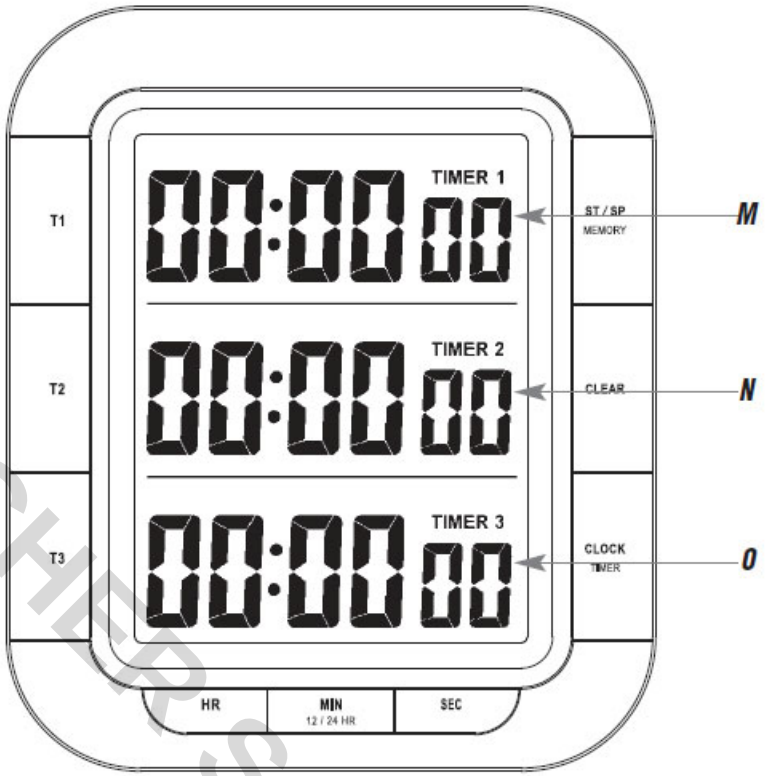

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fig. 3

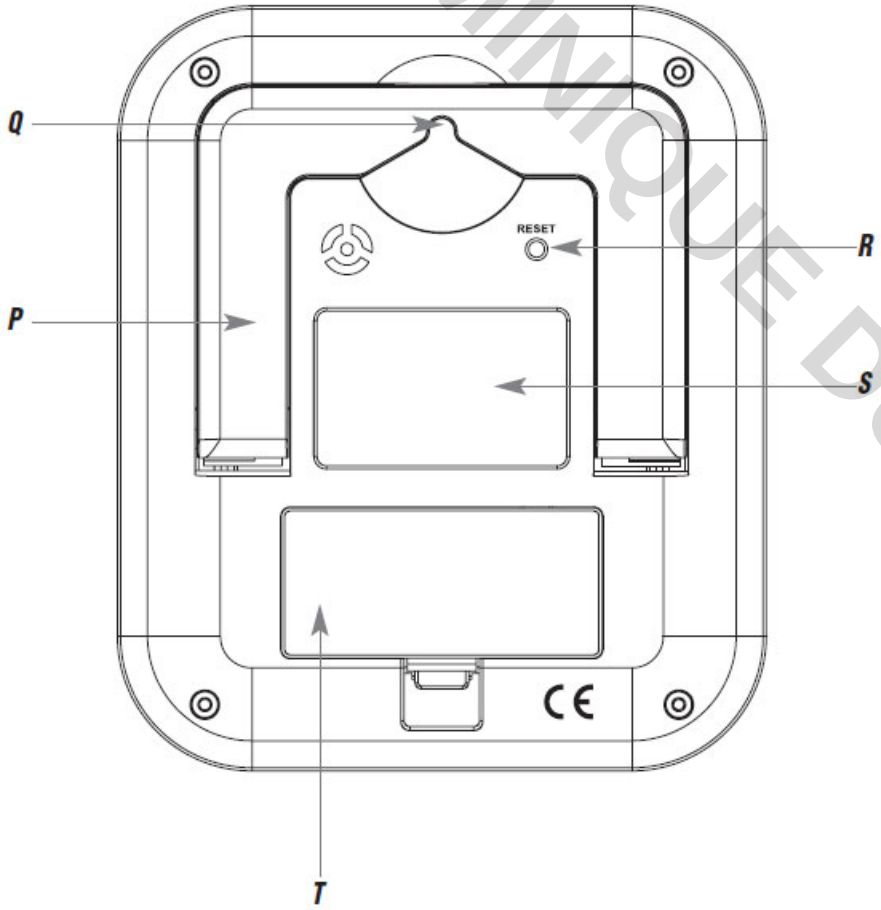

1. Avant d'utiliser votre appareil

- *Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.*
- *En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.*
- *Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi. De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.*
- *Suivez bien toutes les consignes de sécurité !*
- *Conservez soigneusement le mode d'emploi !*

2. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- *3 minuteries, opération simultanée possible*
- *Horloge*
- *Chronomètre de 1/100 secondes*
- *Affichage heures/minutes/secondes*
- *Jusqu'à 19 heures, 59 minutes et 59 secondes*
- *Fonction mémorisation*
- *Avec aimant*

3. Pour votre sécurité

- *Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus.*
- *N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.*
- *Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.*

Attention !
Danger de blessure :

- *Placez votre appareil et les piles hors de portée des enfants.*

CE

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOWNLOAD DUTSCHER.COM

- *Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (de moins de trois ans).*
- *Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.*
- *Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas.* ***Risque d'explosion !***
- *Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite.*
- *N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.*
- *Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.*

Conseils importants de sécurité du produit !

- *Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.*
- *Protégez-le contre l'humidité.*
- *Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !*
- *Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.*

4. Composants

4.1 Touches (Fig. 1)

A : *Touche* ***T1***
B : *Touche* ***T2***
C : *Touche* ***T3***
D : *Touche* ***HR***
E : *Touche* ***MIN/12/24 HR***
F : *Touche* ***SEC***
G : *Touche* ***ST/SP/MEMORY***
H : *Touche* ***CLEAR***
I : *Touche* ***CLOCK/TIMER***

4.2 Ecran

En mode heure (Fig. 1)

J : *Ecran supérieur : Horloge*
K : *Ecran central : 1/100 de secondes (chronomètre)*
L : *Ecran inférieur : Heures/minutes/secondes (chronomètre)*

En mode timer (Fig. 2)

M : *Ecran supérieur : TIMER 1*
N : *Ecran central : TIMER 2*
O : *Ecran inférieur : TIMER 3*

4.3 Boîtier (Fig. 3)

P : *Support (dépliable)*
Q : *Suspension murale*
R : *Touche* ***RESET***
S : *Aimant*
T : *Logement batterie*

5. Mise en service

- *Ouvrez le logement de batterie et enlevez la bande d´interruption des piles.*
- *Un signal sonore se fait entendre et tous les segments LCD s'allument pour 2 s.*
- *L´instrument est maintenant prêt à fonctionner.*

6. Opération

- *En pressant la touche* ***CLOCK/TIMER*** *l'affichage peut être ajusté en mode heure ou en mode TIMER.*
- *Si l'on maintient appuyées la touche* ***HR*** *ou* ***MIN/12/24 HR*** *ou* ***SEC*** *dans le mode de réglage, on parvient à l'affichage rapide.*
- *Toutes les entrées qui aboutissent sont confirmées par une courte sonorité aigue.*

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

7. Horloge

- Maintenez la touche **CLOCK/TIMER** appuyée pour 3 secondes en mode heure.
- L'affichage heures/minutes/secondes clignote sur l'écran supérieur.
- Réglez l'heure à l'aide de la touche **HR**, les minutes à l'aide de la touche **MIN/12/24 HR** et les secondes à l'aide de la touche **SEC**.
- Confirmez avec la touche **CLOCK/TIMER**.
- Vous pouvez ajuster le système de temps à 12 heures (AM ou PM apparaît sur l'écran) ou 24 heures à l'aide de la touche MIN/12/24 HR.

8. Chronomètre

- Pressez la touche **ST/SP/MEMORY** en mode heure.
- L'écran central affiche des 1/100 de secondes.
- L'affichage des heures/minutes/secondes apparaissent sur l'écran intérieur.
- Pressez la touche **ST/SP/MEMORY** pour arrêter ou démarrer pendant le compte.
- Pressez la touche **CLEAR**, l'affichage est remis.

9. Minuterie de compte à rebours

- En mode TIMER TIMER 1 apparaît sur l'écran supérieur, TIMER 2 apparaît sur l'écran central et TIMER 3 apparaît sur l'écran inférieur.
- Maintenez la touche **T1** ou **T2** ou **T3** appuyée pour sélectionner une TIMER.
- Un signal sonore se fait entendre et le TIMER sélectionné clignote.
- Réglez l'heure à l'aide de la touche **HR**, les minutes à l'aide de la touche **MIN/12/24 HR** et les secondes à l'aide de la touche **SEC**.
- Confirmez avec la touche **T1** ou **T2** ou **T3**correspondante.
- Pressez la touche **T1** ou **T2** ou **T3** pour commencer le comptage du TIMER correspondant.
- Appuyez de nouveau sur la touche **T1, T2** ou **T3** pour arrêter/reprendre le comptage du TIMER correspondant.
- Pour une utilisation simultanée de tous les TIMERS, vous ajustez l'heure de votre choix sur le TIMER 1, le TIMER 2 et le TIMER 3.
- Pressez la touche **ST/SP/MEMORY** pour démarrer/arrêter/reprendre en même temps TIMER 1, TIMER 2 et TIMER 3.
- Quand le minuteur arrive à 00.00.00, l'alarme se déclenche (1 min.) et l'écran clignote et TIME'S UP apparaît.
- La minuterie compte maintenant le temps écoulé jusqu'à l'arrêt du comptage à l'aide de la touche **ST/SP/MEMORY** ou la touche TIMER (**T1, T2, T3**) correspondant.
- Pressez la touche **CLEAR** l'affichage (TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3) est remis.
- Dans le mode Count Down (compte à rebours), vous pouvez revenir à l'affichage de l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK/TIMER**. Le TIMER actionné clignote sur l'écran. Un signal sonore retentit après l'écoulement du temps et l'inscription TIME'S UP est affichée sur l'écran correspondant.

10. Fonction mémorisation

- L'appareil mémorise la dernière saisie de temps du TIMER.
- Pressez la touche **ST/SP/MEMORY**.
- MEMORY apparaît sur l'écran et la dernière saisie de temps.
- Pressez la touche TIMER (**T1, T2, T3**) correspondante.
- MEMORY disparaît sur l'écran et le comptage commence.

11. Fixation

- Le support dépliable vous permet de placer l'appareil sur des surfaces lisses.
- Utilisez l'aimant au dos du minuteur pour la fixation sur les surfaces métalliques.
- Le dispositif d'accrochage permet de fixer l'appareil avec un clou sur le mur.

12. Remplacement des piles

- Veuillez échanger les piles si l'affichage devient faible.
- Ouvrez le logement des piles et insérez deux batteries neuves (2 x 1,5 V AAA). Pour l'insertion des piles, faire attention à la polarisation correcte.

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

13. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage	➜ Enlevez la bande d'interruption des piles ➜ Contrôlez la bonne polarité des piles ➜ Changez les piles
Affichage incorrect	➜ Pressez la touche **RESET** ➜ Changez les piles

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

14. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement. Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.



Mise au rebut de l'appareil électrique

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.
Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).
L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. Respectez les réglementations en vigueur !



Élimination des piles

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les détritus ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée.

En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et les batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.

Les métaux lourds sont désignés comme suit :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

15. Caractéristiques techniques

Durée	Max. 19 hrs, 59 min., 59 sec.
Alimentation	Piles 2 x 1,5 V AAA (incluses)
Dimensions du boîtier	103 x 20 (61) x 121 (103) mm
Poids	142 g (appareil seulement)

Note : veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

CE