
ASEEMBLAGGIO

1) Disimballare la bilancia



1) rimuovere la cintura 2) estrarre il cubo rosso 3) estrarre la bilancia

Per i modelli 1 e 0,1 mg:

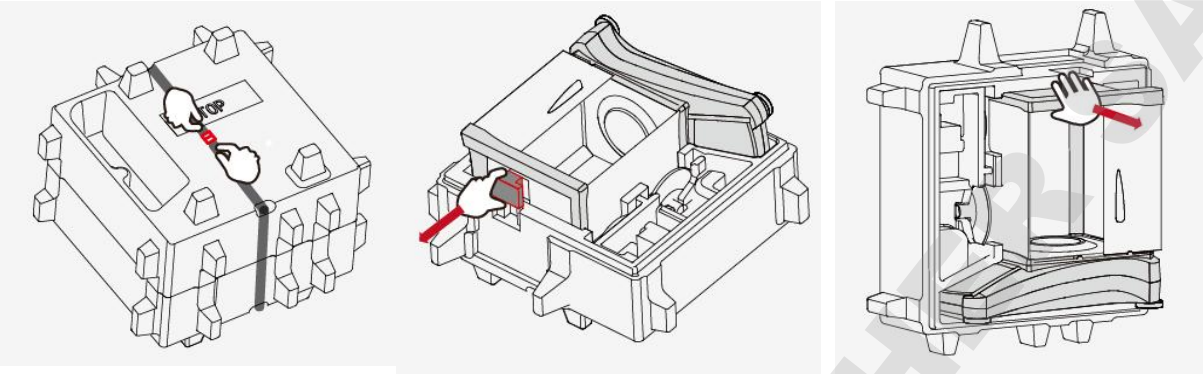

− Anello paravento




− piatto (90mm) per il modello di 0,1 mg di pesatura



− Piatto (130mm) per il modello 1mg di pesatura

2) Installare l'anello paravento e il piatto

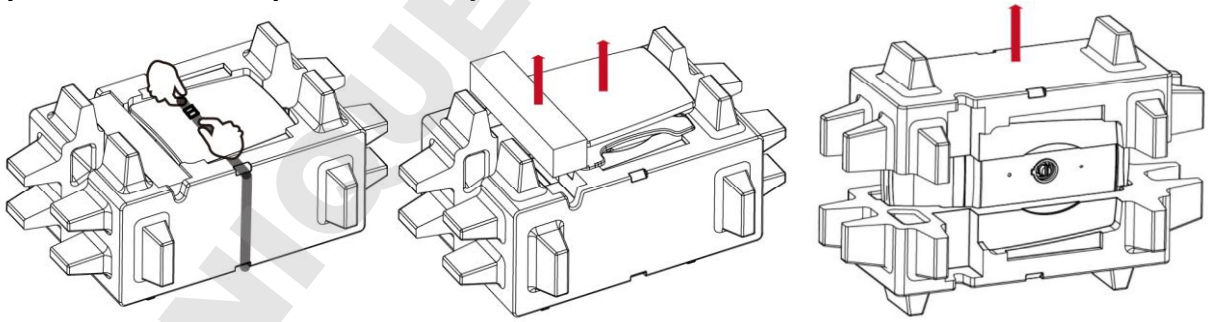


1) rimuovere la cintura 2) togliere la scatola adattatore e il piatto di pesatura 3) estrarre la bilancia

Per i modelli di 0,1 g e 0,01 g:



− Piatto (175x195mm) per bilancia 0,1 g e 0,01 g

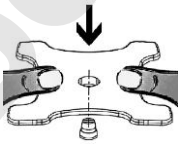

- Supporto del piatto, spingere il supporto del piatto fino alla fine in modo che sia strettamente solidale con il cono della cella..


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE: leggere tutte le avvertenze di sicurezza prima di procedere all'installazione, alla realizzazione dei collegamenti o alla manutenzione dell'apparecchiatura. Il mancato rispetto delle avvertenze suddette può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà. Conservare tutte le istruzioni per poterle consultare in caso di necessità.

- Verificare che l'intervallo di tensione in ingresso e il tipo di spina dell'adattatore CA siano adatti all'alimentazione elettrica locale.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non rappresenti un potenziale ostacolo o non costituisca un intralcio al passaggio.
- La bilancia è solo per uso interno.
- Utilizzare la bilancia solo in luoghi asciutti.
- Non far cadere pesi sul vassoio di pesatura.
- Utilizzare solo accessori e periferiche approvate.
- Utilizzare l'apparecchiatura solo nelle condizioni ambientali specificate in queste istruzioni.
- Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura, scollegare l'alimentazione elettrica.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti instabili o pericolosi.
- La manutenzione deve essere eseguita soltanto da personale autorizzato.
- Non posizionare la bilancia in modo che sia difficile raggiungere il collegamento dell'alimentazione.

COMANDI

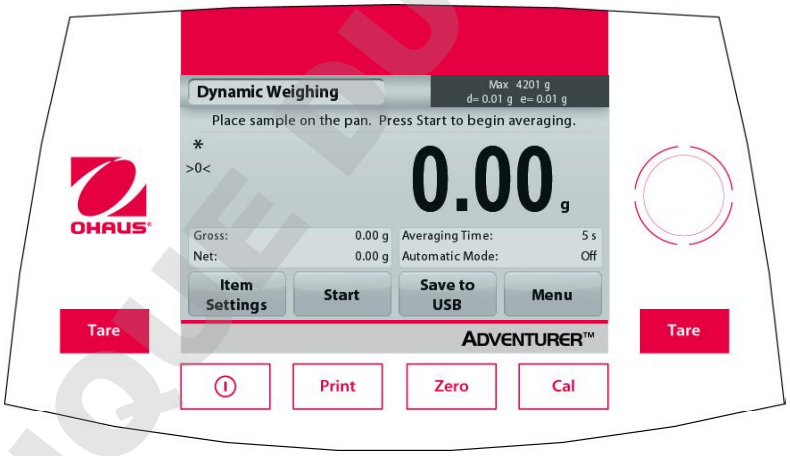

Pulsante	Azione
⏻	Pressione breve (a bilancia spenta): Accende la bilancia Pressione breve (a bilancia accesa): Spegne la bilancia
Print	Invia i dati a una stampante o a un computer.
Zero	Esegue la procedura di azzeramento
Cal	Esegue la procedura di regolazione
Tare	Esegue la procedura di tara

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Schermata principale dell'applicazione



NAVIGAZIONE NEI MENU E NELLE SCHERMATE

Toccare **Menu** per visualizzare l'elenco dei menu.





Regolazione:

toccare per visualizzare le opzioni di regolazione.



Configurazione bilancia:

Toccare per visualizzare e modificare le impostazioni della bilancia.



Unità di pesatura:

Toccare per visualizzare e modificare le unità di pesatura.



Conservazione dei dati:

Toccare per visualizzare le impostazioni di conservazione dei dati.



Impostazioni di stampa:

toccare per visualizzare le impostazioni di stampa.



Dati GLP e GMP:
inserire i dati dell'utente per la tracciabilità.



Ripristino di fabbrica:

toccare per eseguire un Ripristino di fabbrica delle impostazioni del menu.



Blocco:


toccare per visualizzare le opzioni di blocco.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

APPLICAZIONI

La bilancia può essere configurata con diverse modalità applicative. Toccare il campo in alto a sinistra nell'area Applicazioni (pesatura, nell'esempio riportato in basso):



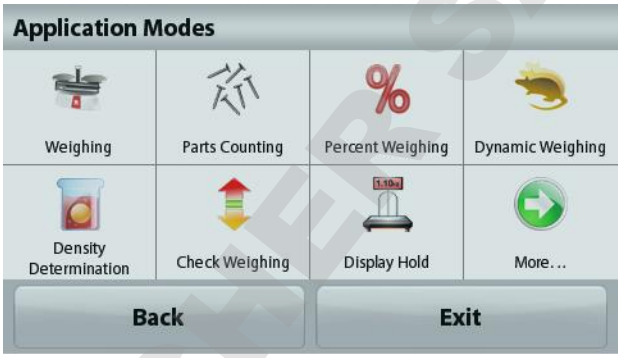

La bilancia Adventurer vanta 9 modalità applicative, come riportato di seguito:



Pesatura



Conteggio pezzi



Pesatura percentuale



Pesatura dinamica (animali)



Determinazione della densità



Controllo del peso



Memoria display



Totalizzazione



Formulazione

Collegamento dell'interfaccia

Utilizzare la porta RS-232 integrata per collegare lo strumento a un computer o ad una stampante mediante un cavo seriale standard (diretto), oppure utilizzare la porta USB della bilancia.

Collegamenti di interfaccia sul retro della bilancia.



USB1 RS232

Collegamento USB sulla parte anteriore della bilancia.



USB2

USB1: Utilizzato esclusivamente per la connessione al PC
USB2: Utilizzato esclusivamente per la connessione all'unità flash USB
RS232: Utilizzato per la connessione al PC o alla stampante

DOMINIQUE PUTSCHER SAS

Pesatura da sotto

Per utilizzare questa funzione, staccare l'alimentazione elettrica dalla bilancia e rimuovere il coperchio di protezione dall'apertura della pesatura da sotto.



Pesatura da sotto

capottina di protezione



Gancio per la pesatura da sotto

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: (973) 377-9000
Fax: (973) 944-7177

Con uffici in tutto il mondo.
www.ohaus.com

30111763

P/N 30111763 A © 2014 Ohaus Corporation, tutti i diritti riservati.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS