
MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE -FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

3849T – Minuteur avec Pré-alarme programmable
Sonore / Lumineux / 3 canaux – 3 mémoires

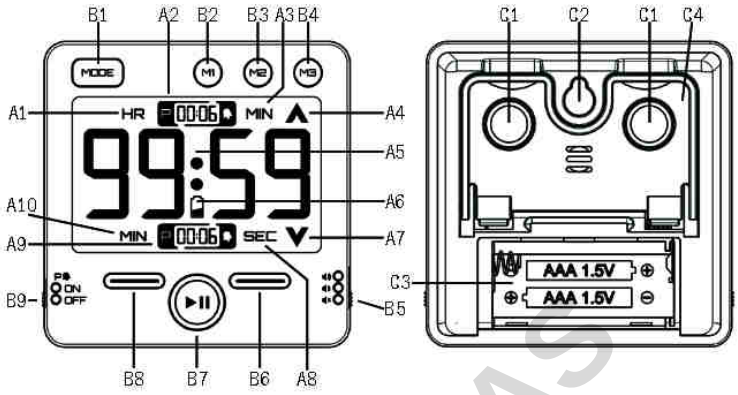

Aperçu du domaine d'utilisation et des avantages :

- Minuteur et chronomètre
- Fonction de mémorisation (3 réglages)
- Volume de l'alarme réglable sur 3 niveaux (fort / normal / éteint)
- Signal lumineux LED
- Indication du temps écoulé
- Pré-alarme (réglable individuellement)
- Affichage heures/minutes ou minutes/secondes
- Jusque 99 h/59 min ou 99 min/59 s
- Avec aimant, support et œillet de suspension

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
- Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (de moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. Veillez à la bonne polarité des piles. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée. Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection !

ATTENTION
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- Protégez l'appareil contre l'humidité

Composants

Affichage (A)
A1 - Heures (en HR/MIN)
A2 - Pré-alarme (en MIN/SEC)
A3 - Minutes (en HR/MIN)
A4 - Symbole pour le comptage (chronomètre)
A5 - Indication de l'heure
A6 - Symbole de pile
A7 - Symbole pour le compte à rebours (minuteur)
A8 - Secondes (en MIN/SEC)
A9 - Pré-alarme (en HR/MIN)
A10 - Minutes (en MIN/SEC)

Touches (B)
B1 - Touche MODE
B2 - Touche M1
B3 - Touche M2
B4 - Touche M3
B5 - Interrupteur volume de l'alarme
B6 - Touche MIN/SEC
B7 - Touche START/STOP
B8 - Touche HR/MIN
B9 - Interrupteur pré-alarme

Boîtier (C)
C1 - Aimants
C2 - Œillet de suspension
C3 - Compartiment à piles
C4 - Support (dépliable)

Mise en service
- Retirez le film de protection de l'affichage.
- Poussez le couvercle du compartiment à piles vers le bas (en direction de la flèche) et insérez deux piles neuves de type 1,5 V AAA.
- Veillez à la bonne polarité des piles.
- Refermez le couvercle.
- Tous les segments s'allument brièvement.
- Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.

Utilisation
Minuteur
- Pousser l'interrupteur volume de l'alarme sur la position désirée (" Réglage du volume de l'alarme ").
- Utilisez la touche MODE pour sélectionner le mode HR/MIN ou MIN/SEC (par défaut).
- Réglez le temps désiré avec la touche HR/MIN et MIN/SEC.

Si vous maintenez les touches appuyées au cours d'un mode de réglage, vous passez en déroulement rapide.
- Réglez une pré-alarme si vous la souhaitez (voir "Pré-alarme").
- Appuyez sur la touche START/STOP et le minuteur commence à compter. Le symbole apparaît sur l'écran.
- Pendant le comptage, le symbole clignote.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter et redémarrer le minuteur.
- Une alarme retentit pour 60 secondes dès que le temps s'est écoulé et la touche START/STOP clignote en jaune. Le symbole apparaît sur l'écran et la

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

minuterie compte maintenant le temps écoulé.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter le compte et pour couper l'alarme

Le dernier temps réglé apparaît automatiquement.
- Si l'alarme n'est pas coupée dans les 60 secondes, seules deux tonalités d'alarme retentissent toutes les 10 secondes. L'alarme s'arrête automatiquement après 99 minutes.
- Appuyez simultanément sur les touches HR/MIN et MIN/SEC et l'affichage est remis sur 00:00

Pré-alarme
- Pour activer la fonction de pré-alarme, poussez l'interrupteur pré-alarme sur ON.
- L'indication de pré-alarme apparaît sur l'écran (par défaut 00:00).
- Maintenez la touche MODE appuyée pendant trois secondes.
- L'indication de pré-alarme clignote sur l'écran. Utilisez la touche HR/MIN et MIN/SEC pour régler le temps souhaité pour la pré-alarme. Exemple : Si vous sélectionnez 1 minute, une alarme retentit 1 minute avant la fin du décompte.
- Validez au moyen de la touche MODE.
- Pour désactiver la fonction de pré-alarme, poussez l'interrupteur sur la position OFF.
- Le marquage rouge vous indique le réglage choisi.

Fonction mémorisation pour 3 réglages de temps
- Appuyez sur la touche M1 pendant 3 secondes.
- 00:00 clignote sur l'écran.
- Utilisez la touche MODE pour sélectionner le mode HR/MIN ou MIN/SEC.
- Réglez le temps désiré avec la touche HR/MIN et MIN/SEC.
- Validez au moyen de la touche M1.
- L'indication de pré-alarme clignote sur l'écran.
- Utilisez la touche HR/MIN et MIN/SEC pour régler le temps souhaité pour la pré-alarme.
- Validez au moyen de la touche M1.

Vous pouvez maintenant obtenir le temps programmé en utilisant la touche M1.
- Si vous le souhaitez, réglez le temps pour M2 et M3 de la même manière. Réglage du volume de l'alarme
- Utilisez l'interrupteur situé sur le côté droit pour régler le volume de l'alarme.

1. Fort
2. Normal - Le marquage rouge vous indique le réglage choisi
3. Son désactivé

Chronomètre
- Appuyez simultanément sur les touches HR/MIN et MIN/SEC et l'affichage est remis sur 00:00.
- Appuyez sur la touche START/STOP et le minuteur commence à compter. Le symbole apparaît sur l'écran.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter et redémarrer le comptage.

Fixation
- Le support dépliable vous permet de placer l'appareil sur une surface lisse.
- Utilisez l'œillet de suspension pour accrocher l'appareil au mur.
- Utilisez les deux aimants pour la fixation sur les surfaces métalliques.

Remplacement des piles
- Si le symbole de piles apparaît sur l'écran, changez les piles.
- Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux piles neuves de type 1,5 V AAA.
Assurez-vous que les piles sont insérées selon la bonne polarité. Refermez le couvercle.

Caractéristiques techniques
Plage de mesure : 99 h/59 min ou 99 min/59 s
Alimentation : Piles 2 x 1,5 V AAA (non incluses)
Dimensions du boîtier : 79 x 21,5 (44) x 79 mm
Poids: 70 g

Traitement des déchets
Ce produit a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les détritus ménagers. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et piles rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE). L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de la Société MOINEAU. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site internet

DOMINIQUE DUTSCHER SAS