



HandyStep[®] touch

Le distributeur à répétition de la prochaine génération

BRAND. For lab. For life.[®]

- + Facile: commande tactile, comme sur un smartphone
- + Simple: éjection automatique des pointes
- + Efficace: ouvert aux pointes d'autres fabricants

DISTRIBUTEURS À RÉPÉTITION

HandyStep® touch et HandyStep® touch S en détail

Individuel

HandyStep® touch avec les modes standard Multi-dosage, Auto-dosage, Pipetage et Favoris;

HandyStep® touch S avec les fonctions supplémentaires Dosage séquentiel, Multi-aspiration et Titration

Sûr

Reconnaissance automatique de la taille de pointes DD tips // de BRAND

Simple

L'éjection automatique des pointes sur un bouton évite la contamination

Endurant

Nombreuses heures de fonctionnement continu avec une seule charge de la batterie

Port USB-C

Pour le rechargement rapide par câble

Robuste

Longue durée de vie grâce à des matériaux de qualité et un nettoyage / une désinfection facile sur les surfaces lisses

Touche Step

Touche Step positionnée de manière ergonomique pour l'aspiration et le rejet sans effort du volume

Efficace

En plus des pointes DD tips de BRAND, vous pouvez aussi utiliser les pointes compatibles d'autres fabricants



Support de chargement avec HandyStep® touch S et pointe DD tip //

Confortable

Charge par induction avec le support de chargement optionnel

- + Commande tactile avec navigation de menu intuitive et aide intégrée
- + Disponible comme modèle HandyStep® touch ou HandyStep® touch S avec fonctionnalités étendues
- + Langues: allemand, anglais, espagnol, français et chinois
- + Réglage du volume variable de 1,0 µl à 50 ml
- + Charge par induction

Commande intuitive

Rester flexible et avoir la bonne solution à portée de main pour chaque application. Vous pouvez aussi réaliser les opérations difficiles – aucun problème avec les fonctions étendues du HandyStep® touch S.

Mode	Fonction	HandyStep® touch	HandyStep® touch S
Multi-dosage (MULTI-DISP)	Dosage progressif du volume réglé	✓	✓
Auto-dosage (AUTO-DISP)	Dosage automatique par l'appareil	✓	✓
Pipetage (PIP)	Pipetage d'un volume défini	✓	✓
Dosage séquentiel (SEQ-DISP)	Dosage progressif de différents volumes	-	✓
Multi-aspiration (MULTI-ASP)	Absorption de différents volumes	-	✓
Titrage	Sortie manuelle ou progressive de liquide pour le titrage	-	✓
Favoris	Enregistrement des favoris pour un accès rapide	✓	✓
Réglages	Adaptation individuelle de l'appareil (par ex. luminosité ou nom d'appareil)	✓	✓



Fonctionnalités étendues dans HandyStep® touch S:



Les menus clairs permettent une manipulation intuitive et un travail rapide, vous gardez toujours en vue les principales fonctions et les paramètres importants.




Compréhensible

Menu principal avec toutes les fonctions pour une sélection rapide



Clair

Mode de travail avec toutes les informations importantes

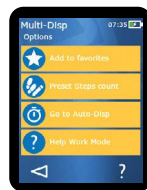

Organisé

Vue d'ensemble de toutes les options



Utile

Aide interne, directement là où vous en avez besoin

L'équipe parfaite

Reconnaissance automatique de la taille avec les pointes DD tips // de BRAND

Le HandyStep® touch permet d'économiser du temps et évite les erreurs grâce à la reconnaissance automatique de la taille des pointes DD tips // de BRAND avec codage breveté sur le piston. Après l'insertion, la taille de pointe détectée est affichée automatiquement. Vous pouvez désormais sélectionner le volume à doser rapidement et en toute facilité. Le réglage de l'appareil reste conservé lors de l'insertion d'une nouvelle pointe DD tip de même taille.



Multi-dosage avec HandyStep® touch et pointe DD tip //



Dosage séquentiel avec HandyStep® touch S et pointe DD tip //

Données pour commande

HandyStep® touch | HandyStep® touch S

Distributeur à répétition, y compris bloc secteur universel (Europe, GB, USA, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande), support mural et pour étagère, échantillons de pointes DD tips //, mode d'emploi et certificat de qualité.

Description	Réf.
HandyStep® touch	705200
HandyStep® touch incl. support de chargement	705201
HandyStep® touch S	705210
HandyStep® touch S incl. support de chargement	705211



HandyStep® touch

HandyStep® touch S



Support de chargement avec HandyStep® touch S et pointe DD tip //

Pointes DD tips //

Pointes de précision pour distribution avec codage de type.

Capacité ml	Emballage standard	non stériles Réf.	BIO-CERT® Réf.
0,1	100	705700	705730
0,5	100	705702	705732
1	100	705704	705734
1,25	100	705706	705736
2,5	100	705708	705738
5	100	705710	705740
10	100	705712	705742
12,5	100	705714	705744
25	50 + 1 adaptateur	705716	705746*
50	25 + 1 adaptateur	705718	705748
Jeu de pointes DD tip //, non stériles, 20 pièces de chaque taille : 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml			705720

* Emballage standard BIO-CERT®: 25 + 1 adaptateur



Accessoires

Support

Support de maintien ou support de chargement avec fonction de chargement inductif.

Description	Emballage standard	Réf.
Support de chargement	1	705220
Support de maintien	1	705230

Support mural et pour étagère

Description	Emballage standard	Réf.
	1	705235

Bloc secteur universel

Description	Emballage standard	Réf.
	1	705250

Batterie de recharge

Description	Emballage standard	Réf.
	1	705225

Adapteur

pour pointes DD tips et pointes DD tips // de 25 et 50 ml, PP, autoclavable.

Description	Emballage standard	Réf.
non stérile	10	702398
stérile, BIO-CERT®	5	702399



Vous trouverez les tolérances et des informations supplémentaires sur shop.brand.de/touch et www.brand.de

HandyStep® touch et HandyStep® touch S possèdent des caractéristiques conformément aux brevets et demandes de brevet BRAND suivants: US 6,740,295 B2; EP 1 110 612 B1; US 6,540,964 B2; EP 1 177 831 B1; US 6,841,129 B2; DE 102017103745 A1; WO 2018153986 A2; DE 102017103748 A1; WO 2018153830 A1; DE 102017103744 A1; WO 2018153924 A1. Les pointes DD tips // possèdent des caractéristiques conformément aux brevets et demandes de brevet BRAND USD825,750S et CN304542771S ainsi que conformément à la demande de modèle européenne déposée EM003763564.

BIO-CERT®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, HandyStep® ainsi que la marque textuelle et imagée BRAND sont des marques ou des marques déposées de la société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne.

Toutes les autres marques mentionnées ou représentées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

BRAND GMBH + CO KG

P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T: +49 9342 808-0 | F: +49 9342 808-98000 | info@brand.de | www.brand.de

BRAND. For lab. For life.®

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l'aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d'application concret dépend toutefois de multiples facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Nous vous prions donc de bien vouloir comprendre que nos conseils ne puissent donner lieu à des recours. La transposition doit faire l'objet d'une vérification très attentive de votre part dans chaque cas d'espèce. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

