

Embouts Premium pour pipette

Embouts Qualitix® de 1 µl à 10 ml

- Sélection d'embouts Qualitix®
- Système de recharge de racks
- Tableau de compatibilité des embouts
- Réservoirs à réactifs
- Pasteurs, pailles et filtres
- Sachets de stérilisation

Embouts Premium

Les embouts Qualitix® de 10 µl à 10 ml

Le programme d'embouts Qualitix® est synonyme de qualité, flexibilité et compatibilité. Fabriqués avec du polypropylène de qualité médicale, les embouts s'adaptent non seulement sur les micropipettes Socorex, mais également sur la plupart des marques du marché. Une offre très complète quant au conditionnement (sachets, racks et recharges de racks tipfill™) et à la variété des embouts disponibles avec et sans filtre. Qualitix® et micropipettes Socorex forment un ensemble pour l'obtention de résultats performants.

- Grand choix, qualité supérieure, autoclavable
- Sachets, racks et système de recharge tipfill™
- Uniformité de chaque lot
- Certifiés sans nucléase, endotoxine ni ATP
- Emballage réduit, faible encombrement sur la paillasse
- Compatibilité avec les principales marques de micropipettes

Echantillons gratuits sur demande



Pointes biseautées ou effilées

L'extrémité biseautée **a** diminue grandement l'adhérence de la goutte. La paroi de la pointe effilée **b** est fine et flexible pour prévoir la dépose de petits volumes, augmentant la reproductibilité dans le dosage en série. Une pointe longue et flexible est idéale pour le chargement de gels **c**.



Blocage des aérosols - Pas de contamination

Un filtre en PEHD hydrophobe avec pores de 10µm inséré dans l'embout bloque tout aérosol et évite la contamination, à la fois de la pipette et de l'échantillon. Haut niveau de pureté et stérilisation gamma sont certifiés.



Faible rétention - pas de perte

Embouts à faible rétention **a** en résine spéciale sans silicone. Réduction de l'adhérence aux parois pour une récupération sans perte de l'échantillon. Disponibles en 10, 200 et 1000 µl, en racks, stériles ou non.

Certifiés sans protéase, ils conviennent particulièrement à la protéomique et à la manipulation de liquides visqueux.

Qualitix® niveau bioproof™

Toute la gamme Qualitix® est exempte de DNase, RNase, Pyrogène (endotoxines) et d'ATP.

De plus, les embouts à filtre sont certifiés sans ADN humain ni protéase.




Voir le certificat

Système de recharge de racks

Le système *tipfill™* facilite la recharge de racks vides. Une solution pratique et économique qui limite les interruptions de travail. Chaque plateau de 96 embouts est transféré instantanément dans un rack sans risque de contamination. Le couvercle de transfert protège les embouts et les tient bien alignés lors de l'opération.



Voir la vidéo

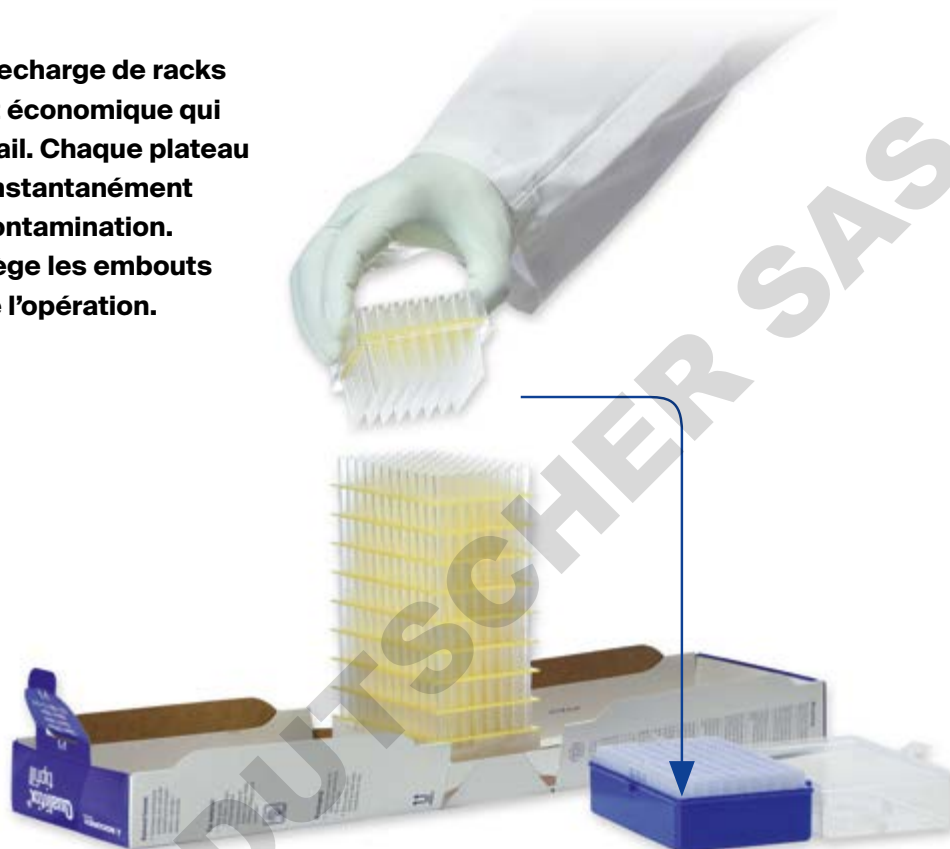

Conditionnements variés

Embouts disponibles en sachets, en racks avec charnières et en système de recharge *tipfill™*.

Faible encombrement

L'emballage refermable astucieux du *tipfill™* permet de diminuer la place utilisée par un nombre équivalent de racks dans un système conventionnel, tout en diminuant les déchets plastiques. Un impact positif sur le volume de stockage, les coûts de transport et l'environnement.

Aspect environnemental

Bonne protection du contenu, avec un minimum de carton recyclable.









Exemples d'applications



Type d'embout	Caractéristiques	Avantages
Embouts standards	Qualité supérieure, compatibilité optimale et universelle.	Utilisation courante en routine avec pipettes Socorex et autres marques.
Embout à filtre	Comme ci-dessus, mais avec filtre de protection PEHD hydrophobe et pores de 10 µ.	Protection efficace de la pipette et de l'échantillon contre la contamination par aérosol.
Embout à faible rétention	Matériau spécifique qui assure une très faible adhérence sur les parois.	Manipulation précise d'échantillons épais, visqueux, contenant des protéines ou des peptides.
Embouts pour gel	Extrémité longue, fine et flexible, compatibilité universelle.	Dosage précis dans des espaces confinés sans endommager la structure du gel.
Embouts longs	Embouts de grande longueur, compatibilité universelle.	Pénétration facile dans un tube long et étroit en limitant le contact avec la paroi.
Embouts <i>saver</i>	Embouts fiables, compatibilité universelle.	Conditionnement économique en vrac, idéal pour des grands projets.

Embouts Premium





Commande - Sélection d'embouts Qualitix®
















Embouts 10 - 20 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.
		Couleur	Style		Emballage	Cartons	
	31.4	Transparent	Embout ultra-micro 10 µl, pointe effilée, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3090.0010B
		Transparent	Embout ultra-micro 10 µl, pointe effilée, autoclavable		12x 96 / rack	10 packs	3090.0010R
	tipfill	Transparent	Système tipfill™ 10 µl avec embouts gradués ultra-micro, pointe effilée		13x 96 / pack	10 packs	3090.0010T
			Rack vide pour embouts 10/200 µl utilisable avec système tipfill™, autoclavable		10 / pack	10 packs	3070.0210ER
	Transparent	Embout ultra-micro 10 µl, pointe effilée, autoclavable	✓	12x 96 / rack	10 packs	3090.0010RS	
	38.1	Transparent	Embout micro long 20 µl pointe effilée, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3020.0010B
		Transparent	Embout long micro 20 µl pointe effilée, autoclavable		10x 96 / rack	10 packs	3020.0010R
	71.0	Transparent	Embout capillaire 10 µl pour gel, autoclavable		4x 204 / rack	N / A	302.0010GR
	38.3	Transparent	Embout ultra-micro 10 µl saver, pointe effilée, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3070.0010B
			Rack vide autoclavable pour embouts ultra-micro 10 µl saver 3070.0010B		1 / pack	N / A	3070.0010ER

Embouts à filtre 10 - 20 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.
		Couleur	Style		Emballage	Cartons	
	31.4	Transparent	Embout ultra-micro 10 µl avec filtre, pointe effilée graduée	✓	12x 96 / rack	10 packs	3090.0010FRS
	38.1	Transparent	Embout long micro 20 µl avec filtre, pointe effilée	✓	10x 96 / rack	10 packs	3020.0010FRS

Embout à faible rétention 10 - 20 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.
		Couleur	Style		Emballage	Cartons	
	31.4	Transparent	Embout ultra-micro 10 µl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable		12x 96 / rack	10 packs	3090.0010PR
		Transparent	Embout ultra-micro 10 µl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable	✓	12x 96 / rack	10 packs	3090.0010PRS
	38.1	Transparent	Embout long micro 20 µl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable		10x 96 / rack	10 packs	3020.0010PR
		Transparent	Embout long micro 20 µl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable	✓	10x 96 / rack	10 packs	3020.0010PRS

Embouts à filtre 20 - 100 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.
		Couleur	Style		Emballage	Cartons	
	49.6	Transparent	Embout 20 µl, avec filtre, pointe biseautée	✓	10x 96 / rack	10 packs	3080.0020FRS
	49.6	Transparent	Embout 100 µl, avec filtre, pointe biseautée	✓	10x 96 / rack	10 packs	3080.0100FRS

Embouts 200 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.
		Couleur	Style		Emballage	Cartons	
	49.6	Transparent	Embout universel 200 µl, pointe biseautée graduée, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3070.0200B
		Transparent	Embout universel 200 µl, pointe biseautée graduée, autoclavable		10x 96 / rack	10 packs	3070.0200R
	tipfill	Transparent	Système tipfill™ 200 µl avec embouts universels, pointe biseautée graduée		10x 96 / pack	10 packs	3070.0200T
			Rack vide pour embouts 10/200 µl utilisable avec système tipfill™, autoclavable		10 / pack	10 packs	3070.0210ER
	Transparent	Embout universel 200 µl, pointe biseautée, autoclavable	✓	10x 96 / rack	10 packs	3070.0200RS	
	49.6	Jaune	Embout 200 µl, pointe biseautée, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3290.0200B
		Jaune	Embout 200 µl, pointe biseautée, autoclavable		10x 96 / rack	10 packs	3290.0200R
		Jaune	Embout 200 µl, pointe biseautée, autoclavable	✓	10x 96 / rack	10 packs	3290.0200RS
	82.5	Transparent	Embout capillaire 200 µl pour gel, autoclavable		6x 96 / rack	8 packs	3080.0200GR
	49.5	Transparent	Embout 200 µl saver, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3070.0200B
		Jaune	Embout 200 µl saver, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3270.0200B
			Rack vide autoclavable pour embouts 200 µl saver, 3070.0200B et 3270.0200B		1 / pack	N / A	3270.0200ER

Embouts à filtre 200 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.	
		Couleur	Style		Emballage	Cartons		
	51.2	Transparent	Embout universel 200 µl avec filtre, pointe biseautée	✓	10x 96 / rack	10 packs	3070.0200FRS	
	83.8	Transparent	Embout long 200 µl avec filtre, pointe effilée	✓	6x 96 / rack	8 packs	3080.0200LFRS	
Embouts à faible rétention 200 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.	
		Couleur	Style		Emballage	Cartons		
	49.6	Transparent	Embout universel 200 µl, faible rétention, gradué, autoclavable		10x 96 / rack	10 packs	3070.0200PR	
		Transparent	Embout universel 200 µl, faible rétention, gradué, autoclavable	✓	10x 96 / rack	10 packs	3070.0200PRS	
Embouts 350 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.	
		Couleur	Style		Emballage	Cartons		
	58.8	Transparent	Embout standard 350 µl, autoclavable		1000 / sachet	N / A	308.0350B	
		Transparent	Embout standard 350 µl, autoclavable		10x 96 / rack	N / A	308.0350R	
Embouts à filtre 300 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.	
		Couleur	Style		Emballage	Cartons		
	58.8	Transparent	Embout 300 µl avec filtre	✓	10x 96 / rack	N / A	308.0300FR	
Embouts 1000 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.	
		Couleur	Style		Emballage	Cartons		
		88.9	Transparent	Embout universel 1000 µl, pointe effilée, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3070.1000B
			Transparent	Embout universel 1000 µl, pointe effilée, autoclavable		6x 96 / rack	8 packs	3070.1000R
			tipfill	Transparent	Système tipfill™ 1000 µl avec embouts universels, pointe biseautée	5x 96 / rack	10 packs	3070.1000T
				Transparent	Rack vide pour embouts 1000 µl utilisable avec système tipfill™, autoclavable	6 / pack	8 packs	3070.1000ER
			Transparent	Embout universel 1000 µl, pointe effilée, autoclavable	✓	6x 96 / rack	8 packs	3070.1000RS
		75.9	Bleu	Embout standard 1000 µl, pointe biseautée, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3190.1000B
			Bleu	Embout standard 1000 µl, pointe biseautée, autoclavable		6x 96 / rack	8 packs	3190.1000R
			Bleu	Embout standard 1000 µl, pointe biseautée, autoclavable	✓	6x 96 / rack	8 packs	3190.1000RS
	75.9	Transparent	Embout standard 1000 µl, pointe biseautée graduée, autoclavable		1000 / sachet	10 sachets	3090.1000B	
		Transparent	Embout standard 1000 µl, pointe biseautée graduée, autoclavable		6x 96 / rack	8 packs	3090.1000R	
	70.9	Transparent	Embout 1000 µl saver, autoclavable		1000 / sachet	N / A	307.1000B	
		Bleu	Embout 1000 µl saver, autoclavable		1000 / sachet	N / A	317.1000B	
			Rack vide autoclavable pour embouts 1000 µl saver 317.1000B et 307.1000B		1 / pack	N / A	317.1000ER	
Embouts à filtre 1000 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.	
		Couleur	Style		Emballage	Cartons		
	88.9	Transparent	Embout universel 1000 µl, avec filtre, pointe effilée	✓	6x 96 / rack	8 packs	3070.1000FRS	
Embouts à faible rétention 1000 µl	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.	
		Couleur	Style		Emballage	Cartons		
	88.9	Transparent	Embout universel 1000 µl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable		6x 96 / rack	8 packs	3070.1000PR	
		Transparent	Embout universel 1000 µl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable	✓	6x 96 / rack	8 packs	3070.1000PRS	
Embouts macro 2, 5, 10 ml	Taille mm	Description		Stérile	Conditionnement		No. cat.	
		Couleur	Style		Emballage	Cartons		
		115.5	Transparent	Embout macro 2 ml, autoclavable		2x 250 / sachet	N / A	312.02
			Transparent	Embout macro 2 ml, autoclavable		30x 250 / sachet	N / A	312.02XLB
				Rack vide pour embout macro 50x 2 ml, autoclavable		2 / pack	N / A	312.02ER
		123.2	Transparent	Embout macro 5 ml, gradué, autoclavable		2x 250 / sachet	N / A	312.05B
			Transparent	Embout macro 5 ml, gradué, autoclavable		25x 250 / sachet	N / A	312.05XLB
			Transparent	Embout macro 5 ml, gradué, autoclavable		2x 50 / rack	N / A	312.05R
		150.0	Transparent	Embout macro 10 ml, autoclavable		3x 100 / sachet	N / A	312.10
			Transparent	Embout macro 10 ml, autoclavable		40x 100 / sachet	N / A	312.10XLB
		Transparent	Rack vide pour embout macro 24x 10 ml, autoclavable		4 / pack	N / A	312.10ER	

B = sachet, E = vide, F = filtre, G = gel, L = long, P = faible rétention, R = rack, S = stérile, T = système de recharge tipfill™, XLB = embouts en sachets, large volume

Embouts Premium

Tableau de compatibilité Socorex

Ce tableau indique les meilleures combinaisons entre les embouts Qualitix® et les pipettes Socorex.

Acura® manual et Acura® electro

		815					825 / 826 / 926					835 / 936			855 / 956									
		Up to 10 µl	10 y/15/20 µl	25 to 100 µl	120 to 200 µl	250 to 1000 µl	0.1 - 2 µl	0.5 - 10 µl	1 - 10 µl (Y)	2 - 20 µl	5 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	0.2 - 2 ml	0.5 - 5 ml	1 - 10 ml	0.5 - 10 µl	2 - 20 µl	5 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	40 - 350 µl	
Embouts 10-20 µl ultra et micro		Réf. emb.																						
	3090	●					●	●										●						
	3020	●					●	●											●					
	302	● ²						● ²																
	3090	●					●	●										●						
	3020	●					●	●											●					
	307	●					●	●										●						
Embouts 20 - 100 µl		Réf. emb.																						
	3080		●						●	●	● ¹									● ¹				
	3080			●						●	●	● ¹								●	●	● ¹		
Embouts 200 µl		Réf. emb.																						
	3070		●	●	●			●	●	●	●	●	●							●	●	●		
	3290		●	●	●			●	●	●	●	●	●							●	●	●		
	3080				●					●	●	●	●											
	3070			●	●								●										●	
	3080				●								●										●	
	307/327		●	●	●			●	●	●	●	●	●							●	●	●		
Embouts 300 - 350 µl		Réf. emb.																						
	308				●							●	●										●	
	308				●							●											● ¹	
Embouts 1000 µl		Réf. emb.																						
	3070					●							●											
	3190					●							●											
	3090					●							●											
	3070					●							●											
	307/317					●							●											
Embouts 2, 5, 10 ml Macro		Réf. emb.																						
	312														●									
	312															●								
	312																●							

¹ Jusqu'au volume maximal de l'embout ² Pour volumes > 2 µl

Réservoirs à réactifs



Réservoirs fond en V, 75 ml

Polypropylène, réutilisables et autoclavables. Graduations en relief pour une lisibilité durable. Angles arrondis pour transvaser aisément le liquide. Stable sur la paillasse grâce à une base large. Flexibilité lors de travaux de routine avec des pipettes mono- et multicanaux.



Réservoirs fond en V, avec couvercle, 125 ml

Modèles réutilisables, polypropylène autoclavable. Couvercle à charnière. Format d'une plaque de microtitration assure une excellente stabilité. Empilable pour gagner de la place. Le fond en V facilite l'aspiration jusqu'à la dernière goutte. Utilisation idéale pour le pipetage avec des pipettes mono- et multicanaux.



Commande - Réservoirs à fond en V

Description	Dimensions	Volume	Couleur	Style	Couvercle	Matériau	Stérile	Emballage	No. cat.
Réservoir	58 x 132 x 25 mm	75 ml	Transparent	Fond en V	Non	PP	Non	20 / pk	330.01
Réservoir	83 x 121 x 34 mm	125 ml	Transparent	Fond en V	A charnière	PP	Non	20 / pk	330.01L

Echantillons gratuits sur demande



Réservoirs multicanaux, non-stériles, 48 ml

Réservoirs en polystyrène 8 et 12 canaux. Chaque canal avec fond arrondi. Contenance totale 48 ml. Bonne stabilité sur la paillasse. Emploi possible avec pipettes multicanaux, automate de pipetage ou en robotique grâce au format d'une plaque de microtitration.



Réservoirs multicanaux, stérilisés, 48 ml

Réservoirs en polystyrène 8 et 12 canaux, emballage individuel, pour une utilisation dans un environnement propre. Stérilisation par irradiation aux rayons X. Chaque canal avec fond arrondi. Contenance totale 48 ml. Un numéro de lot assure la traçabilité.



Commande - Réservoirs multicanaux

Description	Dimensions	Volume	Couleur	Style	Couvercle	Matériau	Stérile	Emballage	No. cat.
Réservoir	83 x 126 x 13 mm	8x 6 ml	Blanc	8 canaux	Non	PS	non	30 / pk	330.08
Réservoir	83 x 126 x 13 mm	8x 6 ml	Blanc	8 canaux	Non	PS	non	100 / pk	330.08XL
Réservoir	83 x 126 x 13 mm	8x 6 ml	Blanc	8 canaux	Non	PS	oui	10x1 / pk	330.08.9
Réservoir	83 x 126 x 13 mm	12x 4 ml	Blanc	12 canaux	Non	PS	non	30 / pk	330.12
Réservoir	83 x 126 x 13 mm	12x 4 ml	Blanc	12 canaux	Non	PS	non	100 / pk	330.12XL
Réservoir	83 x 126 x 13 mm	12x 4 ml	Blanc	12 canaux	Non	PS	oui	10x1 / pk	330.12.9

Echantillons gratuits sur demande



Pipettes Pasteur, pailles et filtres



Pipettes Pasteur en verre

Modèles standards pour macropipettes Acura® *manual / electro* de 2 et 5 ml avec leurs adaptateurs correspondants. Alternative aux embouts, par exemple pour l'utilisation de réactifs attaquant le PP. Choix de taille et de modèles adapté aux principaux besoins des laboratoires.

Adaptateurs pour pipettes Pasteur

Adaptateurs en PVDF avec deux joints intérieurs, assurent l'étanchéité des pipettes Pasteur en verre (Ø ext 6.5 - 7.2 mm) tout en permettant également l'utilisation d'embouts standards en polypropylène.

Commande - Pipettes Pasteur

Matériau	Volume	Dimensions (l x Ø mm)	Emballage	No. cat.
Verre	2 ml	150 x 7	250 / pk	313.02.150
Verre	2 ml	230 x 7	250 / pk	313.02.230
Verre, cotonnées	2 ml	150 x 7	250 / pk	313.02.150C
Verre, cotonnées	2 ml	230 x 7	250 / pk	313.02.230C

Commande - Adaptateur pour pipettes Pasteur

Pour macropipette	Emballage	No. cat.
Acura® <i>manual</i> 835, 2 ml Acura® <i>electro</i> 936, 2 ml	1 / pk	1.835.631
Acura® <i>manual</i> 835, 5 ml Acura® <i>electro</i> 936, 5 ml	1 / pk	1.835.633



Embouts paille

Adaptée à la pipette Acura® *dilute* 810, la forme allongée de la paille permet l'aspiration de solutions avec particules en suspension directement depuis un récipient étroit ou un sac Stomacher®. Sachet stérilisé, refermable.

Filtres de protection

Empêche la remontée du liquide et la contamination du cylindre. Filtre interchangeable, non stérile, non autoclavable.

Commande - Embouts paille et filtres de protection

Description	Compatibilité	Matériau	Taille (l x Ø mm)	Emballage	No. cat.
Paille, 1.1 ml	Acura® <i>dilute</i> 810	PP, stérilisé	190 x 4	40x25 / pk	313.119.40
Filtre de protection	Acura® <i>dilute</i> 810	PE	6.3 x 2.5	100 / pk	322.810
Filtre de protection	Calibra® <i>digital</i> 832, 2 ml	Cellulose	22 x 7	250 / bag	322.02
Filtre de protection	Acura® <i>manual</i> 835, 2 et 5 ml Acura® <i>electro</i> 936, 2 et 5 ml	Fibre PP	20 x 7.5	50 / bag	322.05
Filtre de protection	Calibra® <i>digital</i> 832, 10 ml Acura® <i>manual</i> 835, 10 ml Acura® <i>electro</i> 936, 10 ml	Fibre PP	30 x 10.5	50 / bag	322.10

Sachets de stérilisation


Les sachets de stérilisation Qualitix®

Adaptés à tout instrument médical, dentaire ou vétérinaire de petite ou moyenne taille, les sachets de stérilisation Qualitix® à usage unique permettent une stérilisation rapide et efficace. En papier solide de qualité médicale, les sachets ferment parfaitement avec une bande autocollante garantissant le maintien de la stérilité. Le contenu reste visible grâce à un film transparent laminé PET/CPP.

- Matériau solide et durable
- Identification rapide du contenu
- Grande bande autocollante, facile à fermer
- Ouverture rapide
- A la fois pour une stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène
- Deux témoins de stérilité
- Cinq tailles différentes
- Conforme aux normes ISO 17665, ISO 11135, MDR 2017/745



Echantillons gratuits sur demande

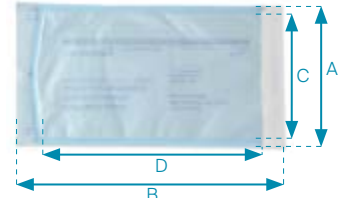

Témoins de stérilisation

Deux témoins chimiques confirment la bonne exécution de la stérilisation. Le témoin bleu vire au gris foncé après autoclavage, le rouge passe au jaune après une stérilisation par oxyde d'éthylène.

Autocollant - ouverture rapide

Enlever simplement la protection de la bande autocollante, plier pour fermer. Le sachet reste hermétique pour garantir la stérilité.

Dimensions

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
83	160	65	110
90	260	70	205
135	260	115	205
190	360	170	300
300	395	270	335

Contrôle de l'intégrité

Un film bleu transparent permet un contrôle visuel immédiat de l'intégrité du film ou du sachet. Ne pas utiliser de sachet endommagé.

Commande

Description	Dimensions		Matériau	Emballage	No. cat.
Sachet autocollant	83 x 160 mm	3.3" x 6.3"	Papier de qualité méd./PET/CPP	200 / pk	3210.0816
Sachet autocollant	90 x 260 mm	3.5" x 10.2"	Papier de qualité méd./PET/CPP	200 / pk	3210.0926
Sachet autocollant	135 x 260 mm	5.3" x 10.2"	Papier de qualité méd./PET/CPP	200 / pk	3210.1326
Sachet autocollant	190 x 360 mm	7.5" x 14.2"	Papier de qualité méd./PET/CPP	200 / pk	3210.1936
Sachet autocollant	300 x 395 mm	11.8" x 15.6"	Papier de qualité méd./PET/CPP	200 / pk	3210.3040



Voir la vidéo



Socorex Isba SA

Chemin de Champ-Colomb 7a

1024 Ecublens/Lausanne

Suisse

Tél +41 21 651 6000

socorex@socorex.com

www.socorex.com

Votre distributeur

BQTXF - B0724

Copyright © 2024, Socorex Isba SA, Suisse

