


# ANIOSYME WD SYNERGY

## DETERGENT POUR LDI

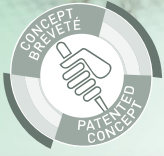

- Très haut pouvoir détergent démontré
- Complexe tri enzymatique : efficace sur tout type de salissures
- Haute efficacité avec toute qualité d'eau

### INDICATIONS

Nettoyage du matériel chirurgical et médical, des dispositifs médicaux en machine à laver automatique et tunnel de lavage. Utilisation possible en eau douce et en eau dure.

### CARACTÉRISTIQUES

- pH produit pur : mini 7.5 - maxi 10.0
- pH du produit dilué :
  - pH eau dure 0.5% : ≈ 7.1
  - pH eau douce 0.5% : ≈ 10.1
- Densité : ≈ 1.16
- Liquide limpide jaune

### COMPOSITION

Tensioactifs non ionique et cationique à effet démoissant, agent séquestrant, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), excipients.

### MODE D'EMPLOI

Solution concentrée pour usage professionnel. S'utilise en machine à laver automatique et tunnel de lavage aux dilutions comprises entre 0,2 et 0,5%. Efficace à partir de 1 minute. Adapter la concentration, le temps de contact et la température de l'eau de dilution en fonction du degré de souillure et de la méthode de nettoyage utilisée. Température maximum : 60°C.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage entre +5°C et +35°C. Dispositif médical de classe I (Directive 93/42/CEE modifiée).



### CONDITIONNEMENTS

- 1 2 bidons de 5L Réf 2387.038
- 2 2 bidons de 5L Réf 2387.015



Laboratoires  
**ANIOS**  
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin  
59260 Lille-Hellemmes - France  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68  
[www.anios.com](http://www.anios.com)



FR2387-180430-Photos non contractuelles