MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

4171VE

CHRONOMÈTRE/HORLOGE

1. Introduction et caractéristiques

Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement.
Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question.
Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Le **4171VE** est un chronomètre compact et facile à utiliser pour usage à l'intérieur, et peut également servir d'horloge murale. Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.


2. Prescriptions de sécurité

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Cet appareil a été conçu pour un usage à l'intérieur uniquement.
- Tenir cet appareil à l'écart de températures extrêmes, humidité, eau et des rayons directs du soleil.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Demander à votre revendeur de renouveler le câble d'alimentation si nécessaire.
- Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer. Tirer la fiche pour débrancher l'appareil ; non pas le câble.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon humide. Éviter l'usage d'alcool et de solvants.

3. Alimentation / Recharge ⚠

Votre **4171VE** peut être alimenté par un accu (non incl.) ou par un adaptateur CA/CC. L'alimentation par adaptateur rechargera simultanément la pile. Un accu déchargé nécessite un temps de charge de 20h pour une autonomie de 4h. **ATTENTION : Allumer l'appareil pour recharger**

Connexion de l'accu : connecter le câble rouge à la borne rouge et le câble noir à la borne noir. Voir illustration.

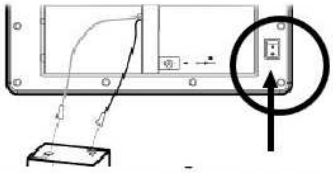

Insérer ensuite la fiche dans la prise d'entrée. Connecter l'adaptateur au réseau électrique.

⚠ **ATTENTION : Allumer l'appareil pour recharger**
Interrupteur en position 1

4. Emploi

- **Minuterie**
  Enfoncer CLOCK/TIMER et sélectionner TIMER.
  - **Chronomètre**
    - Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP.
    - Enfoncer TIMER SET/INTERVAL SET et sélectionner TIMER SET.
    - Effacer le temps affiché avec HOURS/MINUTES ou MINUTES/SECONDS si nécessaire. Enfoncer la touche pour augmenter, maintenir la touche enfoncée pour diminuer.
    - Enfoncer GO/STOP et sélectionner GO pour démarrer le chronomètre (jusqu'à 99:59 ; le chronomètre revient à 00:00 et recommence). Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP pour arrêter. Remettre à zéro en enfonçant 12HR/24HR/RESET.

DOMINIQUE DUSCHER SAS

- **Compte à rebours**
  - Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP.
  - Enfoncer TIMER SET/INTERVAL SET et sélectionner TIMER SET.
  - Programmer le temps désiré avec HOURS/MINUTES ou MINUTES/SECONDS si nécessaire. Enfoncer la touche pour augmenter, maintenir la touche enfoncée pour diminuer.
  - Enfoncer GO/STOP et sélectionner GO. Le compte à rebours démarre, le 4171VE émet un bip sonore lorsqu'il arrive à 00 :00. Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP pour arrêter. Reprogrammer le temps en enfonçant 12HR/24HR/RESET.

- **Minuterie à intervalle**
  Dans ce mode, le 4171VE démarre le compte à rebours, émet un bip sonore lorsqu'il arrive à 00:00, reprogramme automatiquement le temps initial et redémarra le compte à rebours.
  - **Configuration**
    - Enfoncer CLOCK/TIMER et sélectionner TIMER.
    - Enfoncer TIMER SET/INTERVAL SET et sélectionner INTERVAL SET.
    - Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP.
    - Programmer le temps désiré avec HOURS/MINUTES ou MINUTES/SECONDS si nécessaire. Enfoncer la touche pour augmenter, maintenir la touche enfoncée pour diminuer.
    - Enfoncer 12HR/24HR/RESET pour insérer une pause de 15 secondes entre deux comptes à rebours. La LED INTERVAL clignote pour indiquer que la fonction est activée. Renfoncer 12HR/24HR/RESET pour désactiver.
    - Enfoncer GO/STOP et sélectionner GO. Le compte à rebours démarre. Vous entendrez 3 bips sonores avant que le 4171VE ne passe au prochain compte à rebours. Reprogrammer le temps en enfonçant 12HR/24HR/RESET.

- **Horloge**
  Le 4171VE affiche l'heure.
  - **Affichage 12/24h**
    - Enfoncer CLOCK/TIMER et sélectionner CLOCK.
    - Enfoncer TIMER SET/INTERVAL SET et sélectionner TIMER SET.
    - Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP.
    - Enfoncer 12HR/24HR/RESET pour sélectionner le mode d'affichage 12h ou 24h.
    - Programmer le temps désiré avec HOURS/MINUTES ou MINUTES/SECONDS si nécessaire. Enfoncer la touche pour augmenter, maintenir la touche enfoncée pour diminuer.
    - Enfoncer GO/STOP et sélectionner GO pour confirmer.

REMARQUE : La sélection d'une autre fonction ne désactivera pas une fonction utilisée. Désactiver d'abord la fonction utilisée de manière manuelle en reprogrammant tous les temps sur 00:00.

- **Déclencheur à distance (filaire, sans fil, à pédale)**

Le 4171VE peut fonctionner avec un déclencheur à distance filaire (4138/A15), sans fil (4137/A1) ou à pédale qui commanderont la fonction Start/Stop.

REMARQUE : Pour utiliser le déclencheur à distance sans fil 4138/A1, insérer 2 piles AAA dans le récepteur situé dans le compartiment arrière de l'appareil.

En fonctionnement avec le déclencheur sans fil 4138/A1, un appui bref sur le bouton de la télécommande ne suffit pas. Faire un appui long sur la télécommande.

5. Spécifications techniques

Alimentation	
Accu acide-plomb (non incl)	
9VCC/1A adapter (incl.)	
Consommation	< 8W
Dimensions	327 x 156 x 93mm
Poids	1.6kg (sans accu)

RoHS CE

DOMINIQUE DUTSCHER SAS