Spécifications produit

Laveur Getinge Lancer Ultima 1300

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Trois configurations commercialisées exclusivement par le réseau de distributeurs Getinge France :

- **AC - Académique**
- **EV - Évolution**
- **QL - Qualifiée**



SOMMAIRE

1. Getinge, un partenaire leader à votre service 3

2. Équipement 4

2.1 Conception....4

2.2 Fonctionnement 4

2.3 Caractéristiques techniques....5

2.4 Configuration Académique (Laveur sécheur 1300-AC) 5

2.5 Configuration Évolution (Laveur sécheur 1300-EV)....6

2.6 Configuration Qualifiée (Laveur sécheur 1300-QL) 6

3. Accessoires 7

3.1 Kit roues pour réutiliser les paniers UP et Labexia LX....8

3.2 Paniers Grillagés....8

3.3 Accessoires amovibles pour Paniers Grillagés....8

3.4 Paniers Injecteurs Longs....9

3.5 Paniers Injecteurs Courts....11

3.6 Paniers Injecteurs Aiguilles 12

3.7 Accessoires amovibles pour Paniers Injecteurs 12

3.8 Paniers Injecteurs Mixtes 12

3.9 Paniers multi fonctions 13

3.10 Stockage 14

3.11 Manutention assistée par trolley externe 14

3.12 Détergents pour laveurs LX/LXP Getinge Lancer 15

4. Installation 16

5. Options (à commander séparément avec le laveur)....17

5.1 Tension électrique....17

5.2 Kit Basse pression 17


5.3 Vanne de prélèvement....17

5.4 Garantie totale étendue à 2 ans 17

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

1. Getinge, un partenaire leader à votre service

1.1. Chiffres clés

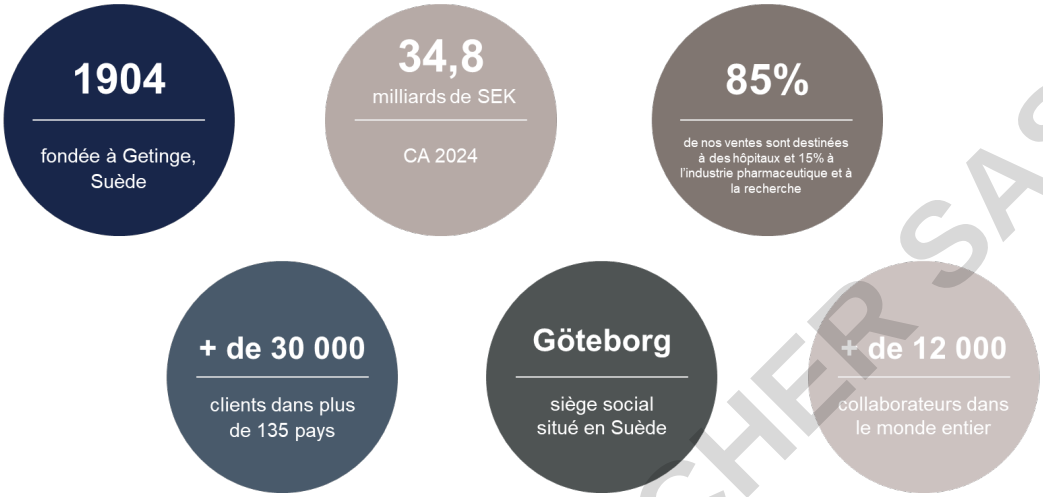

1.2. Nos sites de production dans le monde



États-Unis
Englewood, Mahwah
Merrimack, Wayne
Fraser, Smithfield

Allemagne
Hechingen, Rastatt
Feldkirchen

France
Ardon, La Ciotat
Tournefeuille, Vendôme
Grenoble, Bobigny

Suède
Solna, Växjö, Getinge

Pologne
Poznan

Turquie
Antalya

Royaume-Uni
Derby

Pays-Bas
Delft


Chine
Suzhou


Notre site de production de Tournefeuille (31) fabrique des laveurs Lancer depuis 1970.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

2. Équipement



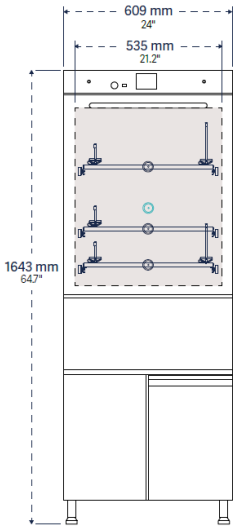

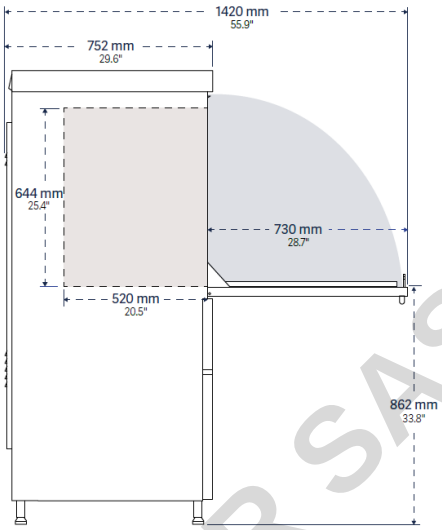



2.1 Conception

- Fabrication Française (Toulouse) – IP22
- Chambre et porte en acier inoxX2 Cr Ni 17-12 (316L).
- Châssis inoxX2 Cr Ni 18-10 (304L).
- Porte abattante avec verrouillage électromagnétique.
- 3 niveaux de lavages indépendants.

FABRIQUÉ EN FRANCE

2.2 Fonctionnement



- Laveur équipé en série d'un adoucisseur.
- Programmation par microprocesseur PROLUX avec modification sous code d'accès des paramètres de fonctionnement (durées, température, concentration).
- Ecran tactile 3,5" intuitif et convivial incliné au-dessus de la cuve.
- Verrouillage électromagnétique de la porte pendant le fonctionnement du laveur.
- Dosage des produits additifs effectué par 2 pompes péristaltiques.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- Détection du niveau dans les bidons de produit par flotteur.
- Séchage par insufflation d'air chaud filtré et forcé dans la cuve et via les injecteurs.
- Filtration HEPA pour une meilleure qualité de l'air de séchage.
- 1 sortie USB 3.0 en façade.
- Stockage des produits de lavage (2 X 10 litres) dans un tiroir placé sous le laveur.

2.3 Caractéristiques techniques

- Tension électrique : 380V T+T+N 50Hz, 11A/Phase, 10KW, Protection 20A
- Dimensions hors tout : Largeur 609mm ; Profondeur 752mm ; Hauteur 1643mm
- Dimensions internes disponibles : Largeur 535mm ; Hauteur 644mm ; Profondeur 520mm
- Volume utile de la cuve : 180L
- Débit de la pompe 420 L/min
- Poids 145 Kg
- Niveau sonore <63Db ; Déperdition calorifique : 860 Kcal /H ;15 litres par phase de lavage

Colisage 1300LX : Poids : 200 Kg ; Dimensions : H1970mm x L840mm x P1010 mm

2.4 Configuration Académique (Laveur sécheur 1300-AC)

- **Composition du laveur-sécheur 1300AC :**

  Laveur Ultima 1300LX raccordé en 380V T+T+N avec adoucisseur intégré

  Prestation de service incluses : pré visite, installation et mise en service + formations des utilisateurs par le SAV Getinge France

- **Options (à commander séparément avec le laveur) :**

  8151300-Mono : raccordement en 220/240V Monophasé 31A 50Hz (protection 40A)

  1300-TSN : Raccordement en 380/400V Tri+T sans neutre 11A/phase 50Hz (protection 20A)

  8151600-EVB : vanne passe pression + pompe d'aspiration (pour eau déminéralisée à pression <2bars)

  13001600-VP : vanne de prélèvement pour échantillonnage du bain.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

2.5 Configuration Évolution (Laveur sécheur 1300-EV)

- **Composition du laveur-sécheur 1300EV :**

  Laveur Ultima 1300AC raccordé en 380V T+T+N avec adoucisseur intégré

  + Colonne et bouche en inox pour utilisation thermique ou sévère
  + Condenseur intégré

  Prestations de service incluses : pré visite, installation et mise en service + formations des utilisateurs par le SAV Getinge France

- **Options (à commander séparément avec le laveur) :**

  8151300-Mono : raccordement en 220/240V Monophasé 31A 50Hz (protection 40A)

  1300-TSN : raccordement en 380/400V **Tri**+T **sans neutre** 11A/phase 50Hz (protection 20A)

  8151600-EVB : vanne passe pression + pompe d'aspiration (pour eau déminéralisée à pression <2bars)

  13001600-VP : vanne de prélèvement pour échantillonnage du bain.

2.6 Configuration Qualifiée (Laveur sécheur 1300-QL)

- **Composition du laveur-sécheur 1300QL :**

  Laveur Ultima 1300EV 380V T+T+N avec adoucisseur, condenseur et colonne inox intégrés

  + Débitmètres sur les deux pompes détergent
  + Qualification FAT usine selon le protocole Getinge Lancer

  Prestations de service incluses :

  - Pré visite, installation et mise en service +formations des utilisateurs par SAV Getinge France
  - Qualification SAT sur site client selon le protocole Getinge Lancer

- **Options (à commander séparément avec le laveur) :**

  8151300-Mono : raccordement en 220/240V Monophasé 31A 50Hz (protection 40A)

  1300-TSN : raccordement en 380/400V **Tri**+T **sans neutre** 11A/phase 50Hz (protection 20A)

  8151600-EVB : vanne passe pression + pompe d'aspiration (pour eau déminéralisée à pression <2bars)

  13001600-VP : vanne de prélèvement pour échantillonnage du bain.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


3. Accessoires

Les paniers sont compatibles avec tous les laveurs : 810/815/820/910 et 1300 UP ou LX Labexia



Combinaisons de chargement :


Cinq configurations disponibles

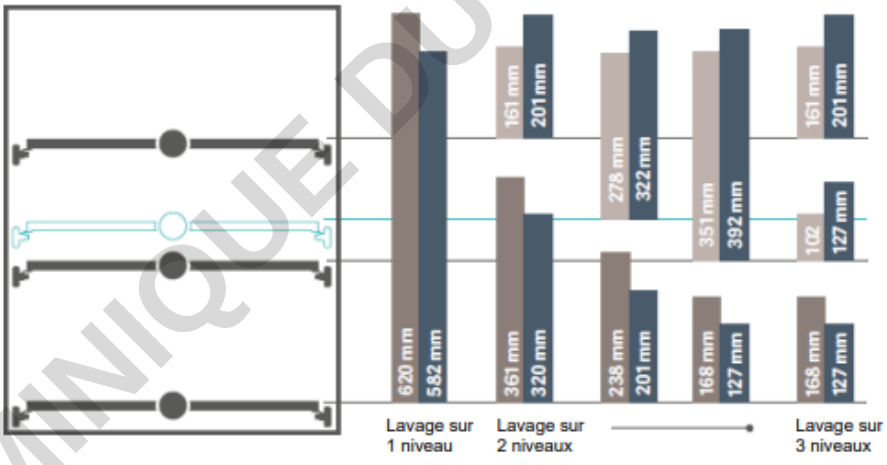

PST	Panier simple
PSBT	Panier simple avec bras de lavage
IXC / IXL	Panier à injecteurs courts ou longs

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


3.1 Kit roues pour réutiliser les paniers UP et Labexia LX

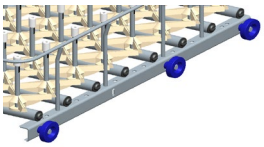

Références	Description
8151400-ADAPT	Kit 6 roues pour réutiliser les anciens paniers

3.2 Paniers Grillagés




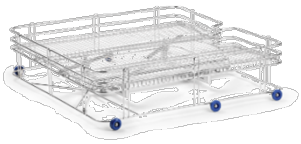

Références	Description
8151300-PST	PST - Panier Simple à grilles
8151300-PSBT	PSBT - Panier Simple à grilles avec Bras

3.3 Accessoires amovibles pour Paniers Grillagés



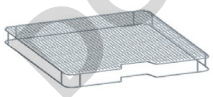



Références	Description
8151600-BP	BP – Accessoire support pour boîtes de Petri (Capacité 3 par panier)
8151300-GC	GC - Grille couvercle réversible pour panier simple
8151300-GA	GA IX –Grille de maintien adaptable pour maintien sur panier injecteur (s)


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

	**8151600-LTC**	LTC - Panier en maille inox avec couvercle pour tubes longs
	**8151600-LTCXL**	LTCXL - Panier en maille inox XL avec couvercles pour tubes longs
	**8151600-STC**	STC - Panier en maille inox avec couvercle pour tubes courts
	**8151600-STCXL**	STCXL - Panier en maille inox XL avec couvercles pour tubes courts

3.4 Paniers Injecteurs Longs

Références	Description
 **8151300-1IXL**	1 IXL - Panier 1 Injecteur Long Ø12mm avec boule diffuseuse
 **8151300-2IXL**	2 IXL - Panier 2 Injecteurs Longs Ø12mm avec boules diffuseuses
 **8151300-4IXL**	4 IXL - Panier 4 Injecteurs Longs Ø12mm avec boules diffuseuses
 **8151300-5IXL**	5 IXL - Panier 5 Injecteurs Longs Ø12mm avec boules diffuseuses

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

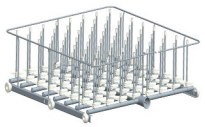	**8151300-9IXL**	9 IXL - Panier 9 Injecteurs Longs Ø 12mm avec boules diffuseuses
	**8151300-12IXL**	12 IXL - Panier 12 Injecteurs Longs Ø8mm
	**8151300-20IXL**	20 IXL - Panier 20 Injecteurs Longs Ø8mm
	**8151300-36IXL**	36 IXL - Panier 36 Injecteurs Long Ø6mm s
	**8151300-48IXL**	48 IXL - Panier 48 Injecteurs Longs Ø6mm
	**8151300-64IXL**	64 IXL - Panier 64 Injecteurs Longs Ø6mm
	**8151300-100IXL**	100 IXL - Panier 100 Injecteurs Longs Ø6mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.5 Paniers Injecteurs Courts

	Références	Description
	**8151300-27IXC1/2**	27 IXC 1/2 - Demi Panier 27 Injecteurs Courts Ø6mm
	**8151300-36IXC**	36 IXC - Panier 36 Injecteurs Courts Ø6mm
	**8151300-41IXC**	41 IXC - Panier 41 Injecteurs Courts Ø6mm
	**8151300-48IXC**	48 IXC - Panier 48 Injecteurs Courts Ø6mm
	**8151300-64IXC**	64 IXC - Panier 64 Injecteurs Courts Ø6mm
	**8151300-100IXC**	100 IXC - Panier 100 Injecteurs Courts Ø6mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


3.6 Paniers Injecteurs Aiguilles

	Références	Description
	**8151300-48IXA**	48 IXA - Panier 48 Injecteurs Aiguilles Ø2mm
	**8151300-64IXA**	64 IXA - Panier 64 Injecteurs Aiguilles Ø2mm
	**8151300-100IXA**	100 IXA - Panier 100 Injecteurs Aiguilles Ø2mm


3.7 Accessoires amovibles pour Paniers Injecteurs

	Références	Description
	**8151300-GCI**	GCI - Grille couvercle pour panier injecteurs


3.8 Paniers Injecteurs Mixtes

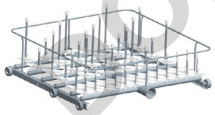	Références	Description
	**8151300-36IXLC**	36 IXLC - Panier 36 Injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm
	**8151300-48IXLC**	48 IXLC - Panier 48 Injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

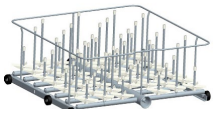	**8151300-48IXLCA**	48 IXLCA - Panier 48 Injecteurs Longs, Courts Ø6mm & Aiguilles Ø2mm
	**8151300-64IXA/2**	64 IXA 1/2 - Panier 32 Injecteurs Aiguilles Ø2mm et 32 injecteurs Courts Ø6mm
	**8151300-64IXLC**	64 IXLC - Panier 64 Injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm
	**8151300-100IXA/2**	100 IXA/2 - Panier 100 Injecteurs 1/2 Aiguilles Ø2mm 1/2 Courts Ø6mm
	**8151300-100IXLC**	100 IXLC - Panier 100 Injecteurs Longs & Courts Ø6mm

3.9 Paniers multi fonctions

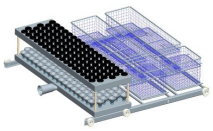Références	Description
 **8151300-PS/100PIP**	PS/100PIP - Panier grillagé + 100 Pipettes verticales
 **8151300-25PIP/24IXLC**	25PIP/24IXLC - Panier mixte 25 Pipettes inclinées + 24 Injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm
 **8151300-25PIP/30IXLC**	25PIP/30IXLC - Panier mixte 25 Pipettes verticales + 30 Injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

	**8151300-4EP/28IXLC**	4EP/28IXLC - Panier mixte 4 Eprouvettes inclinées + 28 Injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm
	**8151300-50PIP/34IXLC**	50PIP/34IXLC - Panier mixte 50 Pipettes verticales + 34 Injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm
	**8151300-PS/21IXLC/25PIP**	PS/21IXLC/25PIP - Panier mixte simple + 25 Pipettes verticales+ 21 injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm
	**8151300-PS/27IXLC**	PS/27IXLC - Panier mixte simple + 27 injecteurs Longs & Courts mélangés Ø6mm

3.10 Stockage

Références	Description
 **8151300-RP**	RP - Meuble de rangement de paniers à 3 niveaux

3.11 Manutention assistée par trolley externe

Références	Description
 **1300-TN**	TN13 - Trolley tous niveaux pour laveur 1300LX

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.12 Détergents pour laveurs LX/LXP Getinge Lancer



Références	Description
41010070	**LLL -** Détergent alcalin en bidon de 10 litres
41010014	**NLL -** Neutralisant à base d'acide acétique en bidon de 10 litres

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

4. Installation

Incoterms : EX WORKS

Enlèvement en usine,transport et dépose dépalétisé chez le client à la charge du distibuteur et de son transporteur

Configuration standard :

Tension et protection :

Standard : 380/400V T+T+N 50Hz (Puissance 7Kw ; consommation 15A/Phase ; protection 20A/Phase)

Arrivées d'eau :

Eau froide : Pression : 2 bars<pression d'alimentation<6 bars ; Raccord fileté mâle Ø20/27 (3/4pouce)

Eau chaude (<50°C) : Pression : 2 bars<pression d'alimentation<6 bars ; Raccord fileté mâle Ø20/27 (3/4pouce)

Eau purifiée : Pression : 2 bars<pression d'alimentation<6 bars ; Raccord fileté mâle Ø20/27 (3/4pouce)


Évacuation des eaux :

Laveur posé au sol : Tube fixe double Intérieur 40mm, 800mm<Hauteur<900mm

Il appartient au client de mettre en conformité ses utilités avant installation.

Conseils d'installations personnalisés sur simple demande

Dimensions externes des configurations de laveur :

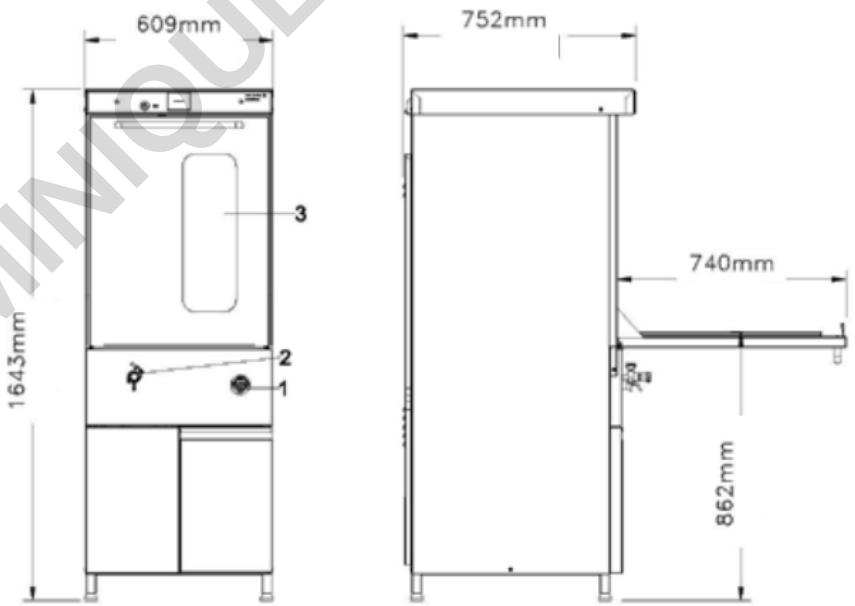

Laveur 1300LX Getinge Lancer Ultima (Oculus rep3 et arrêt d'urgence rep1 non proposés)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5. Options (à commander séparément avec le laveur)

5.1 Tension électrique

Nous conseillons le raccordement des équipements en 380/400 V triphasé + terre + neutre 50Hz. Néanmoins, nous avons la possibilité de pouvoir adapter nos équipements aux tensions suivantes :

- **Réf N°1300-Mono :** 230/240V MONO +T 50 HZ **(31A – Protection 40A)**
- **Réf N°1300-TSN :** (transfo d'isolement pour 380/400V T +T 50 HZ **sans neutre (15A – Protection 20A)**

Note : Le choix d'une de ces deux options ne pourra pas être modifié après commande.

5.2 Kit Basse pression

Réf N°8151600-EVB : Notre équipement sera équipé d'une pompe et d'une électrovanne basse pression intégrée permettant de pallier le manque de pression de votre réseau (< 2 bars) ou d'une installation d'eau imposant de puiser dans une cuve adjacente.

5.3 Vanne de prélèvement

Réf N°13001600-VE : Notre équipement sera équipé d'une vanne manuelle d'échantillonnage du bain pour permettre d'effectuer des prélèvements de contrôle.

5.4 Garantie totale étendue à 2 ans

Réf N°1300-G2A :

Consécutivement à la mise en service par Getinge France SAV, cette prestation de service inclura une visite d'entretien en fin de première année et une visite d'entretien en fin de seconde année.

Le laveur sera garanti pièces, MO et déplacement pendant deux années.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

GETINGE

Convaincu que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements de santé et de sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de stérilisation centrale et des sciences de la vie. Avec plus de 12 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 135 pays.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · operation-operation-ventes.projet.fr@getinge.com

PUB-2025-0149-A, version de juillet 2025

www.getinge.fr