

Angles nus et D/T

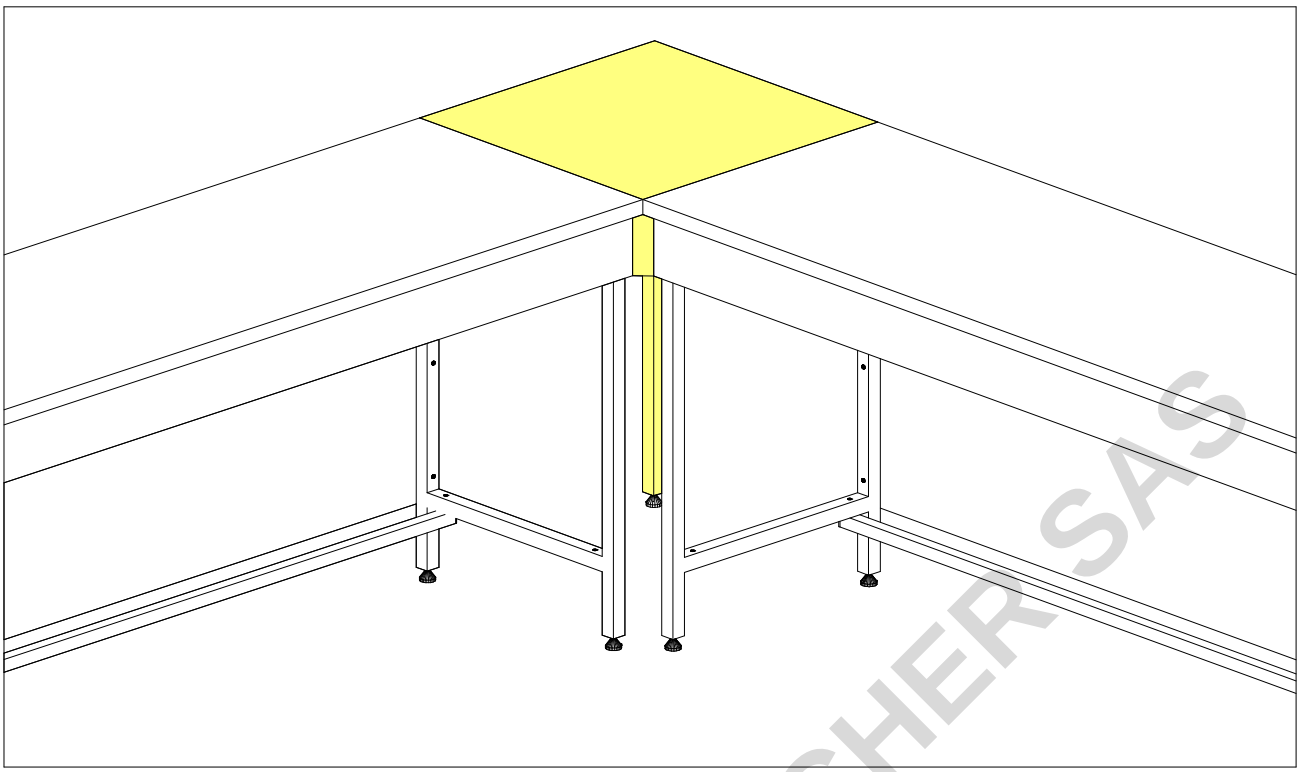


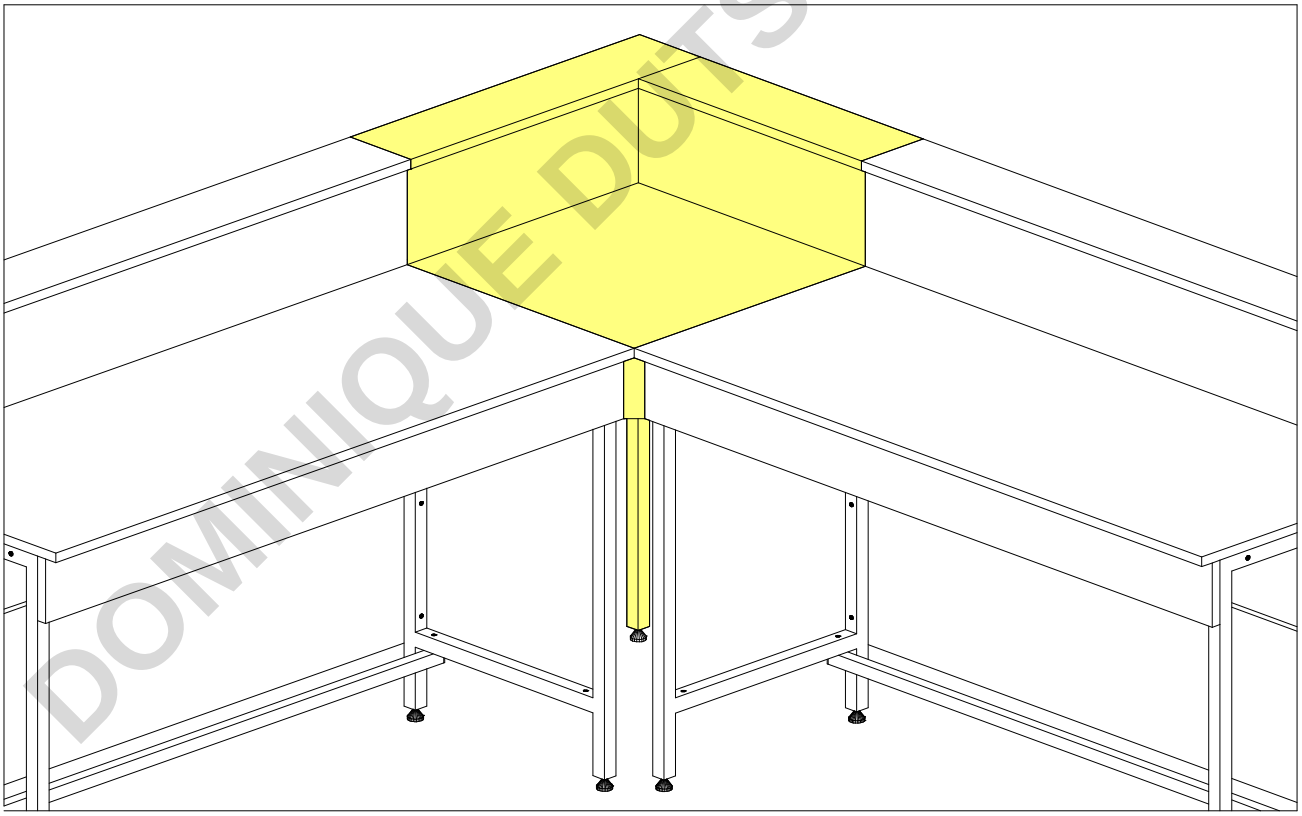

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

KITlab


Schéma de montage de l'ossature "ANGLE D/T"

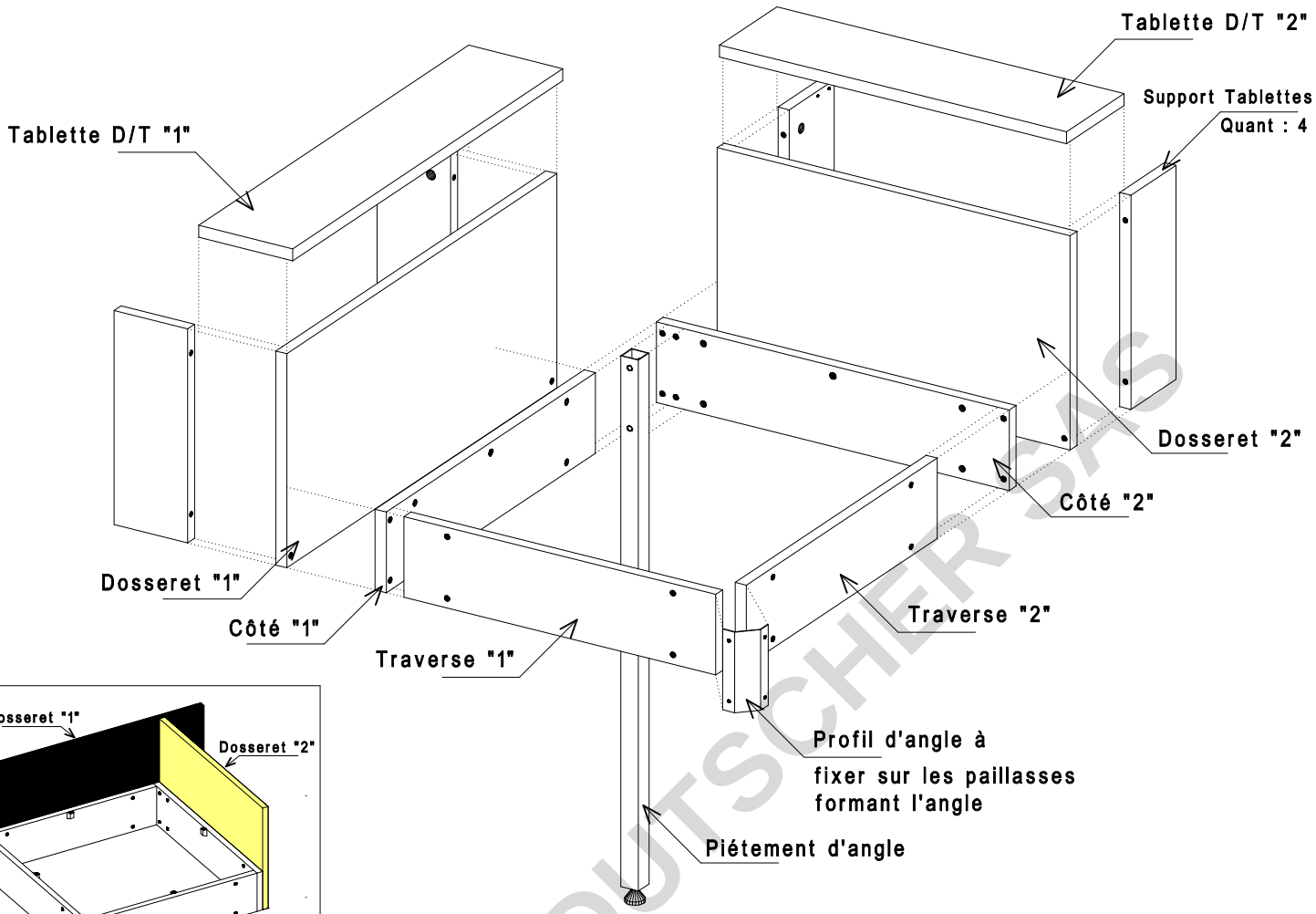

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Désignation de la quincaillerie	Angle nu Quantité	Angle D/T Quantité	Quantité par sachet
Vis Poëlier 6*40	6	6	6
Vis auto-tourillonneuse	6	6	6
Plot d'assemblage	4	4	4
Manchon d'écartement	6	6	6
Embase clip tablettes		4	4
Clip tablettes		4	4
Vis TF 3.5*15	4	20	20
Vis TF 4*35	4	14	14
Boitier Minifix		8	8
Goujon Minifix		8	8

Schéma de montage de l'ossature "ANGLE NU"

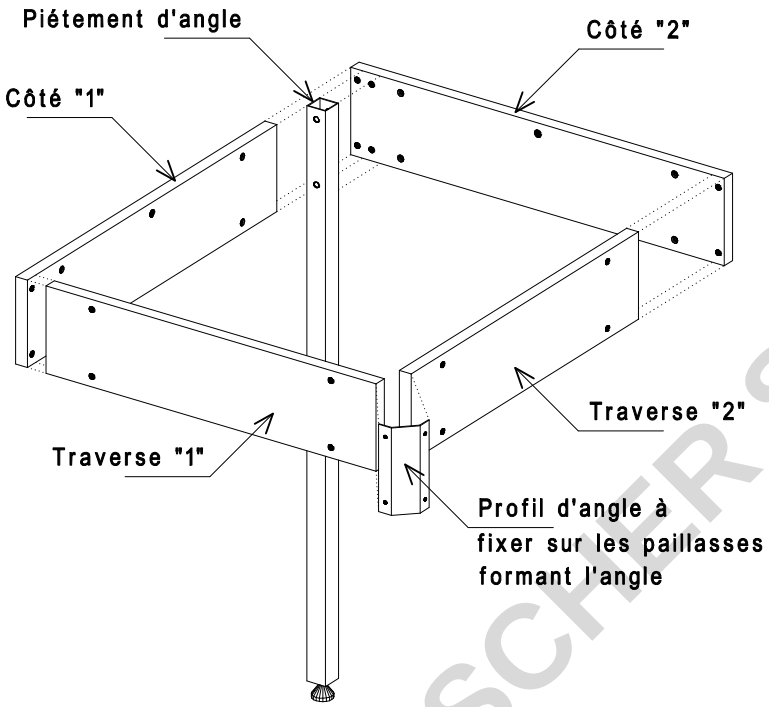


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Désignation de la quincaillerie	Angle nu Quantité	Angle D/T Quantité	Quantité par sachet
Vis Poëlier 6*40	6	6	6
Vis auto-tourillonneuse	6	6	6
Plot d'assemblage	4	4	4
Manchon d'écartement	6	6	6
Embase clip tablettes		4	4
Clip tablettes		4	4
Vis TF 3.5*15	4	20	20
Vis TF 4*35	4	14	14
Boitier Minifix		8	8
Goujon Minifix		8	8


Préparation des côtés de la ceinture

1

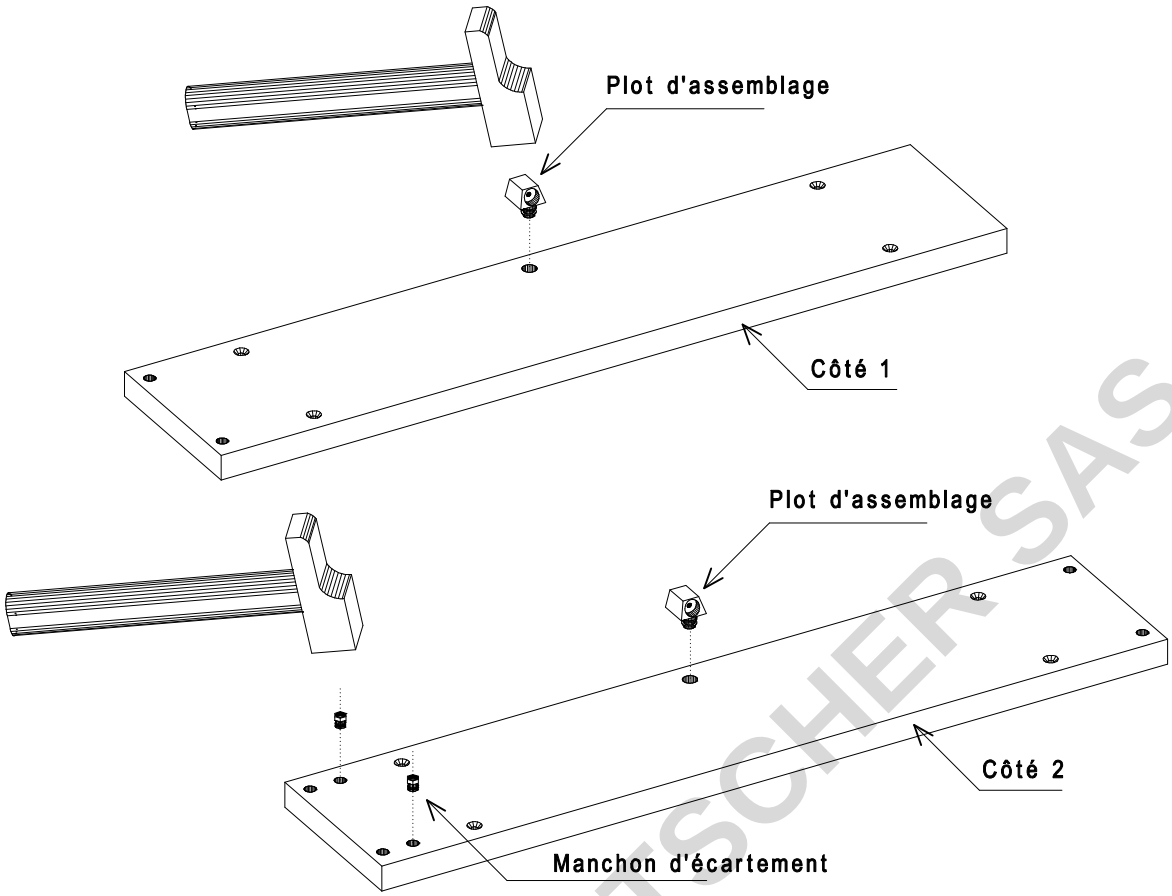

Préparation des traverses de la ceinture


2

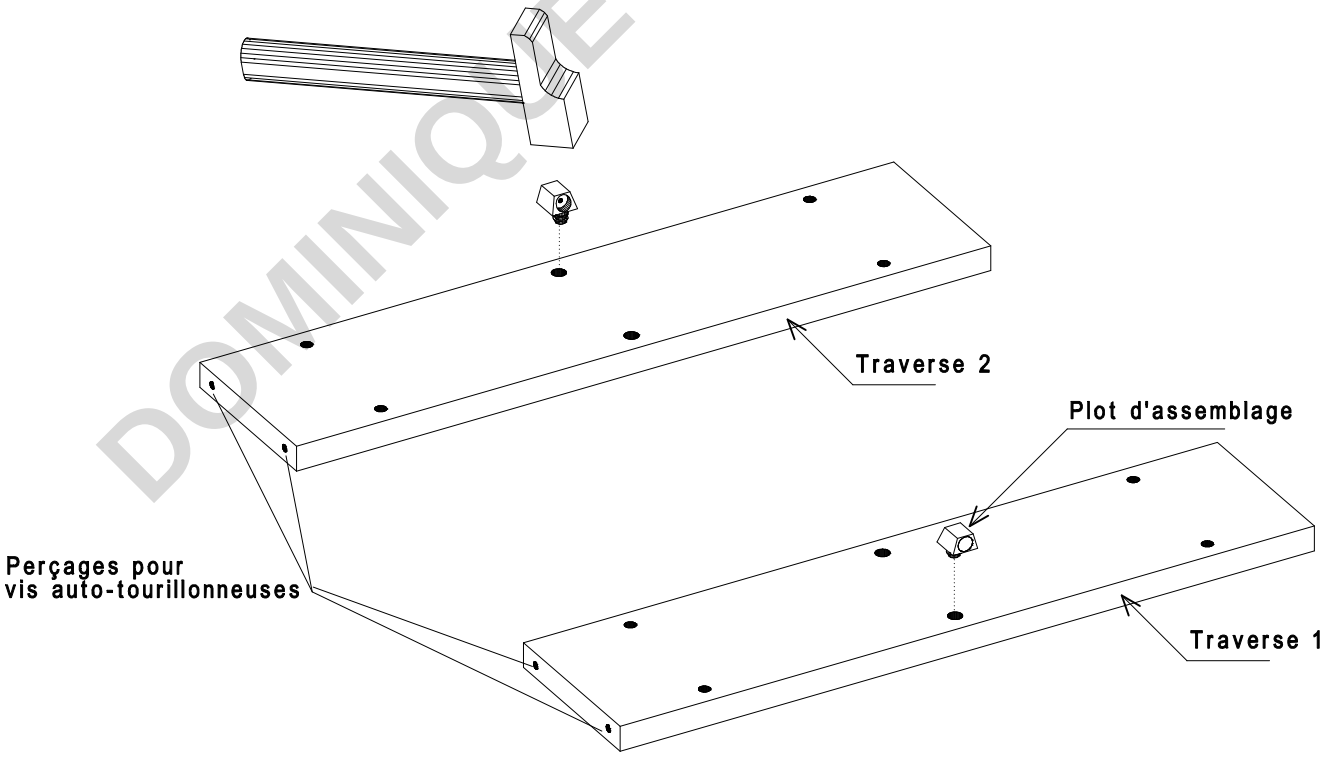

PS : Respecter la position des plots d'assemblage sur les traverses en suivant le schéma ci-dessus
Avec les plots d'assemblage, les traverses "1" et "2" sont opposées

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


Préparation des traverses de la ceinture (suite)

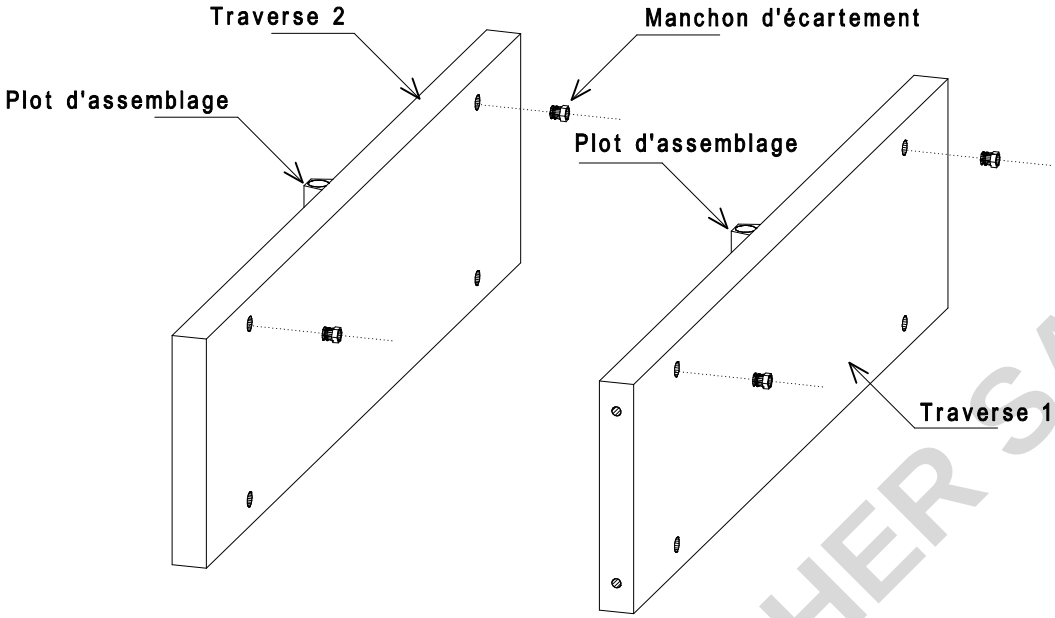

PS : Mise en place des manchons d'écartement au marteau


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Assemblage de la ceinture "Angle"

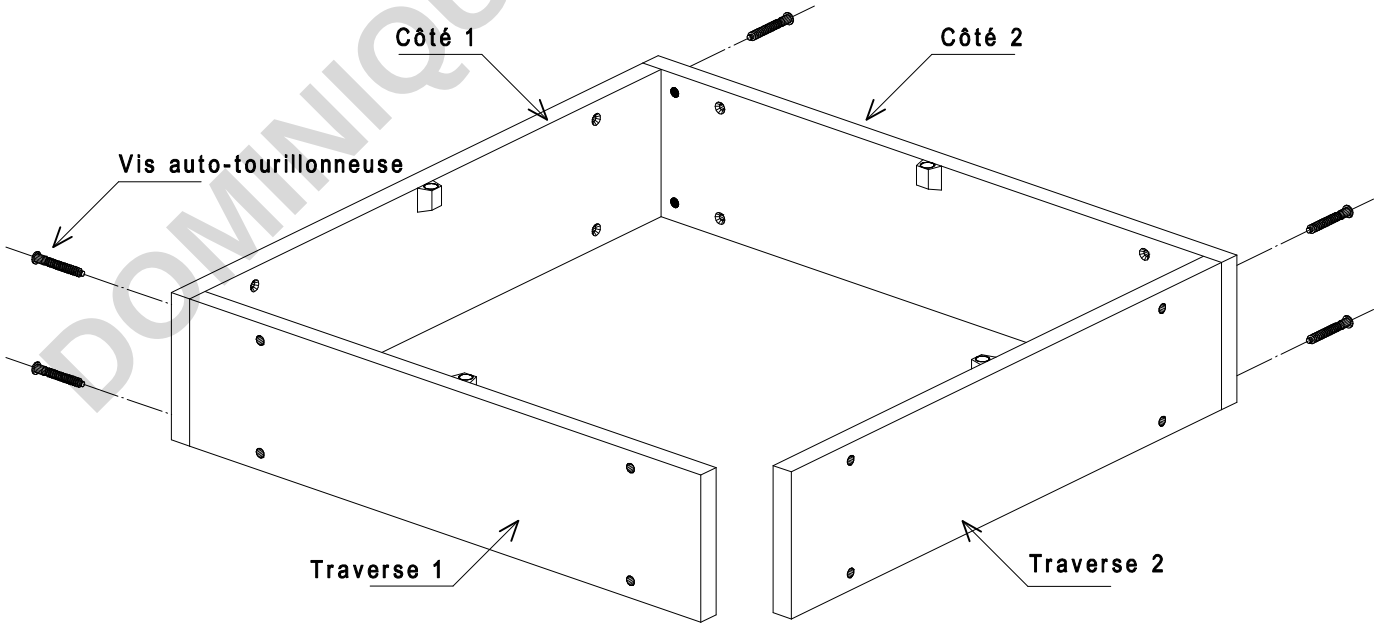


PS : Pour les angles nus, la prochaine étape de montage se situe à l'étape 11
Pour les angles D/T, suivre les étapes de montage suivantes

Pose du dosseret "2" sur côté "2"

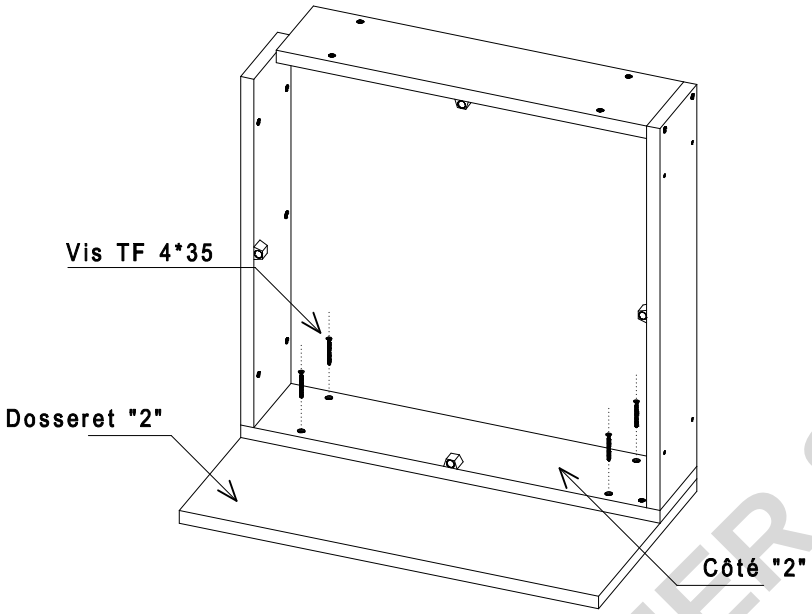


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


Pose du dosseret "1" sur côté "1"

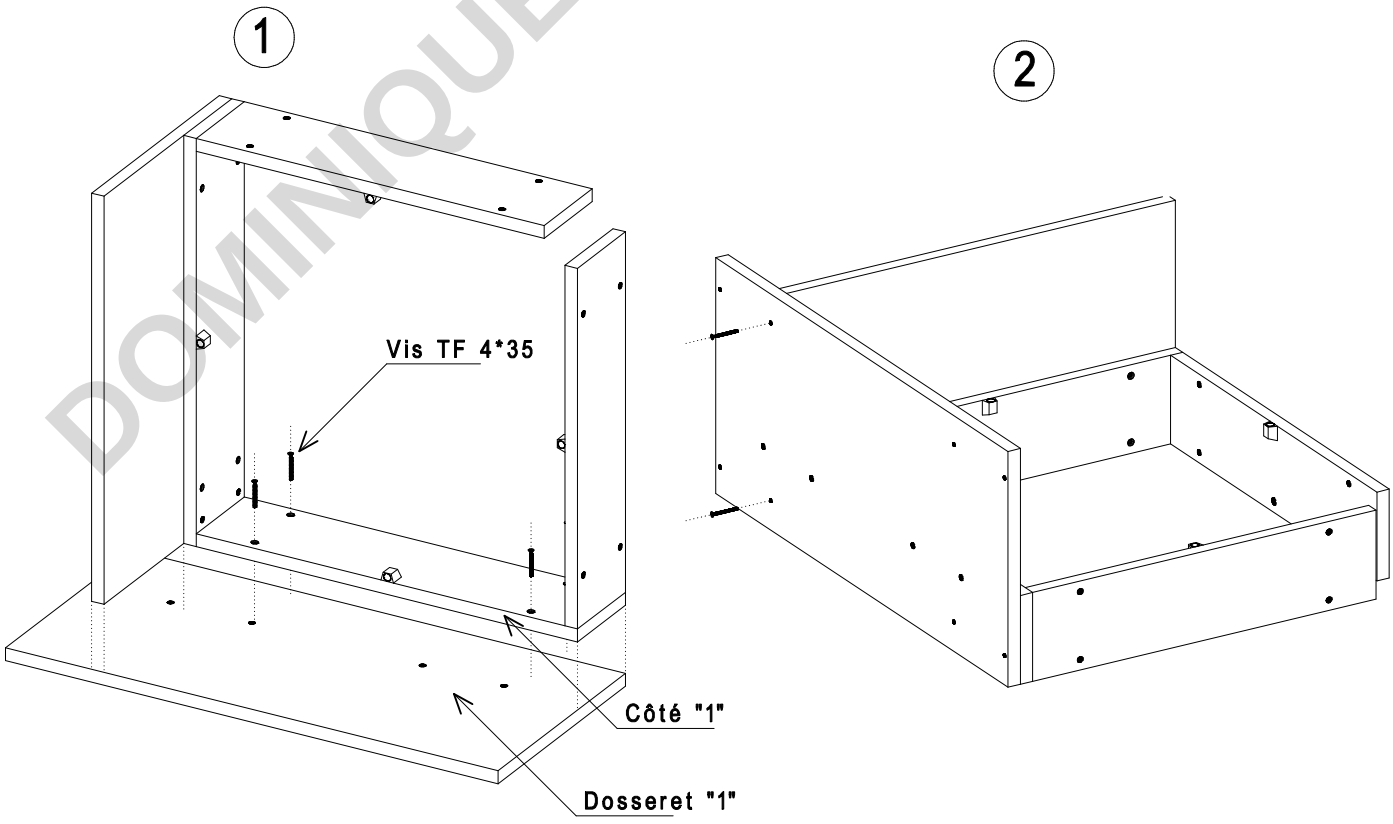

Préparation des supports de tablettes

Préparer les supports tablettes comme indiqués sur le schéma ci-contre

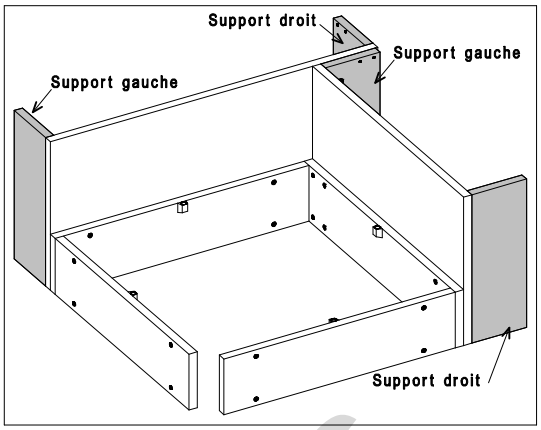


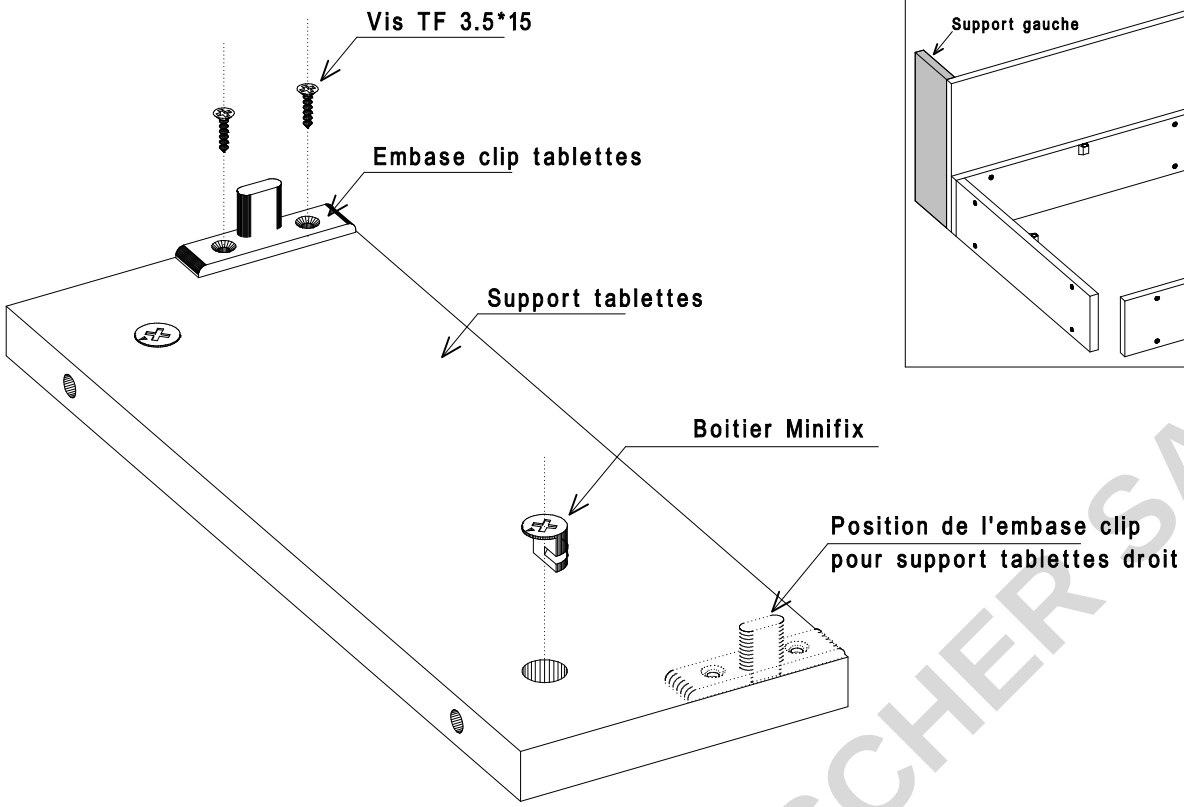


PS : Supports de tablettes gauche et droit avec l'embase clip tablettes
(Schéma ci-dessus : support tablettes gauche)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Préparation des tablettes "1" et "2"

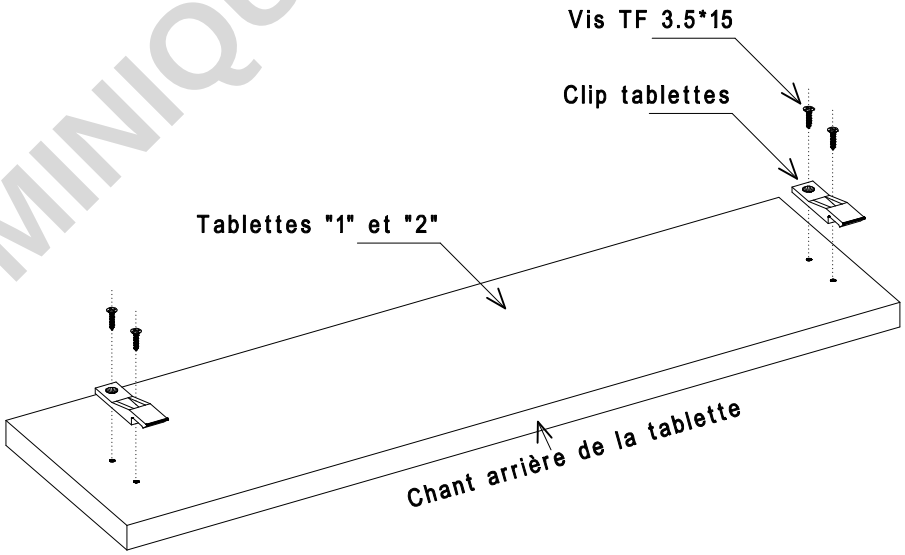


Mise en place des supports tablettes sur les dosserets

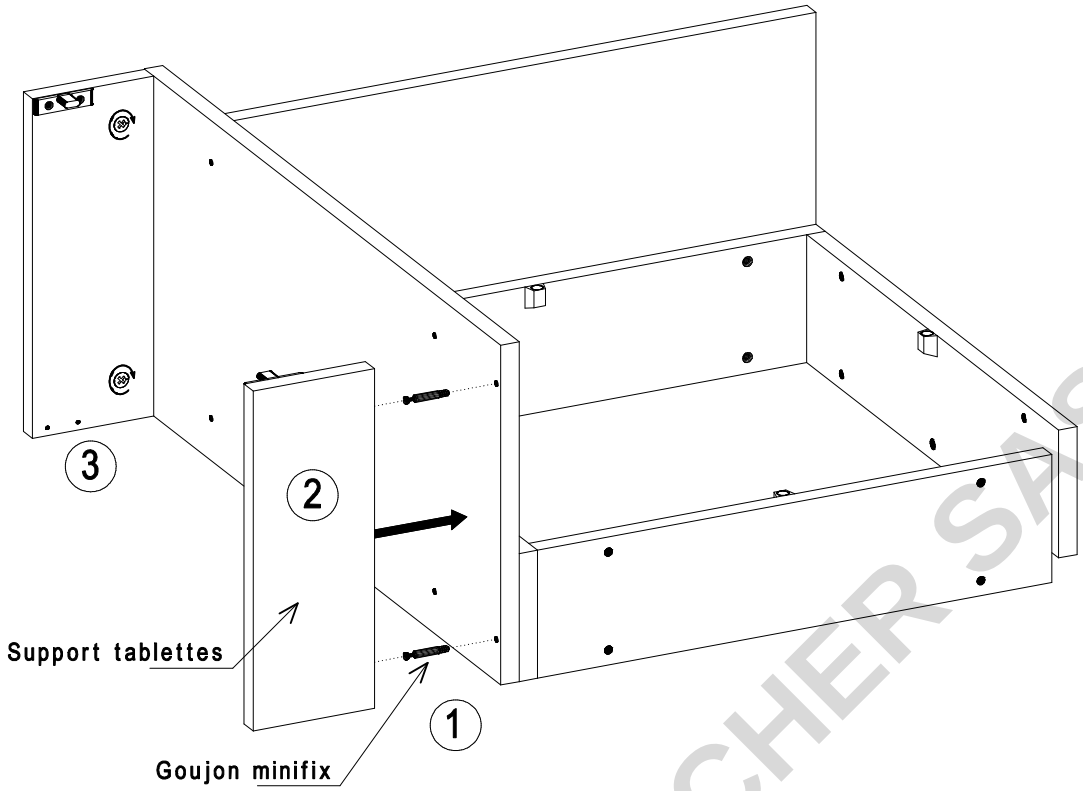


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Mise en place des tablettes sur les dosserets

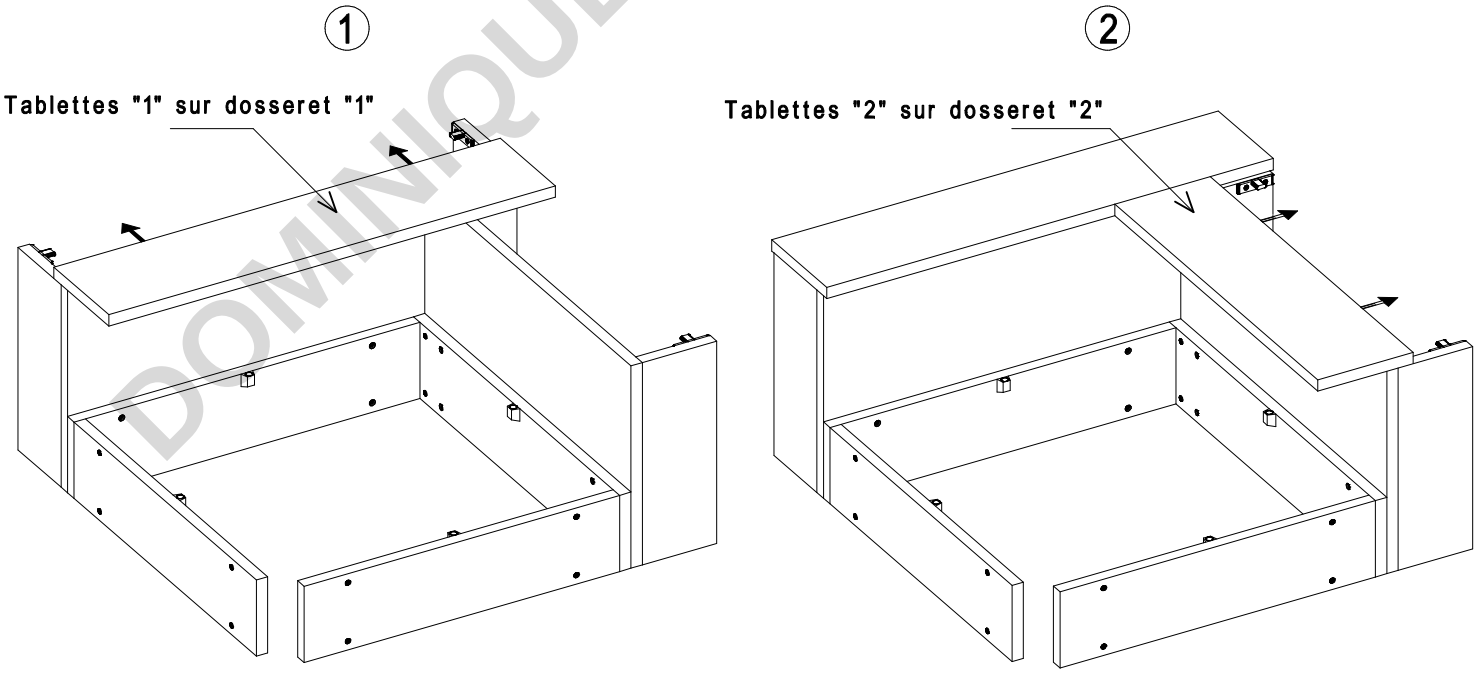


PS : Les prochaines étapes de montage sont expliquées avec les angles nus

Pose du piétement d'angle sur l'ossature

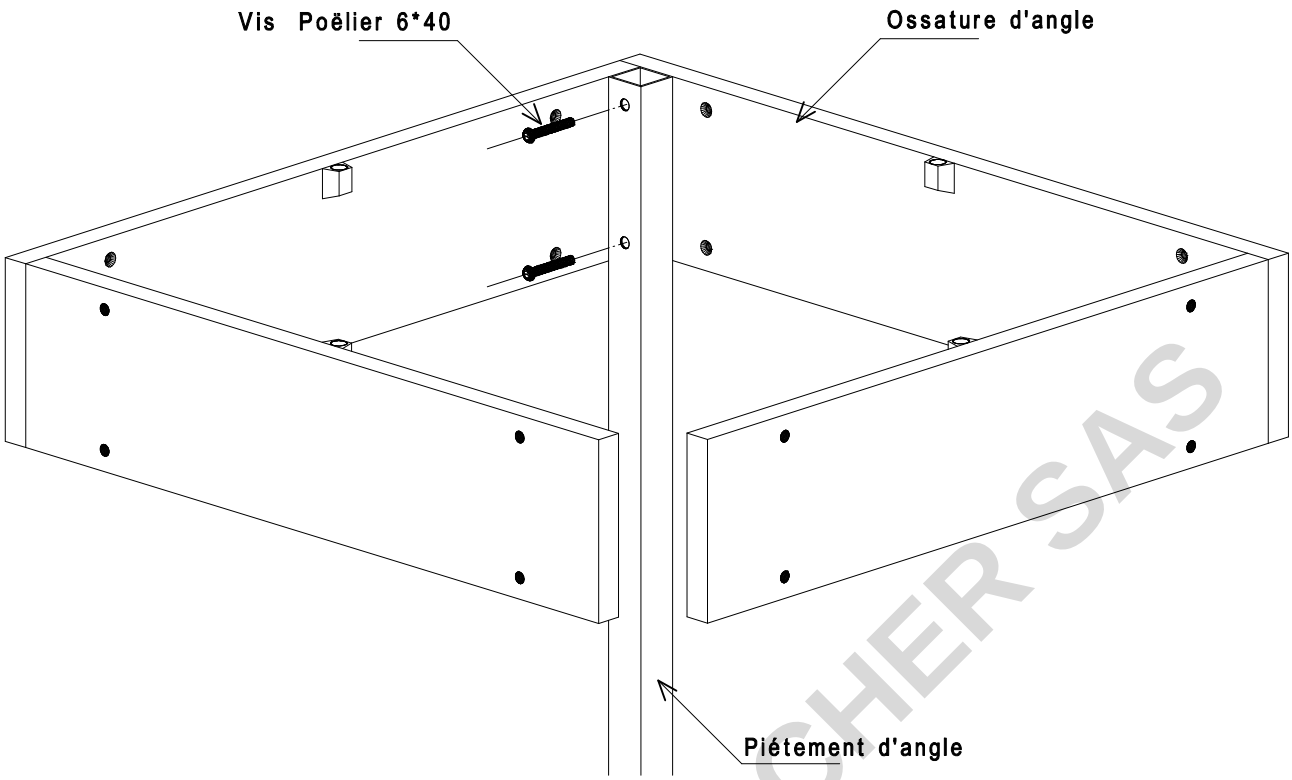


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fixation de l'ossature "Angle" sur les paillasses

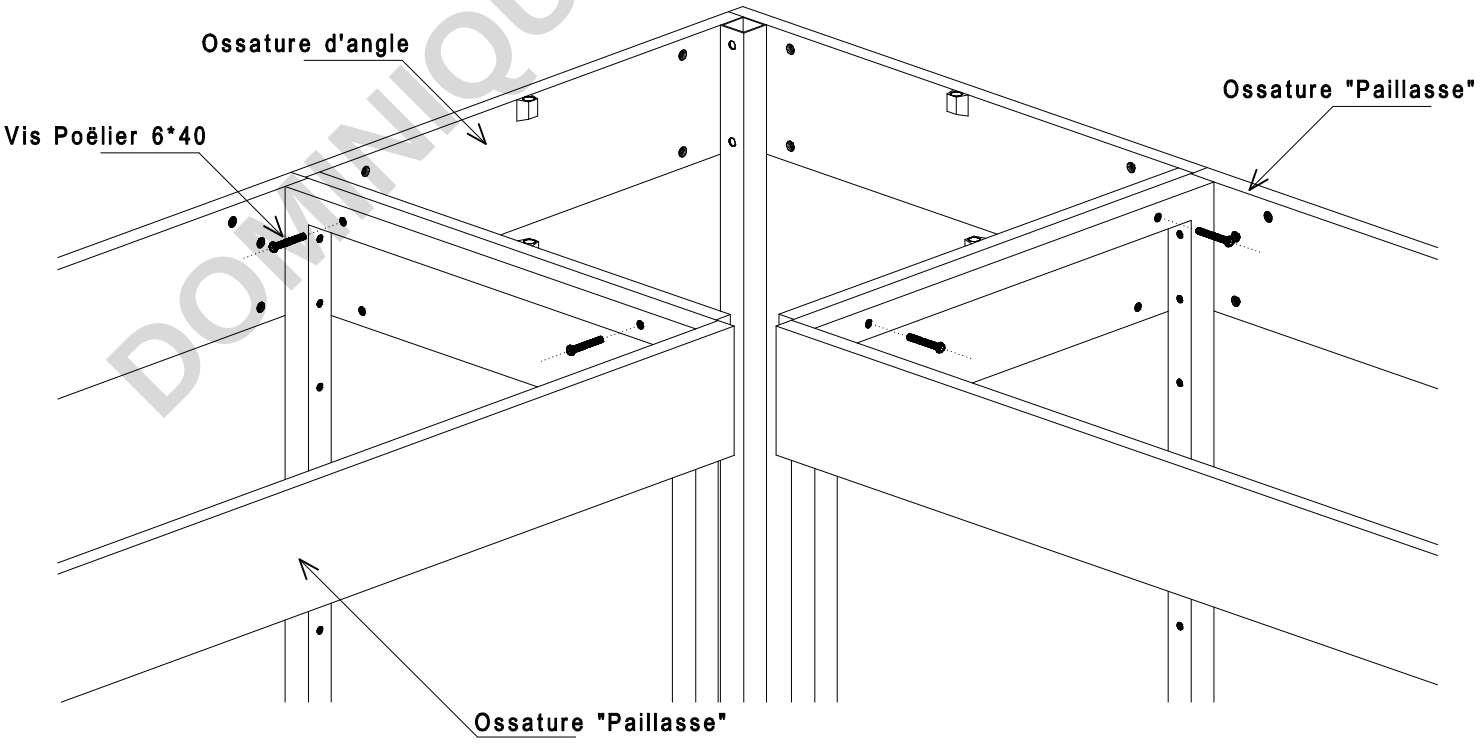

Fixation du profil d'angle sur le bandeau des paillasses


13

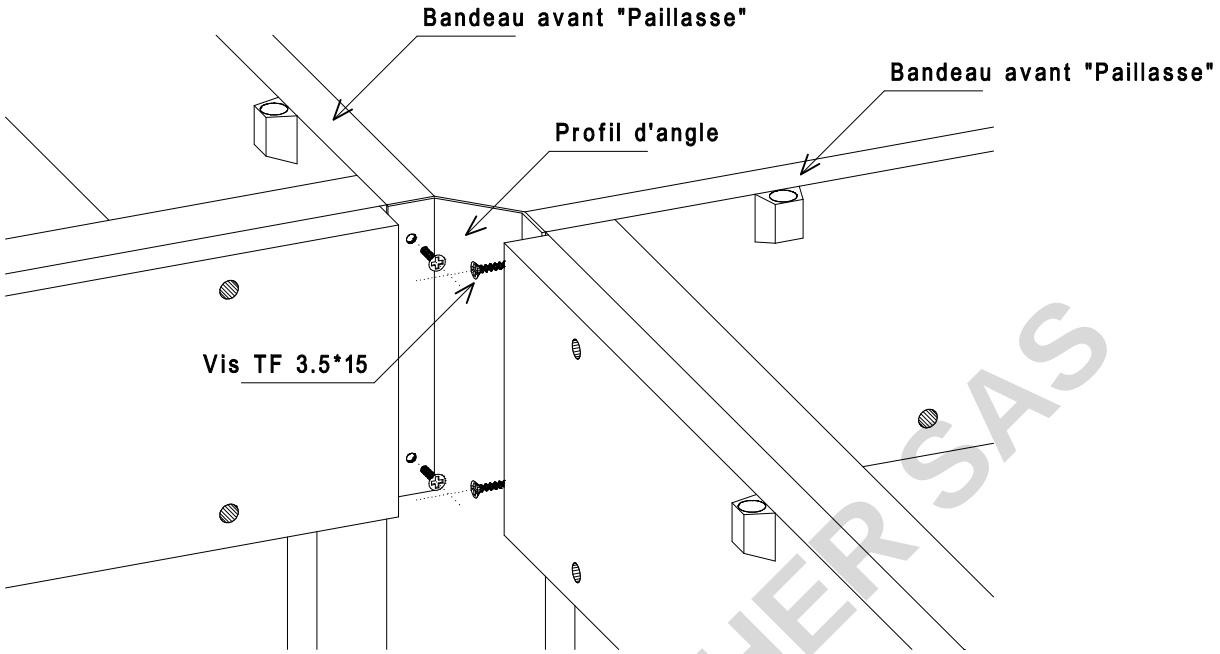

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


Mise en place du plan de travail sur l'ossature

14

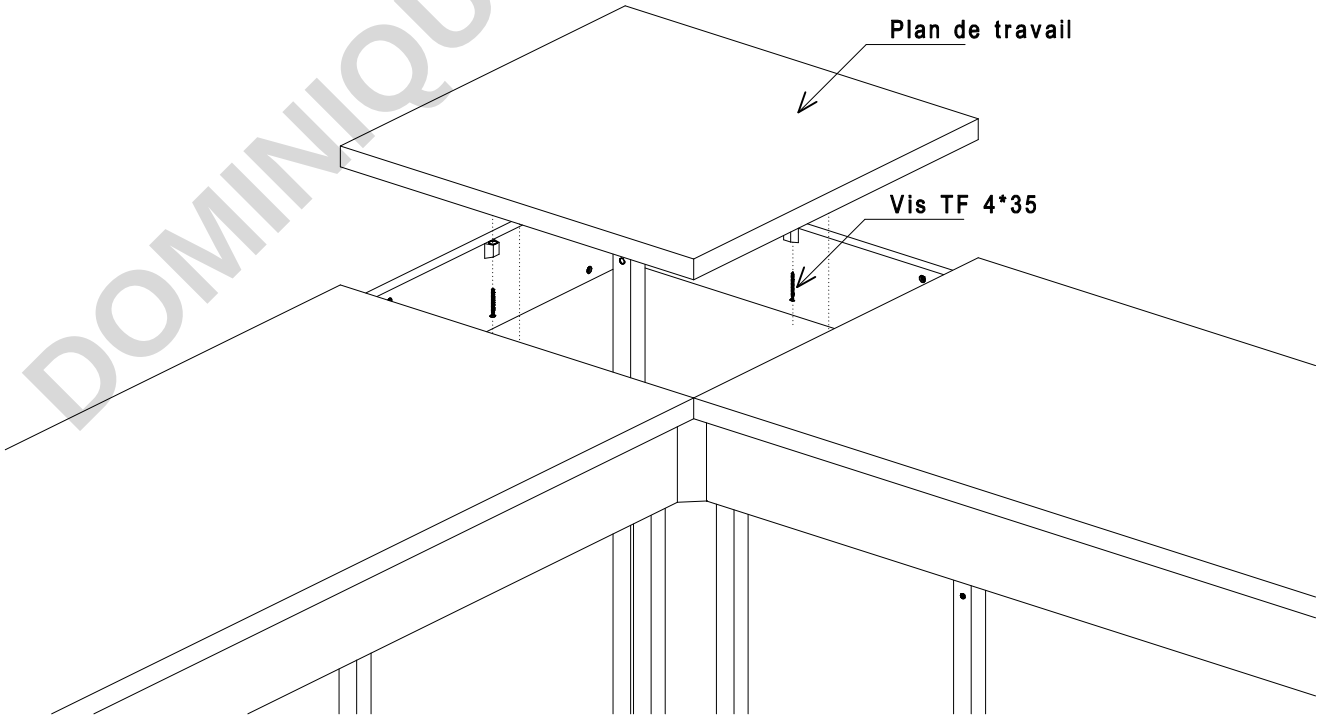


PS : Pour les angles en dalle de grès uni, suivre la procédure de mise en place en annexe

Paillasses nue

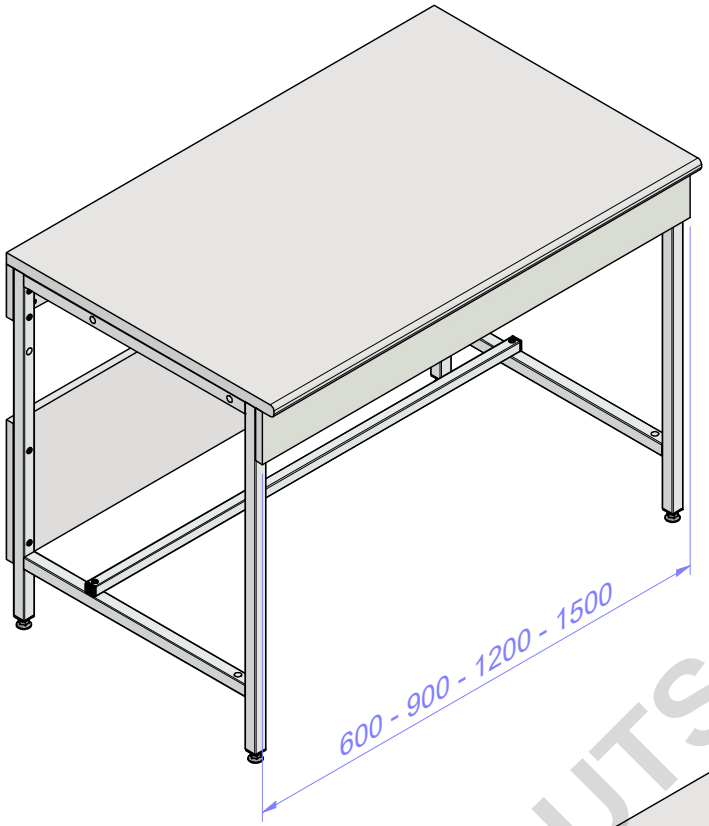

3

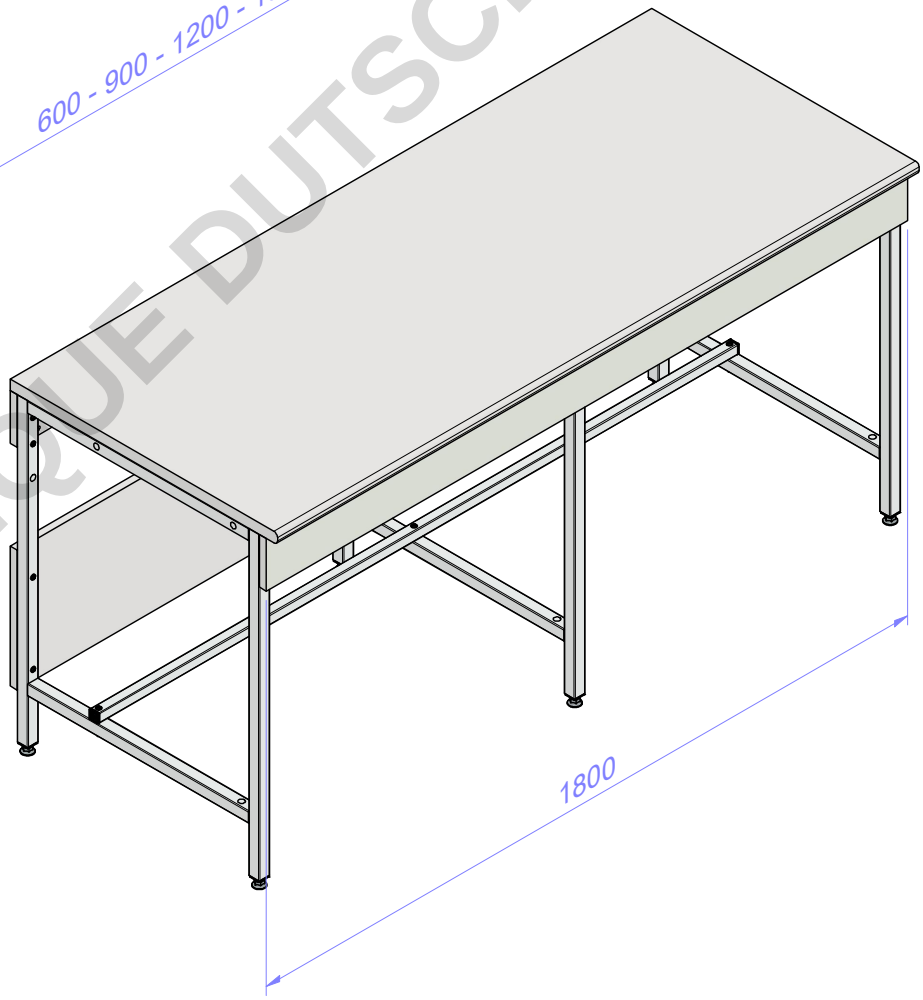


8

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


KITlab

1830010

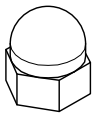


x7

1840400

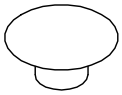


x10

1840203

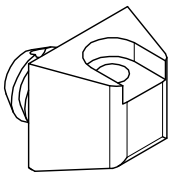

x8

1820080

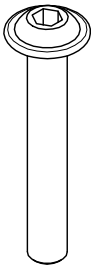


x20

1820082




x3

1820080

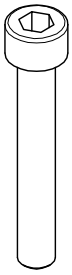


x2

1860014

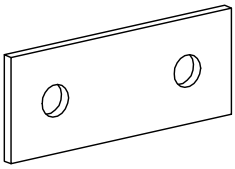


x1

1820101

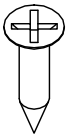

x8


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

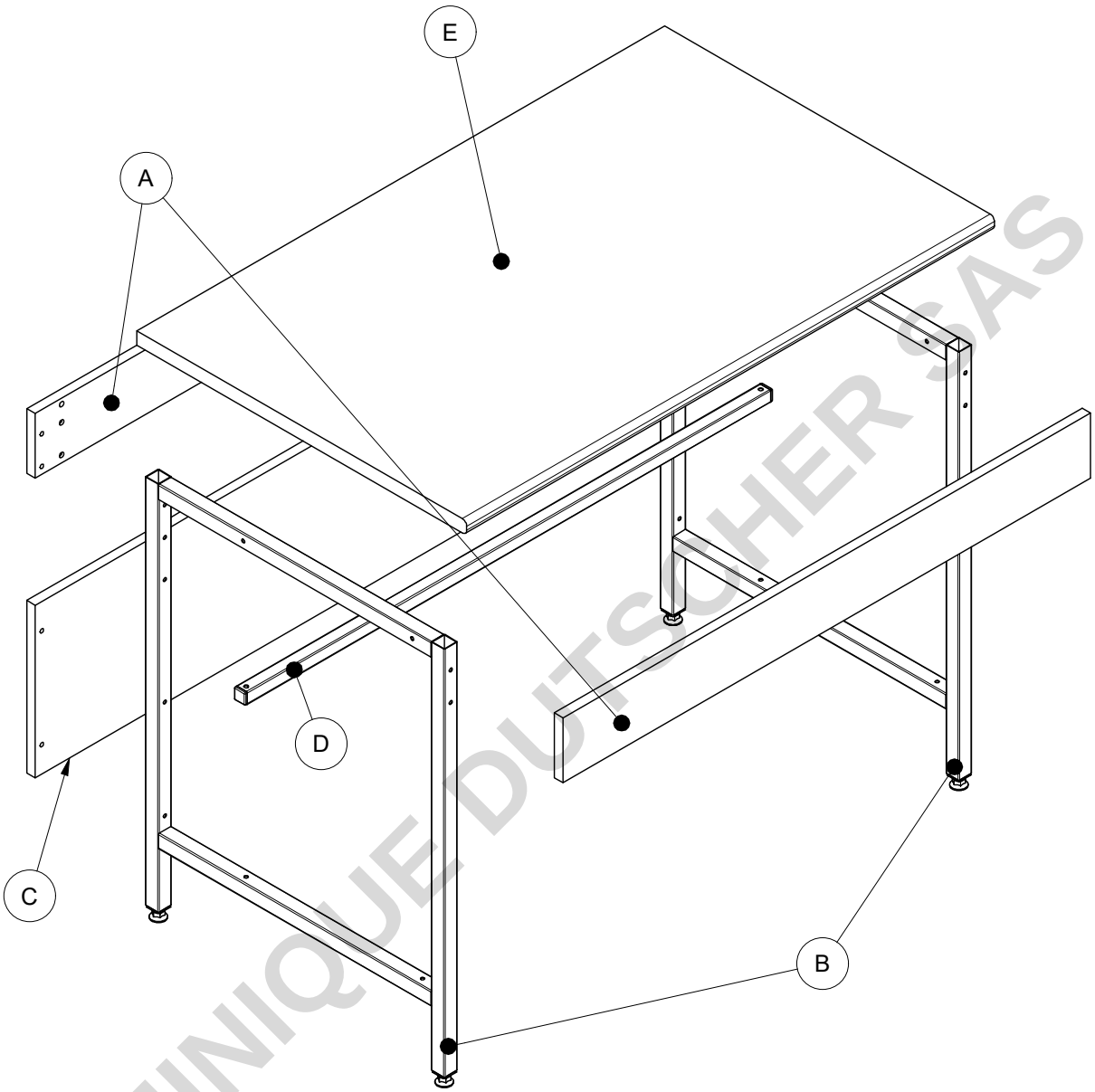


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


1


1840203

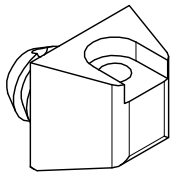

x6

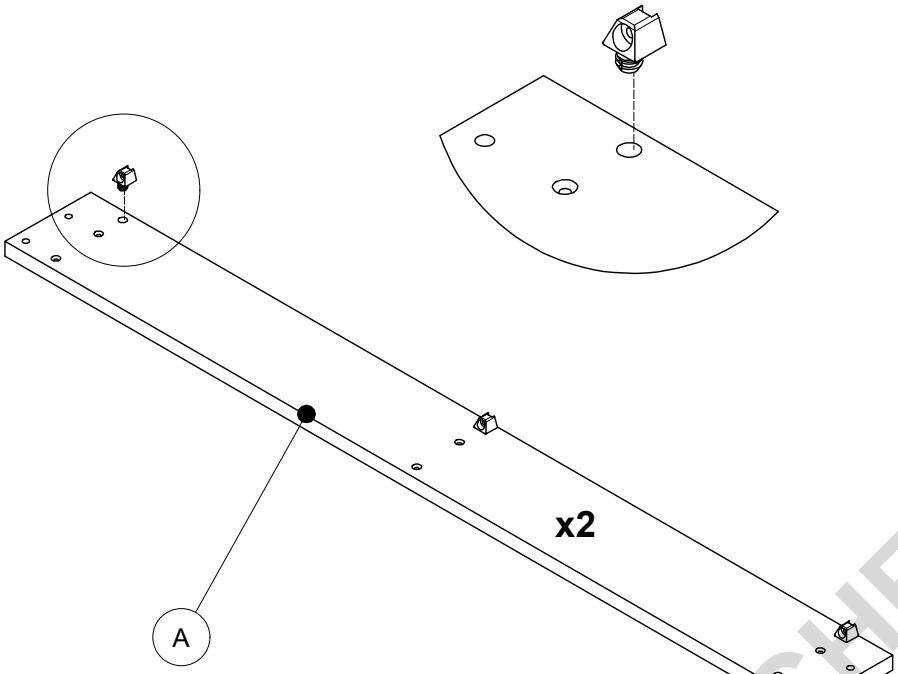


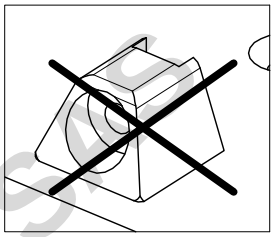

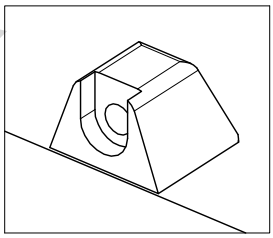



2

1820080

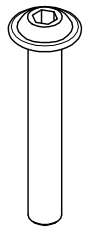


x4

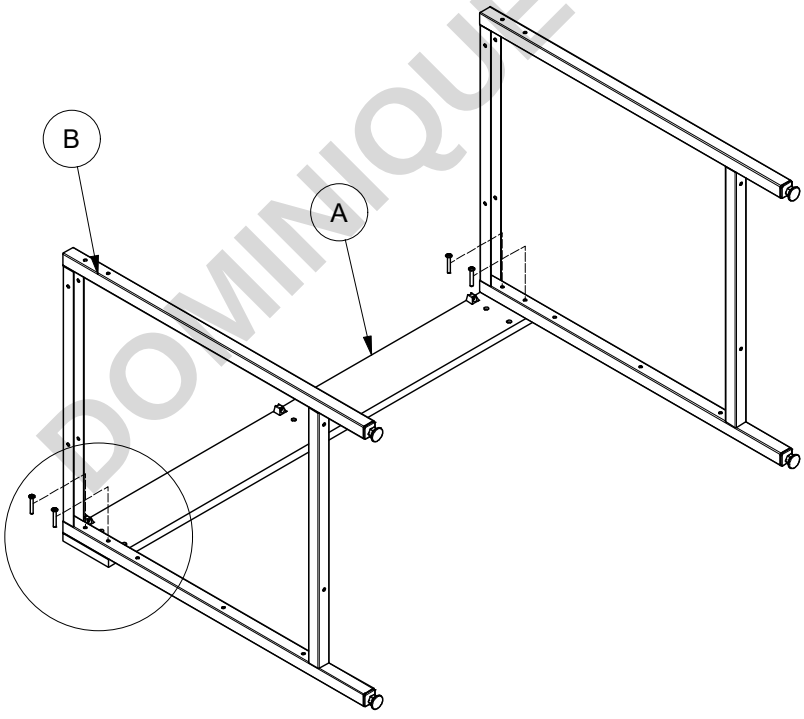

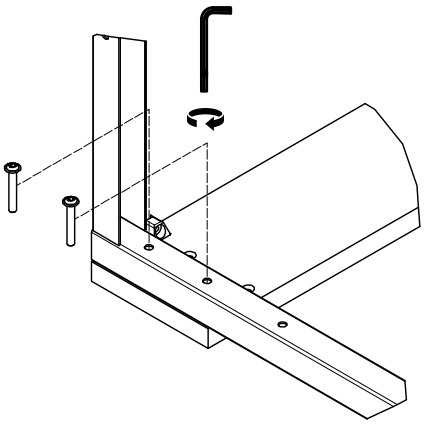


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


3

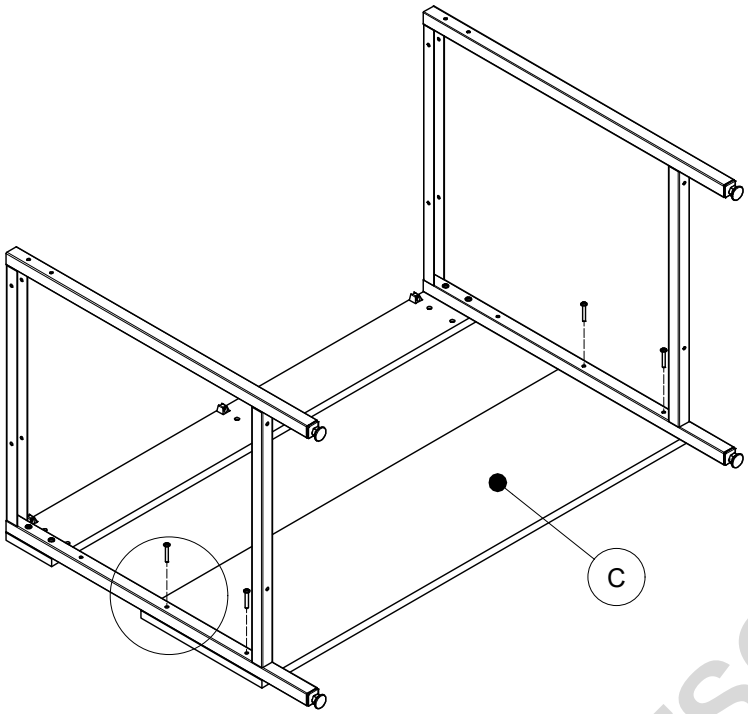


1820080

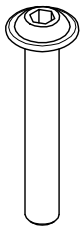


x4

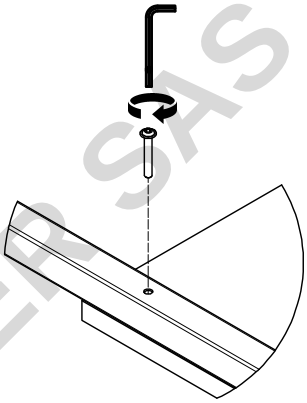

4

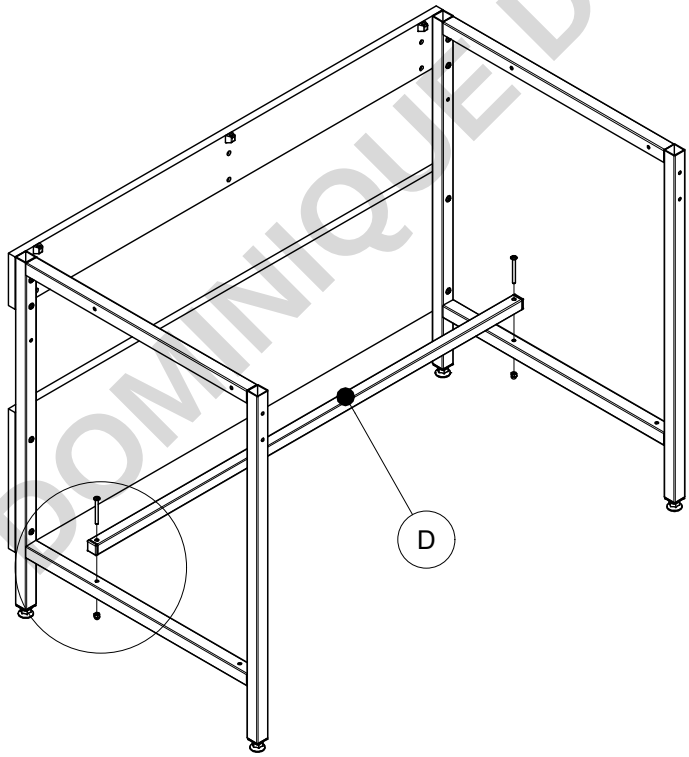


1830010

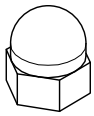


x2

1820082

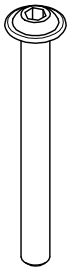


x2

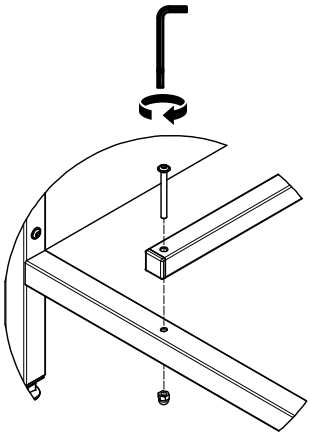


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


5

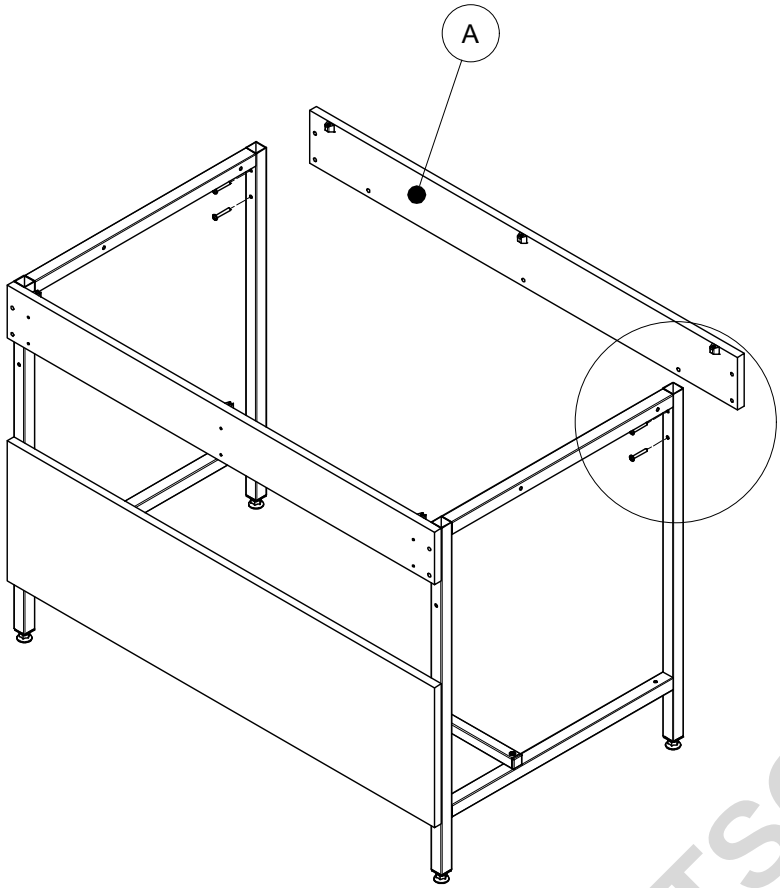


1820080

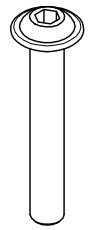


x4

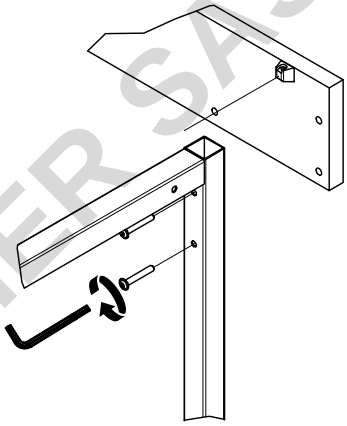


6

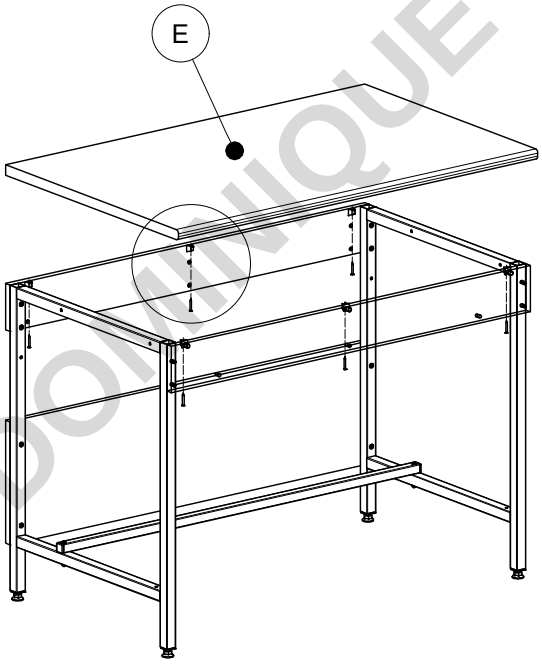


1820101

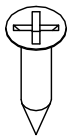

x6

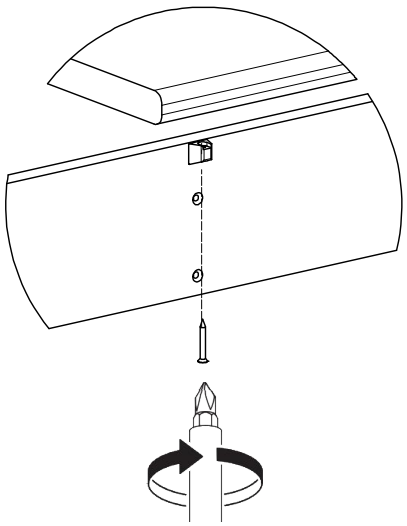


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

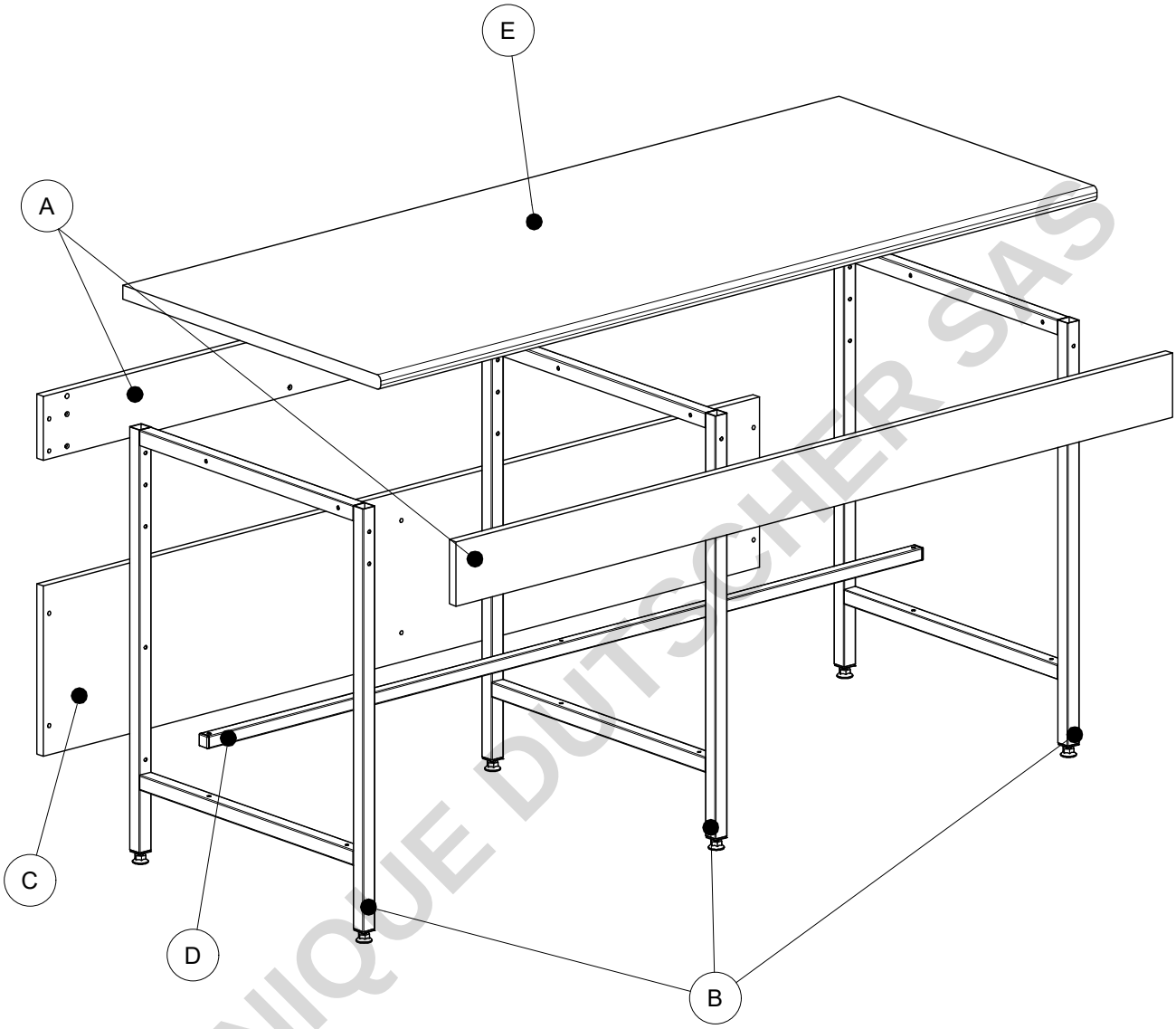


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


1


1840203

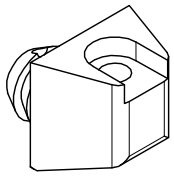

x8

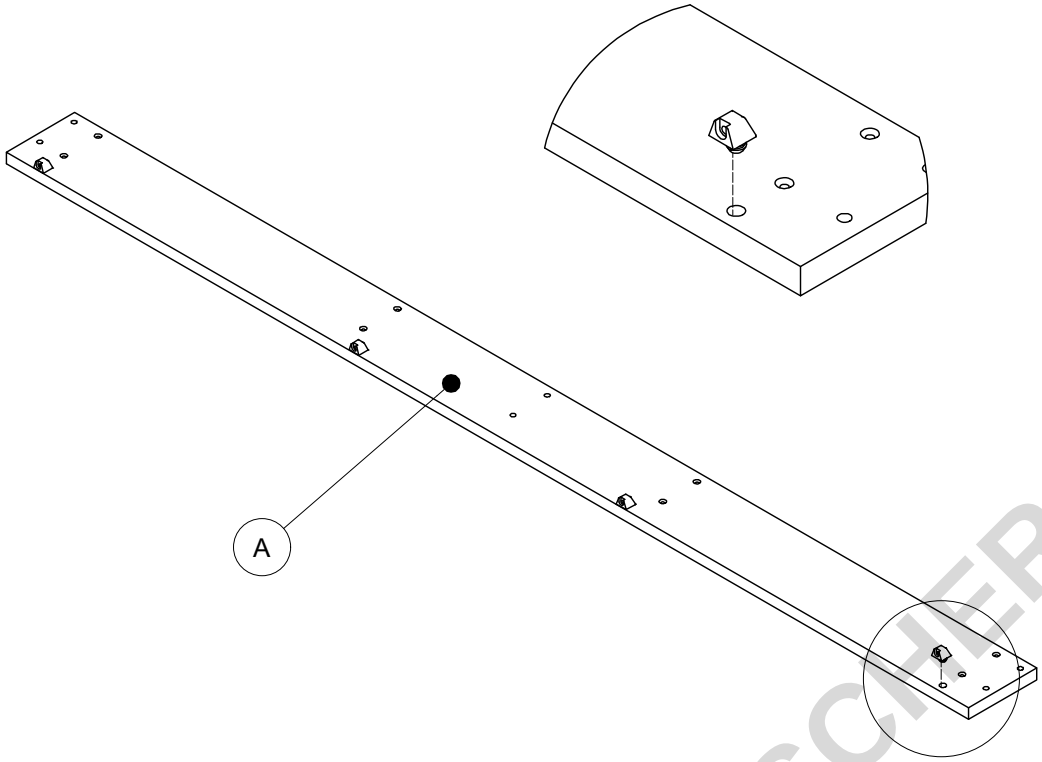

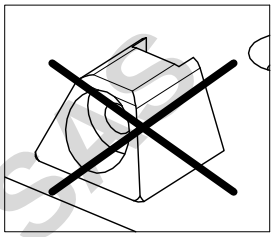


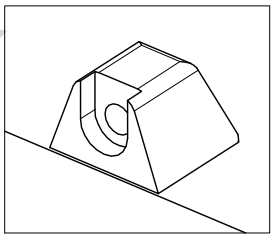


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


2

1820080

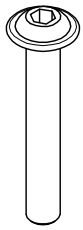


x6

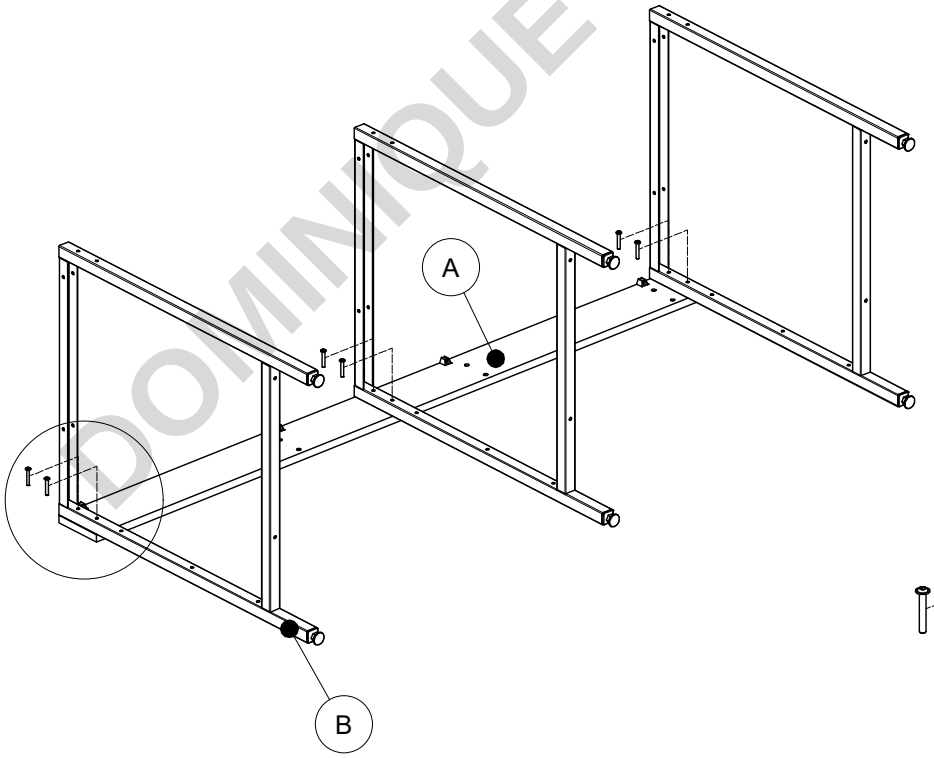


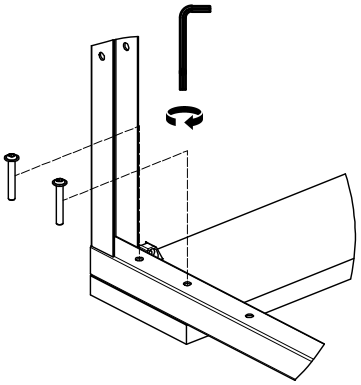


3

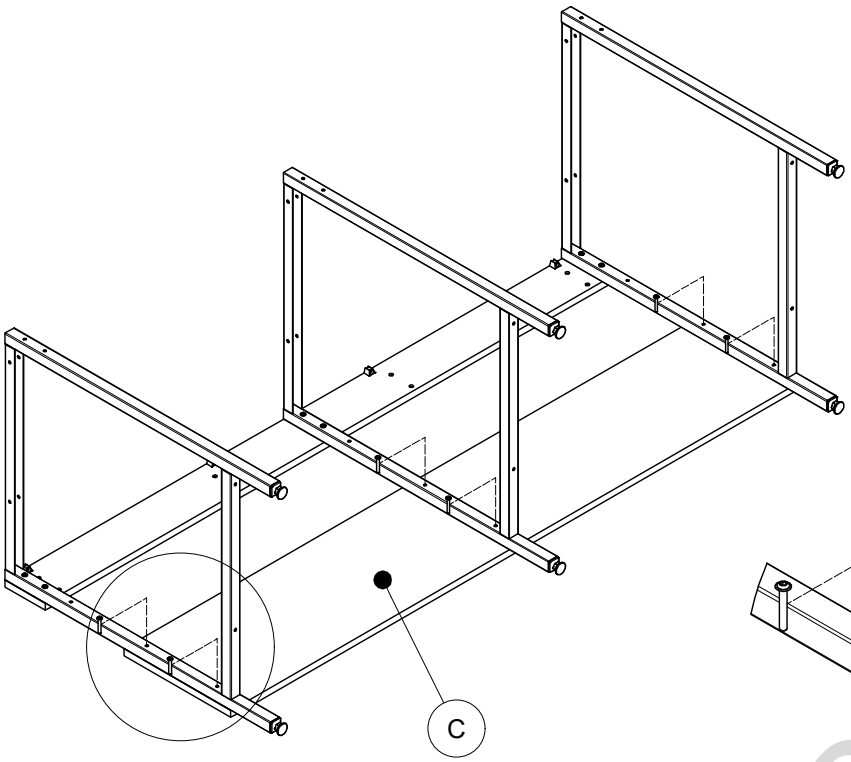


1820080

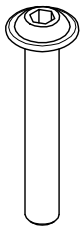


x6

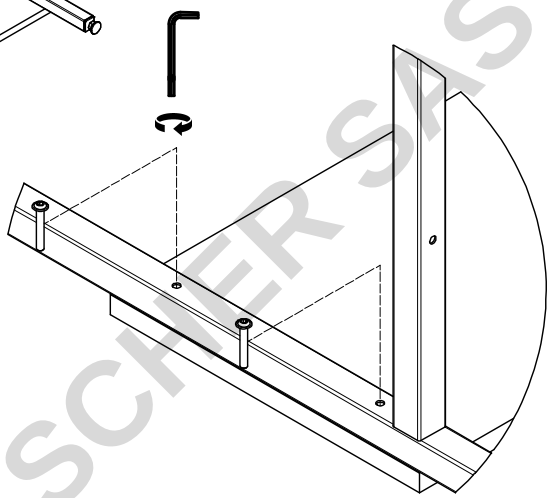

4

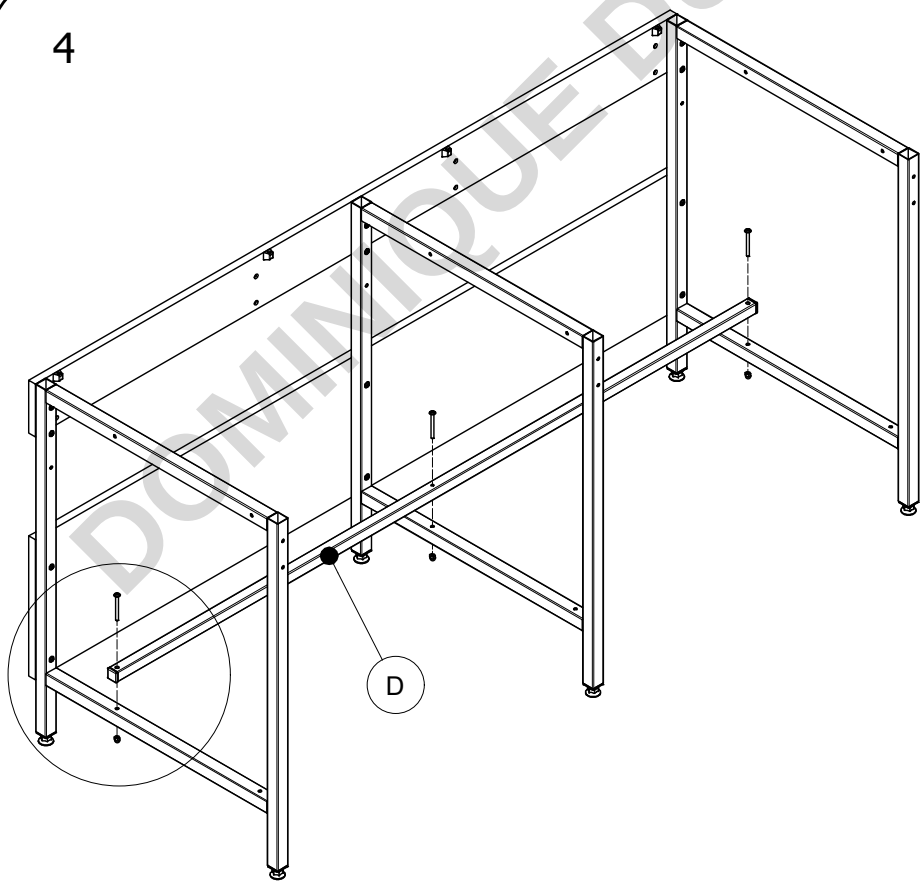


1830010

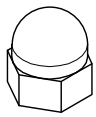


x6

1820082

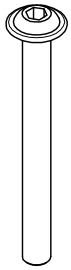


x6

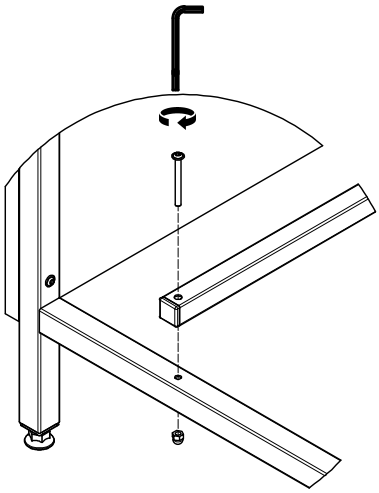


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


5

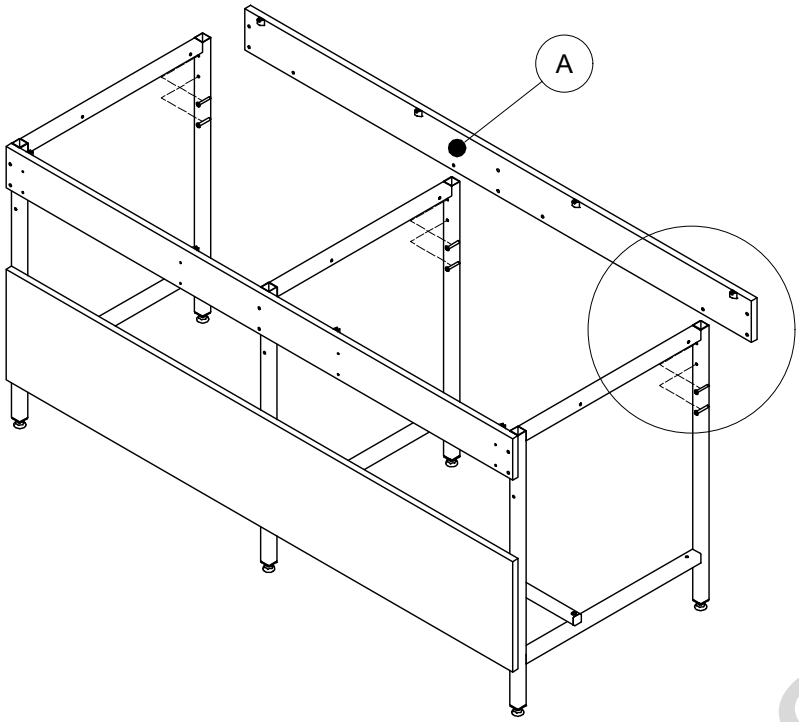


1820080

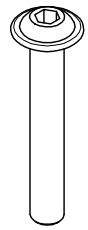


x6

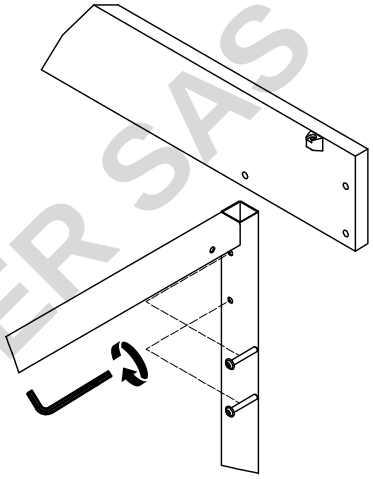


6

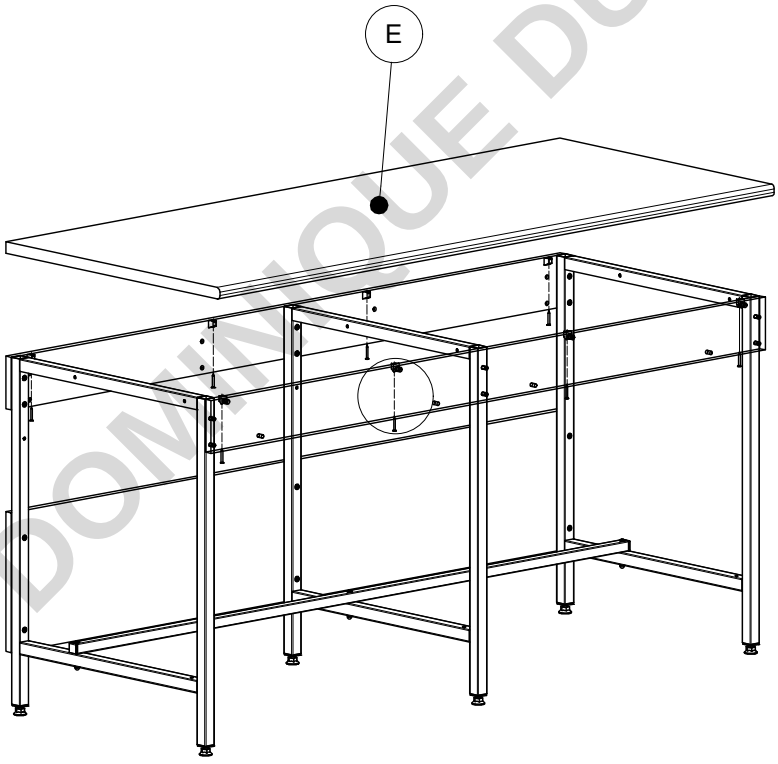


1820101

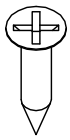


x8

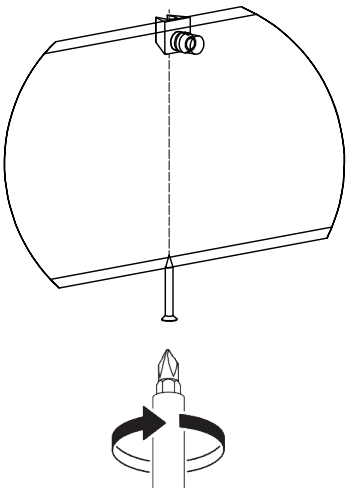


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

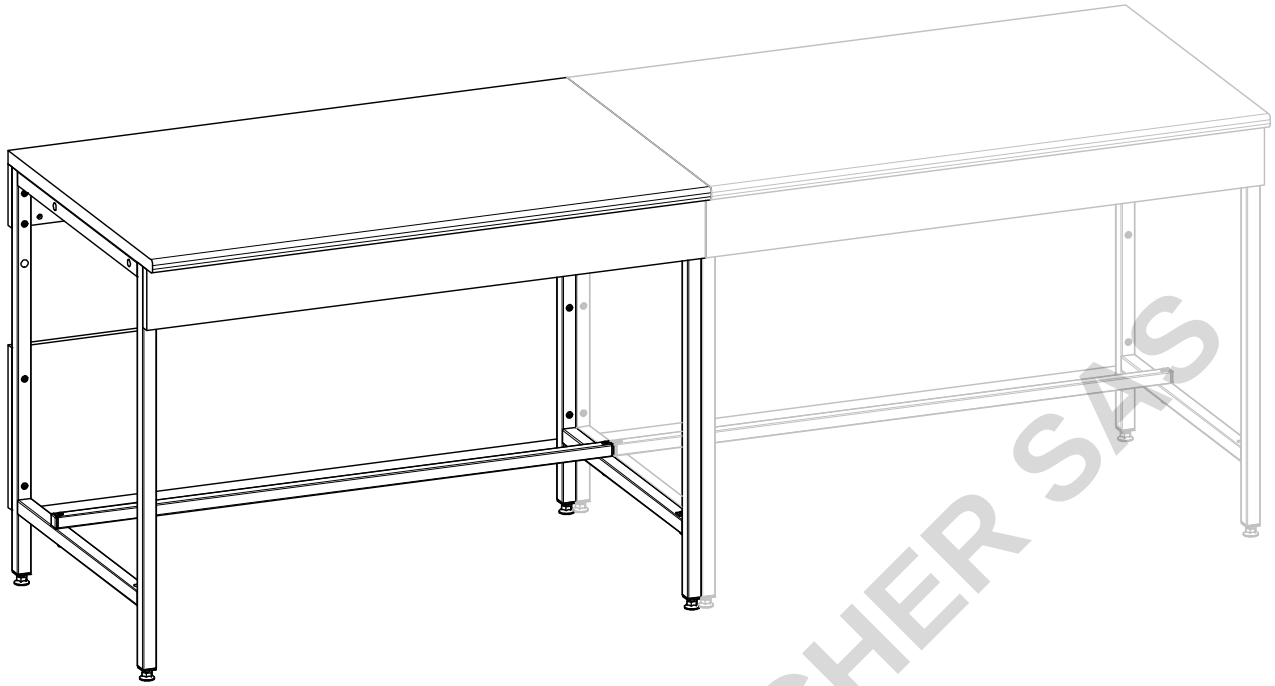

1

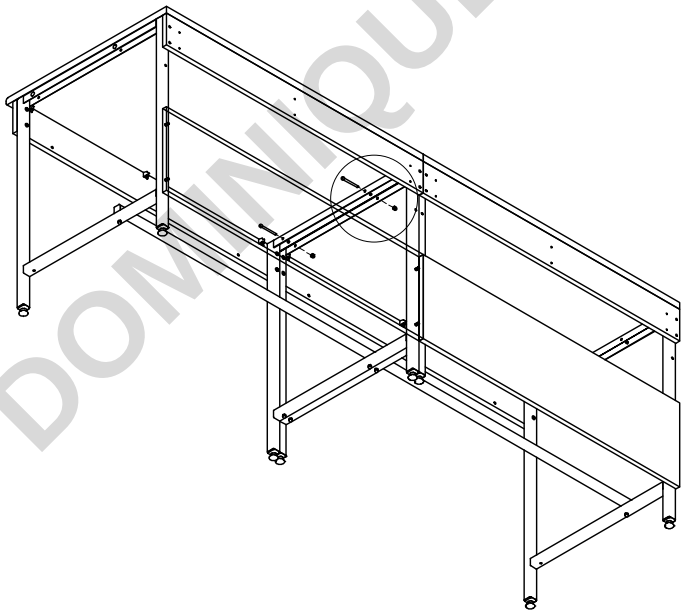

1830010

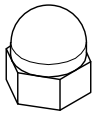


x2

1820080




x2

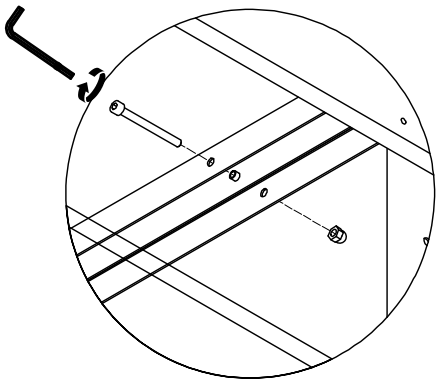

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


2

1830010

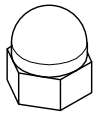



x2

1820080

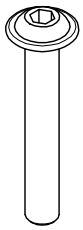


x2

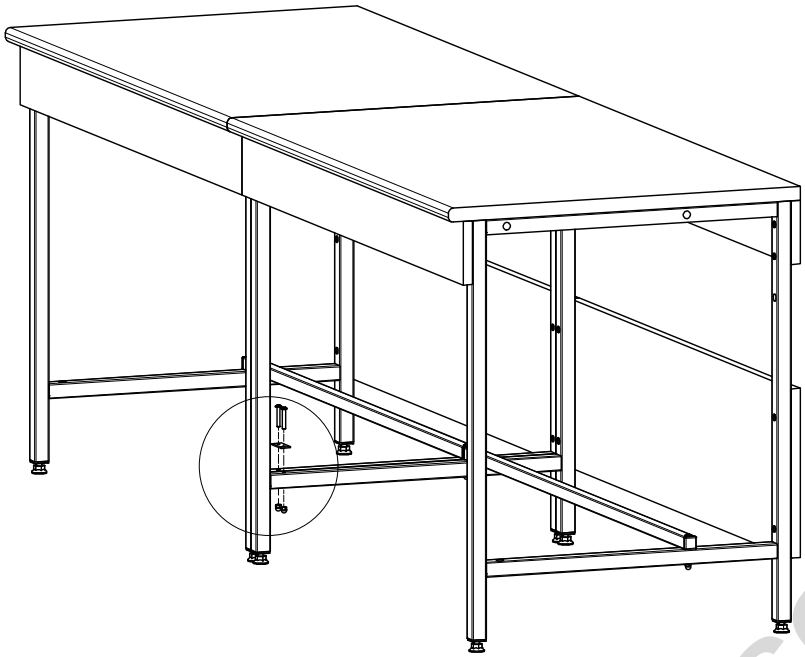


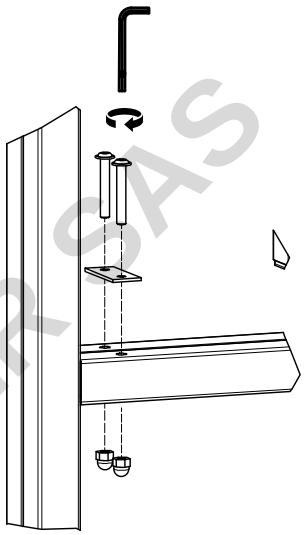


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

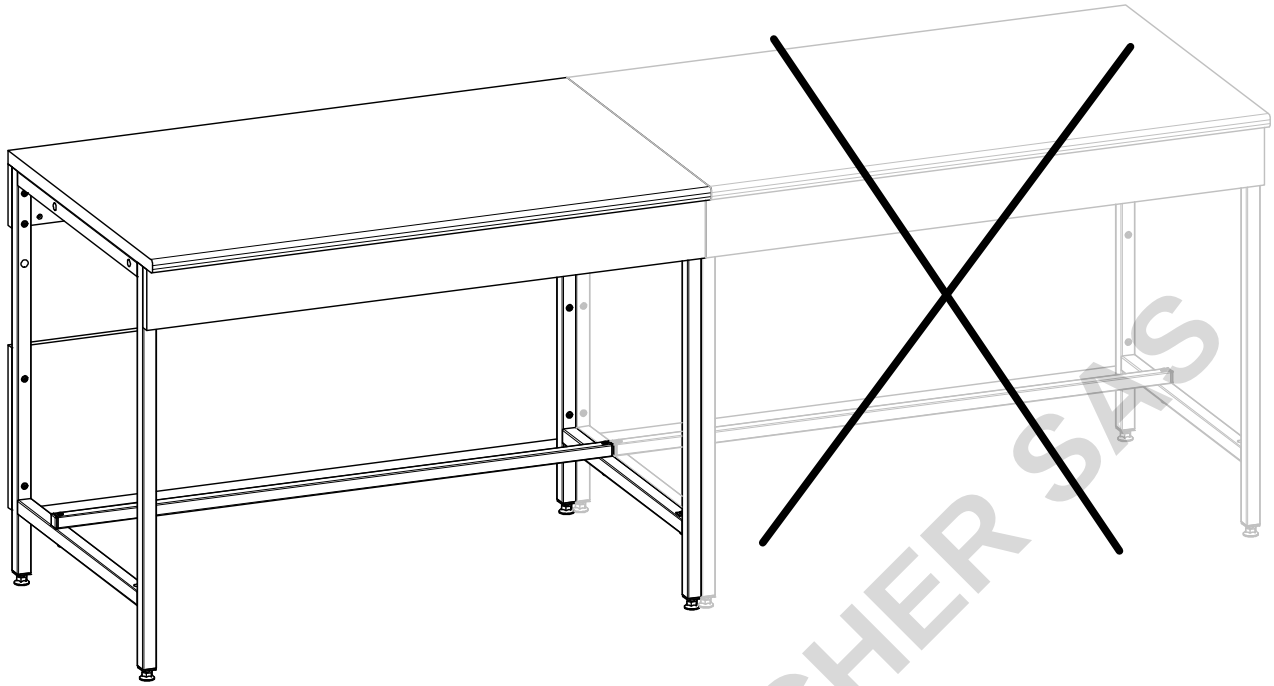


1840400

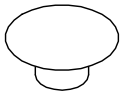

x10

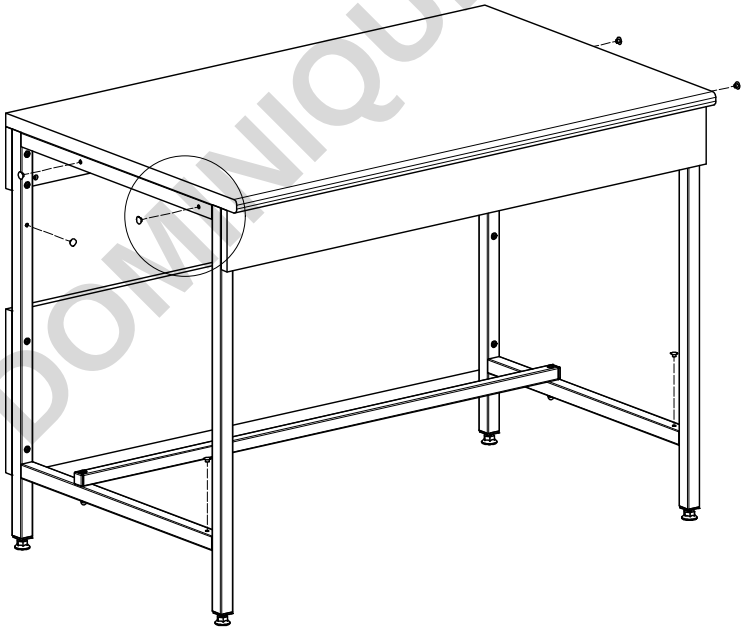

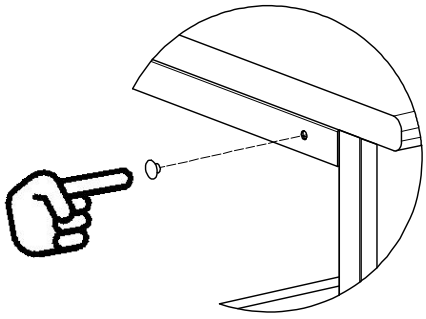

DOMINIQUE DUTSCHER SAS