

PROTOCOLE D'UTILISATION PRÊT À L'EMPLOI

SURFACES

exeol surf optimal

Détergent désinfectant sans alcool pour surfaces et dispositifs médicaux




Solution prête à l'emploi :


- **Application dispositif médical : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.**
- **Application produit biocide : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.**

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.
⚠ **exeol surf optimal** s'utilise non dilué.


Flacon 750 mL spray

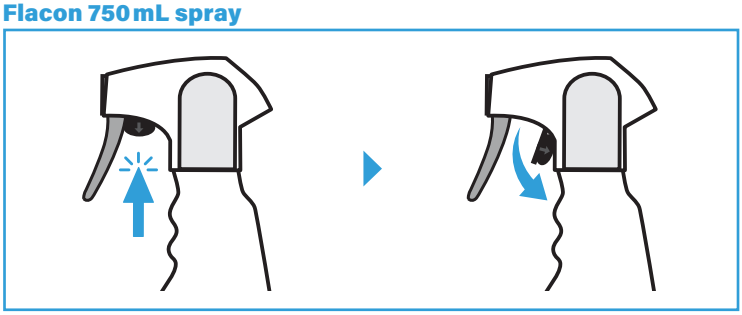


1 Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse. Déverrouiller la sécurité du spray.

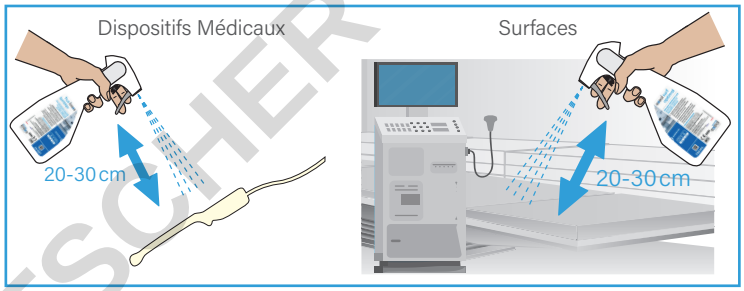


2 Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter (± 6 mL/m², à 20-30 cm de la surface).

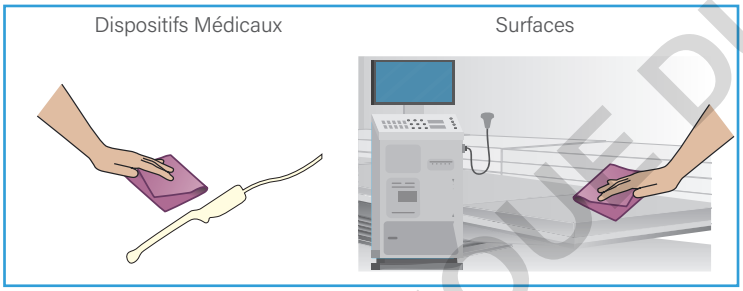


3 Nettoyer la surface par essuyage.

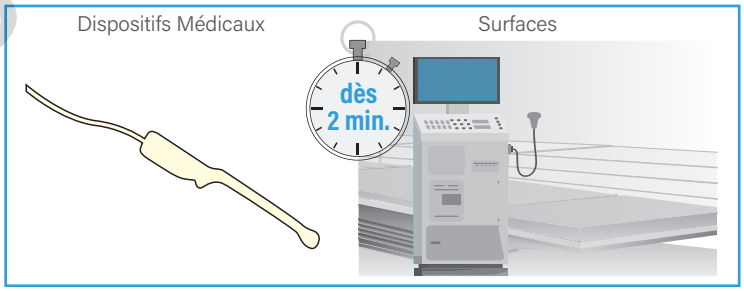

4 Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.

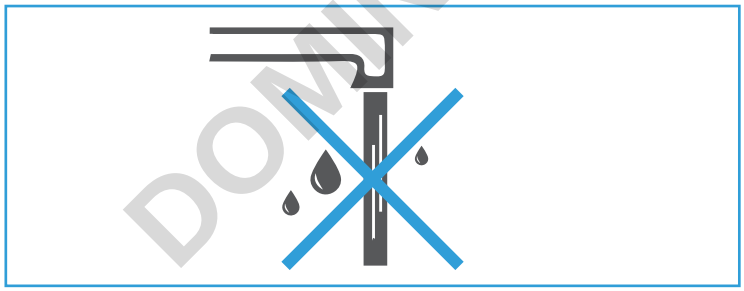

5 Ne pas rincer (excepté les surfaces en contact direct avec les muqueuses, les denrées alimentaires ou si une étape de désinfection consécutive est requise).

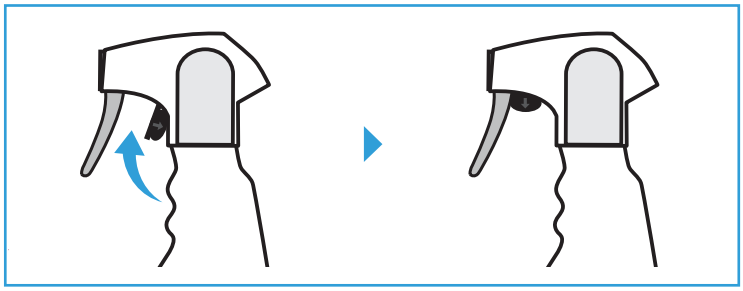

6 Verrouiller la sécurité après utilisation.

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dutscher

DM classe IIa
Marquage CE obtenu en 2023
CE 0459
MD

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ exeol
UNE DIVISION SODEL

PRT-EXEOL SURF OPTIMAL-FR-02_2023-12