

PROTOCOLE D'UTILISATION PRÊT À L'EMPLOI

INSTRUMENTS ENDOSCOPIE

exeol PA

Désinfectant de haut niveau

Pour la désinfection par immersion des dispositifs médicaux.

À base d'acide peracétique.


TREMPAGE MANUEL

BANDELETTES TEST




Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette. Conserver le produit hermétiquement fermé, dans son emballage d'origine avec son étiquette d'origine. Lire l'étiquette et la Fiche de données de sécurité avant usage. Il est recommandé de contrôler la validité du bain avec les bandelettes test **exeol strips PA** avant utilisation. **exeol PA** peut être utilisé dans les appareils de retraitement semi-automatiques des endoscopes qui sont compatibles avec l'acide peracétique. **exeol PA** est prêt à l'emploi et ne nécessite pas d'activation. Le bain de solution désinfectante est efficace durant 14 jours / 100 cycles. Selon la recommandation française, le bain doit être renouvelé tous les 7 jours / 50 cycles. Il peut être renouvelé plus précocement si le contrôle à l'aide de bandelette révèle un résultat non-conforme ou si présence de souillures. Il est recommandé de mettre en place une ventilation au dessus du bain de trempage et de le couvrir aussi souvent que possible. Le bain doit être renouvelé en cas de contamination visible. Nettoyer, rincer et égoutter les dispositifs médicaux à désinfecter avant immersion dans **exeol PA**.


Bidon 5L

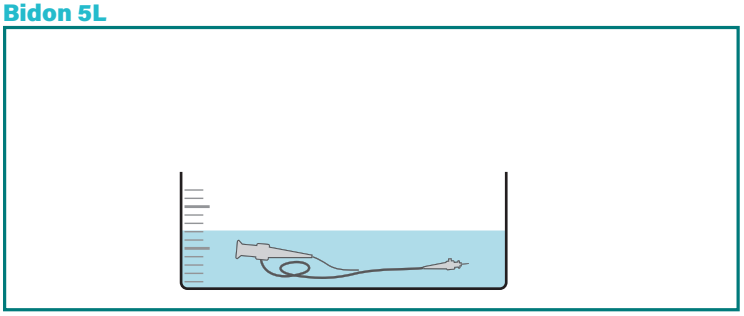


1 Immerger complètement les dispositifs médicaux ouverts dans la solution. Toutes les surfaces et cavités doivent être entièrement recouvertes par la solution.

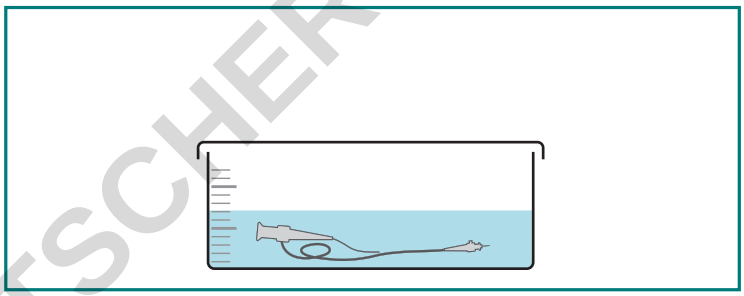


2 Couvrir les bacs.

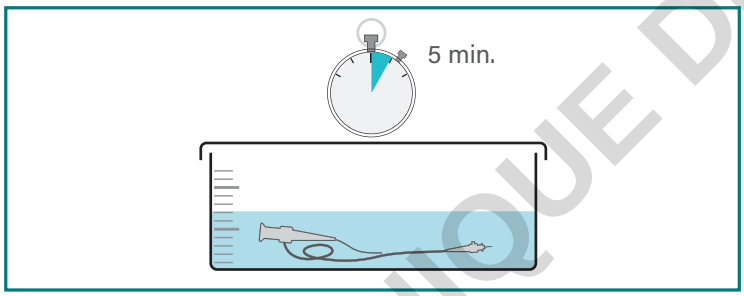


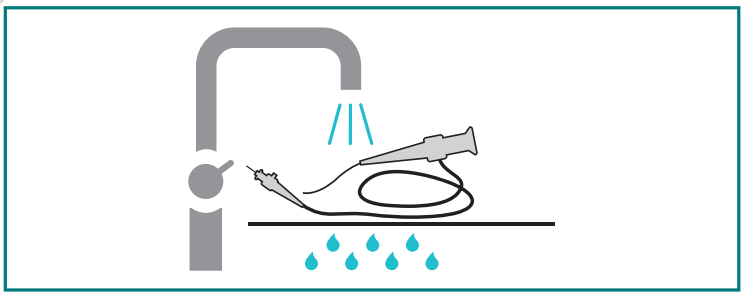

3 Après le temps de contact de 5 minutes, rincer soigneusement avec de l'eau stérile ou filtrée avant réutilisation. Ne pas dépasser le temps de contact recommandé.

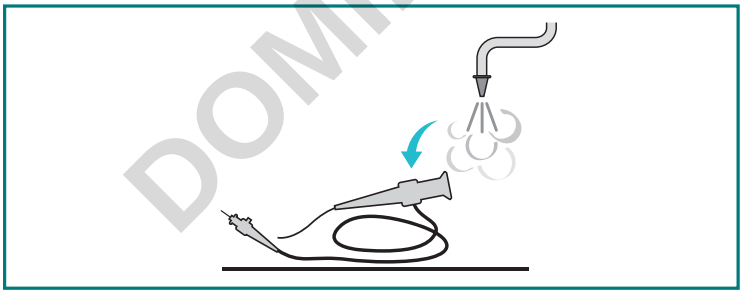

4 Avant stockage, sécher le dispositif à l'air médical sur une surface sèche préalablement nettoyée.

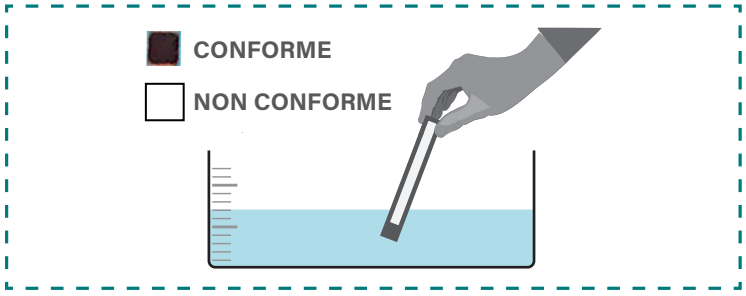

1. Immerger la languette test pendant 1 seconde environ dans **exeol PA**.
2. Secouer immédiatement et légèrement la bandelette pour éliminer l'excédent de liquide.
3. Exactement 10 secondes après le retrait de **exeol PA**, observer la couleur de la zone test et la comparer aux visuels de référence ci-dessus.

Ignorer tout changement de couleur après 15 secondes. En cas de résultat non conforme, renouveler le bain de **exeol PA**.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette, la FDS et les informations concernant le produit. EPI :



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

Dossier produit disponible sur www.exeol.fr

Bioxal
ZI Sud Secteur A,
Route des Varennes
71100 Chalon sur Saône, France.

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

Marquage CE obtenu en 2023
DM classe IIb

CE 0297

MD

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ exeol
UNE DIVISION SODEL

PRT EXEOL PA-MDR-FR-FRANCE-01_2025-02