

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des substances dangereuses, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Caillebotis
- Bac de rétention au sol
- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Box de stockage
- Surbacs (PE ou PP)

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 modèle 590.196.120
en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30115-002-33715

(caisson de ventilation à filtre intégré en option)



Unité d'extraction
Ventilation des armoires de sécurité
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire
Plus d'information, à partir de la page 403
Code article 14218



Tiroir
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



Équipement intérieur sans métal
Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs



Caisson de ventilation à filtre intégré
Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses
Plus d'information, à partir de la page 398
Code article 25099



Étagère
Réglable en hauteur



Dispositifs de réglage
Pour compenser les irrégularités du sol





Armoire de sécurité
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.WDAS
 en jaune sécurisé (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement epoxy)

Code article 30116-002-33724

(unité d'extraction en option)

Armoire de sécurité
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.WDAS
 en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement epoxy)

Code article 30116-001-33726

2 couleurs de porte sont disponibles
 sans frais supplémentaires :



001



002

REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAS

Exemple de commande - Pour bien remplir
 votre bon de commande



30115



001



33724

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.120	corps sans équipement intérieur	30115
S90.196.120.WDAS	corps sans équipement intérieur avec système de maintien de porte	30116

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurisé RAL 1004	jaune sécurisé RAL 1004	002

Ensemble d'équipements intérieurs (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillibotis, 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	tôle d'acier revêtement epoxy RAL 7035	33715
4x étagère, 1x caillibotis, 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	tôle d'acier revêtement epoxy RAL 7035	33716
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	tôle d'acier revêtement epoxy RAL 7035	33717
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	tôle d'acier revêtement epoxy RAL 7035	33718
3x étagère de rétention [N=33.0L], 1x caillibotis, 1x bac de rétention au sol [N=55.5L]	tôle d'acier revêtement epoxy RAL 7035	33719
3x étagère, 1x caillibotis, 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	acier inoxydable	33720
4x étagère, 1x caillibotis, 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	acier inoxydable	33721
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	acier inoxydable	33722
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	acier inoxydable	33723
3x étagère de rétention [N=33.0L], 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	PP grs	30143
4x étagère de rétention [N=33.0L], 1x bac de rétention au sol [N=33.0L]	PP grs	30144
4x tiroir [N=30.0L]	tôle d'acier revêtement epoxy RAL 7035	33724
5x tiroir [N=30.0L]	tôle d'acier revêtement epoxy RAL 7035	33725
6x tiroir [N=30.0L]	tôle d'acier revêtement epoxy RAL 7035	33726
4x tiroir [N=30.0L]	acier inoxydable	33727
5x tiroir [N=30.0L]	acier inoxydable	33728
6x tiroir [N=30.0L]	acier inoxydable	33729



Configuration personnalisée du modèle S90.196.120


Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.120	corps sans équipement intérieur	1196 x 616 x 1968	30115
S90.196.120.WDAS	corps sans équipement intérieur avec système de maintien de porte	1196 x 616 x 1968	30116

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75.00			30021
	acier inoxydable	1038 x 425 x 29*	75.00			30024
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 71*	150.00	33.00	30.00	30028
	acier inoxydable	1025 x 445 x 71*	150.00	33.00	30.00	30064
Étagère de rétention sans métal	PP grts	1002 x 472 x 74*	50.00	33.00	30.00	30027
Callebotis						
Callebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75.00			5536
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75.00			5773
Callebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 135	135.00			14084
Bac de rétention au sol						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33.00	30.00	33634
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*	150.00	33.00	30.00	33641
Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1016 x 436 x 122*		55.50	50.45	33639
	acier inoxydable	1018 x 438 x 120*		55.50	50.45	30026
Bac de rétention au sol sans métal	PP grts	888 x 415 x 108*		33.00	30.00	33830
Tiroir						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	844 x 488 x 90*	60.00	30.00	2727	33646
	acier inoxydable	844 x 488 x 90*	60.00	30.00	2727	33650
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	843 x 487 x 162*	100.00	66.00	60.00	30032
	acier inoxydable	843 x 487 x 162*	100.00	66.00	60.00	30034
Accessoires						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
Surbac pour étagère	polyéthylène noir	1000 x 392 x 50*				7223
Surbac pour tiroir	PP grts	834 x 450 x 96*				10054
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1				8699
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Box pour produits chimiques	PP bieu	410 x 300 x 260		18.00	16.36	30038
Socle de transport hauteur = 118 mm	acier revêtement époxy RAL 7035	1195 x 610 x 118				30171
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793

Ventilation	Code article
Calson de ventilation à filtre intégré UFA.20.30 avec contrôle du débit d'air	25099
Unité d'extraction HFEA.8677 sans dispositif de contrôle d'évacuation d'air	14218

* L x P correspond à la surface de découpe utile
 1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]

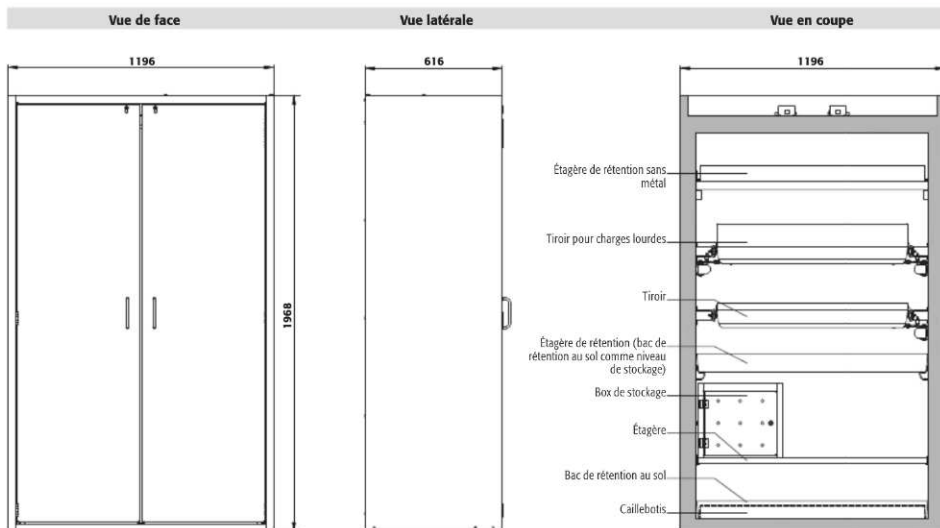

S-LINE

Caractéristiques techniques


S90.196.120.(WDAS)

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1196 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	1050 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	Kgs	420
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	10
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa	5
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	5
Charge maximale	Kgs	600
Charge répartie	kg/m ²	528

Socle de transport en option

Hauteur de l'entrée	mm	100
Largeur de l'entrée	mm	2 x 440

Vue de dessus

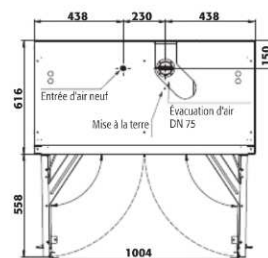

S90.196.120.(WDAS)

Tiroirs/numéro	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Distance ① (mm)	150								
Distance ② (mm)	135	210							
Distance ⑦ (mm)	135	200	210						
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	275					
Distance ⑤ (mm)	170	170	200	230	340	275			
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	295	230	405		
Distance ③ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	530	
Distance ② (mm)	170	170	230	230	295	295	390	520	980
Distance ① (mm)	200	200	230	295	295	295	390	550	615

S90.196.120.(WDAS)

Étagères/nombre	4	3
Distance ④ (mm)	320	
Distance ③ (mm)	350	420
Distance ② (mm)	350	450
Distance ① (mm)	290	380

S90.196.120.(WDAS)

Quantité	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

