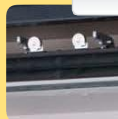


Aperçu général du **Modèle Groupe Q-CLASSIC-90****Sûr, durable et robuste**

- Assemblage d'éléments de sécurité protégés contre la corrosion
- porte réglable, arrêt des portes dans toutes les positions, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Certifié GS**, avec 50.000 cycles d'ouverture et de fermeture exempts d'usure

HIGHLIGHT

**Ventilation**

- mise en service rapide
- conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction
- le ventilateur intégré dans la grille de ventilation indique un bon fonctionnement du système d'échappement à l'intérieur de l'armoire de sécurité Q-LINE

HIGHLIGHT

**Étagère**

- réglable en hauteur (par intervalles de 32 mm), capacité de charge de 75 kg
- avec une hauteur du solin de 30 mm
- version à soudure étanche disponible (capacité de charge de 150 kg)


**Bac de rétention au sol**

- avec joint sur lèvres à trois faces
- collecte des fuites en toute sécurité
- caillebotis comme premier niveau de stockage à l'intérieur du bac de rétention au sol, utilisation optimale des capacités de stockage existantes

**Dispositifs de réglage**

- alignement facile
- compensation rapide et efficace pour plancher inégal (max 10 mm)

HIGHLIGHT

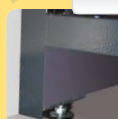**Verrouillage**

- protection contre une utilisation non autorisée
- portes avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage possible)
- indicateur de l'état de verrouillage intégré (rouge/vert)

HIGHLIGHT

**Équipement intérieur sans métal (en option)**

- idéal pour le stockage des substances inflammables et dangereuses
- bacs étagères avec revêtement résistant aux produits chimiques et bac démontable en PE
- Bac de rétention au sol en PE

HIGHLIGHT

**Tiroirs**

- grande capacité de stockage
- permettent de maximiser l'espace de stockage
- idéals pour le stockage des récipients < 5 litres
- également disponibles sous forme d'étagère coulissante charge lourde avec une capacité de charge de 100 kg

**Concept à 7 couleurs, étiquetage**

- étiquetage n'ayant aucune dépendance à l'égard de la langue, facilité d'utilisation optimale à l'échelle internationale
- Les armoires Q-CLASSIC apportent de la couleur à votre lieu de travail : 7 couleurs de portes disponibles **sans frais supplémentaires**

HIGHLIGHT

**Socle de transport intégré**

- transport facile
- grande flexibilité
- plinthe (en option)

HIGHLIGHT





**Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90**  
**Modèle Q90.195.120**  
avec portes en jaune sécurité (RAL 1004), 3 étagères, caillebotis et bac de rétention au sol (en acier revêtement époxy), plinthe en option.  
**Code article 30001-040-30003**



**Fonction/construction :**

- **construction robuste et longévité** – porte à triple charnière, éléments de sécurité rassemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer
- **maniabilité optimale** – maintien de porte à toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **aucune utilisation non autorisée** – portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur de l'état de verrouillage (rouge/vert)
- **transport facile** – socle de transport intégré avec plinthe démontable en option
- **alignement facile** - dispositifs de réglage pour compenser le plancher inégal

- **mise en marche rapide** – conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'échappement technique

**Équipement intérieur disponible :**

- étagères (capacité de charge : 75 kg ou 150 kg)
- caillebotis
- bacs de rétention au sol (volume 33 l ou 55 l)
- tiroir d'une capacité de charge de 60 kg
- étagère coulissante charge lourde d'une capacité de charge 100 kg
- bacs de rétention au sol et bacs étagères sans métal
- box de stockage
- conduit de bac (PE ou PP)

pour plus de détails, référez-vous à la page 90




**Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90**  
**Modèle Q90.195.120**  
avec portes en gris light (RAL 7035), 4 tiroirs (en acier revêtement époxy), plinthe en option  
**Code article 30001-041-30015**




**Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90**  
**Modèle Q90.195.120**  
avec portes en rouge trafic (RAL 3020), 6 tiroirs (en acier revêtement époxy), caisson de ventilation avec filtration intégrée et plinthe en option  
**Code article 30001-046-30017**

7 couleurs de portes sont disponibles sans frais supplémentaires :

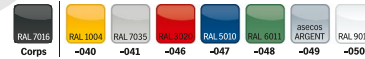

Commande un exemplaire - comment passer correctement la commande :

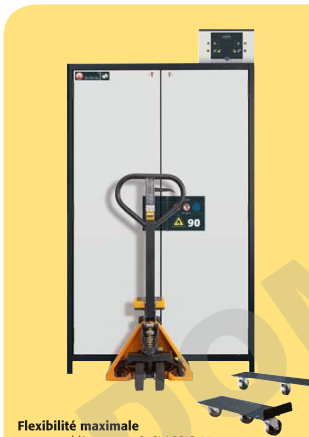

**Flexibilité maximale**  
aucun problème avec Q-CLASSIC-90 y compris le socle de transport et  
- le système de circulation du filtre à air technique (optionnel)  
- Q-Mover (en option) pour un transport interne



**Tiroirs**  
Capacité de stockage élevée, idéale pour le stockage des récipients de petite taille



**Équipement intérieur sans métal**  
idéal pour le stockage des substances inflammables et dangereuses. Bacs étagères avec revêtement de surface résistant aux produits chimiques et bac démontable en PE, bac de rétention au sol en PE



**Caisson de ventilation avec filtration intégrée**  
évite le percement cauteux des cloisonnettes la pose de tuyauterie  
pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé **Extraction des matières dangereuses**  
**Code article 25099**




**Unité d'extraction ventilation sans risques et armoires de sécurité**  
dispositif enfichable, installation rapide et facile  
pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé **Extraction des matières dangereuses**  
**Code article 14218**

Modèle	Matériau/Couleur/Information	Code article
Q90.195.120, corps sans équipement intérieur	couleur du corps RAL 7016 gris anthracite, veuillez spécifier la couleur de la porte	30001
<b>Couleur du corps/couleur de la porte</b>		
Corps gris anthracite/portes jaune sécurité	RAL 7016/RAL 1004	040
Corps gris anthracite/portes gris light	RAL 7016/RAL 7035	041
Corps gris anthracite/portes rouge trafic	RAL 7016/RAL 3020	045
Corps gris anthracite/portes bleu gentiane	RAL 7016/RAL 5010	047
Corps gris anthracite/portes vert réséda	RAL 7016/RAL 6011	048
Corps gris anthracite/portes en argent asecos	RAL 7016/argent asecos	049
Corps gris anthracite/portes en blanc pur	RAL 7016/RAL 9010	050
<b>Ensemble d'équipement intérieur</b>		
3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30003
4 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30004
3 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30005
4 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30006
3 bacs étagères (V=33 l), 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=55 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30007
3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	acier inoxydable L4301	30008
4 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	acier inoxydable L4301	30009
3 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	acier inoxydable L4301	30010
4 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	acier inoxydable L4301	30011
3 bacs étagères (V=33 l), 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	<b>sans métal (mélanine/PE)</b>	30013
4 bacs étagères (V=33 l), 1 bac de rétention au sol (V=33 l)	<b>sans métal (mélanine/PE)</b>	30014
4 tiroirs	en acier revêtement époxy RAL 7035	30015
5 tiroirs	en acier revêtement époxy RAL 7035	30016
6 tiroirs	en acier revêtement époxy RAL 7035	30017
4 tiroirs	acier inoxydable L4301	30018
5 tiroirs	acier inoxydable L4301	30019
6 tiroirs	acier inoxydable L4301	30020
<b>Accessoires</b>		
Passerelle	en acier revêtement époxy RAL 7035, pour l'installation des tuyaux/câbles	30035
Plinthe	en acier revêtement époxy RAL 7016	30036
Q-Mover	en acier revêtement époxy RAL 7016/ensemble=2 pièces,	30037
Bac pour l'étagère en acier inoxydable	PE noir	7223
Bac pour tiroir en acier inoxydable	PP gris	10654
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	8659
Box de stockage perforé, porte à charnières gauche, pour les étagères uniquement	en acier revêtement époxy RAL 7035	30029
Box de stockage perforé, porte à charnières droite, pour les étagères uniquement	en acier revêtement époxy RAL 7035	30030
Box chimique	PP bleu, avec poignées de transport et couvercle	30038
<b>Ventilation technique</b>		
Caisson de ventilation avec filtration intégrée	en acier revêtement époxy RAL 7035/RAL 7016	25099
Unité d'extraction	en acier revêtement époxy RAL 7035	14218

Configuration individuelle du modèle **Q90.195.120**


Modèle	Matériau/Couleur/Information	L x D x H (mm)	Capacité de charge (kg)	Capacité (l)	Vol. max du récipient Intérieur de l'armoire (l)	Code article
Q90.195.120, corps sans équipement intérieur	couleur du corps RAL 7016 gris anthracite veuillez spécifier la couleur de la porte	1193 x 615 x 1953				30001
<b>Couleur du corps/couleur de la porte</b>						
Corps gris anthracite/portes jaune sécurité	RAL 7016/RAL 1004					040
Corps gris anthracite/portes gris light	RAL 7016/RAL 7035					041
Corps gris anthracite/portes rouge trafic	RAL 7016/RAL 3020					046
Corps gris anthracite/portes bleu gentiane	RAL 7016/RAL 5010					047
Corps gris anthracite/portes vert réséda	RAL 7016/RAL 6011					048
Corps gris anthracite/portes en argent asecos	RAL 7016/argent asecos					049
Corps gris anthracite/portes en blanc pur	RAL 7016/RAL 9010					050
<b>Équipement intérieur</b>						
Étagère	en acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75	-	-	30021
	acier inoxydable 1.4301	1040 x 432 x 30*	75	-	-	30024
Bac étagère (V=33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 71*	150	33	30	30028
	acier inoxydable 1.4301	1025 x 445 x 71*	150	33	30	30064
Caillebotis (H=60 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75	-	-	5636
	acier inoxydable 1.4301	1024 x 417 x 60	75	-	-	5773
Caillebotis (H=135 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 135	75	-	-	14084
Bac de rétention au sol (V=33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33	30	30022
	acier inoxydable 1.4301	1025 x 445 x 80*		33	30	30025
Bac de rétention au sol (V=55l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	1016 x 436 x 120*	-	55,5	50,45	30023
	acier inoxydable 1.4301	1018 x 436 x 120*	-	55,5	50,45	30026
Bac étagère (V=33 l)	<b>sans métal (mécanique/PE)</b>	<b>HIGHLIGHT</b> 1002 x 472 x 74*	50	33	30	30027
Bac de rétention au sol (V=33 l)	<b>sans métal (PE)</b>	<b>HIGHLIGHT</b> 1002 x 472 x 74*	-	33	30	26989
Tiroir (V=30 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	844 x 488 x 90*	60	29	26,36	30031
	acier inoxydable 1.4301	844 x 488 x 90*	60	29	26,36	30033
Étagère coulissante charge lourde (V=66 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	843 x 487 x 162*	100	66	60	30032
	acier inoxydable 1.4301	843 x 487 x 162*	100	66	60	30034
Box de stockage perforé pour étagères Porte à charnières gauche	en acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	30029
Box de stockage perforé pour étagères Porte à charnières droite	en acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	30030
Bac pour étagères	PE noir	1000 x 392 x 50*	-	-	-	7223
Tôle d'acier/acier inoxydable						
Bac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	-	-	-	10054
Tôle d'acier/acier inoxydable						
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1,3	-	-	-	8699
<b>Accessoires</b>						
Passerelle	en acier revêtement époxy RAL 7035, pour l'installation des tuyaux/câbles					30035
Filtrine	en acier revêtement époxy RAL 7016					30036
Q-Mover	en acier revêtement époxy RAL 7016/ensemble=2 pièces.					30037
Box pour produits chimiques	PP bleu, avec poignées de transport et couvercle					30038

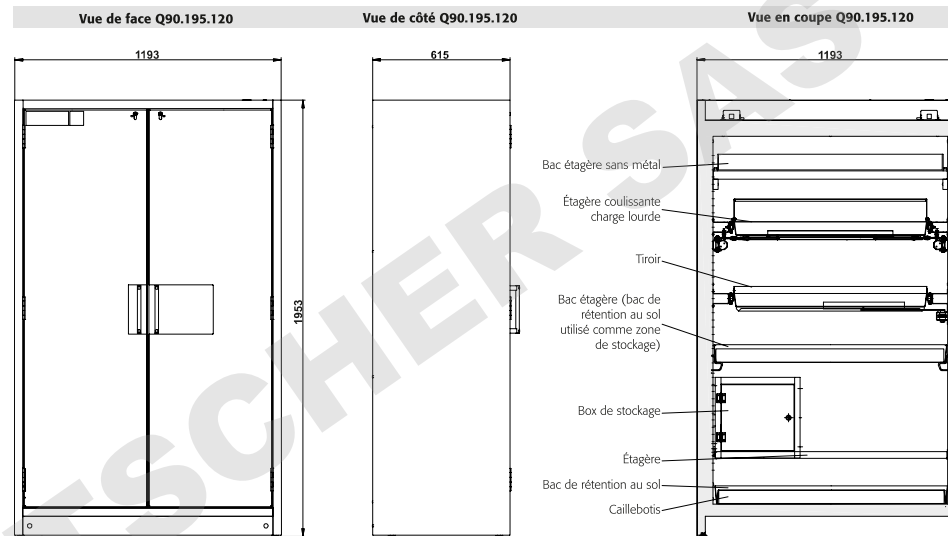


**Modèle de donnée technique Q90.195.120**

Dimensions	L x D x H (mm)	extérieur 1193 x 615 x 1953 intérieur 1050 x 522 x 1647
Profondeur avec portes ouvertes	(mm)	1166
Poids	(kg)	424
Extraction d'air	(DN)	75
Renouvellement de l'air, 10 fois	(m³/h)	9
La pression baisse dans l'armoire	(Pa)	< 5
Δp total (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 5
Charge maximale	(kg)	600
Charge répartie	(kg/m²)	531
<b>Socle de transport</b>	hauteur de l'entrée (mm)	90
	Largeur de l'entrée (mm)	1120

**Vue de dessus Q90.195.120**

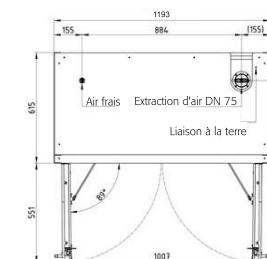

Modèle Q90.195.120 Tiroirs/nombre	Hauteurs de stockage standard des tiroirs								
	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Distance Ø (mm)	185								
Distance Ø (mm)	130	185							
Distance Ø (mm)	130	170	215						
Distance Ø (mm)	130	170	200	280					
Distance Ø (mm)	130	170	200	230	280	280			
Distance Ø (mm)	130	170	200	230	295	230	375		
Distance Ø (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470	
Distance Ø (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050
Distance Ø (mm)	200	200	200	230	295	230	390	525	490
<b>Modèle Q90.195.120 Étagères/nombre</b>	<b>Hauteurs de stockage standard des étagères</b>								
Distance Ø (mm)							<b>4</b>	<b>3</b>	
Distance Ø (mm)							320	420	
Distance Ø (mm)							350	450	
Distance Ø (mm)							350	450	
Distance Ø (mm)							290	380	
<b>Modèle Q90.195.120 Quantité</b>	<b>Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient</b>								
	<b>Type de récipient</b>								
90	Boîtes d'aérosol 400 ml								
40	Boîtes 1 litre								
40	Bouteille de lab (en verre) 1 litre								
40	Bouteille de lab (en PE) 1 litre								
15	Bouteille de lab (en verre) 2,5 litres								

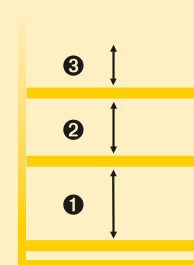

**SÉCURITÉ CERTIFIÉE**  
SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

\* espace de stockage utilisable L x P (mm)