



Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire

Fonction / construction:

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Tout en un** : différents compartiments facilitent le stockage des liquides ininflammables et des produits chimiques dangereux dans une armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure dans la poignée, chaque compartiment de stockage peut être ouvert et fermé séparément
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Équipements intérieurs disponibles:

- Étagères - au choix, galvanisés ou laquées, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible

Armoire pour produits chimiques MultiRisk CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.054.MH.3WDR
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 3 x étagère, 3 x bac de rétention au sol, 3 x caillebotis (tôle d'acier galvanisé)


Code article 30804-050-30810



Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	545 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures	mm	tous les compart.: 486 x 495 x 595
Poids sans équipement intérieur	Kgs	51
Extraction d'air	DN	75
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	4
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1

CS.195.054.MH.3WDR

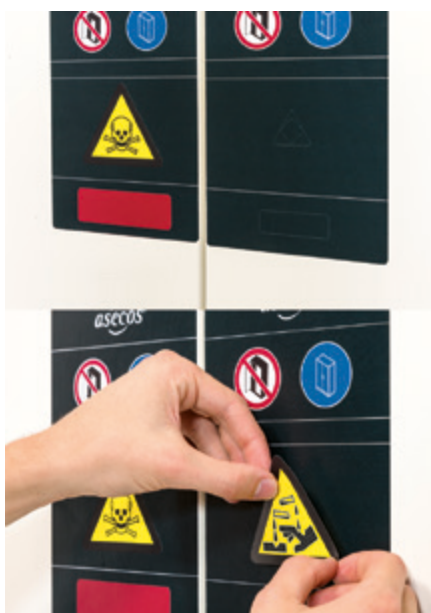

Signalisation MultiRisk

Marquage simple des compartiments de stockage à l'aide des pictogrammes normalisés fournis



Système de ventilation MultiRisk

Sécurité lors de l'utilisation quotidienne – système de ventilation intégré dans chaque compartiment/niveau de stockage et ventilation naturelle dans la partie inférieure



Étagères coulissantes MultiRisk

Stockage facile, sûr des récipients, notamment dans les compartiments inférieurs de l'armoire MultiRisk



Armoires MultiRisk

Le choix idéal pour un stockage de différents produits dangereux couplé à une grande flexibilité dans le choix de l'équipement intérieur désiré