



K-UB-90 ◀ 140 cm ▶



#### Petite armoire combinée

K-UB-90 modèle K90.060.140.050.UB.3T

en gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x étagère coulissante (panneau/PP)

Code article 30377-001-33846 4



#### Petite armoire combinée

K-UB-90 modèle K90.060.140.050.UB.ST

en gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x étagère coulissante (panneau/PP)

Code article 30370-001-30372 4

**Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail**

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 135° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 50) à un système d'échappement technique, extraction de deux compartiments par une connexion de ventilation

#### Équipements intérieurs disponibles:

compartiment pour le stockage de liquides inflammables

- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables

- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible

#### Compartiment de gauche :



#### Compartiment de droite :



#### Hauteurs de réglage utiles

##### Compartiment de gauche :

- 1 mm 460
- 2 mm 400\*


##### Compartiment de droite :

- 3 mm 495\*\*
- 4 mm 280 / 195\*\*\*

\* bac de rétention au sol avec caillebotis



\*\* 1 étagère amovible

\*\*\* 2 étagères amovibles

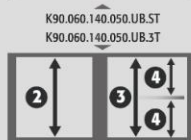

#### Caractéristiques techniques

	30370	30377
Dimensions l x P x H extérieures	mm 1402 x 502 x 601	1402 x 502 x 601
Dimensions l x P x H intérieures	mm à gauche: 770 x 381 x 502 à droite: 440 x 468 x 562	à gauche: 770 x 380 x 502 à droite: 440 x 468 x 562
Poids sans équipement intérieur	Kgs 197	197
	50	50
Renouvellement de l'air 10 fois	m³/h 3	3
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa 1	1
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa 1	1
Charge maximale	Kgs 300	300
Charge répartie	kg/m² 236	236

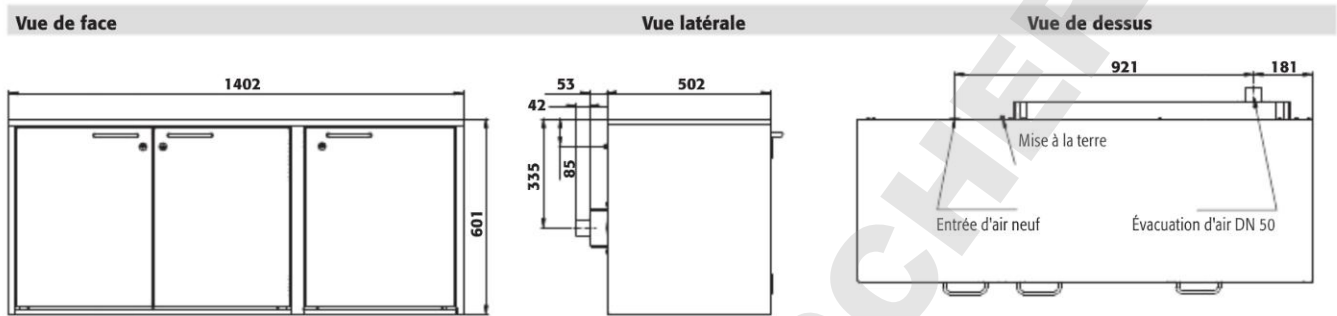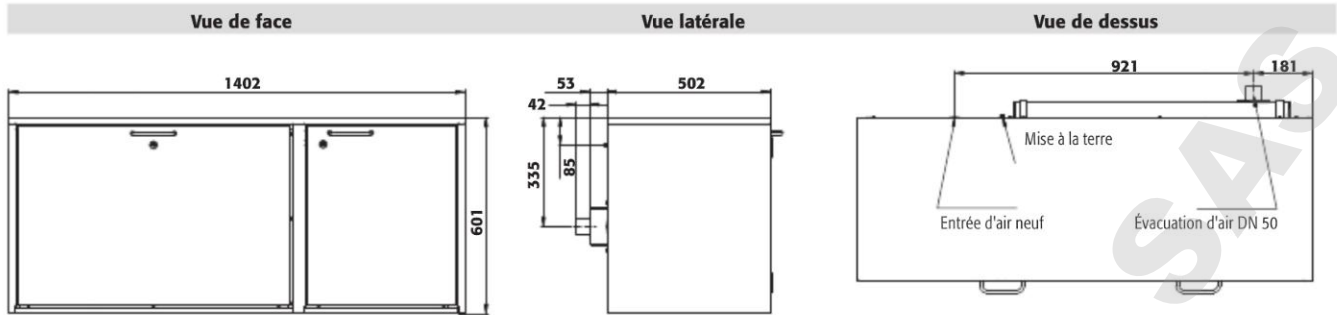

Exemple de commande - Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article		
K90.060.140.050.UB.ST	corps sans équipement intérieur, armoire de sécurité sous paillasse, avec 1 tiroir et 1 porte battante	30370		
K90.060.140.050.UB.3T	corps sans équipement intérieur, armoire de sécurité sous paillasse, avec 3 portes battantes	30377		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001		
Ensemble d'équipements intérieurs (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
<b>K90.060.140.050.UB.ST</b>				
À gauche: 1x tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau/PP gris clair	30371		
À droite: 1x étagère coulissante [V=11.0L]				
À gauche: 1x tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau/PP	30372		
À droite: 2x étagère coulissante [V=11.0L]				
<b>K90.060.140.050.UB.3T</b>				
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=16.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau/PP	33846		
À droite: 1x étagère coulissante [V=11.0L]				
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=16.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau/PP	33847		
À droite: 2x étagère coulissante [V=11.0L]				
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)  2)  3)	Code article
<b>K90.060.140.050.UB.ST</b>				
Étagère coulissante bac en plastique	panneau/PP gris	339 x 374 x 80*	25.00 11.00 10.00	30361
<b>K90.060.140.050.UB.3T</b>				
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	759 x 344 x 20*	75.00	30380
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	751 x 353 x 60	75.00	18811
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	753 x 355 x 70*	16.50 15.00	18810
Étagère coulissante bac en plastique	panneau/PP gris	339 x 374 x 80*	25.00 11.00 10.00	30361
Pour tous les modèles				
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48		30035
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035			30374
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	220 x 440 x 30		7603
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	220 x 440 x 30		7602
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	220 x 440 x 30		7604
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793
Accessoires				Code article
Module d'extraction HFEA23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse				24315

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)