

Nr de série 30606-001  
Modèle SL.196.120.MV



**Armoire acides/bases SL-CLASSIC**  
**Modèle SL.196.120.MV, gris clair (RAL 7035)**

**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés, exempts de métal pour le raccordement à un système de ventilation

Dimensions	
Largeur extérieure	1 197,00 mm
Profondeur extérieure	603,00 mm
Hauteur extérieure	1 965,00 mm
Largeur intérieure	485,00 mm
Profondeur intérieure	570,00 mm
Hauteur intérieure	1 869,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	215 kgs
Charge répartie	240,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement d'air 30 fois	16 m <sup>3</sup> /h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	56 Pa
Renouvellement de l'air 10 fois	10 m <sup>3</sup> /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	56 Pa



Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1 153 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face

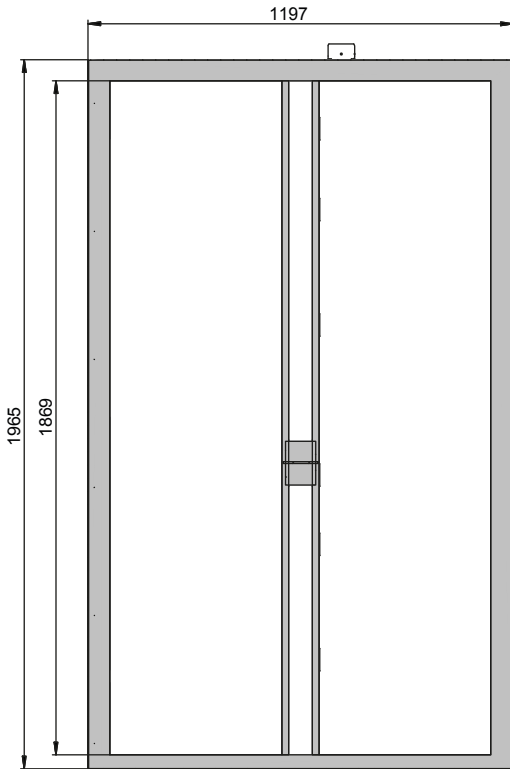

Vue latérale

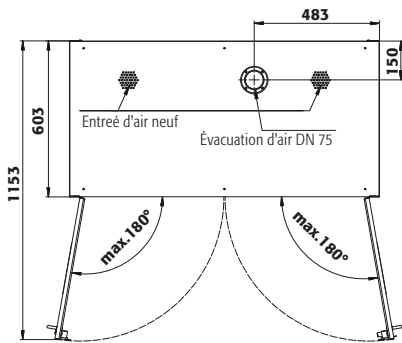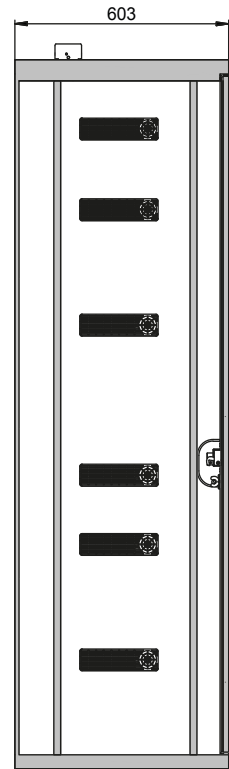

Pour plus d'informations, consultez [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)