

Notice d’installation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

LIEBHERR

Sommaire

1 Consignes de sécurité générales..... 2

2 Conditions d'installation..... 3
2.1 Pièce..... 3
2.2 Intégrer l'appareil dans une cuisine intégrée..... 3
2.3 Installation de plusieurs appareils..... 4
2.4 Raccordement électrique..... 4

3 Cotes d'installation..... 5

4 Conditions à respecter pour une bonne ventilation..... 5

5 Dimensions de raccordement électrique..... 5

6 Transporter l'appareil..... 6

7 Déballer l'appareil..... 6

8 Monter une entretoise murale..... 6

9 Installer l'appareil..... 6

10 Aligner l'appareil..... 6


11 Après installation..... 6

12 Eliminer l'emballage..... 7

13 Remplacement de la butée de porte..... 7
13.1 Enlever la porte supérieure..... 7
13.2 Dépose de la porte inférieure..... 8
13.3 Déplacer les pièces du palier supérieur..... 8
13.4 Déplacer les pièces du palier intermédiaire..... 9
13.5 Déplacer les pièces du palier inférieur..... 9
13.6 Déplacer les pièces de palier de la porte..... 10
13.7 Monter la porte inférieure..... 12
13.8 Monter la porte supérieure..... 12
13.9 Aligner les portes..... 12
13.10 Poser les caches..... 12

14 Brancher l'appareil sur le secteur..... 13

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

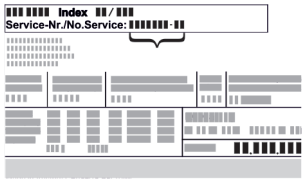Symbole	Explication
	**Lire le manuel d'utilisation** Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	**Informations supplémentaires sur Internet** Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :  *Fig.* Représentation à titre d'exemple

Symbole	Explication
	**Vérifier l'état de l'appareil** Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	**Divergences** Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	**Instructions et résultats** Les instructions sont indiquées par ▶. Les résultats sont indiqués par ▷.
	**Vidéos** Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :


L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Vous trouverez le numéro

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

de service sur la plaque signalétique :

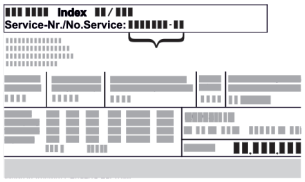

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

⚠	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
⚠	AVERTIS-SEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
⚠	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation

⚠ **AVERTISSEMENT**
Risque d'incendie dû à l'humidité !
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.
▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

Utilisation conforme
- Installer et utiliser l'appareil exclusivement dans des pièces fermées.

2.1 Pièce

⚠ **AVERTISSEMENT**
Fuite de réfrigérant et d'huile !
Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.
▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

- Si l'appareil est installé dans un environnement très humide, de la condensation peut se former sur l'extérieur de l'appareil.
  Toujours veiller à une bonne aération et ventilation du lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans le réfrigérateur est importante, plus la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur doit être grande. Dans les espaces trop petits, une fuite peut entraîner la formation d'un mélange de gaz et d'air inflammable. Pour 8 g de réfrigérant, le volume du local d'installation du réfrigérateur doit être d'au moins 1 m^3 . Les spécifications du réfrigérant figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

2.1.1 Sol de la pièce

- Le sol du local d'installation doit être horizontal et plat.
- Le socle de l'appareil doit avoir la même hauteur que le sol qui l'entoure.

2.1.2 Positionnement dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Positionner toujours l'appareil avec le dos directement contre le mur à l'aide des entretoises murales fournies (voir ci-dessous).

2.2 Intégrer l'appareil dans une cuisine intégrée

Le réfrigérateur peut être reconfiguré avec des armoires de cuisine.

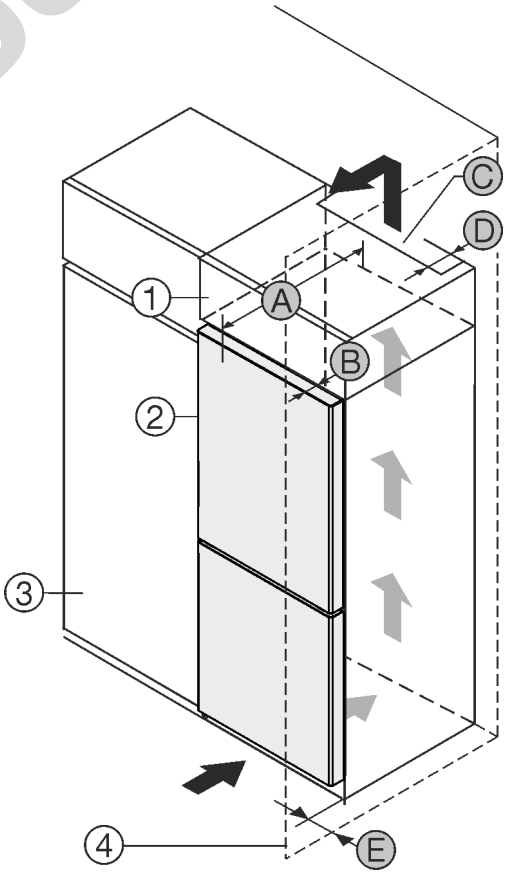


Fig. 1
(1) Rehausse
(2) Appareil
(B) Profondeur de porte
(C) Section de ventilation

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

(3) Placard de cuisine

(4) Mur

(A) Profondeur de l'appareil

(D) Distance du dos de l'appareil

(E) Distance par rapport au côté de l'appareil

Vous pouvez placer le réfrigérateur directement à côté de l'armoire de cuisine *Fig. 1 (3)*.

Une sortie d'air avec la profondeur *Fig. 1 (D)* doit être présente au dos de la rehausse sur toute sa largeur.

La section de ventilation *Fig. 1 (C)* sous plafond doit être respectée.

Si le réfrigérateur est installé avec les charnières près d'une paroi *Fig. 1 (4)*, la distance entre le réfrigérateur et la paroi doit être d'au moins 13 mm .

Si le réfrigérateur est installé avec les charnières près d'une paroi *Fig. 1 (4)*, la distance entre le réfrigérateur et la paroi doit être d'au moins 20 mm .

Pour pouvoir ouvrir complètement les portes, le réfrigérateur doit dépasser de la profondeur de la porte *Fig. 1 (B)* par rapport à la façade du placard. L'appareil peut déborder encore plus en fonction de la profondeur des placards *Fig. 1 (3)* et de l'utilisation de cales d'épaisseur.

Réfrigérateurs sans poignée / avec poignée encastrée :	
A	675 mm [x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

[x] En cas d'utilisation de supports d'espacement des parois, la cote augmente de 15 mm (voir 8 Monter une entretoise murale) .

Réfrigérateurs avec poignée encastrée et façade en verre/façade en pierre :	
A	682 mm [x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] En cas d'utilisation de supports d'espacement des parois, la cote augmente de 15 mm (voir 8 Monter une entretoise murale) .

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :



- Les dimensions des niches sont respectées. .
- Les règles d'aération sont respectées. (voir 4 Conditions à respecter pour une bonne ventilation) .

2.3 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :

❑ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
❑ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION
Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !
▶ Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

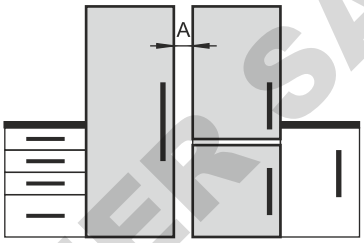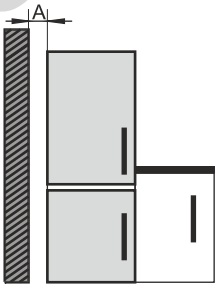Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modèle sans chauffage des parois latérales	 **Côte à côte :** installation avec un écartement **A** de 70 mm entre les appareils. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.  **Contre une paroi extérieure :** installation avec un écartement **A** comme pour une installation côte à côte. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.

Modèles et types d'installation

Assemblage des appareils selon les instructions de montage séparées.

2.4 Raccordement électrique

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.
▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d´ alimentation.
▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3 Cotes d’installation

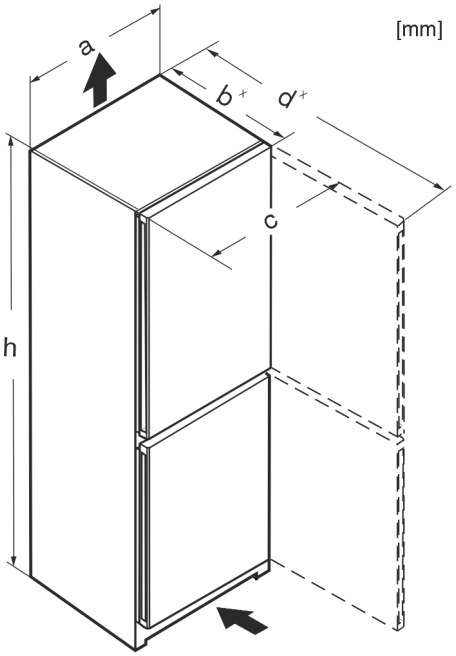


Fig. 2

	h	a	b	c	d
CN... 50..	1655	597	675[x]	609	1217[x]
CN... 52..	1855	597	675[x]	609	1217[x]
KGNefc 1863	1855	597	675[x]	609	1217[x]
KGNsdc 52Z03	1855	597	675[x]	609	1217[x]
KGNc 52Z03	1855	597	675[x]	609	1217[x]
KGNbdc 52Z23	1855	597	675[x]	609	1217[x]
CN... 57..	2015	597	675[x]	609	1217[x]
KGNefc 2063	2015	597	675[x]	609	1217[x]
KGNsf 57Va03	2015	597	675[x]	609	1217[x]
KGNsdc 57Z03	2015	597	675[x]	609	1217[x]
CNgw... 57..	2015	597	682[x]	609	1217[x]
CBN... 52..(i)	1855	597	675[x]	609	1217[x]
CBN... 57..(vi) (i)	2015	597	675[x]	609	1217[x]
CBNdmy 5723 II3	2015	597	675[x]	609	1217[x]
CBNcmy 572i II2	2015	597	675[x]	609	1217[x]
CN... 76..	1855	747	675[x]	759	1367[x]
CN... 77..	2015	747	675[x]	759	1367[x]

[x]Pour les appareils avec supports d'espacement muraux, la cote augmente de 15 mm (voir 8 Monter une entretoise murale) .

4 Conditions à respecter pour une bonne ventilation

ATTENTION
Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.
En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.
▶ Veiller à une ventilation suffisante.
▶ Respecter les exigences de ventilation.

Si l’appareil est intégré dans le bloc-cuisine, il faut absolument respecter les conditions suivantes pour une bonne ventilation :

- En règle générale, plus la section d'aération est large, moins l'appareil consomme d'énergie.

5 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l’arrière de l’appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 14 Brancher l'appareil sur le secteur)

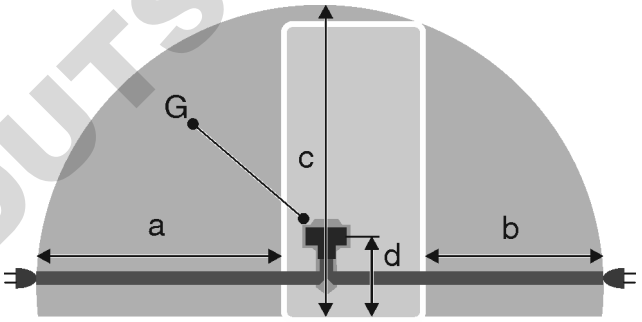


Fig. 3 Réfrigérateurs-congélateurs / congélateurs / réfrigérateurs-BioFresh grand espace

(a) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(b) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(c) Longueur verticale maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(d) Écart entre et le connecteur de l’appareil et le sol
(G) Connecteur d'appareil

Pour les appareils d'une largeur de 600 mm :*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Pour les appareils d'une largeur de 750 mm :*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pour les appareils d'une largeur de 750 mm :*	
d	~ 200 mm

6 Transporter l’appareil

Lors du transport de l'appareil, respecter les conseils suivants :
- ▶ Transporter l’appareil en position verticale.
- ▶ Transporter l’appareil à deux personnes.

Lors de la mise en service initiale :
- ▶ Transporter l’appareil dans son emballage.

Lors du transport de l'appareil après la mise en service initiale (par exemple, déménagement ou nettoyage) :
- ▶ Vider l’appareil.
- ▶ Sécuriser la porte contre toute ouverture inopinée.


7 Déballer l’appareil

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.
- ▶ Vérifier l’absence d’avaries de transport sur l’appareil et l’emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu’ils soient.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l’appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d’entraver la ventilation et l’aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l’appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d’objets pointus ou acérés !
- ▶ Enlever le câble de raccordement situé à l’arrière de l’appareil. Pour ce faire, retirer le porte-câble, sinon des bruits de vibrations se produisent !

8 Monter une entretoise murale

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l’appareil est opérationnel mais présente une consommation énergique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l’appareil augmente d’env. 15 mm.

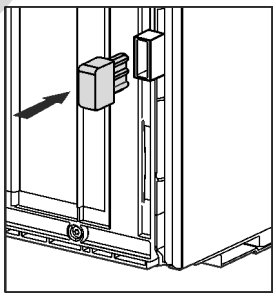

- ▶ Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l’arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

9 Installer l’appareil

ATTENTION
Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !
- ▶ Solliciter l’aide d’une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d’installation.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à un court-circuit !
- ▶ Lorsque vous installez l’appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l’appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures et de dommages si l’appareil est instable !
L’appareil peut se renverser.
- ▶ Fixer l’appareil conformément aux instructions.

AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement et d'incendie !
- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :
- ❑ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ❑ Ne pas installer l’appareil sans aide.

10 Aligner l’appareil

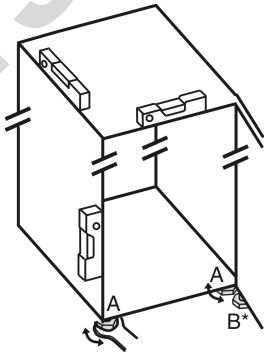


Fig. 4
- ▶ Dévisser les pieds réglables *Fig. 4 (A)* avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l’appareil est bien plan.

ATTENTION
Risque de lésions corporelles et de dommages matériels en cas de basculement ou chute de la porte de l'appareil !*
Si le pied de réglage supplémentaire du support de palier inférieur ne repose pas correctement au sol, la porte risque de tomber ou l'appareil risque de basculer. Ce qui peut provoquer des lésions corporelles et des dommages matériels.
- ▶ Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.

- ▶ Dévisser le pied réglable *Fig. 4 (B)* du support de palier avec la clé plate fournie jusqu’à ce qu’il touche le sol.
- ▶ Tourner le pied réglable *Fig. 4 (B)* de 90° supplémentaires.
- ▷ L’appareil est à niveau.

11 Après installation

- ▶ Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l’appareil.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- ▶ Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- ▶ Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
- ▶ Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

12 Eliminer l'emballage

AVERTISSEMENT
Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :
- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

13 Remplacement de la butée de porte

Outil

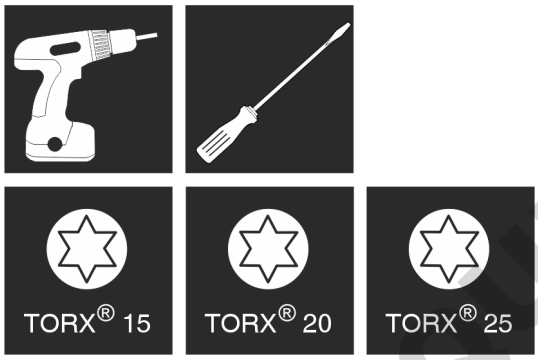


Fig. 5

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de collision des portes !
Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.
- ▶ Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Pour les appareils **sans amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :
- ❑ Pour les appareils **sans** amortisseur de fermeture
- ❑ Pour tous les appareils

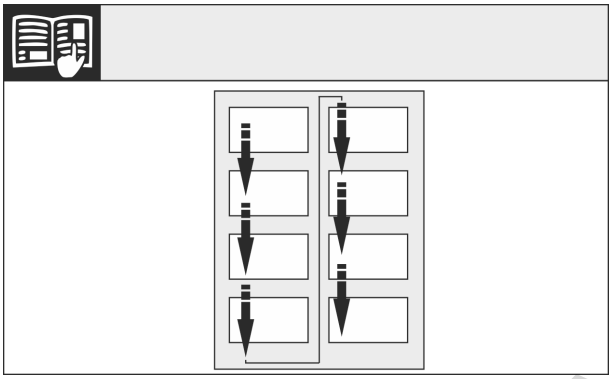


Fig. 6

Respecter le sens de lecture.

13.1 Enlever la porte supérieure

Remarque
- ▶ Pour empêcher qu'elles ne tombent, retirer les denrées des balconnets de contre-porte avant d'enlever la porte.

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :

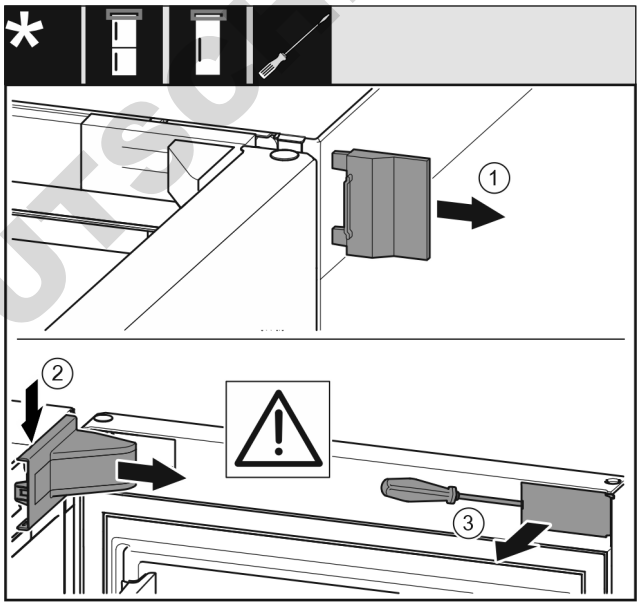


Fig. 7
- ▶ Ouvrir la porte.

ATTENTION
Risque de détérioration !
Si le joint de porte est endommagé, la porte risque de ne pas fermer correctement et la réfrigération ne sera plus assurée.
- ▶ Ne pas endommager le joint de la porte avec le tournevis !

- ▶ Retirer le cache extérieur *Fig. 7 (1)*.
- ▶ Dégager et retirer le cache du support de palier *Fig. 7 (2)*.
- ▶ Dégager le cache *Fig. 7 (3)* au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté.

Pour tous les appareils :

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

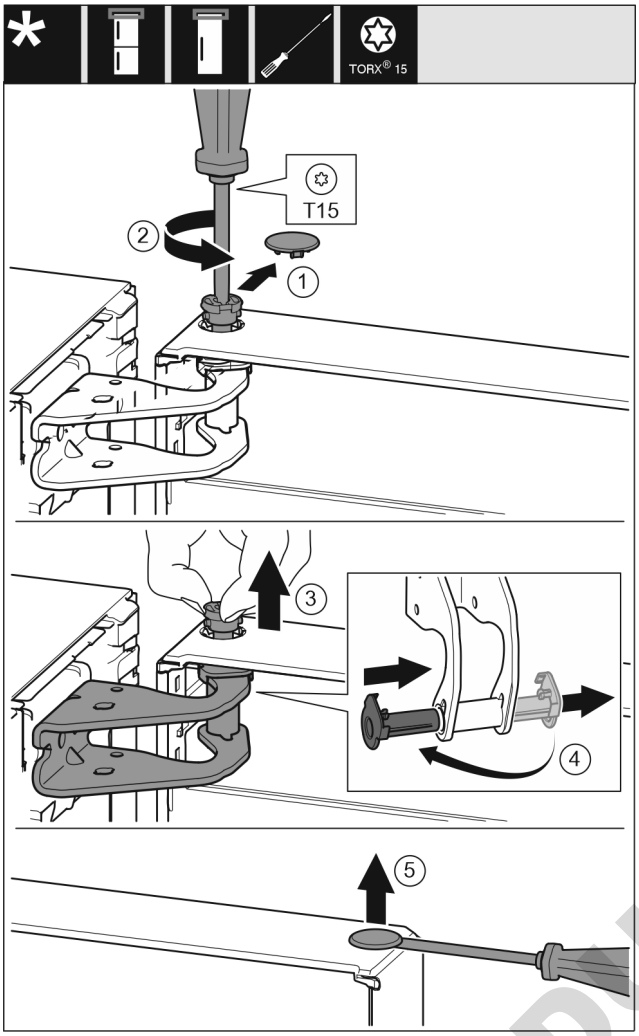


Fig. 8

ATTENTION
Risque de blessures lorsque la porte culbute !
- ▶ Bien tenir la porte.
- ▶ Déposer la porte prudemment.

▶ Soulever la porte et la mettre de côté.

13.2 Dépose de la porte inférieure

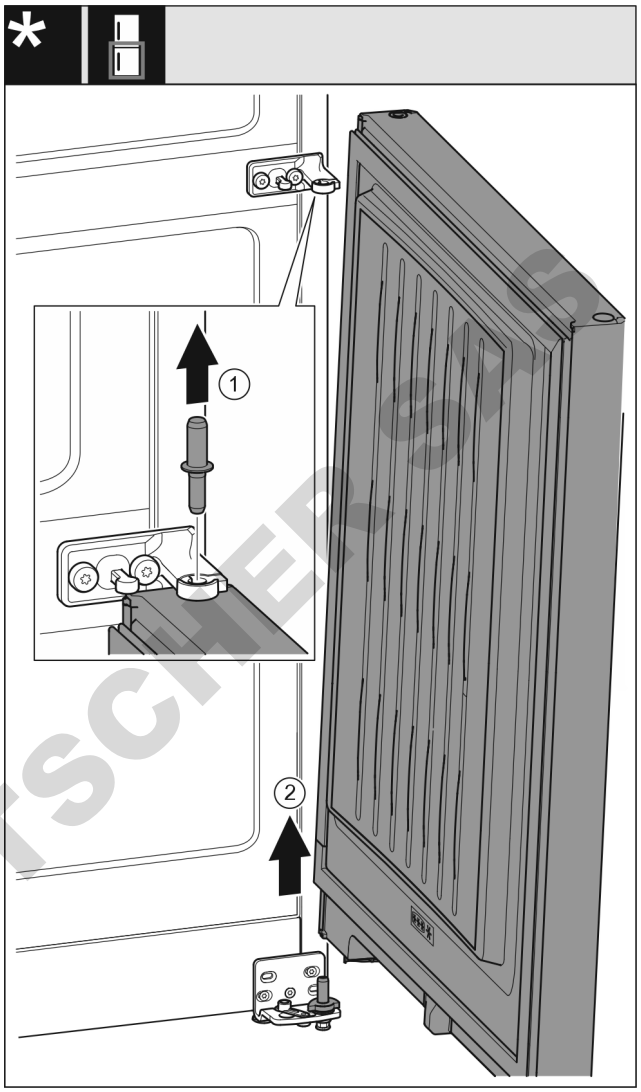


Fig. 9

▶ Retirer l'axe *Fig. 9 (1)* par le haut.
▶ Faire pivoter la porte *Fig. 9 (2)* vers l'extérieur, la retirer par le haut et la mettre de côté.

ATTENTION
Risque de blessures lorsque la porte culbute !
- ▶ Bien tenir la porte.
- ▶ Déposer la porte prudemment.

13.3 Déplacer les pièces du palier supérieur

Pour tous les appareils :

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.
- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

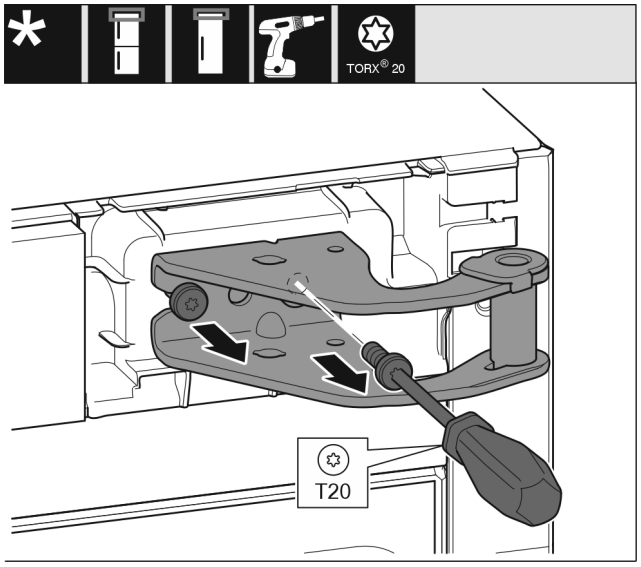


Fig. 10

- ▶ Dévisser les deux vis avec un tournevis.
- ▶ Soulever et enlever le support de palier.

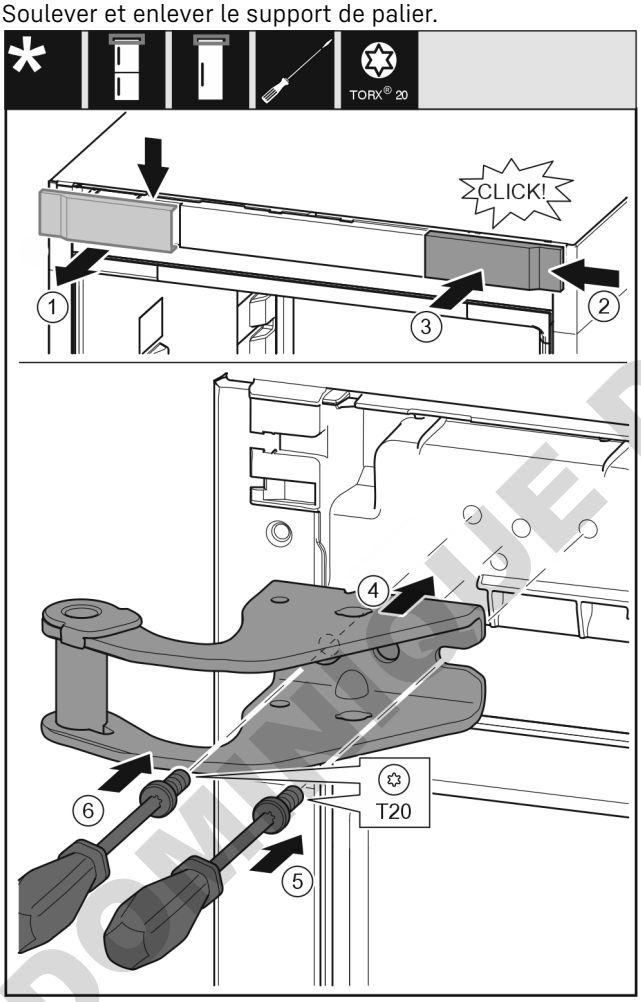


Fig. 11

- ▶ Retirer le cache *Fig. 11 (1)* depuis le haut vers l'avant.
- ▶ Accrocher le cache *Fig. 11 (2)* tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- ▶ Enclencher le cache *Fig. 11 (3)*.
- ▶ Poser le support de palier supérieur *Fig. 11 (4)*.
- ▶ Poser la vis *Fig. 11 (5)* avec un tournevis et la serrer.
- ▶ Poser la vis *Fig. 11 (6)* avec un tournevis et la serrer.

13.4 Déplacer les pièces du palier intermédiaire

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

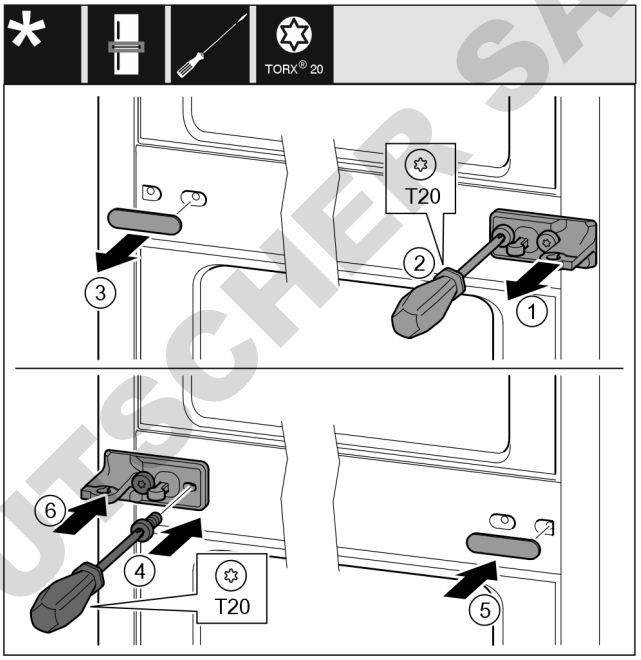


Fig. 12

- ▶ Retirer la rondelle *Fig. 12 (1)*.
- ▶ Retirer les vis *Fig. 12 (2)* avec un tournevis.
- ▶ Retirer le cache *Fig. 12 (3)* avec précaution.
- ▶ Visser fermement le support de palier avec film *Fig. 12 (4)* tourné de 180° de l'autre côté.
- ▶ Installer le cache *Fig. 12 (5)* tourné de 180° de l'autre côté.
- ▶ Insérer la rondelle *Fig. 12 (6)*.

13.5 Déplacer les pièces du palier inférieur

Pour tous les appareils :

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

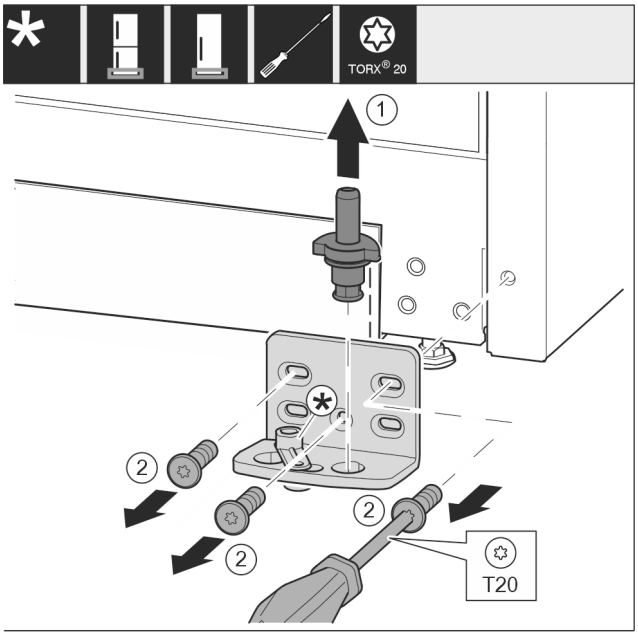


Fig. 13

▶ Retirer entièrement l'axe de palier *Fig. 13 (1)* par le haut.
▶ Desserrer les vis *Fig. 13 (2)* avec un tournevis et retirer le support de palier.

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :

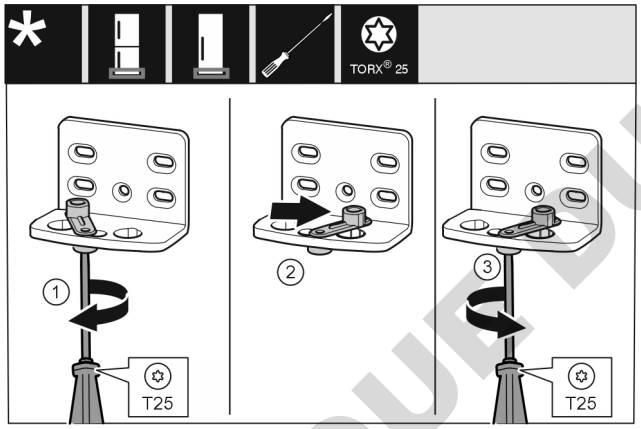


Fig. 14

▶ Visser sans serrer la vis *Fig. 14 (1)* avec un tournevis.
▶ Soulever l'aide à la fermeture de la porte *Fig. 14 (2)* et la tourner à 90° vers la droite dans l'alésage.
▶ Serrer la vis *Fig. 14 (3)* avec un tournevis.

Pour tous les appareils :

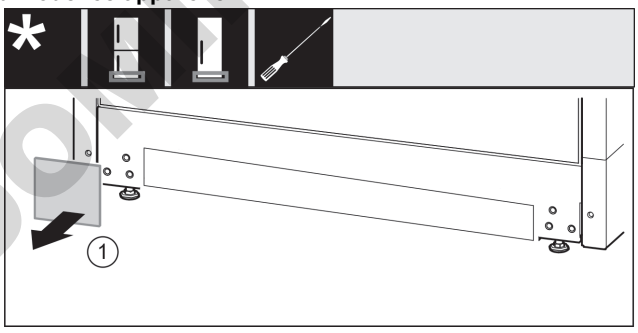


Fig. 15

▶ Retirer le cache *Fig. 15 (1)*.

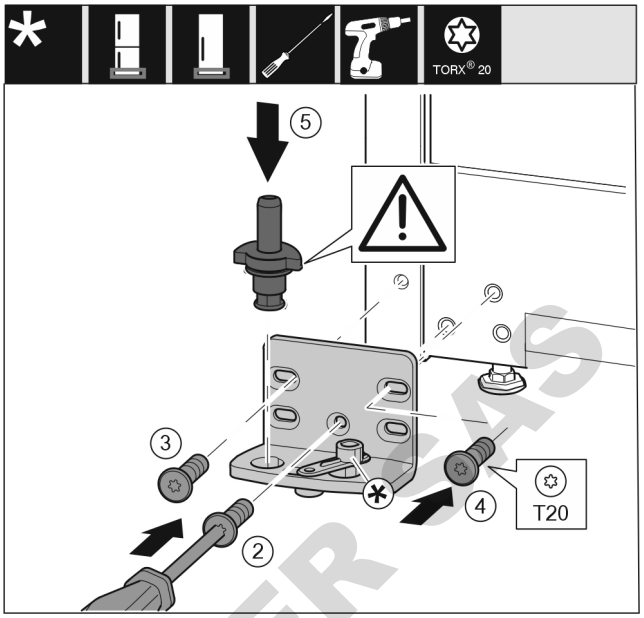


Fig. 16

▶ Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis *Fig. 16 (2)* en bas au milieu.
▶ Serrer la vis *Fig. 16 (3)* et la vis *Fig. 16 (4)*.
▶ Insérer complètement l'axe de palier *Fig. 16 (5)*. Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

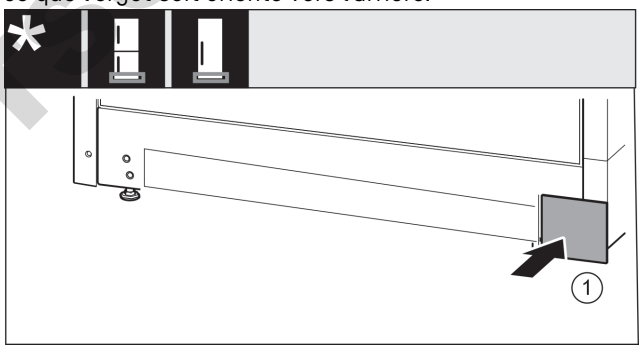


Fig. 17

▶ Remettre le cache *Fig. 17 (1)* en place de l'autre côté.

13.6 Déplacer les pièces de palier de la porte

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.
▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Porte inférieure

DOMAQUE DUTCHER SAS

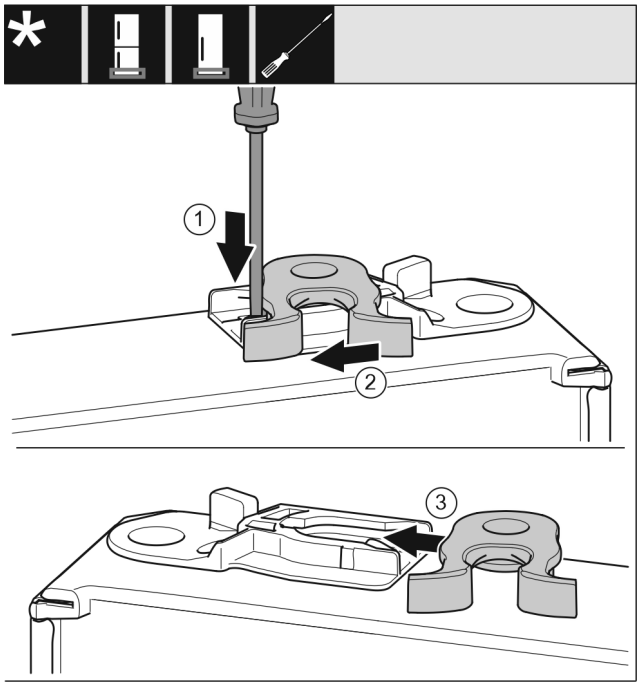


Fig. 18

- La partie inférieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.
- Pousser la languette *Fig. 18 (1)* vers le bas avec un tournevis plat.
- Retirer la gâche *Fig. 18 (2)* du guide.
- Pousser la gâche *Fig. 18 (3)* de l'autre côté dans le guide.
- La partie supérieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.

Porte supérieure

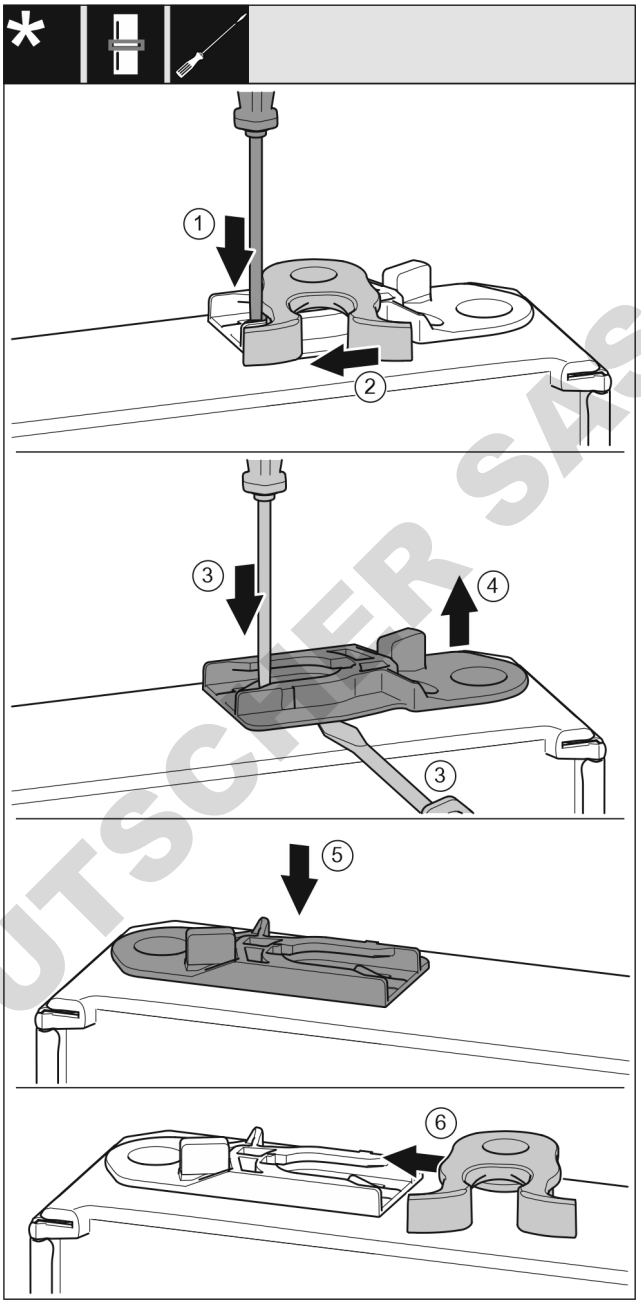


Fig. 19

- La partie inférieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.
- Pousser la languette *Fig. 19 (1)* vers le bas avec un tournevis plat.
- Retirer la gâche *Fig. 19 (2)* du guide.
- Retirer la douille de guidage *Fig. 19 (3, 4)* : Presser la languette avec un tournevis plat tout en faisant passer un autre tournevis plat sous la douille de guidage.
- Insérer la douille de guidage *Fig. 19 (5)* fournie de l'autre côté du boîtier.
- Insérer la gâche *Fig. 19 (6)* dans le guide.
- La partie supérieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

13.7 Monter la porte inférieure

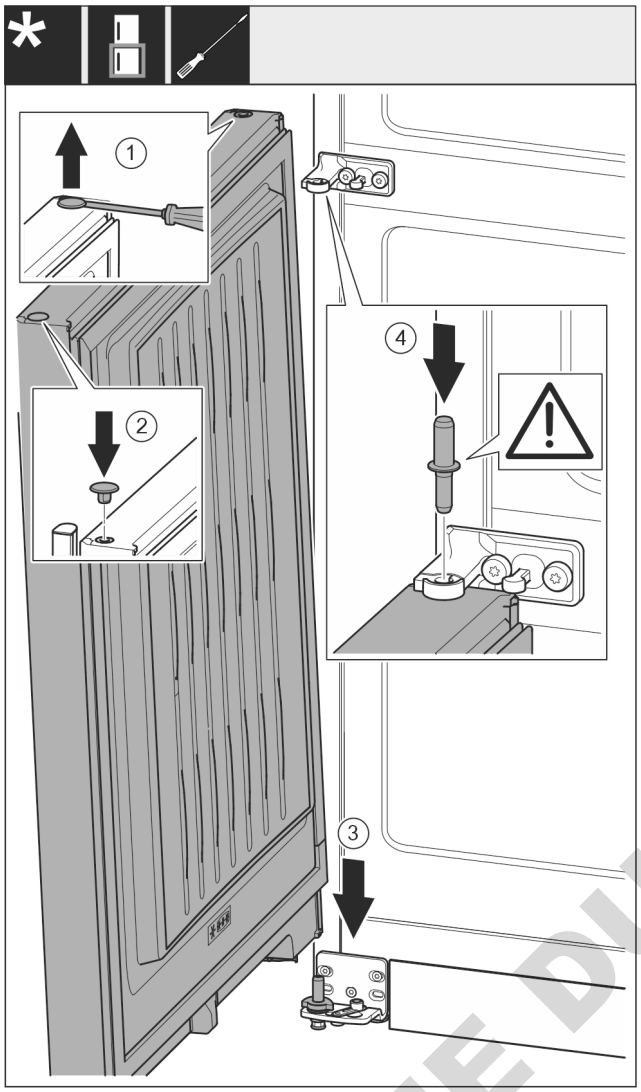


Fig. 20

- ▶ Soulever et retirer avec précaution les caches *Fig. 20 (1)* avec un tournevis plat.
- ▶ Replacer les caches *Fig. 20 (2)* de l'autre côté de la porte.
- ▶ Placer la porte *Fig. 20 (3)* depuis le haut sur l'axe de palier inférieur.
- ▶ Insérer l'axe de palier central *Fig. 20 (4)* dans le support de palier central de la porte inférieure. Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

13.8 Monter la porte supérieure

Pour tous les appareils :

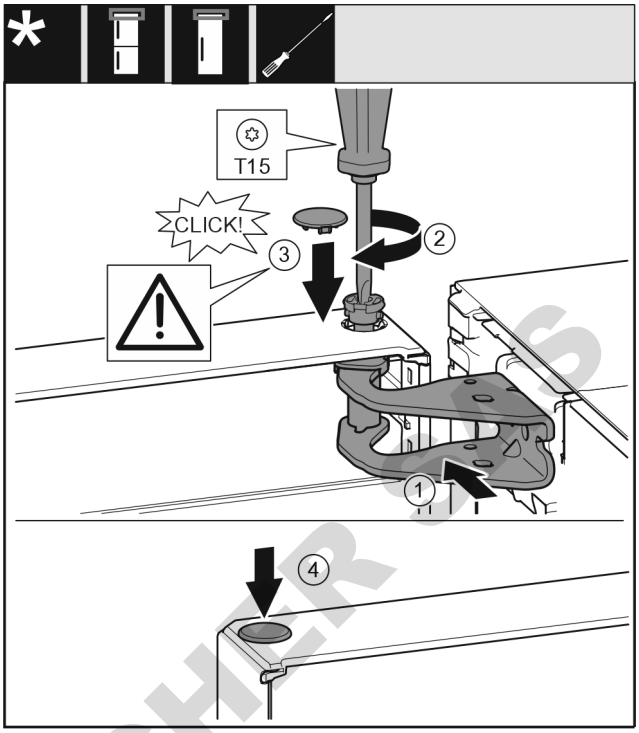


Fig. 21

- ▶ Mettre la porte sur l'axe de palier du milieu.
- ▶ Orienter la porte en haut pour l'ouverture dans le support de palier. *Fig. 21 (1)*
- ▶ Insérer l'axe *Fig. 21 (2)* et le serrer avec un tournevis.
- ▶ Monter le cache de fixation *Fig. 21 (3)* pour sécuriser la porte : mettre le cache de fixation en place et vérifier qu'il repose bien sur la porte. Sinon, insérer complètement l'axe.
- ▶ Mettre le cache *Fig. 21 (4)* en place.

13.9 Aligner les portes

Pour tous les appareils :

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

- ▶ Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas et le support de palier au milieu dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux. Desserrer les vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 et aligner le support de palier du milieu sur les trous longitudinaux.
- ▶ Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

13.10 Poser les caches

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

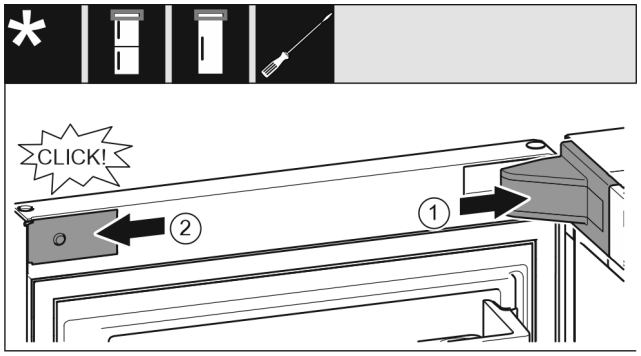


Fig. 22

La porte s'ouvre à 90°.

▶ Mettre en place le cache du support de palier *Fig. 22 (1)* et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.

▶ Placer le cache *Fig. 22 (2)* sur le côté et l'enclencher.

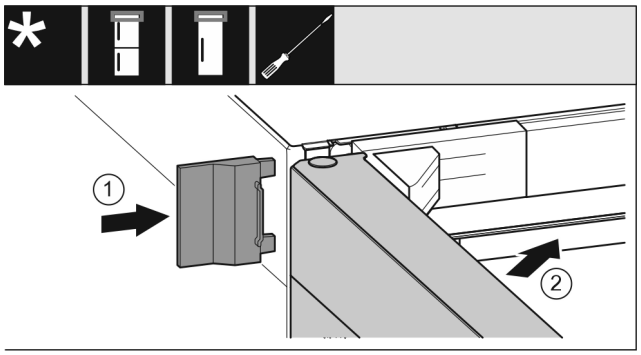


Fig. 23

▶ Insérer le cache extérieur *Fig. 23 (1)*.

▶ Fermer la porte supérieure *Fig. 23 (2)*.

14 Brancher l'appareil sur le secteur

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation !
Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.

▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.

▶ Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au réseau électrique à l'aide du câble de raccordement. Le câble de raccordement est muni d'une fiche secteur à son extrémité libre.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :


- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 8 Monter une entretoise murale)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées. (voir 2 Conditions d'installation)
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 5 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 5 Dimensions de raccordement électrique) .

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.
Détérioration de l'appareil.

▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.

▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

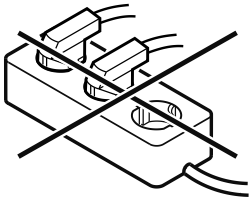

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !
Détérioration de l'appareil.

▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

▶ Raccorder la fiche secteur du câble de raccordement à la tension d'alimentation.

▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.

▷ L'écran affiche ensuite le symbole Standby.

▷ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.

▷ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

DOMINIQUE DITSCHER SAS



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR combiné réfrigérateur-congélateur

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Date de publication : 20241204

Index des réf. : 7086337-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien