RAININ Pos-DTM

De véritables avantages ergonomiques



Inutile de serrer

Le crochet ergonomique prend soin de votre main en permettant de la reposer.



Confortable

La Pos-D est agréable à manier grâce au design de la poignée, plus large et ergonomique.



Lisible

L'écran est bien visible pendant le pipetage, il est donc inutile de tourner la pipette pour régler ou lire le volume.



Idéal pour pipeter des liquides délicats


La Pos-D est spécialement conçue pour des liquides de haute densité, viscosité ou pression de vapeur. Grâce aux capillaires et pistons jetables, le principe à déplacement positif empêche toute contamination par des aérosols, des échantillons ou de la pipette. Un piston mobile dans un capillaire en plastique est directement en contact avec le liquide. L'action du piston effectue un véritable frottement le long de la paroi interne du capillaire qui assure une distribution intégrale sans gouttes résiduelles.



RAININ Pos-D

Découvrez le pipetage ergonomique à déplacement positif



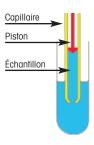

Aucune contamination par aérosol

Le piston est directement en contact avec le liquide assurant ainsi l'exactitude du pipetage de liquides non aqueux. Les capillaires et pistons jetables assurent une protection absolue contre les contaminations.



Modèle	Référence Vo	leur maximale	Volume	Exactitude		Préci	Précision	
		μl	μΙ	%	μl	%	μl	
MR-10	17008575	0.5-10	1	9.0	0.09	3.0	0.03	
			5	2.0	0.10	0.6	0.03	
			10	1.5	0.15	0.6	0.06	
MR-25	17008576	3-25	3	8.3	0.25	2.6	0.08	
			10	2.7	0.27	0.8	0.08	
			25	1.2	0.30	0.4	0.10	
MR-50	17008577	20-50	20	1.7	0.34	1.0	0.20	
			50	1.4	0.70	0.6	0.30	
MR-100	17008578	10-100	10	5.0	0.50	2.0	0.20	
			50	1.5	0.75	0.6	0.30	
			100	1.0	1.00	0.4	0.40	
MR-250	17008579	50-250	50	3.0	1.50	0.6	0.30	
			100	1.7	1.70	0.3	0.30	
			250	1.0	2.50	0.2	0.50	
MR-1000	17008580	100-1000	100	3.0	3.00	1.6	1.60	
			500	1.0	5.00	0.5	2.50	
			1000	8.0	8.00	0.4	4.00	



Prêt à utiliser

Assemblage des pistons et capillaires inutile: ils sont livrés pré-assemblés en portoirs avec couvercle. Tous les capillaires et pistons sont pré-stériles.

Capillaires et pistons Pos-D

	Modèle	Référence	Volume	Quantité et type		
C-10		17008604	10 μΙ	3 portoirs de 60, pré-stérile		
	C-25	17008605	25 µl	3 portoirs de 60, pré-stérile		
	C-50	17008606	50 μl	3 portoirs de 60, pré-stérile		
	C-100	17008607	100 μΙ	3 portoirs de 60, pré-stérile		
	C-250	17008608	250 µl	3 portoirs de 60, pré-stérile		
	C-1000	17008609	1000 μΙ	3 portoirs de 60, pré-stérile		
		•				

Note: Conçus pour l'utilisation avec les pipettes Pos-D et Gilson Microman.







Certificat de qualité ISO9001 Certificat d'environnement ISO14001 Site Internet : www.mt.com Service après-vente mondial

Sous réserve de modifications techniques © 03/2007 Mettler-Toledo GmbH Imprimé en Suisse 17700271 MCG MarCom Greifensee

