



## Le support de pipette intelligent

Contrôle de l'état de l'étalonnage

Consultation des données  
de maintenance

Gestion de la conformité

**Riche en fonctionnalités, facile à utiliser**

Gestion simplifiée des pipettes

**METTLER TOLEDO**

# Gestion simplifiée des pipettes


## SmartStand s'adapte à votre flux de travail

**Intelligent et simple d'utilisation, le SmartStand Rainin est un système de gestion de pipettes destiné aux laboratoires très productifs et aux responsables de laboratoire qui souhaitent :**

- Réduire les coûts liés aux produits non conformes ou dont l'échéance de maintenance est dépassée
- Gérer la conformité de façon proactive
- Gagner du temps dans la tenue des registres et la génération des rapports

En lisant la puce RFID contenue dans toutes les pipettes Rainin XLS et XLS+, le support SmartStand affiche instantanément l'état de conformité de quatre pipettes manuelles ou électroniques. Lorsque vous prenez une pipette placée sur le support, l'écran couleur LCD du SmartStand bascule vers une vue détaillée de son état de maintenance et d'étalonnage.

Le SmartStand fonctionne indépendamment ou s'intègre au logiciel de gestion de pipettes EasyDirect™ pour former un système de gestion et de suivi des pipettes pour tout le laboratoire. EasyDirect simplifie la gestion des actifs du laboratoire en permettant aux utilisateurs d'enregistrer les données relatives à l'utilisation des pipettes, de marquer des pipettes à envoyer au service de maintenance, de transférer les données vers d'autres systèmes de gestion de laboratoire (LIMS), et d'enregistrer des données uniques (comme le propriétaire, les méthodes de contrôle rapide et le numéro de stock) sur la puce RFID de chaque pipette.

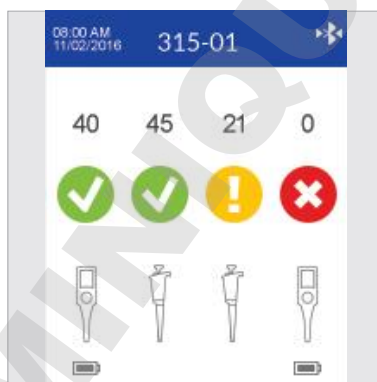

### Réduction des coûts

Ne vous faites pas surprendre par des pipettes non conformes ou dont l'échéance de maintenance est dépassée. SmartStand assure clarté et transparence directement sur la paillasse.



### Gestion de la conformité

Transformez le suivi à l'aide d'un système automatisé et personnalisable à souhait pour gérer de façon proactive la maintenance, l'étalonnage et les vérifications périodiques des performances de la pipette.



### Gain de temps

SmartStand simplifie et rationalise la gestion des pipettes. Il affiche les données de maintenance enregistrées sur chaque pipette Rainin XLS et s'intègre au logiciel EasyDirect pour former un système de gestion des actifs et de génération de rapports plus complet.



### SmartStand et Hang-Up combinés !

Grâce à un kit de fixation disponible comme accessoire, SmartStand se transforme en un « Hang-Up intelligent ».

Lecteurs RFID rapides permettant de scanner quatre pipettes à la fois

Écran couleur facile à lire affichant l'état de la pipette

Chargement simultané de quatre pipettes E4

Tête amovible pouvant être fixée au mur ou sur une étagère

Bluetooth et port mini-USB intégrés



# SmartStand et EasyDirect™

## Puissants outils de gestion des actifs

### SmartStand

- Flexible, évolutif
- Pour les pipettes XLS et XLS+ manuelles et électroniques
- Intervalles de maintenance et d'étalonnage définis par l'utilisateur
- Rappels concernant le contrôle rapide pour assurer la vérification périodique des performances
- Interface graphique intuitive
- 110/220 V, 50-60 Hz
- Connexion via Bluetooth\* ou USB
- Posé ou fixé au mur ou sur une étagère à l'aide de kits disponibles en option

### EasyDirect – Gestion des pipettes

- Peut connecter plusieurs supports SmartStand à un ordinateur
- Assure le suivi et la gestion de toutes les marques et de tous les modèles de pipettes
- Permet la lecture et l'écriture des puces RFID des pipettes Rainin XLS et XLS+
- Exportation au format Excel, csv ou xml (ajouter, remplacer ou supprimer)
- Planificateur d'exportation automatique pour un fonctionnement autonome
- Planifie les demandes de maintenance
- Configuration du système :  
Windows 7 (SP1) ou version ultérieure, 5 Go de mémoire libre et 4 Go de mémoire RAM

Réf. commande	Désignation
30312897	Support de chargement intelligent SCS-B
30312898	Support de chargement intelligent SCS
30312899	Aimants du kit de fixation SCS-FK-M
30313000	Étagère du kit de fixation SCS-FK-S
30313247	Support du kit de fixation SCS-FK-M
17012879	Alimentation pour pipettes électroniques E4-RCSWPS
30086494	Dongle Bluetooth ADP-BT-S pour RS232

\* Pour les modèles SCS, utilisez le dongle Bluetooth ADP-BT-S  
(Réf. commande 30086494)

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Pour plus de renseignements

**Mettler-Toledo Rainin, LLC**  
7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621  
Téléphone : +1 510 564 1600  
Fax : +1 510 564 1604

Sous réserve de modifications techniques  
© 10/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC  
Imprimé sur demande à partir de contenu en ligne. PB-269 Rév. A (A4)