

Mode demploi

1. Introduction

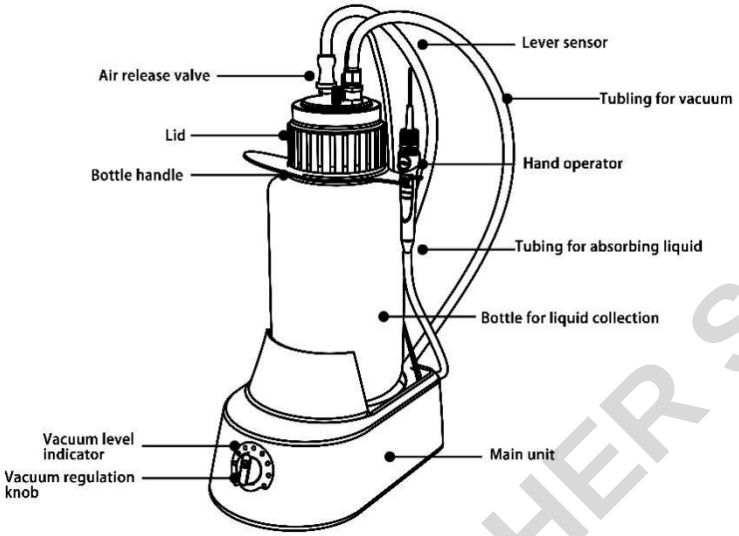

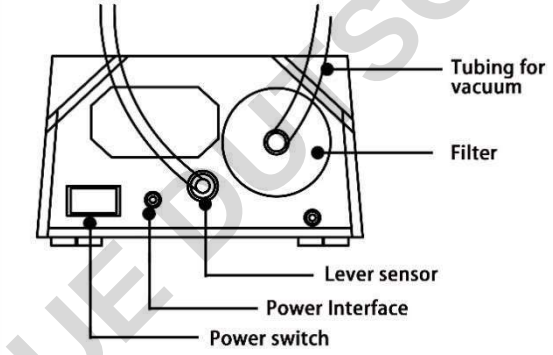

Unité principale	La partie principale de l'instrument possède une pompe à vide à l'intérieur
Bouteille	Bouteille pour la collecte des liquides
Couvercle	Couvercle avec ouverture pour le tuyau. Disposez des joints à insertion rapide, de l'interface capteur à levier et de la soupape de décharge d'air. Note : Veuillez tenir les éclats métalliques puis retirer les tubes de la jonction à insertion rapide.
Opérateur manuel	Aspirez le liquide en pressant le bouton de l'opérateur manuel

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Capteur à levier	Utilisé pour éviter le débordement du liquide. Dès que le trop-plein est détecté, la pompe s'éteint et s'alarme.
Tubulure pour vide	Connectez l'unité principale à la bouteille, créant ainsi un environnement à pression négative
Tubulure pour absorber le liquide	Connecte l'opérateur manuel à la bouteille, il absorbe le liquide dans la bouteille.
Poignée de bouteille	Entre le couvercle et la bouteille pour déplacer la bouteille.
Soupape de décharge d'air	Dévissez la vanne pour libérer le vide avant d'ouvrir le couvercle.
Indicateur de niveau de vide	Indique le degré du vide . Ils continueront à clignoter jusqu'à atteindre le vide ciblé.
Bouton de régulation du vide	Tournez pour ajuster le vide de la cible
Filtre	Éloignez le liquide de la pompe
Interface d'alimentation	Connecte le câble d'alimentation
Interrupteur d'alimentation	Alimentation marche/arrêt


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

2. Mode d'emploi

1. Installation : Assurez-vous que toutes les pieces soient bien en place.
2. Assurez-vous que la soupape de décharge d'air soit fermée
3. Allumez l'appareil
4. Ajustez le bouton de régulation du vide dans le sens horaire pour augmenter le niveau de vide réglé, l'indicateur de niveau de vide s'allumera en séquence. Ajustez le bouton de régulation du vide dans le sens antihoraire pour diminuer le niveau de dépression réglé, l'indicateur de levier de vide s'éteindra en séquence.
5. Lorsque l'indicateur de niveau de vide s'active normalement, cela signifie que le niveau de vide de la bouteille a atteint la valeur réglée. Ensuite, vous pouvez aspirer le liquide en pressant le bouton de l'opérateur de la main.
   Remarque : Le capteur de niveau sert à éviter le débordement du liquide. Dès que le débordement est détecté, la pompe s'arrête et une alarme se déclenche. Veuillez jeter le liquide de la bouteille ou remplacer une bouteille vide dès que possible.
6. Eteignez l'appareil
7. Dévissez la vanne pour relâcher le vide
   Note : lorsque vous voulez ouvrir le couvercle, veuillez d'abord relâcher l'aspirateur
8. Veuillez vous assurer que le couvercle de la bouteille est retiré ou dévissé pendant l'autoclavage.

3. Conseil d'utilisation

Fonctionnement correct de l'adaptateur de décompression de pointe :

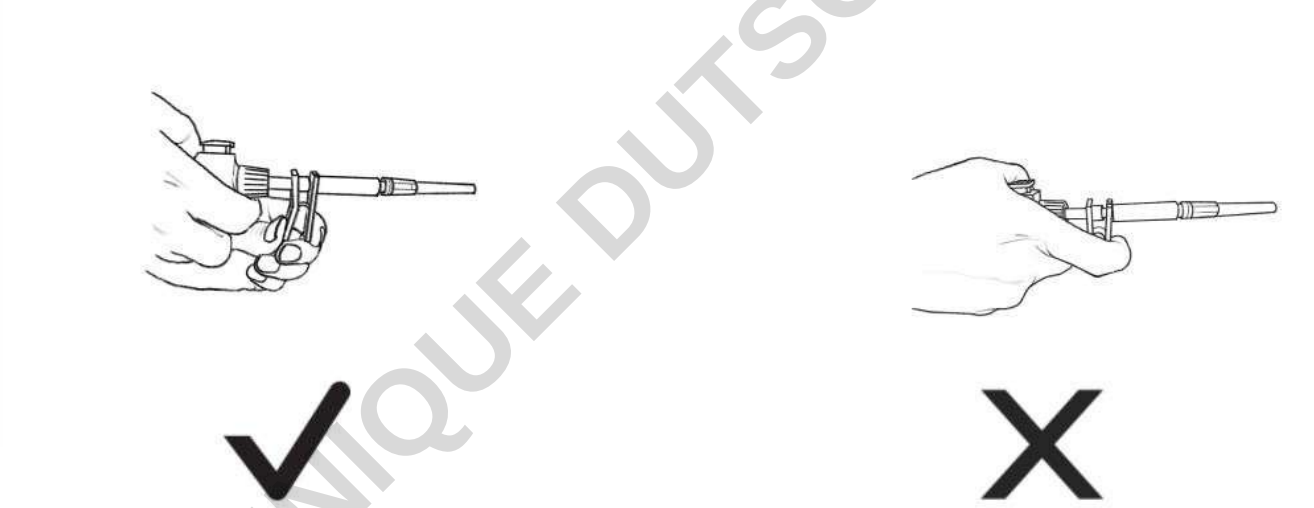

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Liquid Handling

CONTACT

DLAB Scientific Co., Ltd

Yu An Road 31, Beijing Airport Economic core

zone, Shun yi District, Beijing, China 101318 III,

Tel: 86-10- 85653451/52/53

E-mail: info@dlabsci.com

web: www.dlabsci.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CE FC

12301713