
FICHE TECHNIQUE

Page 246 Catalogue Général 2017

Rubans indicateurs de stérilisation

codes 191050 - 191051 - 191052

mod.	code	stérilisation	longueur (m)	large (mm)	quantité par carton	poids du carton (kg)	volume du carton (m^3)
1	191050	oxyde d'éthylène	50	19	8	0,93	0,0027
2	191051	poupinel chaleur sèche	50	19	8	1,06	0,0043
3	191052	autoclave	50	19	8	1,08	0,0043

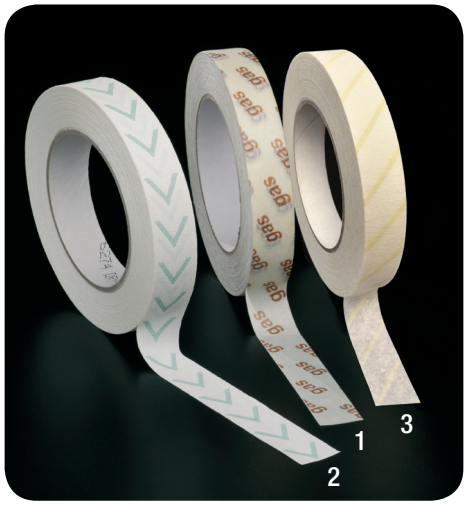

DESCRIPTION ET UTILISATION

Bandes d'indication de stérilisation auto-adhésives. Fabriqué en papier semi-crêpé. Ils peuvent être collés sur divers matériaux tels que le plastique, le métal, les vêtements, le papier, le carton, etc. Avec une colle à haute adhérence, ils offrent une bonne résistance à la chaleur et à l'humidité et sont très difficiles à casser.

Ils ne doivent pas être utilisés comme validateurs de stérilisateurs ou de processus de stérilisation.

Code 191050
indicateur de stérilisation par oxyde d'éthylène. Le mot GAS imprimé en couleur marron devienne vert une fois s'effectue la stérilisation, suivant les spécifications suivantes :

• Exposition à 600 mg/l de EO et 60% de RH pendant 30 min à 30 ºC

Épaisseur totale: 170 µm
Adhésion: 3,0 N/cm

Code 191051
indicateur de stérilisation par chaleur sèche ou poupinel. Les stries imprimées de couleur verte deviennent marron une fois la stérilisation effectuée suivant la spécification suivante :

• Exposition supérieur à 160 ºC ±2 pendant minimum 20 min

Épaisseur totale: 150 µm
Adhérence à l'acier: 4-5 N/cm
MD allongement à la rupture: 10%

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Gemma Riba Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique, du Développement et Qualité	Mònica Torras Directeur des Ventes et du Marketing

FICHE TECHNIQUE

Page 246 Catalogue Général 2017

Rubans indicateurs de stérilisation

codes 191050 - 191051 - 191052

Code 191052
indicateur de stérilisation par autoclave.
Les stries imprimées de couleur jaune deviennent marron foncé une fois la stérilisation effectuée suivant les spécifications suivantes :

- Exposition à 121°C pendant 10 minutes
- Exposition à 134°C pendant 2 minutes

Épaisseur totale: 130 µm
Adhérence à l'acier: 2,2 N/cm
MD allongement à la rupture: 9%

Cette référence est conforme aux exigences de la norme ISO 11140-1: 2005 pour les indicateurs de classe de procédé 1 pour la stérilisation à la vapeur.

RECOMMANDATIONS ET VALIDITÉ DU PRODUIT

Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d'origine jusqu'à ce qu'il soit stérilisé et de le stocker dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, des vapeurs et / ou de la lumière directe du soleil.

Une fois utilisé, conserver à une température comprise entre 15 ° C et 25 ° C et à une humidité relative comprise entre 35% et 50%.

Validité du produit:
191052: 36 mois à compter de la date de production.
191050 et 191051: 24 mois à compter de la date de production.

Les bandes peuvent rester bloquées pendant environ 18 mois.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Gemma Riba Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique, du Développement et Qualité	Mònica Torras Directeur des Ventes et du Marketing