MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 0111LM – Ralentisseur thermique pour thermomètre ambiant à sonde filaire

UTILISATION

Le ralentisseur thermique vous permet d'éviter les variations importantes de température mesurée par le capteur

Exemple : Ouverture de porte de réfrigérateur


INSTALLATION

Suivre les étapes suivantes pour le montage du capteur filaire de votre thermomètre dans le ralentisseur thermique.

Le joint (caoutchouc noir) entre le flacon et le bouchon à visser permet de maintenir l'embout de la sonde inox et de garantir l'étanchéité.



- **Dévisser le bouchon du flacon**

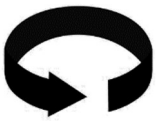

- **Remplir le flacon d'une solution alcoolique**
  NB : Ajuster la quantité de solution aloccolique





- **Découper le passe-câble au diamètre de la sonde**



- **Insérer la sonde dans le passe-câble**
  Faire dépasser l'embout inox de façon à l'immerger



- **Visser le bouchon au goulot du flacon**



ENTRETIEN

Solution hydroalcoolique à 50% minimum
→ Si la solution se trouble ou change de couleur, remplacez la solution

CONSERVATION

Durée de péremption : 1 an (solution hydroalcoolique à 50% minimum)
Durée de péremption : 2 ans (solution hydroalcoolique à 60% - 70%)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE