


HPLC Safety Set 2.0



- ✓ Sécurité pour vos stocks de solvants et déchets
- ✓ Adapté à chaque système HPLC / UHPLC
- ✓ Avec bouteilles de réserve et bidons à déchets
- ✓ Bloque les vapeurs de solvants
- ✓ Protège votre installation contre les contaminations
- ✓ Maintient la stabilité des mélanges de solvants

www.scatt-europe.com

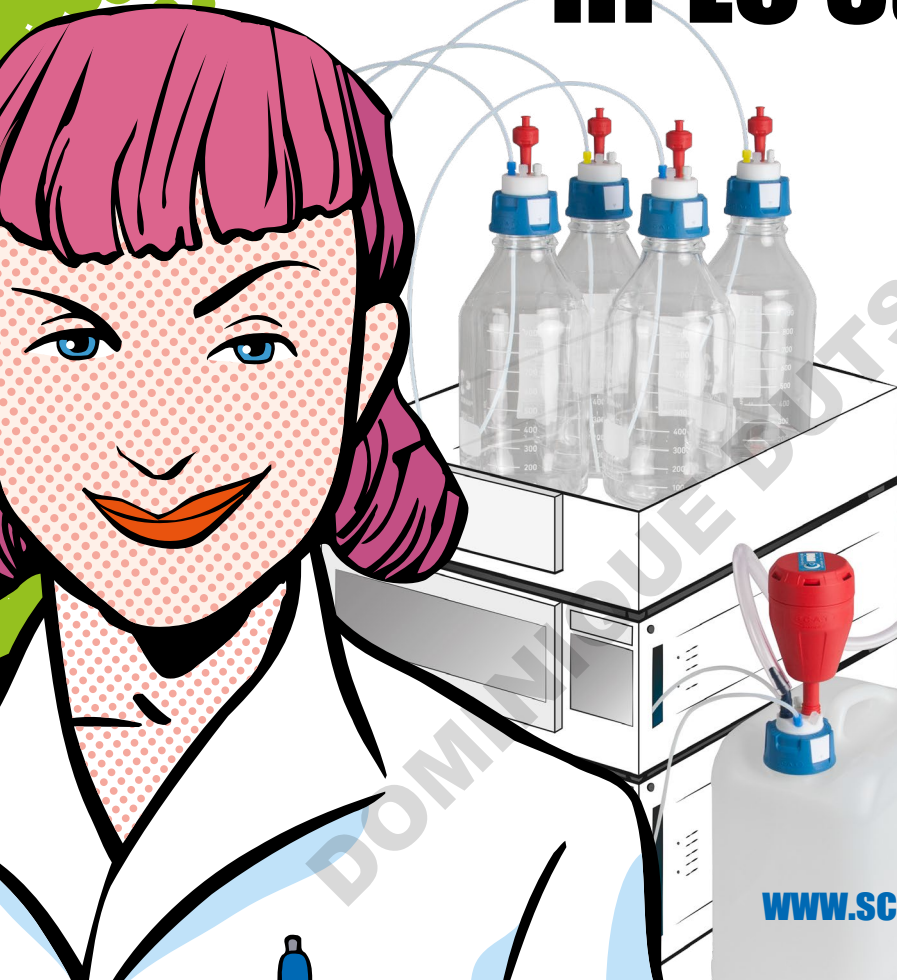

**LE système de sécurité
pour les solvants**

Dangereux



Dégagement de vapeurs de solvants

Dangers sanitaires

Danger d'incendie

Contamination de solvants

Perturbations de l'exploitation

Falsification des résultats d'analyse

Sûr

Les solvants organiques sont toxiques et inflammables. Des vapeurs peuvent s'échapper par les ouvertures les plus infimes.

Le système S.C.A.T. garantit un raccordement sûr de tous les flexibles et bloque les vapeurs nocives. Les soupapes de ventilation et les filtres d'évacuation d'air assurent un équilibrage de pression sûr, sans sous-pression ni surpression, dans les récipients de réserve et les récipients à déchets.

Les matières plastiques haute performance utilisées offrent une résistance chimique maximale.

Les vapeurs de solvants sont bloquées


Protection sanitaire et environnementale

Protection anti-incendie selon UL-94

Les solvants restent propres et stables

Aucune perturbation de l'exploitation

Résultats fiables et reproductibles

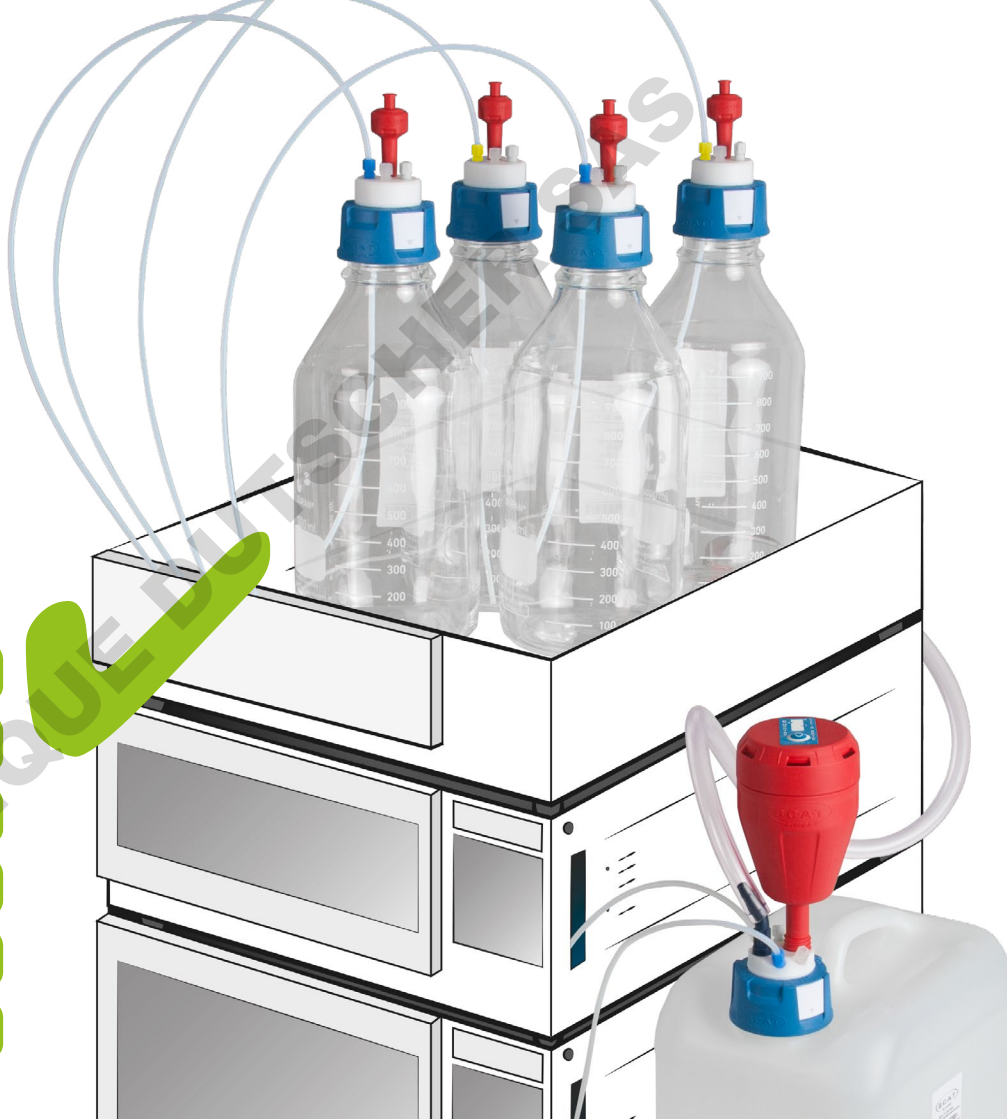

Prélèvement de solvants en toute sécurité



NOUVEAU : Soupape de ventilation avec adaptateur Luer Lock

Pour applications analytiques et préparatives

NOUVEAU : Champ d'inscription


Pour inscriptions individuelles

NOUVEAU : Raccords en PFA

Conception améliorée
Raccordement fixe des capillaires
Excellente résistance chimique
Classe de feux V-0 (UL-94)

NOUVEAU : Bouchon à vis en PPS

Autoclavable / stérilisable jusqu'à 200°C
Classe de feux V-0 (UL-94)

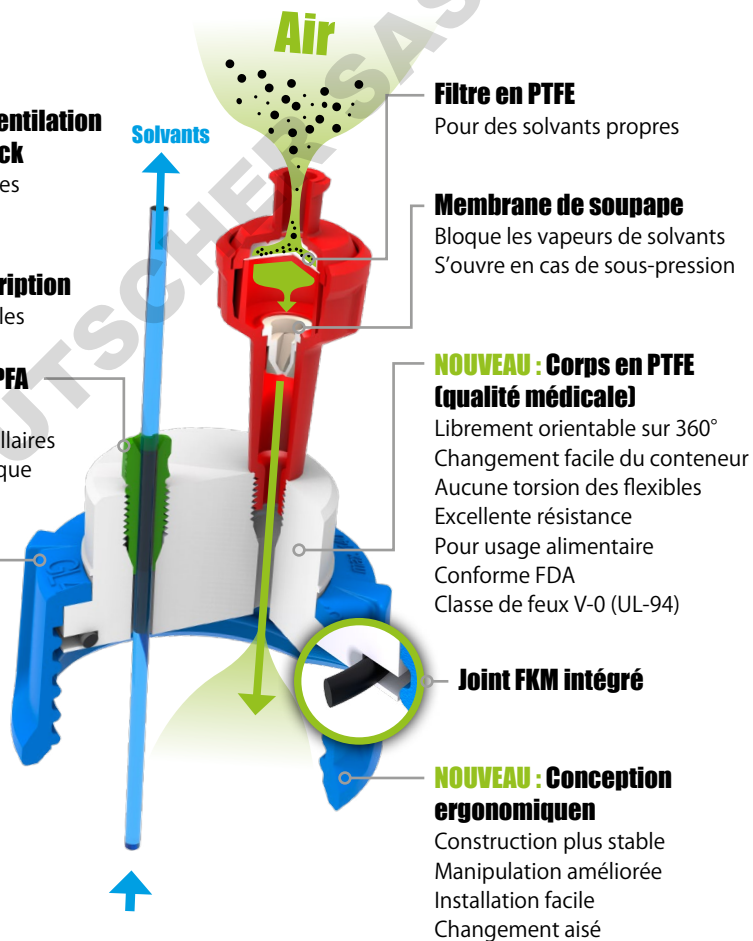

Filtre en PTFE

Pour des solvants propres

Membrane de soupape

Bloque les vapeurs de solvants
S'ouvre en cas de sous-pression

NOUVEAU : Corps en PTFE (qualité médicale)


Librement orientable sur 360°
Changement facile du conteneur
Aucune torsion des flexibles
Excellente résistance
Pour usage alimentaire
Conforme FDA
Classe de feux V-0 (UL-94)

Joint FKM intégré

NOUVEAU : Conception ergonomique

Construction plus stable
Manipulation améliorée
Installation facile
Changement aisé

Collecte de déchets liquides en toute sécurité

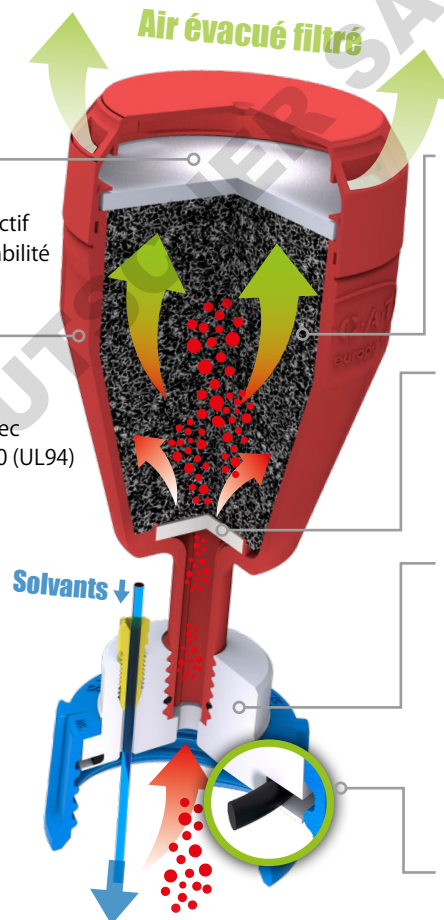

Membrane de filtre en PE

Stabilise le charbon actif et assure une perméabilité optimale à l'air.

Protection anti-incendie

Boîtier en PP semi-cristallin avec classe de feux V-0 (UL94)

Air évacué filtré

Charbon actif S.C.A.T.

1.200 m²/g de surface filtrante active, optimisée pour les vapeurs de solvants et les COV (composés organiques volatils).

Préfiltre en PE

Protège le charbon actif et assure un comportement circulatoire optimal des vapeurs de solvants.

NOUVEAU : Corps en PTFE (qualité médicale)

Librement orientable sur 360°
Changement facile du conteneur
Aucune torsion des flexibles
Excellente résistance
Pour usage alimentaire
Conforme FDA
Classe de feux V-0 (UL-94))

Joint FKM intégré

HPLC Safety Set 2.0



Contenu

*Installation HPLC,
capillaires et tuyaux de
décharge non compris dans
la livraison.*

501 113

**Bouteille de
réserve**

1 litre
Filetage GL 45
Verre transparent

4x



107 951

Bidon à déchets

5 litres
Filetage GL 45
PE-HD



160 501

Bouchon obturateur

pour raccord capillaire
Unité de vente =
10 pces



307 910

**SafetyCap III,
Filetage GL 45,**

3 raccords
pour capillaires
de Ø 3,2 mm
(diam. ext.)

4x



317 010

Souape de ventilation
pour SafetyCaps

**Inclus dans
SafetyCap
N° 307 910**



**Information sur le
contenu de la livraison**

Souape de ventilation
(317 010) et embout à olive
étagé (117 808) déjà inclus dans
les caps. Les numéros d'article
sont listés ici séparément pour
vous permettre de commander
les pièces ultérieurement,
si nécessaire.

117 816

Olive pour flexible

Droit,
pour tuyaux de
décharge de diam.
int. 6 - 8 mm

2x



308 921

SafetyWasteCap

Filetage GL 45, 4 raccords
pour capillaires de diam.
ext. 2,3 / 3,2 mm,
1 raccord pour
flexible de diam.
int. 6,4 - 9 mm



117 808

Embout à olive étagé

Coudé, pour tuyaux
de décharge de
diam. int. 6,4 - 9 mm

**Inclus dans
SafetyWasteCap
N° 308 921**



310 535

**Filtre
d'évacuation
d'air**

Taille M
Durée de vie :
6 mois



107 810



Olive pour flexible

Coudé, pour tuyaux
de décharge de diam.
int. 9,5 - 10 mm

107 061

Raccord pour capillaires

de Ø 1,6 mm
(diam. ext.)
Vert

Unité de vente =
5 pcs



107 059

Raccord pour capillaires

de Ø 2,3 mm
(diam. ext.)
Violet

Unité de vente =
5 pcs



107 063

Raccord pour capillaires

de Ø 3,2 mm
(diam. ext.)
Blue

Unité de vente =
5 pcs



107 065

Raccord pour capillaires

de Ø 3,2 mm
(diam. ext.)
Jaune

Unité de vente =
5 pcs





#200136 / 18122019

**LE système de sécurité
pour les solvants**

S.C.A.T. Europe GmbH
Opelstraße 3
64546 Mörfelden-Walldorf
Allemagne

Téléphone: +49 (0) 61 05 / 30 55 86 - 0

e-Mail: info@scat-europe.com

Internet: www.scat-europe.com



Votre partenaire S.C.A.T. officiel :