


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	US77750
<b>Désignation</b>	illustra™, ExoProStar™ 1-Step

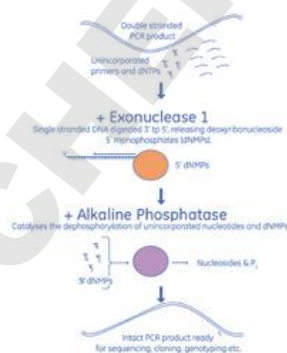

### Description :

- ✓ Kit enzymatique pour la purification de produits PCR et produits de séquençage
- ✓ Mélange d'Exonuclease 1 et d'Alcaline Phosphatase basé sur la méthode brevetée GE pour l'élimination enzymatique des amorces et des nucléotides non incorporés
- ✓ Addition en une fois du mélange enzymatique à la réaction PCR complétée, puis incubation de 15 minutes, dénaturation des enzymes par la chaleur, et les produits de PCR sont prêts pour toute analyse ultérieure
- ✓ Enzymes optimisées
- ✓ Protocole rapide en 30 minutes
- ✓ Adaptation facile aux différents volumes de réaction
- ✓ Pas de perte de produits de PCR
- ✓ Facile à automatiser
- ✓ Inactivation complète des deux enzymes en 15 minutes
- ✓ 5000 réactions

### Unité de vente :

1 illustra™, ExoProStar™ 1-Step